


Étapes d'ajustement




1. À l'aide des doigts, **déployer délicatement les ailettes souples** de la jupe en silicone et en insérer les ouvertures dans les narines.

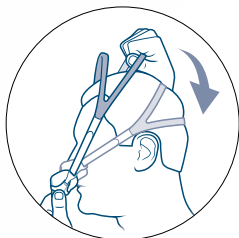

2. Mettre la structure du masque en place d'une main et **passer le harnais par-dessus la tête de l'autre main**.



3. Desserrer doucement les sangles du harnais jusqu'à ce que **l'appui de la jupe soit confortable**, puis serrer légèrement et fixer le harnais.

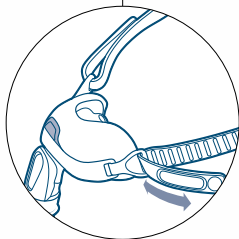

Voir les conseils d'ajustement au verso. ➤

Conseils d'ajustement



Relier le masque à la tubulure de VPPC et **mettre l'appareil en marche.**


S'assurer que la jupe en silicone est gonflée d'air.



S'assurer que les ouvertures en silicone ne sont pas inversées. Le cas échéant, les repousser délicatement du doigt vers l'extérieur.



Déployer délicatement les ailettes latérales souples sans utiliser les ongles.

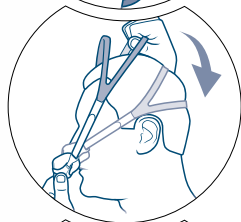

S'assurer que les ouvertures en silicone ne sont pas inversées avant de les insérer dans les narines.



Une fois que les ouvertures en silicone sont insérées dans les narines, placer une main sur la sangle étiquetée « Brevida » et la passer par-dessus la tête. La sangle du haut et la sangle du bas doivent être écartées pour que le harnais repose fermement sur la tête.

En cas de fuite après l'ajustement du masque, il peut être nécessaire de soulever la jupe en silicone et de la repositionner de manière à bien ajuster les deux ouvertures dans les narines.

S'assurer que les sangles du harnais ne sont pas trop serrées. La jupe en silicone devrait être confortable, sans être trop serrée.

