

MASQUE AVEC COUSSINETS NARINAIRES

**Conçu pour la confiance.
Fabriqué pour le confort.**

NOUVEAU

Gagner la confiance du patient est la clé d'un traitement par PPC réussi et la confiance du patient commence avec un masque adapté et confortable.





Brevida™

Caractéristiques principales et avantages

Harnais ajustable

Harnais ajustable conçu pour rester en place pendant le sommeil.

Coussin AirPillow™

Le masque innovant AirPillow™ se gonfle pour former un coussin léger et efficace.




VisiBlue™

Des repères bleus incorporés aux composants principaux du masque aident les patients dans leur utilisation quotidienne du masque.

Diffuseur lavable

Le diffuseur qui réduit le bruit et le courant d'air est lavable et dure longtemps.

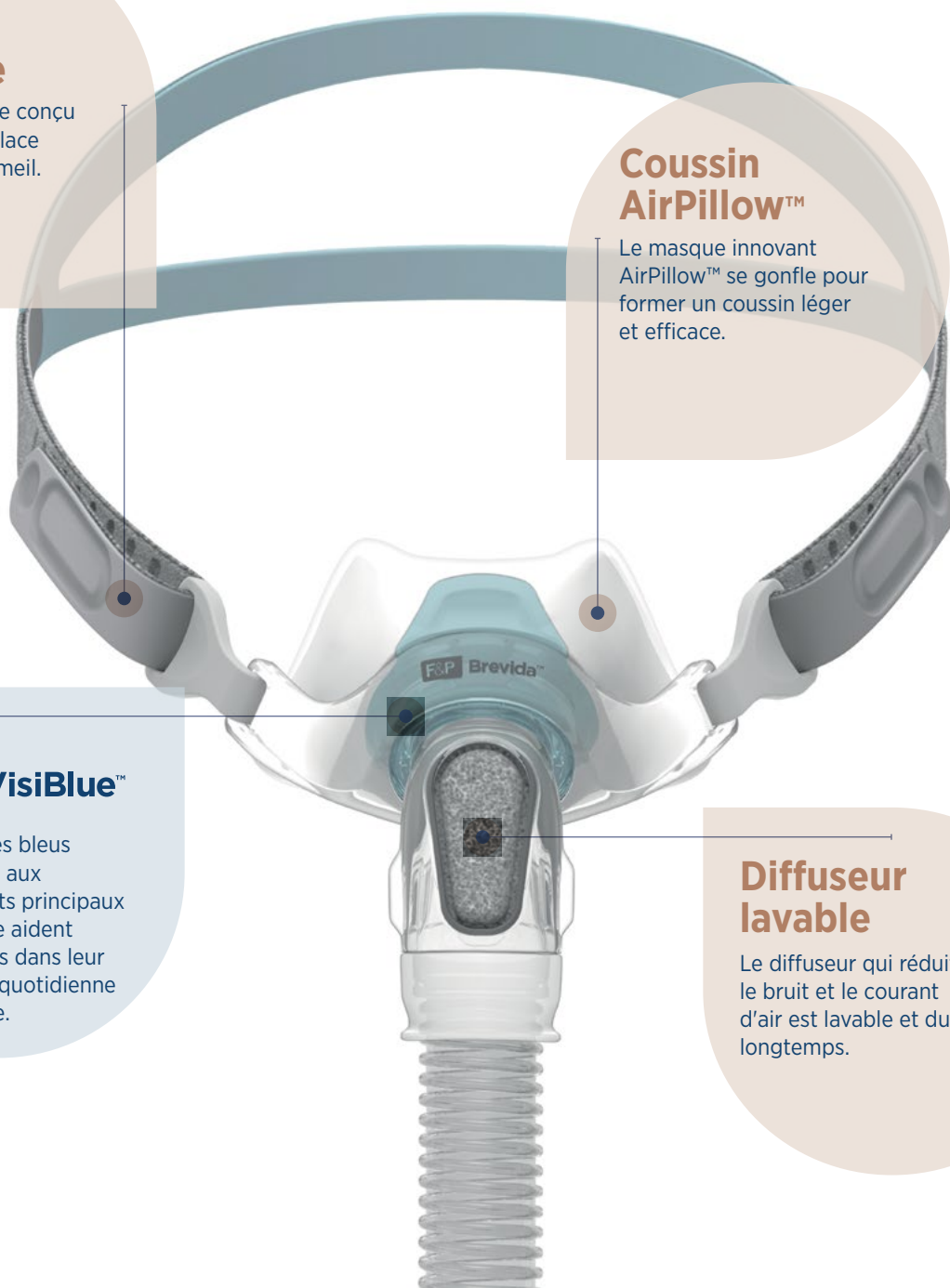

Coussin innovant

F&P Brevida™ AirPillow™

Deux tailles de coussins

Très petit-Petit et Moyen-Large.

Coussin extra mince et souple


Zone du coussin en silicone souple et extra mince (0,25 mm) pour fournir une application légère.

Coussinets polyvalents

Géométrie polyvalente des coussinets qui s'adaptent à une large variété de narines de tailles différentes.

Supports latéraux de stabilisation

Supports latéraux conçus pour réduire la possibilité de déplacement du coussin pendant le sommeil.

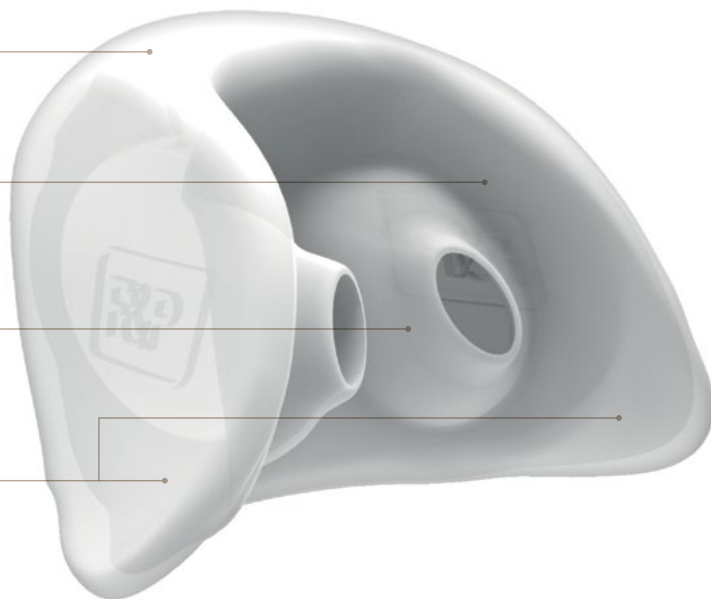


Un coussin léger et souple

Le coussin AirPillow™ se gonfle pour former une « couche » légère d'air et des coussins se plaçant à l'intérieur et autour du nez.


Coussin avec coussinets narinaux F&P AirPillow™

Coussins à l'intérieur
et autour du nez

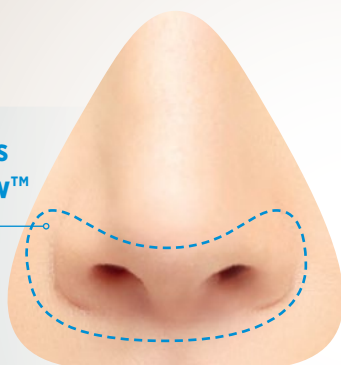

Coussin avec coussinets narinaux traditionnel

Coussins directement
dans les narines

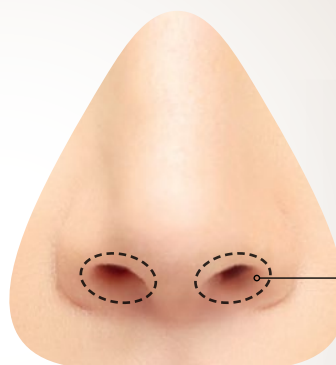

Comment poser votre F&P Brevida™



Étape 1.
Tenir le coussin de silicone à distance du nez et, à l'aide des doigts, ouvrir délicatement les supports latéraux souples du coussin en silicone, puis guider les deux ouvertures dans vos narines.



Étape 2.
Tenir la structure du masque en position d'une main et tirer le harnais sur votre tête de l'autre main, en plaçant les sangles au-dessus des oreilles comme sur l'image ci-dessus.



Étape 3.
Serrer ou desserrer doucement les sangles du harnais sur les côtés de celui-ci jusqu'à ce que l'appui du coussin soit confortable.

CODES DE RÉAPPROVISIONNEMENT AMÉRIQUE DU NORD / ASIE-PACIFIQUE

MASQUES

BREISA	Coussin Brevida Très petit-Petit (un coussin TP-P)
BREIMA	Coussin Brevida Moyen-Large (un coussin M-L)
BREISMA	Coussins Brevida TP-P et M-L (deux coussins)

PIÈCES DE RECHANGE

400BRE111	Coussin Brevida Très petit-Petit
400BRE112	Coussin Brevida Moyen-Large
400BRE113	Coussin Brevida Très petit-Petit (50 paquets)

400BRE114	Coussin Brevida Moyen-Large (50 paquets)
400BRE120	Harnais Brevida
400BRE151	Attaches du harnais Brevida (10 paquets)
400BRE161	Diffuseur Brevida (10 paquets)
400BRE171	Coude Brevida
400FPH241	Raccord 2 F&P
400BRE131	Masque sans harnais Brevida TP-P
400BRE132	Masque sans harnais Brevida M-L

CODES DE RÉAPPROVISIONNEMENT EUROPE / AFRIQUE / AMÉRIQUE DU SUD

MASQUES

BREISU	Coussin Brevida Très petit-Petit (un coussin TP-P)
BREIMU	Coussin Brevida Moyen-Large (un coussin M-L)
BREISMU	Coussins Brevida TP-P et M-L (deux coussins)

PIÈCES DE RECHANGE

400BRE111	Coussin Brevida Très petit-Petit
400BRE112	Coussin Brevida Moyen-Large
400BRE113	Coussin Brevida Très petit-Petit (50 paquets)

400BRE114	Coussin Brevida Moyen-Large (50 paquets)
400BRE120	Harnais Brevida
400BRE151	Attaches du harnais Brevida (10 paquets)
400BRE161	Diffuseur Brevida (10 paquets)
400BRE171	Coude Brevida
400FPH241	Raccord 2 F&P