

FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask Patient Instructions for Use

The FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask is intended for multiple patient or single patient adult use by individuals who have been diagnosed by a physician as requiring CPAP or Bi-Level ventilator treatment.

Fitting your mask

1. Remove plastic cover from Silicone Seal.
 2. Holding your mask in one hand, spread the Stretchgear™ Headgear (H) with your free hand just enough to fit comfortably over your head.
 3. Lightly hold the mask against your face, covering the nose, then slowly pull the Headgear over your head.
 4. Attach the Headgear to the Glider™ Strap (E).
 5. Pull the lower straps as low as possible down back of neck. Gently tighten straps to remove slack. Connect to CPAP/Bi-Level machine set at prescribed pressure.
- If necessary, tighten the lower straps to eliminate any leaks (avoid over-tightening the straps).
 - When you need to remove your mask, unhook the Stretchgear™ Headgear from the Glider™ Strap.

FITTING TIPS

- Forehead pads should rest gently on the forehead without top straps being pulled too tight.
- If there are any leaks after gently tightening the top and lower straps, pull the mask slightly out from the face while straps are still attached. This will allow the Silicone Seal to inflate with air. Put the mask back onto the face.

Cleaning your mask

To ensure continuing safety and comfort for your FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask:

Before first use:

- Hand-wash the Stretchgear™ Headgear (H) in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight.

Before each use:

- Inspect the mask for deterioration. Do not use if damaged.

After each use:

1. Disassemble the Silicone Seal (C), Foam Cushion (D) and the Headgear (H) from the Mask Base (A).
2. Wash the Silicone Seal and Mask Base in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water.
3. Wipe the Foam Cushion with a damp cloth. (Do not immerse the Foam Cushion in water.)
4. Leave all parts to dry out of direct sunlight before reassembling.

Every 7 days:

1. Hand-wash the Stretchgear™ Headgear (H) in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight.

Caution

- Do not soak the mask for longer than 10 minutes.
- Do not wash the mask in the dishwasher.
- Do not clean the mask with products containing alcohol, anti-bacterial agents, antiseptic, bleach, chlorine or moisturizer.
- Do not store the mask in direct sunlight.

The above actions may deteriorate or damage the mask and shorten its life. If your FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask weakens or cracks, discontinue use and seek replacement immediately.

Assembling your mask

Your FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask is fully assembled and ready to use. However, when you need to clean your mask follow these instructions for reassembly.

1. Place Silicone Seal (C) face down onto flat surface. With thick side of Foam Cushion (D) facing down, place into Silicone Seal.
2. Starting with the slot at the apex of the Silicone Seal, assemble onto Mask Base (A). Push firmly together.
3. Lay the Stretchgear™ Headgear (H) flat, with the loop side down. Position the assembled mask over the Headgear and attach the four straps into the corresponding slots in the Forehead Rest (F) and the Glider™ Strap (E). This can be done without undoing the VELCRO™ brand tabs, by sliding the Headgear into the slots.

*VELCRO™ is a registered trademark of Velcro Industries B.V.

Oxygen/Pressure Port Connector

If pressure readings and/or additional oxygen are required, an Oxygen/Pressure Port Connector is available (Code 900HC452).

1. Connect the large end of the Connector (T) to the Swivel (G) on the mask and the small end of the Connector to the main breathing tube (R).
2. Open the Port Cap(s) (P) and place the Pressure and/or Oxygen Tube (S) firmly over the Port(s) (Q).

(The two ports are identical; either port may be used for oxygen or pressure measurement. Only remove the Port Cap from ports that are being used.)

- **Note:** At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration will vary, depending on the pressure settings, patient's breathing pattern, mask selection, and the leak rate.

- **Warning:** If oxygen is used with CPAP/Bi-Level machine, the oxygen flow must be turned off when the CPAP/Bi-Level machine is not operating.

Explanation of Warning: When the CPAP/Bi-Level device is not in operation, and the oxygen flow is left on, oxygen delivered into the ventilator tubing may accumulate within the CPAP/Bi-Level machine enclosure. Oxygen accumulated in the CPAP/Bi-Level machine enclosure will create a risk of fire.

- **Warning:** Do not smoke while using or in the vicinity of someone using oxygen with this mask.

- **Warning:** Do not use Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure and/or Oxygen tubing. Use silicone tubing instead.

Explanation of Warning: Contact with PVC can cause premature cracking of ports.

Warranty and Disposal

Warranty Statement

Fisher & Paykel Healthcare warrants that the mask (excluding foams and material diffusers), when used in accordance with its instructions for use, shall be free from defects in workmanship and materials and will perform in accordance with Fisher & Paykel Healthcare's official published product specifications for a period of 90 days from the date of purchase by the end user. This warranty is subject to the limitations and exceptions set out in detail in <http://www.fphcare.com/osa/productwarranty.asp>

Disposal

This device does not contain any hazardous substances and may be disposed of with general waste.

Masque nasal FlexiFit™ 406 Petite Mode d'emploi pour le patient

Le masque nasal FlexiFit™ 406 Petite a été développé à l'attention de patients adultes ayant été diagnostiqués par un médecin, et auxquels un traitement par pression positive continue (PPC) ou par ventilation nasale à deux niveaux de pression (VNDP) a été prescrit. Ce masque est conçu pour un usage individuel ou bien pour un usage sur de multiples patients.

Mise en place de votre masque

1. Retirez la protection plastique de la jupe en silicone.
 2. Tenez votre masque d'une main et de l'autre tirez suffisamment sur le harnais Stretchgear™ (H) pour pouvoir le placer facilement au-dessus de votre tête.
 3. Maintenez le masque légèrement contre votre visage, en couvrant le nez, puis faites passer doucement le harnais par-dessus votre tête.
 4. Fixez le harnais à la glissière Glider™ (E).
 5. Tirez sur les sangles inférieures pour les amener aussi bas que possible au niveau de votre nuque. Serrez les sangles sans forcer pour éliminer le jeu. Raccordez à l'appareil de PPC/VNDP, réglé sur la pression prescrite.
- Si nécessaire, serrez les sangles inférieures pour éliminer toute fuite éventuelle (éviter de serrer les sangles excessivement).
 - Lorsque vous devez retirer votre masque, il vous suffit de détacher le harnais Stretchgear™ de la glissière Glider™.

ASTUCES DE MISE EN PLACE

- Les appuis frontaux doivent s'appuyer doucement contre votre front sans que les sangles supérieures du harnais ne soient trop serrées.
- S'il y a des fuites après réglage des sangles supérieures et inférieures du harnais, tirez légèrement sur le masque, les sangles toujours attachées, pour que la jupe en silicone se gonfle d'air, puis relâchez le masque sur le visage.

Nettoyage de votre masque

Pour garantir la sécurité et le confort en continu de votre masque nasal FlexiFit™ 406 Petite :

Avant la première utilisation :

- Lavez le harnais Stretchgear™ (H) à la main dans de l'eau tiède savonneuse. Ne le laissez pas tremper pendant plus de 10 minutes, puis rincez à l'eau claire et laissez sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.

Avant chaque utilisation :

- Vérifiez que le masque n'est pas détérioré. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

Après chaque utilisation :

1. Détachez la jupe en silicone (C), le rembourrage en mousse (D) et le harnais (H) de la coque du masque (A).
2. Lavez la jupe en silicone et la coque du masque dans de l'eau tiède savonneuse. Ne les laissez pas tremper pendant plus de 10 minutes, puis rincez à l'eau claire.
3. Essuyez le rembourrage en mousse à l'aide d'un chiffon humide. (Ne plongez pas le rembourrage en mousse dans de l'eau.)
4. Laissez tous les composants sécher à l'abri de la lumière directe du soleil avant de les remonter.

Une fois par semaine :

1. Lavez le harnais Stretchgear™ (H) à la main dans de l'eau tiède savonneuse. Ne le laissez pas tremper pendant plus de 10 minutes, puis rincez à l'eau claire et laissez sécher à l'air libre à l'abri de la lumière directe du soleil.

Attention

- Ne laissez pas le masque tremper pendant plus de 10 minutes.
- Ne mettez pas le masque au lave-vaisselle.
- Ne nettoyez pas le masque avec des produits qui contiennent de l'alcool, des agents antibactériens, un antiseptique, de la javel, du chlore ou de la crème hydratante.
- Rangez le masque à l'abri de la lumière directe du soleil.

Toutes les actions mentionnées précédemment peuvent endommager ou détériorer votre masque et réduire sa durée de vie. Si votre masque FlexiFit™ 406 Petite se fragilise ou se craquelle, arrêtez de l'utiliser et remplacez-le immédiatement.

Montage de votre masque

Votre masque nasal FlexiFit™ 406 Petite est entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Néanmoins, lorsque vous devez le nettoyer, suivez les instructions suivantes pour le remonter.

1. Placez la jupe en silicone (C) sur une surface plane. Avec la partie épaisse du rembourrage en mousse (D) orientée vers le bas, placez celui-ci à l'intérieur de la jupe en silicone.
2. En commençant par la fente au sommet de la jupe de silicone, assemblez la jupe contenant la mousse sur la coque du masque en les poussant fermement.
3. Mettez le harnais Stretchgear™ (H) à plat, avec le côté de la boucle vers le bas. Placez le masque assemblé sur le harnais et fixez les quatre sangles aux fentes correspondantes de l'appui frontal (F) et de la glissière Glider™ (E). Cette opération peut être effectuée sans détacher les bandes VELCRO™, en faisant glisser le harnais dans les fentes.

*VELCRO™ est une marque déposée de VELCRO Industries B.V.

Raccord de connexion à la pression/oxygène

Un raccord de connexion à la pression/oxygène est disponible (référence 900HC452) au cas où un apport en oxygène additionnel et/ou la mesure de la pression sont nécessaires.

1. Raccordez l'extrémité large du raccord (T) à l'embout (G) du masque et raccordez l'autre extrémité plus petite au circuit respiratoire (R).
2. Retirez le ou les bouchons (P) des connecteurs et raccordez le tuyau de la pression et/ou le tuyau de l'oxygène (S) fermement sur le ou les connecteurs (Q).

(Les deux connecteurs sont identiques et interchangeables. Retirez uniquement les bouchons des connecteurs que vous souhaitez utiliser.)

- **Remarque :** pour un débit d'oxygène additionnel fixe, la concentration d'oxygène inspirée peut varier, selon la pression réglée, l'activité respiratoire du patient, le type de masque, et les fuites.

- **Avertissement :** lors de l'utilisation d'oxygène sous PPC/VNDP, le débit d'oxygène doit être coupé quand l'appareil de PPC/VNDP est arrêté.

Explication de l'avertissement : lorsque l'appareil de PPC/VNDP est éteint et que le débit d'oxygène est ouvert, l'oxygène peut s'accumuler dans le circuit de l'appareil. L'oxygène accumulé dans l'appareil entraîne un risque d'incendie.

- **Avertissement :** ne fumez pas pendant l'utilisation d'oxygène ou près d'une personne sous oxygène.

- **Avertissement :** n'utilisez pas de tubulures en PVC (chlorure de polyvinyle) pour la pression et/ou pour l'oxygène. Utilisez uniquement des tubulures en silicone.

Explication de l'avertissement : le contact avec du PVC peut provoquer la fissuration prématurée des connecteurs.

Garantie et Élimination

Déclaration de garantie

Fisher & Paykel Healthcare garantit que le masque (à l'exclusion des rembourrages en mousse et des diffuseurs), utilisé conformément au mode d'emploi, ne présente aucun défaut de fabrication ou de matériaux et fonctionne conformément aux caractéristiques techniques officielles publiées par Fisher & Paykel Healthcare pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat par l'utilisateur final. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions énumérées en détail sur <http://www.fphcare.com/osa/productwarranty.asp>

Élimination :

Cet appareil ne contient pas de substance dangereuse et peut être éliminé avec les déchets ménagers.

Mascarilla nasal FlexiFit™ 406 Petite Instrucciones de utilización para el paciente

La mascarilla nasal FlexiFit™ 406 Petite está diseñada para su uso en pacientes adultos, un solo uso o múltiples pacientes, que han sido diagnosticados por un médico y que necesitan tratamiento con CPAP o ventilador Bi-Level.

Colocación de la mascarilla

1. Quite la cubierta de plástico de la vaina de silicona.
 2. Sosteniendo la mascarilla en una mano, extiende el arnés Stretchgear™ (H) con la otra lo suficiente para que se ajuste cómodamente sobre su cabeza.
 3. Sostenga la mascarilla ligeramente contra la cara, de forma que cubra la nariz; luego estire despacio el arnés para ponérselo sobre la cabeza.
 4. Fije el arnés a la correa Glider™ (E).
 5. Tire de las correas inferiores bajándolas lo más que pueda sobre la nuca. Ajuste suavemente las correas para que no haya holgura. Conecte la mascarilla a una máquina CPAP puesta a la presión indicada.
- Si fuera necesario, ajuste las correas inferiores para eliminar las fugas. (Evite ajustar demasiado las correas.)
 - Cuando tenga que quitarse la mascarilla, desconecte el arnés Stretchgear™ de la correa Glider™.

SUGERENCIAS PARA UN BUEN AJUSTE

- Las almohadillas de la frente deberían tocar ligeramente la frente sin que las correas de arriba estén demasiado apretadas.
- Si hay fugas después de ajustar las correas de arriba y de abajo, levante un poco la mascarilla de la cara mientras las correas están puestas. Esto permitirá que la vaina de silicona se infle de aire. Vuelva a colocar la mascarilla en la cara.

Limpieza de la mascarilla

Para una seguridad y un confort constantes con su mascarilla nasal FlexiFit™ 406 Petite:

Antes de usarla por primera vez:

- Lave a mano el arnés Stretchgear™ (H) con jabón puro disuelto en agua tibia. No lo deje en remojo durante más de 10 minutos y enjuague con agua corriente. Deje secar al aire y alejado de la luz solar directa.

Antes de cada uso:

- Inspeccione su mascarilla verificando que no haya indicaciones de deterioro. No la utilice si se encuentra dañada.

Después de cada uso:

1. Desmonte la vaina de silicona (C), la almohadilla de espuma (D) y el arnés (H) de la base de la mascarilla (A).
2. Lave la vaina de silicona y la base de la mascarilla en agua tibia con jabón. No la sumerja durante más de 10 minutos y luego enjuáguela en agua corriente.
3. Limpie la almohadilla de espuma con un trapo húmedo. (No sumerja la almohadilla de espuma en agua.)
4. Deje secar todas las piezas alejadas de la luz solar directa antes de volver a montarlas.

Cada 7 días:

1. Lave el arnés Stretchgear™ (H) en agua tibia con jabón puro. No lo deje en remojo durante más de 10 minutos y enjuáguelo con agua pura. Deje secar al aire alejado de la luz solar.

Precaución

- No deje en remojo la mascarilla durante más de 10 minutos.
- No lave la mascarilla en un lavaplatos.
- No lave la mascarilla con productos que contengan alcohol, agentes antibacterianos, antisépticos, lejía, cloro o humectantes.
- No guarde la mascarilla donde esté expuesta directamente a la luz solar.

Las acciones anteriores pueden deteriorar o dañar la mascarilla y acortar su vida. Si la mascarilla nasal FlexiFit™ 406 Petite se debilita o se agrieta, deje de usarla y reemplácela inmediatamente.

Montaje de la mascarilla

La mascarilla nasal FlexiFit™ 406 Petite viene totalmente montada y lista para usar. Sin embargo, cuando sea necesario limpiarla, siga las siguientes instrucciones para volver a montarla.

1. Coloque la vaina de silicona (C) boca abajo sobre una superficie plana. Coloque la almohadilla de espuma (D) dentro de la vaina de silicona con el lado grueso boca abajo.
2. Comenzando con la ranura del vértice de la vaina de silicona, colóquela en la base de la mascarilla (A). Presione firmemente.
3. Extienda el arnés Stretchgear™ (H) dejando el lado del bucle hacia abajo. Coloque la mascarilla montada sobre el arnés y fije las cuatro correas en las ranuras correspondientes del apoyo para la frente (F) y de la correa Glider™ (E). Esto se puede efectuar sin tener que desprender las lengüetas de marca VELCRO™, insertando el arnés a través de las ranuras.

*VELCRO™ es una marca comercial registrada de VELCRO Industries B.V.

Conector del puerto de oxígeno/presión

Si se requiere de oxígeno adicional y/o de mediciones de presión, se puede obtener un conector de puerto de oxígeno/presión (Código 900HC452).

1. Conecte el extremo grande del conector (T) a la pieza giratoria (G) de la mascarilla y el extremo pequeño del conector al tubo respiratorio principal (R).
2. Abra la(s) tapa(s) del/de los puerto(s) (P) y coloque el tubo de presión y/o oxígeno (S) firmemente sobre el/los puerto(s) (Q).

(Ambos puertos son idénticos; cualquiera de ellos puede ser utilizado para añadir oxígeno o para tomar mediciones de presión. Únicamente retire la tapa de los puertos que van a ser utilizados.)

- **Nota:** A una tasa fija de flujo del flujo de oxígeno suplementario, la concentración de oxígeno inhalado variará dependiendo de la presión ajustada, del patrón respiratorio del paciente, de la mascarilla seleccionada y de la tasa de fugas.

- **Advertencia:** Si se utiliza oxígeno con un equipo de CPAP/Bi-Level, el flujo del oxígeno debe cerrarse cuando el equipo no esté funcionando.

Explicación de la advertencia: Cuando el equipo de CPAP/Bi-Level no está funcionando y el flujo de oxígeno continúa, el oxígeno administrado a los tubos del ventilador se puede acumular dentro de carcasa del equipo de CPAP/Bi-Level. El oxígeno acumulado en el equipo de CPAP/Bi-Level puede originar un incendio.

- **Advertencia:** No fume durante el uso o cerca de alguien que esté recibiendo oxígeno, a través de esta mascarilla.

- **Advertencia:** No utilice tubos de presión y/o oxígeno de cloruro de polivinilo (PVC). Utilice en su lugar tubos de silicona.

Explicación de la Advertencia: El contacto con el PVC causar el agrietamiento prematuro de los puertos.




Garantía y Desecho

Declaración de garantía

Fisher & Paykel Healthcare garantiza que la mascarilla (con exclusión de espumas y difusores de material), y si se utiliza según indican las instrucciones de uso, estará libre de defectos de mano de obra y materiales y funcionará de acuerdo a las especificaciones oficiales publicadas por Fisher & Paykel Healthcare durante un periodo de 90 días desde la fecha de compra por parte del usuario final. Esta garantía está sujeta a limitaciones y excepciones establecidas en detalle en <http://www.fphcare.com/osa/productwarranty.asp>

Desecho:

Este dispositivo no contiene ninguna sustancia peligrosa y puede ser desechado en la basura general.

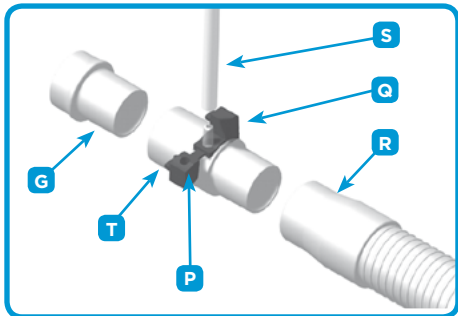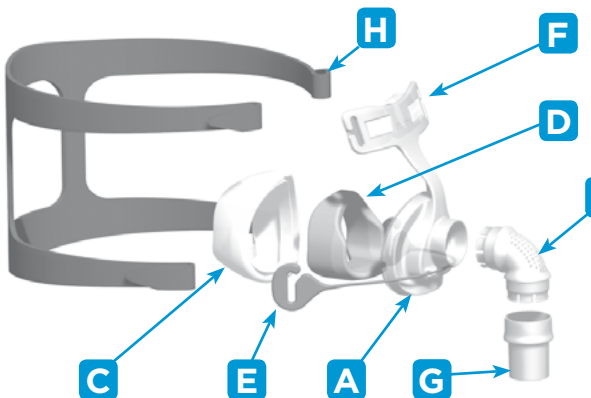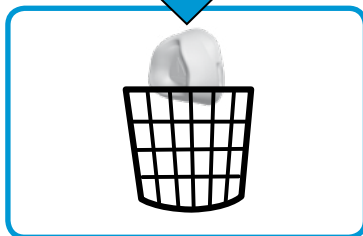

English
Français (French)
Español (Spanish)

Warnings

- This mask should be used only with CPAP or Bi-Level equipment recommended by your physician or respiratory therapist. A mask should not be used unless the CPAP or Bi-Level machine is turned on and operating properly.

Explanation of Warning: CPAP and Bi-Level machines are intended to be used with special masks which have exhaust flow holes to allow continuous flow of air out of the mask. When the CPAP/Bi-Level machine is turned on and functioning properly, new air from the CPAP/Bi-Level machine flushes the exhaled air out through the mask exhaust flow holes. However, when the CPAP/Bi-Level machine is not operating, enough fresh air will not be provided through the mask, and exhaled air may be re-breathed. Re-breathing of exhaled air for longer than several minutes can in some circumstances lead to suffocation.

- At low CPAP pressures the flow through the exhaust flow holes may be inadequate to clear all exhaled gas from the tubing. Some re-breathing may occur.
- Do not block the gas exhaust ports. Before use, always ensure that gas is flowing out the exhaust ports.
- Do not use the mask if vomiting or feeling nauseous.
- Discontinue using the mask if there is an allergic reaction to any part of the mask. Consult your physician if this occurs.
- If reusing the FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask between different patients, refer to the Multi-Patient Cleaning Instructions for the FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask.
- California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65.

Caution

- Use the mask for its intended use only as directed in this booklet.
- US Federal Law restricts this device to sale by, or on order of, a physician.

The FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask and accessories are Latex free. Many people find CPAP therapy causes dryness of the nose and throat. Heated humidification can substantially reduce these symptoms.

FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT YOUR LOCAL HOME CARE PROVIDER

Technical Specifications

Exhaust Flow

Nasal masks for CPAP and Bi-Level have exhaust flow holes to expel the air that you exhale from the mask.

Pressure (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Flow (l/min)	19	26	31	35	40	44	48	51	54	57	59	62

Resistance to Flow

Pressure drop through mask @ 50 l/min 0.1 ± 0.1 cmH₂O
Pressure drop through mask @ 100 l/min 0.4 ± 0.1 cmH₂O

Mask Dead Space

50cc

Operating Conditions

- Operating pressure range is 3-25 cmH₂O
- Operating temperature range is 40-120°F (5-50°C)

Sound

The Sound Power Level of the mask is 32 dBA, with uncertainty 2.5 dBA.
The Sound Pressure Level of the mask is 25 dBA, with uncertainty 2.5 dBA.

Multi-Patient Cleaning Instructions

Your FlexiFit™ 406 Petite Nasal Mask is provided patient-ready. To reuse between patients please follow the guidelines below.
For USA only, model HC06A is single patient use only, therefore multi-patient cleaning instructions do not apply.

Cleaning/Desoiling

- Before cleaning, remove visible soil by disassembling and thoroughly cleaning the mask with a small brush under running potable tap water.

Failure to properly clean this device may result in inadequate disinfection.

High-Level Disinfection Parameters

- NB: For autoclave cycles, components should be enclosed in a sterilization peel pouch.

	Autoclaving Autoclave, 15 minutes' exposure at 121°C (250°F).
	OR Thermal Disinfection Soak parts in hot water bath for 30 minutes at 70 °C (158 °F).
	OR Sterrad® 100S Follow manufacturer's instructions for Sterrad® 100S Sterilization system.
	OR Cidex® OPA Follow manufacturer's instructions for high-level disinfection. Immerse for 12 minutes at 20°C (68°F). Rinse thoroughly in potable water.
	OR Sporox II® Follow manufacturer's instructions for high-level disinfection. Immerse for 6 hours at 20°C (68°F). Rinse thoroughly in potable water.
	Replace with new part.

THE FLEXIFIT™ 406 PETITE NASAL MASK HAS BEEN VALIDATED TO WITHSTAND 20 CYCLES OF THE ABOVE PARAMETERS. DO NOT USE IF BADLY DAMAGED.

Disclaimer: It is the user's responsibility to qualify any deviations from the recommended methods of reprocessing.

Contact your local Homecare dealer Provider for additional information. For patent information, see <https://www.fphcare.com/ip>

Avertissements

- Ce masque doit uniquement être utilisé avec un appareil de pression positive continue (PPC) ou à deux niveaux de pression (VNDP) recommandé par votre médecin traitant ou votre pneumologue. Un masque ne doit être utilisé que si l'appareil de PPC/VNDP est en marche et fonctionne correctement.

Explication de l'avertissement : les appareils de PPC/VNDP sont conçus pour être utilisés avec des masques spécifiques qui laissent échapper un flux continu d'air par leurs orifices de fuite expiratoire. Lorsque l'appareil de PPC/VNDP est en marche et fonctionne normalement, l'envoi de l'air frais qui chasse l'air expiré en dehors du masque par l'intermédiaire de ces orifices de fuite expiratoire. Si l'appareil de PPC/VNDP est arrêté ou ne fonctionne pas normalement, l'apport d'air frais peut être insuffisant et il est possible que l'air expiré soit à nouveau inhalé. La réinhalation de l'air expiré pendant plusieurs minutes peut, dans certaines circonstances, provoquer une suffocation.

- Dans le cas de faibles niveaux de pression de PPC, le débit de fuite expiratoire à travers les orifices peut devenir insuffisant pour éliminer le gaz expiré des tuyaux. Cela peut entraîner une réinhalation.
- Ne bloquez pas les orifices de fuites. Avant d'utiliser le masque, il faut toujours s'assurer que les gaz sont expulsés via les orifices de fuite expiratoire.
- N'utilisez pas le masque en cas de vomissements ou de nausées.
- Cessez d'utiliser le masque en cas de réaction allergique à l'un de ses composants. Dans ce cas, consultez votre médecin.
- En cas d'utilisation du masque nasal FlexiFit™ 406 Petite sur plusieurs patients, reportez-vous aux instructions de nettoyage correspondantes.

Attention

- Utilisez le masque uniquement pour l'usage pour lequel il est prévu, comme spécifié dans ce livret.
- Selon la loi fédérale des États-Unis, cet appareil ne peut être vendu que par ou sur l'ordonnance d'un médecin.

Le masque nasal FlexiFit™ 406 Petite et ses accessoires ne contiennent pas de latex. Un traitement par pression positive continue (PPC) peut provoquer une sécheresse du nez et de la gorge.

L'utilisation d'humidification chauffée peut considérablement réduire ces symptômes.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL DE SOINS À DOMICILE/FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENT DE SOINS À DOMICILE

Caractéristiques techniques

Débit de fuite expiratoire

Les masques nasaux utilisés avec les appareils de PPC ou à deux niveaux de pression sont munis d'orifices de fuite expiratoire servant à l'expulsion de l'air que vous expirez hors du masque.

Pression (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Débit (l/min)	19	26	31	35	40	44	48	51	54	57	59	62

Résistance au débit

Baisse de la pression via le masque à 50 L/min : 0,1 ± 0,1 cmH₂O
Baisse de la pression via le masque à 100 L/min : 0,4 ± 0,1 cmH₂O

Espace mort du masque

50 cm³

Conditions d'utilisation

- Rango de pression : 3 à 25 cmH₂O
- Plage de température : 5 à 50 °C

Niveau sonore

Le niveau de puissance sonore du masque est de 32 dBA avec une incertitude de 2,5 dBA.
Le niveau de pression acoustique du masque est de 25 dBA avec une incertitude de 2,5 dBA.

Instructions de nettoyage pour un usage sur de multiples patients

Votre masque nasal FlexiFit™ 406 Petite est fourni entièrement assemblé et prêt à l'emploi.

Pour l'utiliser sur plusieurs patients, veuillez suivre les instructions suivantes.

Nettoyage / Décontamination

- Avant le nettoyage, démontez le masque et nettoyez-le soigneusement sous un robinet distribuant de l'eau potable à l'aide d'une petite brosse afin d'éliminer toute trace de saleté.

Le non-respect des instructions de nettoyage peut entraîner une mauvaise désinfection.

Paramètres de désinfection de haut niveau

- NB : pour l'autoclave, les pièces doivent être placées dans une poche de stérilisation.

	Stérilisation à l'autoclave Autoclave, 15 minutes à 121 °C.
	OU Désinfection thermique Plongez toutes les pièces du masque dans de l'eau chaude à 70 °C pendant 30 minutes.
	OU Sterrad® 100S Suivez les recommandations du fabricant concernant l'utilisation du système Sterrad® 100S.
	OU Cidex® OPA Suivez les recommandations du fabricant concernant la désinfection de haut niveau. Immergez 12 minutes à 20 °C. Rincez soigneusement à l'eau potable.
	OU Sporox II® Suivez les recommandations du fabricant concernant la désinfection de haut niveau. Immergez pendant 6 heures à 20 °C. Rincez soigneusement à l'eau potable.
	Lavez à la main à l'eau tiède savonneuse et laissez sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.
	Remplacez par une nouvelle pièce.

LE MASQUE NASAL FLEXIFIT™ 406 PETITE A ÉTÉ VALIDÉ POUR 20 CYCLES DE NETTOYAGE DANS LES CONDITIONS DÉCRITES CI-DESSUS. NE L'UTILISEZ PAS S'IL EST SÉVÈREMENT ENDOMMAGÉ.

Clause de non-responsabilité : il incombe à l'utilisateur d'assurer l'adéquation de toute autre méthode de reconditionnement.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre fournisseur de matériel de soins à domicile.

Advertencias

- Esta mascarilla se debe utilizar únicamente con el equipo CPAP o Bi-Level recomendado por su médico o terapeuta respiratorio. No utilice la mascarilla a menos que el equipo CPAP/Bi-Level esté encendido y funcione correctamente.

Explicación de la advertencia: Los equipos CPAP/Bi-Level deben ser utilizados con mascarillas especiales que incluyan orificios del flujo de escape y permitan exhalar continuamente el aire hacia fuera de la mascarilla. Cuando el equipo CPAP/Bi-Level está conectado y funcionando correctamente, el aire nuevo del equipo CPAP/Bi-Level purga el aire exhalado por los orificios del flujo de escape de la mascarilla. Sin embargo, cuando el equipo CPAP/Bi-Level no está funcionando, no se proporcionará aire nuevo a través de la mascarilla, y el aire exhalado podría volver a ser inhalado. La reinhalación del aire exhalado durante más de unos cuantos minutos puede llevar en algunos casos a asfixia.

- A presiones bajas de CPAP el flujo a través de los orificios del flujo de escape puede ser insuficiente para eliminar todo el aire exhalado del tubo. Esto puede llevar a la reinhalación.
- No bloquee los puertos de escape del gas. Antes de usarla, asegúrese siempre de que el gas esté saliendo por los puertos de escape.
- No utilice la mascarilla si siente náuseas o tiene vómitos.
- Interrumpa el uso de la mascarilla si hubiera una reacción alérgica a cualquiera de sus partes. En este caso consulte a su médico.
- Si se está reutilizando la mascarilla Nasal FlexiFit™ 406 Petite con diferentes pacientes, consulte las instrucciones para la limpieza de la mascarilla nasal FlexiFit™ 406 Petite para varios pacientes.

Precaución

- Utilice la mascarilla únicamente para los fines para los que fue diseñada, y de acuerdo con lo indicado en el presente manual.
- Las Leyes Federales de los Estados Unidos restringen la venta de este producto a o por orden de un médico.

La mascarilla nasal FlexiFit™ 406 Petite y sus accesorios están libres de látex. Para mucha gente la terapia CPAP ocasiona sequedad en la nariz y la garganta. La humidificación calentada puede reducir esos síntomas sustancialmente.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL PÓNGASE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN DOMICILIARIA LOCAL

Especificaciones técnicas

Flujo de escape

Las mascarillas nasales para el tratamiento CPAP y Bi-Level tienen orificios del flujo de escape para expeler el aire que usted exhala de la mascarilla.

Presión (cmH ₂ O)	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Flujo (l/min)	19	26	31	35	40	44	48	51	54	57	59	62

Resistencia al flujo

Caída de presión a través de la mascarilla a 50 l/min 0,1 ± 0,1 cmH₂O
Caída de presión a través de la mascarilla a 100 l/min 0,4 ± 0,1 cmH₂O

Espacio muerto de la mascarilla

50 cc

Condiciones operativas

- Rango operativo de presión: 3-25 cm H₂O
- Rango operativo de temperatura: 5-50 °C (40-120 °F)

Sonido

El nivel de potencia del sonido de la mascarilla es de 32 dBA, con una incertidumbre de 2,5 dBA.
El nivel de presión del sonido de la mascarilla es de 25 dBA, con una incertidumbre de 2,5 dBA.

Instrucciones para la limpieza para varios pacientes

Su mascarilla nasal FlexiFit™ 406 Petite se suministra lista para el paciente.

Para utilizarla nuevamente con otros pacientes, siga las directrices siguientes.

Limpieza/Lavado

- Antes de limpiarla, elimine toda suciedad visible desmontando y limpiando cuidadosamente la mascarilla con un cepillo pequeño bajo el agua corriente del grifo. El no limpiar bien el dispositivo puede resultar en una desinfección inadecuada del mismo.

Parámetros de desinfección de alto nivel

- NB: Para los ciclos de autoclave, los componentes deben introducirse en bolsas de esterilización.

	Autoclave Autoclave, 15 minutos a 121 °C (250 °F).
	OU Desinfección térmica Ponga en remojo las piezas en un baño de agua caliente durante 30 minutos a 70 °C (158 °F).
	OU Sterrad® 100S Siga las instrucciones del fabricante para el sistema de esterilización Sterrad® 100S.
	OU Cidex® OPA Siga las instrucciones del fabricante para una desinfección de alto nivel. Sumerja completamente en la solución durante 12 minutos a 20 °C (68 °F). Enjuague bien con agua potable.
	OU Sporox II® Siga las instrucciones del fabricante para una desinfección de alto nivel. Sumerja completamente en la solución durante 6 horas a 20 °C (68 °F). Enjuague bien con agua potable.
	Lavar a mano el arnés con jabón puro disuelto en agua tibia. Dejar secar alejado de la luz solar directa.
	Cambiar por una pieza nueva.

LA MASCARILLA NASAL FLEXIFIT™ 406 PETITE HA SIDO HOMOLOGADA PARA SOPORTAR 20 CICLOS SEGÚN LOS PARÁMETROS ANTERIORES. NO LA UTILICE SI SE ENCUENTRA DAÑADA.

Descargo de responsabilidad: Será responsabilidad del usuario cualquier desviación de los métodos de reprocesado recomendados.

Póngase en contacto con su proveedor local de atención domiciliaria para obtener información adicional.

CE 0123

Manufacturer
Fisher & Paykel Healthcare Ltd,
15 Maurice Paykel Place,
East Tamaki, Auckland 2013
PO Box 14 348 Panmure,
Auckland 1741,
New Zealand
Tel: +64 9 574 0100
Fax: +64 9 574 0158
Email: info@fphcare.co.nz
Web: www.fphcare.com

Importer/Distributor
Australia (Sponsor)
Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd,
19-31 King Street, Nunawading,
Melbourne, Victoria 3131.
Tel: +61 3 9871 4900
Fax: +61 3 9871 4998

Austria
Tel: 0800 29 31 23
Fax: 0800 29 31 22

Benelux
Tel: +31 40 216 3555
Fax: +31 40 216 3554

Brazil
Fisher & Paykel do Brasil,
Rua Sampaio Viana, 277 cj 21,
Paraisópolis, 04004-000,
São Paulo - SP, Brazil
Tel: +55 11 2548 7002

China
代理人/售后服务机构:
费雪派克医疗保健(广州)有限公司,
广州高新技术产业开发区科学城科丰路
31号G12栋301号
电话: +86 20 32053486
传真: +86 20 32052132

Denmark
Tel: +45 70 26 37 70
Fax: +46 83 66 310

Finland
Tel: +358 94 1590 355
Fax: +46 83 66 310

France
Fisher & Paykel Healthcare SAS,
10 Av. du Québec, Bât. F5, BP 512,
Villebon-sur-Yvette, 91946
Courtaubouef Cedex, France
Tel: +33 1 6446 5201
Fax: +33 1 6446 5221
Email: c.s@fphcare.fr

Germany
Fisher & Paykel Healthcare GmbH &
Co. KG, Deutschland, Österreich,
Schweiz, Wiesenstrasse 49,
D 73614 Schorndorf, Germany
Tel: +49 7181 98599 0
Fax: +49 7181 98599 66

Hong Kong
Tel: +852 2116 0032
Fax: +852 2116 0085

India
Tel: +91 80 2309 6400

Ireland
Tel: 1800 409 011
Fax: +44 1628 626 146

Italy
Tel: +39 06 7839 2939
Fax: +39 06 7814 7709

Japan
Tel: +81 3 5117 7110
Fax: +81 3 5117 7115

Korea
Tel: +82 2 6205 6900
Fax: +82 2 6309 6901

Norway
Tel: +47 21 60 13 53
Fax: +47 22 99 60 10

Russia
Tel. and Fax: +7 495 782 21 50

Spain
Tel: +34 902 013 346
Fax: +34 902 013 379

Sweden
Tel: +46 8 564 76 680
Fax: +46 8 36 63 10

Switzerland
Tel: 0800 83 47 63
Fax: 0800 83 47 54

Taiwan
Tel: +886 2 8751 1739
Fax: +886 2 8751 5625

Turkey
İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249, Caddesi No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374,
Tel: +90 312 354 34 12
Fax: +90 312 354 31 01

UK
Fisher & Paykel Healthcare Ltd,
Unit 16, Cordwallis Park,
Clivemont Road, Maidenhead,
Berkshire SL6 7BU, UK
Tel: 0800 132 189
Fax: +44 1628 626 146

USA/Canada
Tel: 1800 446 3908
or +1 949 453 4000
Fax: +1 949 453 4001

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Manufacturer
Fisher & Paykel Healthcare Ltd,
15 Maurice Paykel Place,
East Tamaki, Auckland 2013
PO Box 14 348 Panmure,
Auckland 1741,
New Zealand
Tel: +64 9 574 0100
Fax: +64 9 574 0158
Email: info@fphcare.co.nz
Web: www.fphcare.com

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

This product is covered by one or more of the following patents or patent applications in the corresponding countries listed below.

USA: US6615834, US6789541, US6701926, US6951218, US7017576, US7308895 Australia: AU784321, AU785331, AU2002302002, AU200328188, AU2004294873, AU200522827 Europe: EP1163924 (GB, IT, ES), EP1905475, EP1306098, EP1289590, EP1526131, EP1720593, EP1737524