

F&P SleepStyle

Options de transfert de données sans modem



Comme solution de rechange à l'utilisation du modem cellulaire 3G intégré, le téléversement des données vers InfoSmart™ Web peut aussi s'effectuer par le biais de l'application SleepStyle™ ou de l'application F&P InfoUSB™. Ces méthodes simples et pratiques sont décrites ci-dessous.

Téléversement des données de thérapie SleepStyle par le biais de l'application SleepStyle



L'application SleepStyle utilise la technologie sans fil Bluetooth™ pour communiquer avec le dispositif F&P SleepStyle et téléverser automatiquement les données de sommeil du dispositif vers InfoSmart Web afin que vous puissiez y accéder.



Pour téléverser les données du dispositif F&P SleepStyle par Bluetooth vers l'application (qui les téléverse ensuite automatiquement vers le nuage InfoSmart Web), le patient doit simplement s'assurer de ce qui suit :

- Le dispositif F&P SleepStyle est branché à une alimentation électrique et est allumé.
- La fonction Bluetooth de son téléphone mobile est activée et celui-ci a déjà été jumelé avec son dispositif F&P SleepStyle.
- L'application SleepStyle est ouverte et en cours d'exécution sur son téléphone intelligent afin de recevoir et de transmettre les données.

Veuillez noter :

- Il est possible de transférer au moins 12 mois de données de thérapie.
- Les ordonnances ne peuvent pas être envoyées au dispositif F&P SleepStyle par le biais de l'application SleepStyle.
- Si votre patient doit télécharger l'application SleepStyle sur son téléphone, veuillez consulter le document joint « SleepStyle App Pairing guide UI-617114_A », qui présente les instructions étape par étape. Il peut télécharger l'application SleepStyle par l'intermédiaire de l'App Store ou de Google Play™ pour Android. Le patient peut aussi se reporter à la section « 4.2 Consulter vos données de thérapie dans l'application SleepStyle ou sur le site Web » du manuel d'utilisation et d'entretien F&P SleepStyle pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de jumeler son dispositif F&P SleepStyle à son appareil mobile.

Téléversement des données de thérapie SleepStyle par le biais d'InfoSmart Web lors d'une visite en magasin ou en clinique

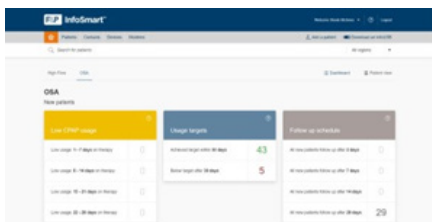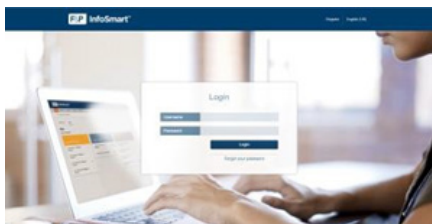


Vous pouvez téléverser les données de sommeil de votre patient vers le nuage InfoSmart Web à partir de votre ordinateur lors de son prochain rendez-vous.

Il vous suffit de procéder comme suit :

- Demandez à votre patient d'apporter son F&P InfoUSB au rendez-vous.
- Lorsque le patient arrive à son rendez-vous, récupérez le F&P InfoUSB et insérez-le dans votre ordinateur.
- Connectez-vous à votre compte InfoSmart Web à l'adresse suivante : <https://www.fpinfosmart.com>.
- Une fois connecté, cliquez sur le bouton « Télécharger un fichier InfoUSB » dans le coin supérieur droit et suivez les instructions pour téléverser les données de l'InfoUSB vers le compte du patient dans InfoSmart Web. Selon la quantité de données à transférer, ce téléversement peut prendre quelques minutes.
- Une fois les données téléversées, remettez l'InfoUSB au patient et rappelez-lui de le réinsérer dans son dispositif SleepStyle.

Téléversement des données de thérapie SleepStyle par le biais de l'application InfoUSB

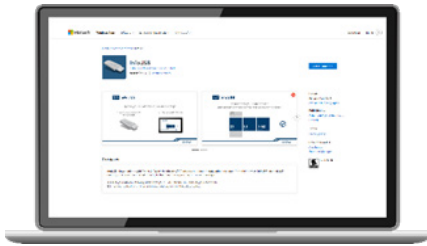

Vos patients peuvent téléverser leurs données de sommeil vers InfoSmart Web à partir de leur ordinateur ou de leur ordinateur portable en utilisant l'application InfoUSB.

Il suffit à votre patient de faire ce qui suit :

- Retirer le F&P InfoUSB de l'arrière du dispositif F&P SleepStyle (le F&P InfoUSB stocke automatiquement les données de sommeil) et l'insérer dans son ordinateur ou son ordinateur portable.
- Installer l'application InfoUSB. Le patient peut trouver l'application en recherchant « InfoUSB ». Cette application est gratuite et disponible en suivant les étapes ci-dessous :
 - **App Store** pour Mac : *un Mac équipé d'OS X 10.8 ou d'une version ultérieure doté d'un port USB et d'une connexion Internet est requis.* Une fois l'installation réussie, l'application peut être ouverte.
 - Pour **Windows**, le patient peut cliquer sur le bouton Démarrer et ouvrir « Mon ordinateur ». Accéder au lecteur appelé « FPHCARE ». Ouvrir ce dossier et double cliquer sur le fichier « Setup.exe ». Le patient doit suivre les instructions à l'écran pour effectuer l'installation correctement.
- Une fois le F&P InfoUSB détecté avec succès, le patient sera invité à saisir sa date de naissance. Après avoir saisi sa date de naissance, il doit sélectionner le bouton « Téléverser ». Remarque : s'assurer que la connexion Internet est établie afin que le transfert des données vers le fournisseur de soins de santé du patient s'effectue correctement.
- Les données de thérapie seront automatiquement téléversées du F&P InfoUSB vers le compte du patient dans InfoSmart Web. Un message de confirmation apparaîtra une fois le transfert des données complété. Si l'ordonnance du patient a été mise à jour, un message indiquant « Votre fournisseur de soins de santé a modifié votre ordonnance » apparaîtra.
- S'assurer que le F&P InfoUSB est réinséré dans le dispositif F&P SleepStyle une fois les données téléversées.

Veuillez noter :

- *Cette option de transfert de données permet également au patient de recevoir les modifications apportées aux paramètres de son ordonnance via InfoSmart Web. Pour ce faire, le patient doit insérer son F&P InfoUSB dans son appareil de CPAP de F&P afin que la modification d'ordonnance soit mise à jour.*
- *Le patient peut également consulter la section « 5.2.2 Application InfoUSB » du manuel d'utilisation et d'entretien F&P SleepStyle pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de télécharger et d'exécuter l'application F&P InfoUSB.*
- *Les patients qui installent l'application F&P InfoUSB pour la première fois devront effectuer une mise à niveau vers Windows 10. Ils ne pourront pas installer l'application sur Windows 8. Toutefois, les patients qui possèdent déjà l'application sous Windows 8 pourront continuer à l'utiliser.*