


Instructions d'impression

1 Imprimez le gabarit

- Imprimer sur du papier de format « US letter » ou A4.
- Veiller à sélectionner « Taille réelle » et non « Ajuster » dans les paramètres de l'imprimante.
- Pour de meilleurs résultats, imprimer en couleur.

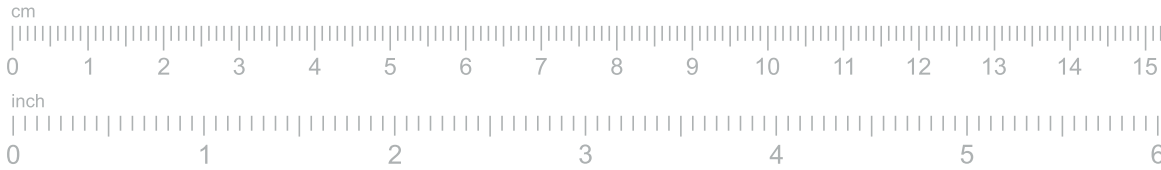


2 Mesurez votre impression

- Placer votre règle sur l'échelle ci-dessous et vérifier que leurs mesures sont identiques.


ASTUCE

Utilisez un miroir ou demandez à quelqu'un d'autre de vous aider à déterminer la taille.

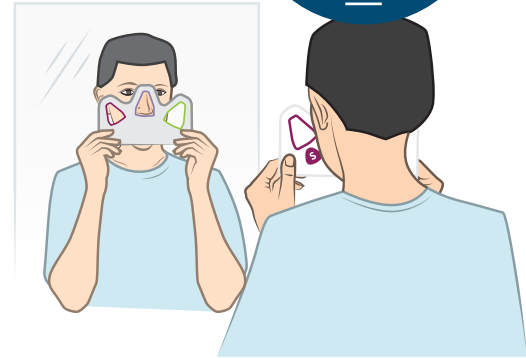

Instructions du gabarit

- Découpez soigneusement le long des lignes pointillées.
- Placez le guide contre votre visage de manière à ce que votre nez ressorte à chaque fois par un trou différent.
- Choisissez la taille qui correspond le mieux à votre nez.

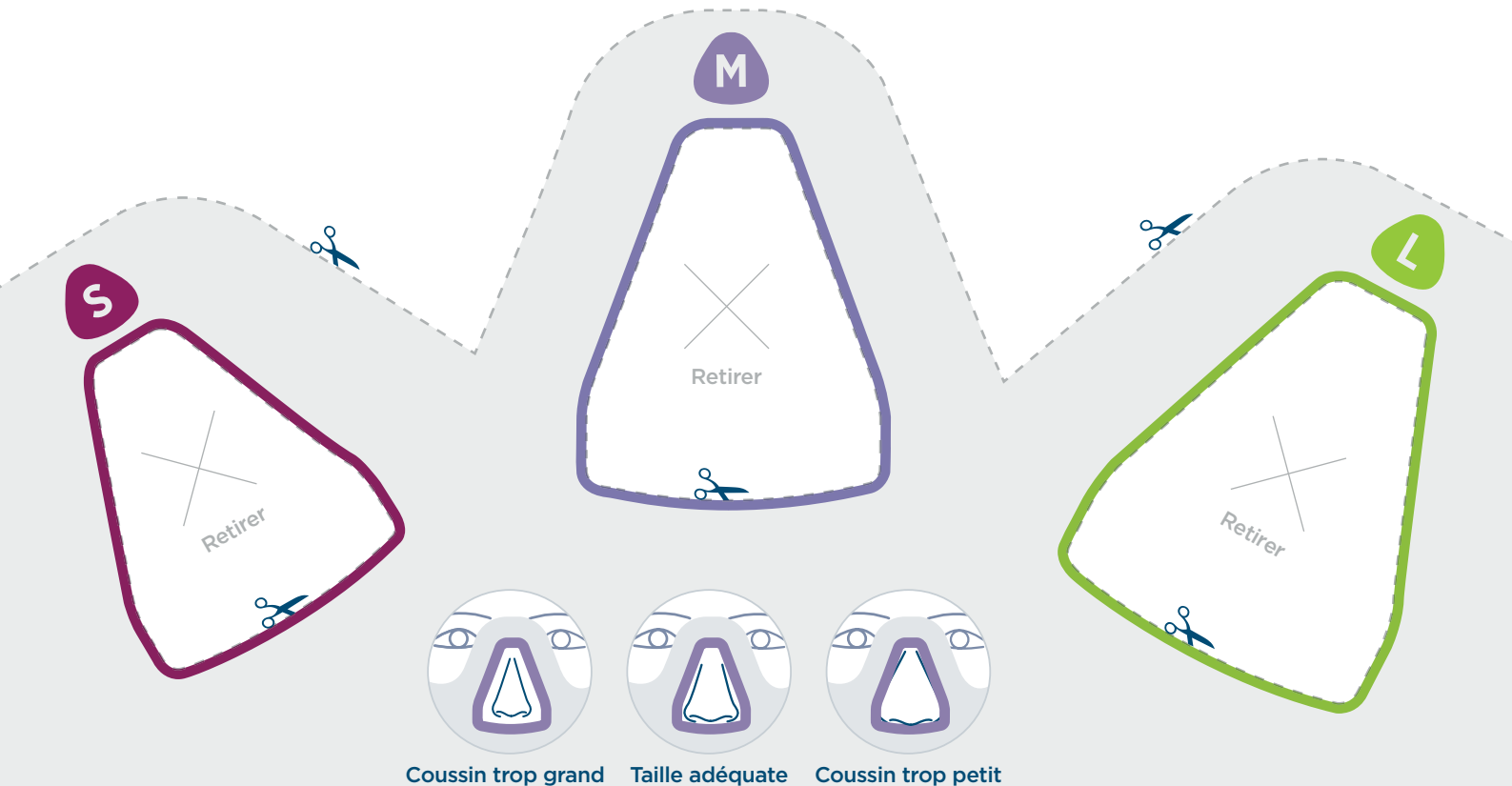

Ce produit peut ne pas vous convenir. Lisez les avertissements et les instructions d'utilisation avant l'achat. Le masque nasal F&P Nova™ peut ne pas être offert dans tous les marchés.