

ANWEISUNGEN ZUM ANLEGEN DER NASENKANÜLE

Im Folgenden wird das vorgeschlagene Verfahren zur Anwendung der Optiflow™ Junior 2-Nasenkannüle (OJR410, OJR412, OJR414, OJR416, OJR418) beschrieben.

ANPASSUNG*

1 Kanülengröße auswählen

Eine passende Kanülengröße auswählen; es wird eine Ausfüllung von etwa 50 % der Nasenlöcher empfohlen. Die Maßtabelle auf der folgenden Seite sollte nur zur Orientierung verwendet werden.

2 Haut präparieren

Die Haut gemäß den Klinikrichtlinien vorbereiten.

3 An Gasversorgung anschließen

Die Kanüle an die Gasversorgung anschließen. TIPP: Die Hand nah an die Nasalprongs halten, um zu überprüfen, ob Gas aus den Prongs austritt.

4 Die erste F&P Wigglepad™ 2-Klebefolie entfernen

Die erste Klebefolie von den Wigglepads™ 2 entfernen und dabei eine Berührung der Klebefläche vermeiden.

5 Kanüle einsetzen


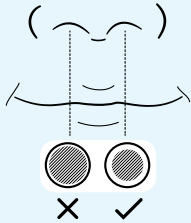




Die Kanüle in die Nasenlöcher einsetzen. Sicherstellen, dass die Kanülenbrücke direkt unter der Nase liegt, das Septum dabei jedoch nicht berührt wird. Die Kanüle während des Anlegens NICHT auseinanderziehen. Die F&P Wigglepads™ 2 auf die Wangen des Patienten kleben.

6 Kanüle sichern

Die zweite Klebefolie abziehen und die F&P Wigglepads™ 2 auf die Wangen des Kindes kleben.

* WICHTIG: Stets die Gebrauchsanweisung beachten, die mit dem Produkt geliefert wird. Dort finden Sie die vollständigen Benutzerhinweise zum Setup, Warn- und Vorsichtshinweise sowie Kontraindikationen.

1 KANÜLENGRÖSSE AUSWÄHLEN

GRÖSSENBEREICH			ABSTAND UM DIE PRONGS EINHALTEN*
XS		OJR410	
S		OJR412	
M		OJR414	
L		OJR416	
XL		OJR418	



ANWEISUNGEN ZUM ANLEGEN DER NASENKANÜLE

NASENKANÜLE ENTFERNEN

1 Fingerspitze auflegen

Die Fingerspitze auf den Rand der F&P Wigglepads™ 2 auflegen und die Kanüle von den Wigglepads 2 abziehen.



ENTFERNEN UND WECHSEL DER F&P WIGGLEPADS™ 2

1 Die Kante hochziehen

Den Rand der F&P Wigglepads™ 2 hochziehen. Mit einem angefeuchteten Tuch die Haut des Patienten und die Unterseite der Wigglepads 2 abtupfen und die Pads dabei vorsichtig vom Gesicht des Patienten abziehen.



2 Aufkleben

Die F&P Wigglepads™ 2 Ersatzklebestreifen an die Kanüle kleben, die erste Klebefolie entfernen und die Wigglepads 2 auf die Wangen des Patienten kleben.



3 Entfernen

Die zweite Klebefolie abziehen und die Pads auf die Wangen des Patienten kleben.

HINWEISE ZU DEN GRÖSSEN

		GEWICHTSTABELLE (KG)								ERSATZTEILE								
		500g	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4									
	OJR410									F&P Wigglepads™ 2 WJR110								
	XS																	
	OJR412									F&P Wigglepads™ 2 WJR112								
	S																	
		GEWICHTSTABELLE (KG)												ERSATZTEILE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30			
	OJR414															F&P Wigglepads™ 2 WJR112		
	M																	
	OJR416															F&P Wigglepads™ 2 WJR112		
	L																	
	OJR418															F&P Wigglepads™ 2 WJR112		
	XL																	
		 Wird dem Patienten erwartungsgemäß passen Könnte dem Patienten passen																

* WICHTIG: Stets die Gebrauchsanweisung beachten, die mit dem Produkt geliefert wird. Dort finden Sie die vollständigen Benutzerhinweise zum Setup, Warn- und Vorsichtshinweise sowie Kontraindikationen.

www.fphcare.com

HINWEIS:

1. Bei der Größenauswahl sollte die empfohlene Ausfüllung der Nasenlöcher von 50 % berücksichtigt werden.

2. Das angegebene Gewicht des Patienten sollte lediglich als Richtwert verstanden werden.



Das mit der Optiflow™ Junior 2 zur Verfügung gestellte Video kann durch Scannen dieses QR-Codes angesehen werden