

GUIDE DE MISE EN PLACE DE L'INTERFACE NASALE

Ci-dessous figure une procédure suggérée pour l'application de l'interface nasale Optiflow™ Junior 2 (OJR410, OJR412, OJR414, OJR416, OJR418).

MISE EN PLACE*

1 Choisir la taille de la canule

Sélectionner la taille d'interface appropriée ; l'occlusion de narine recommandée est d'environ 50 %. Le tableau des tailles figurant sur la page suivante doit uniquement être utilisé à titre indicatif.

2 Préparer la peau

Préparer la peau du patient selon le protocole de l'hôpital.

3 Raccorder le dispositif à la source de gaz

Raccorder l'interface à la source de gaz.
CONSEIL : placer la main près des canules nasales pour vérifier qu'un débit de gaz sort de celles-ci.

4 Retirer les premières languettes F&P Wigglepad™ 2

Retirer les premières languettes du F&P Wigglepads™ 2 et éviter de toucher l'adhésif.


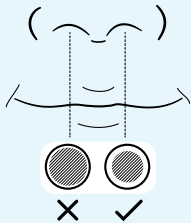



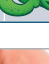
5 Insérer les canules

Insérer la canule dans les narines. S'assurer que le pont de la canule repose près du nez sans toucher le septum. NE PAS étirer la canule lors de l'application. Coller le F&P Wigglepads™ 2 sur les joues du patient.

6 Fixer l'interface

Retirer les secondes languettes et coller les F&P Wigglepads™ 2 sur les joues.

1 CHOISIR LA TAILLE DE L'INTERFACE

GAMME DE TAILLES		LAISSER UN ESPACE AUTOUR DES CANULES*
XS	 OJR410	
S	 OJR412	
M	 OJR414	
L	 OJR416	
XL	 OJR418	



* IMPORTANT : toujours se reporter aux instructions d'utilisation fournies avec le produit pour connaître les instructions complètes d'installation, les avertissements, les précautions et contre-indications.

GUIDE DE MISE EN PLACE DE L'INTERFACE NASALE

RETRAIT DE L'INTERFACE NASALE

1 Placer le doigt

Placer le doigt sur le bord extérieur du F&P Wigglepads™ 2 et décoller délicatement l'interface du Wigglepads 2.



RETRAIT ET REPOSITIONNEMENT DU F&P WIGGLEPADS™ 2

1 Lever le bord

Lever le bord du F&P Wigglepads™ 2. Utiliser un chiffon humide pour essuyer la peau du patient et le dessous du Wigglepads 2 tout en le décollant délicatement du visage du patient.



2 Coller






Coller le F&P Wigglepads™ 2 de rechange sur la canule, retirer les premières languettes et coller le Wigglepads 2 sur les joues du patient.



3 Retirer

Retirer les secondes languettes et les coller sur les joues du patient.

INFORMATIONS RELATIVES À LA TAILLE

		GUIDE DE POIDS (KG)								RECHANGE							
		500g	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4								
	OJR410 XS	■	■	■	■	■	■	■	■	F&P Wigglepads™ 2 WJR110							
	OJR412 S	■	■	■	■	■	■	■	■								
		GUIDE DE POIDS (KG)												RECHANGE			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30		
	OJR414 M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	F&P Wigglepads™ 2 WJR112	
	OJR416 L	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	OJR418 XL	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
		■ Devrait convenir au patient ■ Pourrait convenir au patient															

* IMPORTANT : toujours se reporter aux instructions d'utilisation fournies avec le produit pour connaître les instructions complètes d'installation, les avertissements, les précautions et contre-indications.

www.fphcare.com

REMARQUE :

1. L'occlusion de narine recommandée de 50 % doit être utilisée pour choisir la taille de la canule.
2. Le poids du patient ne doit être utilisé qu'à titre indicatif.



Pour voir la vidéo d'utilisation de l'Optiflow™ Junior 2, scanner ce code QR