


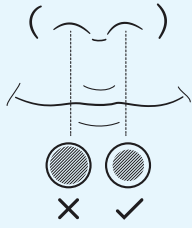


## GUIDE DE MISE EN PLACE

### MISE EN PLACE\*

- 1 Choisir la taille de l'interface**  
Sélectionner une taille d'interface appropriée ; un espace dégagé doit être visible autour de chaque canule. Le tableau des tailles figurant sur la page suivante ne doit être utilisé qu'à titre indicatif.
- 2 Préparer la peau**  
Préparer la peau du patient selon le protocole de l'hôpital.
- 3 Raccorder le dispositif à l'alimentation en gaz**  
Raccorder le système à l'alimentation en gaz et s'assurer que le gaz sort des canules.
- 4 Retirer le premier papier protecteur des F&P Wigglepads™ 2**  
Retirer le premier papier protecteur des F&P Wigglepads 2 et éviter de toucher l'adhésif.
- 5 Insérer les canules**  
Insérer les canules dans les narines. S'assurer que le pont de l'interface repose près du nez sans toucher le septum. NE PAS étirer l'interface lors de l'application. Coller les F&P Wigglepads 2 sur les joues du patient.
- 6 Fixer l'interface**  
Retirer le deuxième papier protecteur et coller les F&P Wigglepads 2 sur les joues.

**1 CHOISIR LA TAILLE DE L'INTERFACE**

GAMME DE TAILLES	LAISSER UN ESPACE AUTOUR DES CANULES*
<p><b>XXL</b> <b>OJR520</b></p> 	



\* IMPORTANT : toujours se reporter aux instructions d'utilisation fournies avec le produit pour connaître les instructions complètes d'installation, les avertissements, les précautions et les contre-indications.

## RETRAIT DE L'INTERFACE NASALE

### 1 Placer le doigt


Placer le doigt sur le bord extérieur des F&P Wigglepads 2 et décoller délicatement l'interface des Wigglepads 2. En partant de l'extérieur, décoller vers le nez.



## RETRAIT ET CHANGEMENT DES F&P WIGGLEPADS 2

### 1 Lever le bord

Lever le bord des F&P Wigglepads 2. Utiliser un tissu humide pour essuyer la peau du patient et le dessous des Wigglepads 2 tout en les décollant délicatement du visage du patient.

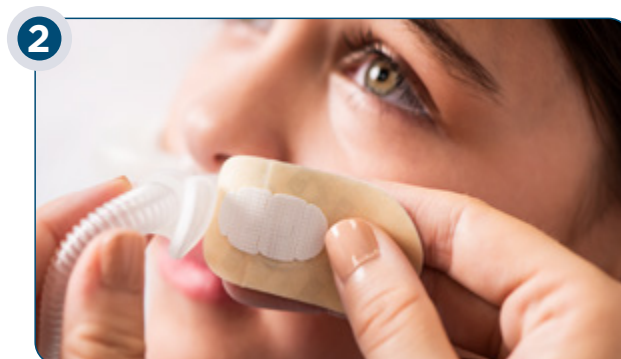

### 2 Coller

Coller les F&P Wigglepads 2 de rechange sur l'interface, retirer le premier papier protecteur et coller les Wigglepads 2 sur les joues du patient.





### 3 Retirer

Retirer le deuxième papier protecteur et coller sur les joues du patient.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA TAILLE

- Les canules ne doivent pas créer d'étanchéité avec les narines. Un espace dégagé doit être visible autour de chaque canule.
- Le poids du patient ne doit être utilisé qu'à titre indicatif.

	GUIDE DE POIDS (KG)					PIÈCES DE RECHANGE
	0	8	12,5	20	30	
<b>OJR520 XXL</b> 						
						<b>F&amp;P Wigglepads™ 2 WJR114</b> 
		■ Devrait convenir au patient.			■ Pourrait convenir au patient.	

Optiflow, Wigglepads et Dolphin sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.