

USER INSTRUCTIONS

- REF
- RT125

Infant Ventilator Circuit (>4 L/min) Single Heated
- RT126


Infant Ventilator Circuit (0.3 to 4 L/min) Single Heated
- RT130

Infant Ventilator Circuit (0.3 to 4 L/min) Single Heated
- RT131

Infant Ventilator Circuit (>4 L/min) Single Heated
- RT225

Infant Ventilator Circuit (>4 L/min) Single Heated with MR290 Autofeed Chamber
- RT226

Infant Ventilator Circuit (0.3 To 4 L/min) Single Heated with MR290 Autofeed Chamber

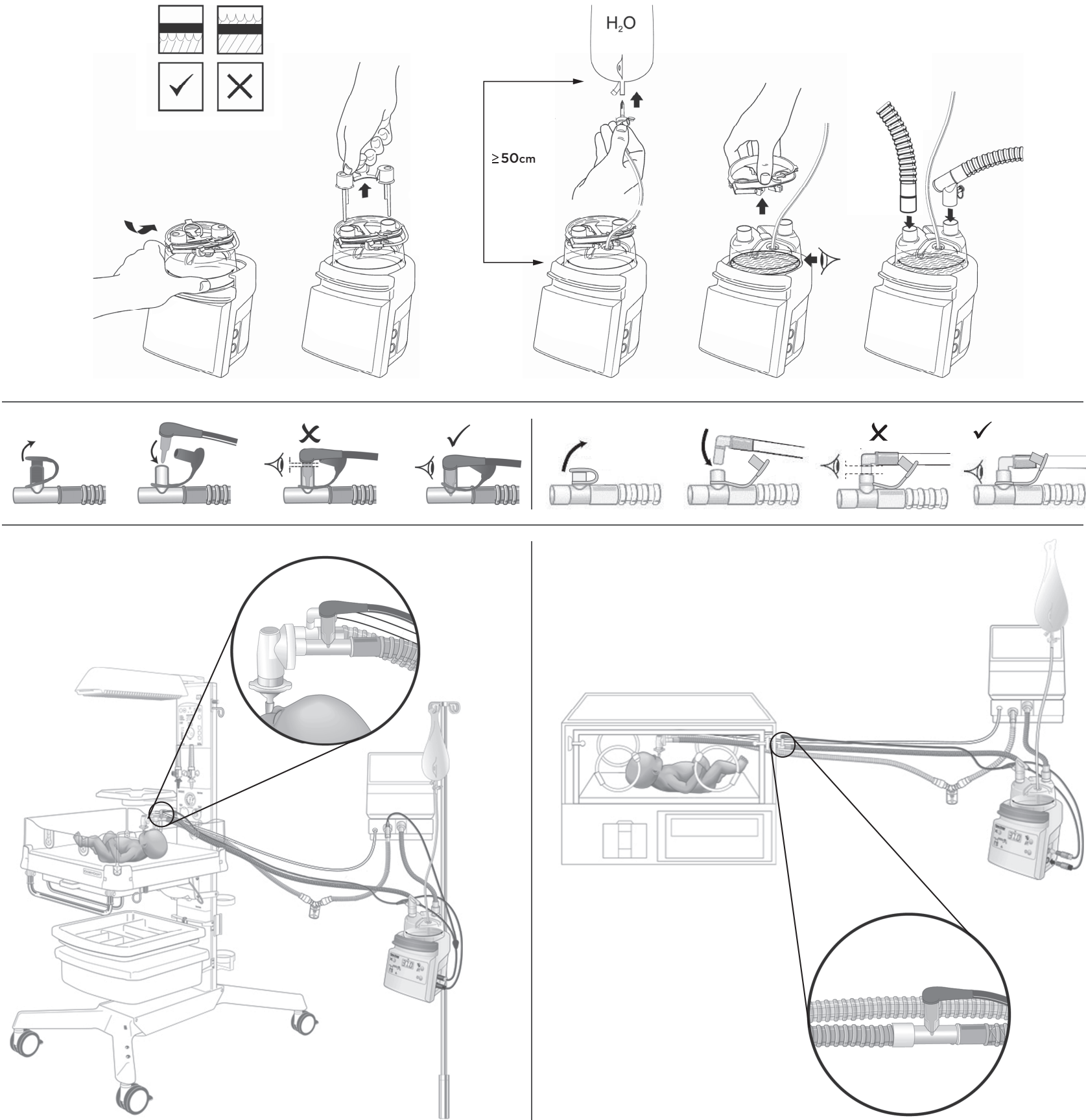

CE 0123 Rx only

F&P is a trademark of Fisher & Paykel Healthcare Limited.
For patent information, see www.fphcare.com/ip

Manufacturer Fisher & Paykel Healthcare Ltd, 15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, PO Box 14 348 Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Email: info@fphcare.co.nz Web: www.fphcare.com Importer/ Distributor **Australia** (Sponsor) Fisher & Paykel Healthcare Pty Ltd, 19-31 King Street, Nunawading, Melbourne, Victoria 3131. Tel: +61 3 9871 4900 Fax: +61 3 9871 4998 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 **Benelux** Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 **Brazil** Fisher & Paykel do Brasil, Rua Sampaio Viana, 277 cj 21, Paraisópolis, 04004-000, São Paulo - SP, Brazil Tel: +55 11 2548 7002 **China** 代理人/售后服务机构: 费雪派克医疗保健 (广州) 有限公司, 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号G12栋301号 电话: +86 20 32053486 传真: +86 20 32052132 **Denmark** Tel: +45 70 26 37 70 Fax: +46 83 66 310 **Finland** Tel: +358 9 251 66 123 Fax: +46 83 66 310 **France** Fisher & Paykel Healthcare SAS, 10 Av. du Québec, Bât F5, BP 512, Villebon-sur-Yvette, 91946 Courtaboeuf Cedex, France Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 Email: c.s@fphcare.fr **Germany** Fisher & Paykel Healthcare GmbH, Deutschland, Österreich, Schweiz, Wiesenstrasse 49, D 73614 Schorndorf, Germany Tel: +49 7181 98599 0 Fax: +49 7181 98599 66 **Hong Kong** Tel: +852 2116 0032 Fax: +852 2116 0085 **India** Tel: +91 80 2309 6400 **Ireland** Tel: 1800 409 011 Fax: +44 1628 626 146 **Italy** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japan** Tel: +81 3 5117 7110 Fax: +81 3 5117 7115 **Korea** Tel: +82 2 6205 6900 Fax: +82 2 6309 6901 **Mexico** Tel: +52 55 9130 1626 **Norway** Tel: +47 21 60 13 53 Fax: +47 22 99 60 10 **Poland** Tel: 00800 49 119 77 Fax: 00800 49 119 78 **Russia** Tel. and Fax: +7 495 782 21 50 **Spain** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 **Sweden** Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 **Switzerland** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Taiwan** Tel: +886 2 8751 1739 Fax: +886 2 8751 5625 **Turkey** İthalatçı Firma: Fisher Paykel Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, İletişim Bilgileri: Ostim Mahallesi 1249. Cadde No:6, Yenimahalle, Ankara, Türkiye 06374, Tel: +90 312 354 34 12 Fax: +90 312 354 31 01 **UK** Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead, Berkshire SL6 7BU, UK Tel: 0800 132 189 Fax: +44 1628 626 146 **USA/Canada** Tel: 1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

English ^(en)

RT125	INFANT VENTILATOR CIRCUIT (>4 L/MIN) SINGLE HEATED
RT126	INFANT VENTILATOR CIRCUIT (0.3 TO 4 L/MIN) SINGLE HEATED
RT130	INFANT VENTILATOR CIRCUIT (0.3 TO 4 L/MIN) SINGLE HEATED
RT131	INFANT VENTILATOR CIRCUIT (>4 L/MIN) SINGLE HEATED
RT225	INFANT VENTILATOR CIRCUIT (>4 L/MIN) SINGLE HEATED WITH MR290 AUTOFEED CHAMBER
RT226	INFANT VENTILATOR CIRCUIT (0.3 TO 4 L/MIN) SINGLE HEATED WITH MR290 AUTOFEED CHAMBER

For delivery of breathing gases.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

RT131, RT125, RT225:	Compatible with Fisher & Paykel Healthcare MR810 and MR850 humidifiers. Dräger Babylog: Suitable for flows <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Compatible with MR850 humidifier only. 810 DO NOT use with MR810 humidifier.

Refer to humidifier user instructions.

INTERFACE CONNECTIONS	ISO 5356-1 Conical connectors
COMPRESSIBLE VOLUME COMPLIANCE @ 60 cmH₂O	830 mL
Without Accessories	1.4 ± 0.09 mL/cmH ₂ O
With Accessories	1.4 ± 0.07 mL/cmH ₂ O (including 0.02 mL/cmH ₂ O measurement uncertainty)

RESISTANCE TO FLOW @ 2.5 L/min	
Without Accessories	
Inspiratory limb:	0.09 ± 0.04 cmH ₂ O
Expiratory limb:	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O
With Accessories	
Expiratory limb:	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O (including 0.03 cmH ₂ O measurement uncertainty)

MAXIMUM OPERATING PRESSURE	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Refer to chamber instructions for use
	8 kPa

RT225, RT226:	
BREATHING TUBE LENGTH	
Inspiratory:	1.6 m
Expiratory:	1.6 m
MINIMUM TUBE INTERNAL DIAMETER	10.2 mm
GAS LEAKAGE @ 60 cmH₂O	<30 mL/min
TIDAL VOLUME	<185 mL

OVERALL PERFORMANCE AT 20 °C TO 26 °C AMBIENT TEMPERATURE		
	INVASIVE MODE	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Humidification Output	>33 mg/L	>33 mg/L
Flow Rate	4 – 15 L/min	0.8 – 6 L/min

TYPICAL PERFORMANCE AT 23 °C AMBIENT TEMPERATURE	
	INVASIVE MODE RT126, RT130, RT226
	>33 mg/L
Humidification Output	>33 mg/L
Flow Rate	0.3 – 6 L/min

SYMBOL DEFINITIONS

	Incorrect water level, replace chamber	Rx only	Prescription only
	Correct water level in the chamber	CE 0123	CE Marking 93/42/EEC
	Consult operating instructions		Date of manufacture
	Type BF applied part		Manufacturer
	Not made with phthalates		Use-by date
	Not made with natural rubber latex		7 Days maximum use
	Single use		Transportation and storage temperature limits
	Lot number		European Union authorised representative
	Reference number		Caution/Consult instructions for use

WARNINGS, CAUTIONS AND NOTES

⚠ WARNINGS

- DO NOT reuse this product. Reuse may result in transmission of infectious substances, interruption to treatment, serious harm or death.
- The use of breathing circuits, chambers, accessories, or combinations which are not approved by Fisher & Paykel Healthcare may result in poor humidification system performance, ventilator malfunction and harm to the patient/user.
- Appropriate patient monitoring (e.g. oxygen saturation) must be used at all times. Failure to monitor the patient (e.g. in the event of an interruption to gas flow) may result in serious harm or death.
- DO NOT touch heater plate or chamber base. Surfaces may exceed 85 °C. Failure to comply may result in a skin burn.

Failure to comply with any of the following warnings may impair performance of the device or compromise safety (including potentially causing serious harm):

- When mounting a humidifier adjacent to a patient, ensure that the humidifier is always positioned lower than the patient.
- 7** DO NOT use beyond 7 days maximum duration of use.
- DO NOT cover the circuit with materials such as blankets, towels or bed linen.
- DO NOT stretch or milk the tubing.
- DO NOT soak, wash, or sterilize this product. Avoid contact with chemicals, cleaning agents, or hand sanitizers.
- DO NOT use the chamber if the water level rises above the maximum water level line.
- DO NOT use the chamber if the seals are not intact when received, or if it has been dropped.
- DO NOT operate the chamber at an angle in excess of 10°.
- DO NOT spike the water source until the blue caps have been removed. Should the primary float fail, splashing into the circuit may occur if the chamber is being operated in excess of 80 L/min.
- Visually inspect breathing sets for damage (e.g. a crushed tube or cracked connector) before use and replace if damaged.
- The water source must be at least 50 cm higher than the chamber.
- DO NOT use heated wire breathing circuits without gas flow. If gas flow is interrupted, turn the humidifier off.
- Ensure there is a water supply connected to the chamber and that water is present within the chamber.
- DO NOT fill the chamber with water in excess of 37 °C.
- Ensure appropriate ventilator or flow source alarms are set before connecting breathing set to patient.
- Avoid prolonged contact of heated tubes with patient's skin.
- Perform a pressure and leak test on the breathing system and check for occlusions before connection to a patient.
- Use USP Sterile Water For Inhalation or equivalent for humidification. DO NOT add other substances to the water.
- Regularly monitor and drain condensate build-up in the circuit.
- Check all connections are tight before use.
- Check that the heater wire is evenly distributed along the circuit and not bunched or kinked.
- Heated tubes should be kept out of direct contact with the patient's skin. At flow rates below 0.8 L/min, the surface temperature can reach 50 °C.
- California residents please be advised of the following, pursuant to Proposition 65: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm. For more information, please visit: www.fphcare.com/prop65

NOTES

- For use under the supervision of trained medical personnel.
- Dispose of product according to appropriate hospital protocol. User may be exposed to breathing tract fluids during disposal.
- The responsible organization is accountable for the compatibility of the humidifier and all of the parts and accessories used to connect to the patient and other equipment before use.

French ^(fr)

RT125	CIRCUIT DE VENTILATION PÉDIATRIQUE (>4 L/MIN) MONO-CHAUFFÉ
RT126	CIRCUIT DE VENTILATION PÉDIATRIQUE (0,3 À 4 L/MIN) MONO-CHAUFFÉ
RT130	CIRCUIT DE VENTILATION PÉDIATRIQUE (0,3 À 4 L/MIN) MONO-CHAUFFÉ
RT131	CIRCUIT DE VENTILATION PÉDIATRIQUE (>4 L/MIN) MONO-CHAUFFÉ
RT225	CIRCUIT DE VENTILATION PÉDIATRIQUE (>4 L/MIN) MONO-CHAUFFÉ AVEC CHAMBRE À REMPLISSAGE AUTOMATIQUE MR290
RT226	CIRCUIT DE VENTILATION PÉDIATRIQUE (0,3 À 4 L/MIN) MONO-CHAUFFÉ AVEC CHAMBRE À REMPLISSAGE AUTOMATIQUE MR290

Pour l'administration de gaz respiratoires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RT131, RT125 et RT225 :	Compatible avec les humidificateurs MR810 et MR850 de Fisher & Paykel Healthcare. Dräger Babylog : convient pour des débits <25 L/min.
RT130, RT126 et RT226 :	Compatibles avec l'humidificateur MR850 uniquement. 810 NE PAS utiliser avec l'humidificateur MR810.

Consulter les instructions d'utilisation de l'humidificateur.

RACCORDS D'INTERFACE	Raccords coniques conformes à la norme ISO 5356-1
VOLUME COMPRESSIBLE COMPLIANCE @ 60 cmH₂O	830 mL
Sans accessoires	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Avec accessoires	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O (inclut une incertitude de la mesure de 0,02 mL/cmH ₂ O)

RÉSISTANCE AU DÉBIT À 2,5 L/min	
Sans accessoires	
Branche inspiratoire :	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Branche expiratoire :	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Avec accessoires	
Branche expiratoire :	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O (inclut une incertitude de la mesure de 0,03 cmH ₂ O)

PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAXIMALE	
RT125, RT126, RT130 et RT131 :	Consulter les instructions d'utilisation de la chambre
RT225 et RT226 :	8 kPa

LONGUEUR DU CIRCUIT RESPIRATOIRE	
Inspiratoire :	1,6 m
Expiratoire :	1,6 m
DIAMÈTRE INTERNE DU CIRCUIT MINIMUM	10,2 mm
FUITE DE GAZ À 60 cmH₂O	<30 mL/min
VOLUME COURANT	<185 mL

PERFORMANCE GLOBALE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE COMPRISE ENTRE 20 °C ET 26 °C		
	MODE INVASIF	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Sortie d'humidification	>33 mg/L	>33 mg/L
Débit	4 à 15 L/min	0,8 à 6 L/min

PERFORMANCE TYPE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 23 °C		
	MODE INVASIF RT126, RT130, RT226	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Sortie d'humidification	>33 mg/L	>33 mg/L
Débit	0,3 à 6 L/min	

DÉFINITIONS DES SYMBOLES

	Niveau d'eau incorrect, remplacer la chambre	Rx only	Sur prescription uniquement
	Niveau d'eau correct dans la chambre	CE 0123	Marquage CE 93/42/CEE
	Consulter les instructions d'utilisation		Date de fabrication
	Pièce appliquée de type BF		Fabricant
	N'est pas fabriqué avec des phtalates		Date de péremption
	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel		Période d'utilisation maximale de 7 jours

	À usage unique		Limites de température de transport et de stockage
	Numéro de lot		Représentant agréé pour l'Union européenne
	Numéro de référence		Mise en garde/ Consulter le mode d'emploi

AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS ET REMARQUES

⚠ AVERTISSEMENTS

- NE PAS réutiliser ce produit. La réutilisation peut entraîner la transmission de substances infectieuses, l'interruption du traitement, des blessures graves ou le décès.
- L'utilisation de circuits respiratoires, de chambres, d'accessoires ou d'ensembles qui ne sont pas agréés par Fisher & Paykel Healthcare peut entraîner une mauvaise humidification, un mauvais fonctionnement du ventilateur et des préjudices au patient/à l'utilisateur.
- Le patient doit faire l'objet d'une surveillance appropriée (p. ex. saturation en oxygène) en permanence. L'absence de surveillance du patient (p. ex. en cas d'interruption du débit de gaz) peut entraîner des blessures graves, voire le décès.
- NE PAS toucher la plaque chauffante ou la base de la chambre (d'humidification). La température des surfaces peut dépasser 85 °C. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des brûlures cutanées.

Le non-respect de l'un des avertissements suivants peut entraver les performances de l'appareil ou compromettre la sécurité (en risquant notamment d'entraîner des blessures graves) :

- Lors de l'installation d'un humidificateur à proximité d'un patient, s'assurer que l'humidificateur est toujours positionné plus bas que le patient.
- 7** NE PAS utiliser au-delà de la période maximale d'utilisation de 7 jours.
- NE PAS couvrir le circuit avec une couverture, une serviette ou un drap.
- NE PAS étirer ni pincer la tubulure.
- NE PAS immerger, laver ou stériliser ce produit. Éviter tout contact avec des produits chimiques, des agents nettoyants ou des produits désinfectants pour les mains.
- NE PAS utiliser la chambre si le niveau d'eau dépasse le repère maximal du niveau d'eau.
- NE PAS utiliser la chambre si les joints ne sont pas intacts lors de sa réception ou si elle est tombée par terre.
- NE PAS faire fonctionner la chambre si elle est inclinée à un angle supérieur à 10°.
- NE PAS percer la source d'eau avant que les protections bleues aient été retirées. Dans le cas où le premier flotteur serait en panne, des éclaboussures peuvent atteindre le circuit si la chambre fonctionne à plus de 80 L/min.
- Procéder à une inspection visuelle des kits respiratoires pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés (p. ex. tube érasé ou raccord fissuré) avant de les utiliser et les remplacer le cas échéant.
- La poche d'eau doit se trouver à au moins 50 cm au-dessus de la chambre.
- NE PAS utiliser de circuits respiratoires chauffés sans débit de gaz. Si le débit de gaz est interrompu, éteindre l'humidificateur.
- Vérifier que la chambre est bien raccordée à une alimentation en eau et qu'il y a bien de l'eau dans la chambre.
- NE PAS remplir la chambre d'eau à une température supérieure à 37 °C.
- Vérifier que les alarmes appropriées pour le ventilateur ou le débit d'alimentation sont correctement réglées avant de brancher le kit respiratoire au patient.
- Éviter le contact prolongé des tubes chauffés avec la peau du patient.
- Effectuer un test de fuite sous pression sur le système respiratoire et vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion avant le branchement du patient.
- Utiliser de l'eau stérile pour l'inhalation (pharmacopée américaine) ou équivalent pour l'humidification. NE PAS ajouter d'autres substances à l'eau.
- Surveiller régulièrement et purger l'accumulation de condensation dans le circuit.
- Vérifier que tous les raccords sont correctement serrés avant utilisation.
- Vérifier que le fil chauffant est bien réparti le long du circuit et n'est ni enroulé ni plié.
- Les tubes chauffés doivent être tenus hors de contact direct avec la peau du patient. À des débits inférieurs à 0,8 L/min, la température de surface peut atteindre 50 °C.

REMARQUES

- Destiné à être utilisé sous la supervision d'un personnel médical formé.
- Mettre le produit au rebut conformément au protocole approprié de l'hôpital. L'utilisateur peut être exposé aux fluides respiratoires du patient pendant l'élimination.
- L'organisation responsable doit s'assurer de la compatibilité de l'humidificateur et de tous les autres pièces et accessoires utilisés pour le branchement au patient et à l'équipement avant utilisation.

Spanish ^(es)

RT125	CIRCUITO DE VENTILADOR PARA LACTANTES (>4 L/MIN) CON SISTEMA SIMPLE DE CALENTAMIENTO
RT126	CIRCUITO DE VENTILADOR PARA LACTANTES (DE 0,3 A 4 L/MIN) CON SISTEMA SIMPLE DE CALENTAMIENTO
RT130	CIRCUITO DE VENTILADOR PARA LACTANTES (DE 0,3 A 4 L/MIN) CON SISTEMA SIMPLE DE CALENTAMIENTO
RT131	CIRCUITO DE VENTILADOR PARA LACTANTES (>4 L/MIN) CON SISTEMA SIMPLE DE CALENTAMIENTO
RT225	CIRCUITO DE VENTILADOR PARA LACTANTES (>4 L/MIN) CON SISTEMA SIMPLE DE CALENTAMIENTO Y CÁMARA DE AUTOLLENADO MR290
RT226	CIRCUITO DE VENTILADOR PARA LACTANTES (DE 0,3 A 4 L/MIN) CON SISTEMA SIMPLE DE CALENTAMIENTO Y CÁMARA DE AUTOLLENADO MR290

Para la administración de gases respiratorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RT131, RT125, RT225:	Compatibles con los humidificadores MR810 y MR850 de Fisher & Paykel Healthcare. Dräger Babylog: Adecuado para caudales <25 L/min
RT130, RT126, RT226:	Únicamente compatibles con el humidificador MR850. 810 NO use los dispositivos con el humidificador MR810.

Consulte las instrucciones de uso del humidificador.

CONEXIONES DE INTERFAZ	Conectores cónicos ISO 5356-1
VOLUMEN COMPRIMIBLE DISTENSIBILIDAD A 60 cmH₂O	830 mL
Sin accesorios	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Con accesorios	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O (incluida una incertidumbre de medición de 0,02 mL/cmH ₂ O)

RESISTENCIA AL FLUJO A 2,5 L/min	
Sin accesorios	
Ramal inspiratorio:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Ramal expiratorio:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Con accesorios	
Ramal espiratorio:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O (incluida una incertidumbre de medición de 0,03 cmH ₂ O)

PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Consulte las instrucciones de uso de la cámara
	8 kPa

RT225, RT226:	
LONGITUD DEL TUBO RESPIRATORIO	
Inspiratorio:	1,6 m
Expiratorio:	1,6 m
DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO DEL TUBO	10,2 mm
FUGAS DE GAS A 60 cmH₂O	<30 mL/min
VOLUMEN TIDAL	<185 mL

RENDIMIENTO GENERAL A TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20 °C Y 26 °C		
	MOD0 INVASIVO	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Salida de humidificación	>33 mg/L	>33 mg/L
Caudal	4-15 L/min	0,8-6 L/min

RENDIMIENTO TÍPICO A TEMPERATURA AMBIENTE DE 23 °C		
	MOD0 INVASIVO RT126, RT130, RT226	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Salida de humidificación	>33 mg/L	>33 mg/L
Caudal	0,3-6 L/min	

DEFINICIÓN DE LOS SÍMBOLOS

	Nivel de agua incorrecto. Reemplace la cámara.	Rx only	Solo con receta médica
	Nivel de agua correcto en la cámara	CE 0123	Marca CE 93/42/CEE
	Consulte las instrucciones de funcionamiento		Fecha de fabricación
	Pieza aplicada de tipo BF		Fabricante
	Fabricado sin ftalatos		Fecha de caducidad

	Fabricado sin látex de caucho natural		7 días de uso máximo
	De un solo uso		Limites de temperatura de transporte y almacenamiento
	Número de lote		Representante autorizado para la Unión Europea
	Número de referencia		Precaución/Consultar las instrucciones de uso

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y NOTAS

⚠ ADVERTENCIAS

- NO reutilice este producto. La reutilización puede provocar la transmisión de sustancias infecciosas, la interrupción del tratamiento, lesiones graves o la muerte.
- El uso de circuitos respiratorios, cámaras, accesorios o combinaciones que no estén aprobados por Fisher & Paykel Healthcare puede dar lugar al rendimiento deficiente del sistema de humidificación y al mal funcionamiento del ventilador, así como provocar lesiones al paciente o el usuario.
- Es necesario monitorizar al paciente (p. ej., saturación de oxígeno) de modo adecuado en todo momento. Si no se monitoriza al paciente (p. ej., en caso de que se interrumpa el flujo de gas), podrían provocarse lesiones graves o la muerte.
- NO toque la placa de calentamiento ni la base de la cámara. De lo contrario, podrían producirse quemaduras en la piel, ya que las superficies pueden superar los 85 °C.

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes advertencias puede perjudicar el rendimiento del dispositivo o comprometer la seguridad (incluida la posibilidad de provocar lesiones graves):

- Al montar un humidificador junto a un paciente, asegúrese de que el humidificador siempre esté colocado por debajo del paciente.
- 7** NO lo use transcurridos los 7 días de duración máxima de uso.
- NO cubra el circuito con materiales como mantas, toallas o ropa de cama.
- NO estire ni apriete los tubos para extraer su contenido.
- NO sumerja, lave ni esterilice este producto. Evite el contacto con sustancias químicas, productos de limpieza o antisépticos para manos.
- NO use la cámara si el nivel del agua supera la línea del nivel de agua máximo.
- NO utilice la cámara si los precintos no están intactos cuando la reciba o si se ha caído.
- NO haga funcionar la cámara a un ángulo que supere los 10°.
- NO pinche la fuente de agua hasta que se hayan extraído los tapones azules. Si el flotador primario falla y la cámara está funcionando a más de 80 L/min, se pueden producir salpicaduras en el circuito.
- Antes de usar los equipos de respiración, inspecciónelos visualmente en busca de desperfectos (por ejemplo, un tubo aplastado o un conector agrietado) y reemplácelos si están dañados.
- La fuente de agua debe estar al menos 50 cm por encima de la cámara.
- NO utilice circuitos respiratorios con cable calefactor sin flujo de gas. Si se interrumpe el flujo de gas, apague el humidificador.
- Asegúrese de que haya suministro de agua conectado a la cámara y de que haya agua dentro de esta.
- NO llene la cámara con agua a más de 37 °C.
- Antes de conectar el conjunto respiratorio al paciente, asegúrese de que las alarmas del ventilador o del origen del flujo estén configuradas.
- Evite el contacto prolongado de los tubos calentados con la piel del paciente.
- Realice una prueba de presión y fugas en el sistema de respiración y verifique que no se hayan producido oclusiones, antes de conectar el dispositivo a un paciente.
- Utilice agua estéril para inhalación según la USP o equivalente para la humidificación. NO agregue otras sustancias al agua.
- Vigile y drene de forma regular la acumulación de condensación en el circuito.
- Antes del uso, compruebe que todas las conexiones estén bien apretadas.
- Compruebe que el cable calefactor esté distribuido uniformemente a lo largo del circuito y que no esté doblado ni enroscado.
- Los tubos calentados deben mantenerse fuera del contacto directo con la piel del paciente. A caudales inferiores a 0,8 L/min, la temperatura de la superficie puede alcanzar los 50 °C.

NOTAS

- Para utilizar bajo la supervisión de personal médico cualificado.
- Deseche el producto según el protocolo pertinente del hospital. Durante la eliminación, el usuario podría quedar expuesto a fluidos del tracto respiratorio.
- La organización responsable será la encargada de asegurar la compatibilidad del humidificador y de todas las piezas y accesorios utilizados para conectarlo al paciente y a otros equipos antes del uso.

German ^(de)

RT125	BEATUNGSSCHLAUCH FÜR SÄUGLINGE (>4 L/MIN), EINFACH BEHEIZT
RT126	BEATUNGSSCHLAUCH FÜR SÄUGLINGE (0,3 BIS 4 L/MIN), EINFACH BEHEIZT
RT130	BEATUNGSSCHLAUCH FÜR SÄUGLINGE (0,3 BIS 4 L/MIN), EINFACH BEHEIZT
RT131	BEATUNGSSCHLAUCH FÜR SÄUGLINGE (>4 L/MIN), EINFACH BEHEIZT
RT225	BEATUNGSSCHLAUCH FÜR SÄUGLINGE (4 L/MIN), EINFACH BEHEIZT MIT SELBSTBEFÜLLENDER KAMMER MR290
RT226	BEATUNGSSCHLAUCH FÜR SÄUGLINGE (0,3 BIS 4 L/MIN), EINFACH BEHEIZT MIT SELBSTBEFÜLLENDER KAMMER MR290

Zur Verabreichung von Atemgasen.

TECHNISCHE DATEN

RT131, RT125, RT225:	Kompatibel mit Fisher & Paykel Healthcare MR810 und MR850 Atemgasbefeuchtern. Dräger Babylog: Geeignet für Durchflussraten von <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Mit MR850 Atemgasbefeuchter kompatibel 810 NICHT mit einem MR810 Atemgasbefeuchter verwenden.

Siehe Bedienungsanleitung des Atemgasbefeuchters.

INTERFACE-ANSCHLÜSSE	ISO 5356-1 Konische Konnektoren
KOMPRIMIERBARES VOLUMEN	830 mL
COMPLIANCE BEI 60 cmH₂O	
Ohne Zubehör	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Mit Zubehör	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O
	(einschließlich 0,02 mL/cmH ₂ O Messunsicherheit)

RESISTANCE TO FLOW BEI 2,5 L/min	
Ohne Zubehör	
Inspirationsseite (Inspirationsanschluss):	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Expirationsseite (Expirationsanschluss):	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Mit Zubehör	
Expirationsseite (Expirationsanschluss):	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
	(einschließlich 0,03 cmH ₂ O Messunsicherheit)

MAXIMALER BETRIEBSDRUCK	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Siehe Gebrauchsanweisung der Kammer
RT225, RT226:	8 kPa
LÄNGE DES BEATUNGSSCHLAUCHS	
Inspiration:	1,6 m
Expiration:	1,6 m
MINIMALER INNENDURCHMESSER DES SCHLAUCHS	10,2 mm
GASLECKAGE BEI 60 cmH₂O	<30 mL/min
TIDALVOLUMEN	<185 mL

GESAMTLEISTUNG BEI 20 °C BIS 26 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR		
	INVASIVER MODUS	
	RT125, RT131, RT225:	RT126, RT130, RT226:
Befeuchtungsleistung	>33 mg/L	>33 mg/L
Flussrate	4–15 L/min	0,8–6 L/min

TYPISCHE LEISTUNG BEI 23 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR		
	INVASIVER MODUS RT126, RT130, RT226:	
Befeuchtungsleistung	>33 mg/L	
Flussrate	0,3–6 L/min	

SYMBOLERLÄUTERUNGEN

	Nicht korrekter Wasserstand, Kammer austauschen	Rx only	Verschreibungs-pflichtig
	Korrekter Wasserstand in der Kammer	CE 0123	CE-Kennzeichnung 93/42/EWG
	Bedienungs-anleitung beachten		Herstellungsdatum
	Anwendungsteil vom Typ BF		Hersteller
	Ohne Phthalate hergestellt		Verwendbar bis
	Ohne Naturkautschuklatex hergestellt		Maximale Anwendungsdauer: 7 Tage
	Zum Einmalgebrauch		Transport- und Lagertemperaturbegrenzung

	Chargen-bezeichnung		Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union
	Artikelnummer		Vorsicht-/Gebrauchs-anweisung beachten

WARNHINWEISE, VORSICHTSHINWEISE UND HINWEISE

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt NICHT wiederverwenden. Eine Wiederverwendung kann zur Übertragung infektiöser Agenzien, zur Unterbrechung der Therapie, zu schweren Schädigungen oder zum Tod führen.
- Die Verwendung von Beatmungsschlauchsystemen, Kammern, Zubehör oder Kombinationen, die nicht von Fisher & Paykel Healthcare zugelassen sind, kann zu einer verschlechterten Leistung des Befeuchtungssystems, zu einer Fehlfunktionen des Beatmungsgeräts und zu Verletzungen von Patienten/Benutzern führen.
- Der Patient muss jederzeit angemessen überwacht werden (z. B. Sauerstoffsättigung). Wird der Patient nicht überwacht (z. B. im Falle einer Unterbrechung des Gasflusses) kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.
- Die Heizplatte und die Kammerbasis NICHT berühren. Oberflächen können heißer als 85 °C werden. Eine Nichtbeachtung kann zu Hautverbrennungen führen.

Eine Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen oder die Sicherheit gefährden (einschließlich potenzieller schwerer Verletzungen):

- Wenn ein Atemgasbefeuchter neben einem Patienten aufgestellt wird, ist darauf zu achten, dass der Atemgasbefeuchter immer tiefer als der Patient positioniert wird.
- NICHT über die maximale Anwendungsdauer von 7 Tagen hinaus verwenden.
- KEINE Gegenstände wie Decken, Handtücher oder Betttücher auf das Schlauchsystem legen.
- Den Schlauch NICHT ziehen bzw. quetschen.
- Dieses Produkt NICHT einweichen, waschen oder sterilisieren. Kontakt mit Chemikalien, Reinigungsmitteln oder Handdesinfektionsmitteln vermeiden.
- Die Kammer NICHT verwenden, wenn der Wasserstand über die Höchstmarkierung ansteigt.
- Die Kammer NICHT verwenden, wenn die Dichtungen beim Empfang nicht intakt sind oder wenn sie fallen gelassen wurde.
- Die Kammer NICHT bei einem Winkel von über 10° in Betrieb nehmen.
- Die Wasserquelle NICHT anstechen, bevor die blauen Kappen entfernt wurden. Sollte der Primärschwimmer ausfallen, kann es zu Spritzern in das Schlauchsystem kommen, wenn die Kammer mit mehr als 80 L/min betrieben wird.
- Beatmungssets vor der Verwendung visuell auf Schäden (z. B. gequetschter Schlauch oder gebrochener Anschluss) inspizieren und im Schadensfall ersetzen.
- Die Wasserquelle muss mindestens 50 cm höher als die Kammer sein.
- Beatmungsschläuche mit Heizdraht NICHT ohne Gasflow verwenden. Bei Unterbrechung des Gasflows den Atemgasbefeuchter ausschalten.
- Sicherstellen, dass die Wasserzufuhr mit der Kammer verbunden ist und die Kammer Wasser enthält.
- Die Kammer NICHT mit Wasser befüllen, das wärmer als 37 °C ist.
- Sicherstellen, dass die Alarme des Beatmungsgeräts oder der Flowquelle entsprechend eingestellt sind, bevor das Beatmungsgerät an den Patienten angeschlossen wird.
- Längeren Kontakt der beheizten Schläuche mit der Haut des Patienten vermeiden.
- Druck- und Leckagetest des Atmungssystems durchführen und auf Okklusionen überprüfen, bevor ein Patient angeschlossen wird.
- Zur Inhalation steriles Wasser nach USP oder Gleichwertiges zur Befeuchtung verwenden. Dem Wasser KEINE anderen Substanzen zugeben.
- Das Schlauchsystem regelmäßig auf Kondensatbildung kontrollieren und das Kondensat ableiten.
- Vor dem Gebrauch alle Anschlüsse auf festen Sitz überprüfen.
- Überprüfen, ob der Heizdraht gleichmäßig am Schlauchsystem entlang verläuft und nicht gebündelt oder geknickt ist.
- Beheizte Schläuche dürfen keinen direkten Kontakt mit der Haut des Patienten haben. Bei einer Flussrate unter 0,8 L/min kann die Oberflächentemperatur 50 °C erreichen.

ANMERKUNGEN

- Unter der Aufsicht von geschultem medizinischem Personal zu verwenden.
- Die Entsorgung des Produkts muss in Übereinstimmung mit den Klinikrichtlinien erfolgen. Der Benutzer kann bei der Entsorgung in Kontakt mit Flüssigkeiten aus den Atemwegen kommen.
- Die verantwortliche Organisation muss vor der Verwendung sicherstellen, dass der Atemgasbefeuchter und alle Teile und Zubehörkomponenten, die zum Anschluss an den Patienten und andere Geräte verwendet werden, kompatibel sind.

Italian ^(it)

RT125	CIRCUITO PER VENTILAZIONE NEONATALE (>4 L/MIN) SINGOLO RISCALDATO
RT126	CIRCUITO PER VENTILAZIONE NEONATALE (DA 0,3 A 4 L/MIN) SINGOLO RISCALDATO
RT130	CIRCUITO PER VENTILAZIONE NEONATALE (DA 0,3 A 4 L/MIN) SINGOLO RISCALDATO
RT131	CIRCUITO PER VENTILAZIONE NEONATALE (>4 L/MIN) SINGOLO RISCALDATO
RT225	CIRCUITO PER VENTILAZIONE NEONATALE (>4 L/MIN) SINGOLO RISCALDATO CON CAMERA DI UMIDIFICAZIONE A RIEMPIMENTO AUTOMATICO MR290
RT226	CIRCUITO PER VENTILAZIONE NEONATALE (DA 0,3 A 4 L/MIN) SINGOLO RISCALDATO CON CAMERA DI UMIDIFICAZIONE A RIEMPIMENTO AUTOMATICO MR290

Per l'erogazione di gas respiratori.

SPECIFICHE TECNICHE

RT131, RT125, RT225	Compatibili con umidificatori Fisher & Paykel Healthcare MR810 e MR850. Dräger Babylog: adatto a flussi <25 L/min.
RT130, RT126, RT226	Compatibili solo con l'umidificatore MR850. 810

Fare riferimento alle istruzioni per l'utente dell'umidificatore.

COLLEGAMENTI INTERFACCIA	Connettori conici ISO 5356-1
VOLUME COMPRIMIBILE	830 mL
COMPLIANCE A 60 cmH₂O	
Senza accessori	1,4 ±0,09 mL/cmH ₂ O
Con accessori	1,4 ±0,07 mL/cmH ₂ O
	(include un'incertezza di misurazione pari a 0,02 mL/cmH ₂ O)

RESISTENZA AL FLUSSO A 2,5 L/min	
Senza accessori	
Tratto inspiratorio:	0,09 ±0,04 cmH ₂ O
Tratto espiratorio:	0,04 ±0,04 cmH ₂ O
Con accessori	
Tratto espiratorio:	0,04 ±0,04 cmH ₂ O
	(include un'incertezza di misurazione pari a 0,03 cmH ₂ O)

PRESSIONE OPERATIVA MASSIMA	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Fare riferimento alle istruzioni per l'uso della camera di umidificazione
RT225, RT226:	8 kPa

LUNGHEZZA DEL CIRCUITO RESPIRATORIO	
Inspiratorio:	1,6 m
Espiratorio:	1,6 m
DIAMETRO INTERNO MINIMO DEL TUBO	10,2 mm
PERDITA DI GAS A 60 cmH₂O	<30 mL/min
VOLUME CORRENTE	<185 mL

PRESTAZIONI COMPLESSIVE A TEMPERATURA AMBIENTE DA 20 °C A 26 °C		
	MODALITÀ INVASIVA	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Umidificazione in uscita	>33 mg/L	>33 mg/L
Flusso	4–15 L/min	0,8–6 L/min

PRESTAZIONI TIPICHE A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DI 23 °C		
	MODALITÀ INVASIVA RT126, RT130, RT226	
Umidificazione in uscita	>33 mg/L	
Flusso	0,3–6 L/min	

DEFINIZIONI DEI SIMBOLI

	Livello d'acqua non corretto, sostituire la camera di umidificazione	Rx only	Solo su prescrizione
	Livello d'acqua corretto nella camera di umidificazione	CE 0123	Marchio CE 93/42/CEE
	Consultare le Istruzioni per l'uso		Data di produzione
	Parte applicata di tipo BF		Produttore
	Non realizzato con ftalati		Data di scadenza
	Non realizzato con lattice di gomma naturale		Utilizzo massimo di 7 giorni

	Monouso		Limiti di temperatura di trasporto e stoccaggio
	Numero di lotto		Rappresentante autorizzato nell'Unione Europea
	Numero di riferimento		Attenzione/ Consultare le Istruzioni per l'uso

AVVERTENZE, PRECAUZIONI E NOTE

AVVERTENZE

- NON riutilizzare questo prodotto. Il riutilizzo potrebbe provocare la trasmissione di sostanze infettive, l'interruzione del trattamento, gravi lesioni o il decesso.
- L'uso di circuiti respiratori, camere di umidificazione, accessori o la combinazione di questi articoli non approvati da Fisher & Paykel Healthcare può causare prestazioni scarse del sistema di umidificazione, malfunzionamento del ventilatore e lesioni al paziente/utente.
- È necessario effettuare un adeguato monitoraggio costante del paziente (ad es. saturazione di ossigeno). Il mancato monitoraggio del paziente (ad es. in caso di interruzione del flusso di gas) può causare gravi lesioni o il decesso.
- NON toccare la piastra riscaldante o la base della camera di umidificazione. Le superfici possono avere una temperatura superiore a 85 °C. La mancata osservanza può causare ustioni.

Il mancato rispetto di una delle seguenti avvertenze può compromettere le prestazioni del dispositivo o la sicurezza (e causare potenzialmente gravi lesioni):

- Quando si monta un umidificatore a fianco di un paziente, assicurarsi che l'umidificatore sia sempre posizionato più in basso rispetto al paziente.
- NON utilizzare oltre la durata di utilizzo massima di 7 giorni.
- NON coprire il circuito con materiali quali coperte, asciugamani o lenzuola del letto.
- NON tirare né schiacciare il tubo.
- NON immergere, lavare o sterilizzare questo prodotto. Evitare il contatto con sostanze chimiche, detergenti o disinfettanti per le mani.
- NON utilizzare la camera di umidificazione se il livello dell'acqua supera la linea di limite massimo di livello.
- NON utilizzare la camera di umidificazione se le guarnizioni non sono intatte al momento della ricezione o se la camera di umidificazione è caduta.
- NON utilizzare la camera di umidificazione con un angolo superiore a 10°.
- NON forare il contenitore dell'acqua fino a quando i tappi blu di protezione non vengono rimossi. Nel caso di mancato funzionamento del primo galleggiante, possono verificarsi spruzzi d'acqua nel circuito se la camera di umidificazione viene azionata con oltre 80 L/min.
- Verificare visivamente l'eventuale presenza di danni nel circuito respiratorio (ad es. tubo schiacciato o connettori crepati) prima dell'uso e sostituire se danneggiato.
- Il contenitore dell'acqua deve essere almeno 50 cm più in alto della camera di umidificazione.
- NON utilizzare i circuiti respiratori termoregolati senza flusso di gas. Se il flusso di gas è interrotto, spegnere l'umidificatore.
- Assicurarsi che l'alimentazione dell'acqua sia collegata alla camera di umidificazione e che la camera sia riempita con acqua.
- NON riempire la camera di umidificazione con acqua ad una temperatura superiore a 37 °C.
- Prima di collegare il circuito respiratorio al paziente, verificare che siano impostati gli allarmi ventilatore o sorgente di flusso appropriati.
- Evitare il contatto prolungato dei tubi riscaldati con la pelle del paziente.
- Eseguire un test di pressione e perdite sul sistema di respirazione e controllare l'eventuale presenza di occlusioni prima del collegamento ad un paziente.
- Usare acqua sterile USP per inalazione o equivalente per umidificazione. NON aggiungere altre sostanze all'acqua.
- Monitorare regolarmente la presenza di condensa accumulata e rimuoverla dal circuito.
- Controllare che tutti i collegamenti siano ben saldi prima dell'uso.
- Controllare che il filo del riscaldatore sia distribuito uniformemente lungo il circuito e che non sia piegato o schiacciato.
- Non lasciare i tubi riscaldati a contatto diretto con la cute del paziente. Con un flusso inferiore a 0,8 L/min, la temperatura della superficie può raggiungere i 50 °C.

NOTE

- Il dispositivo deve essere utilizzato sotto la supervisione del personale medico qualificato.
- Smaltire il prodotto conformemente al protocollo ospedaliero appropriato. Durante lo smaltimento, l'utente può essere esposto a fluidi del tratto respiratorio.
- L'organo di competenza è responsabile della compatibilità dell'umidificatore e di tutte le parti ed accessori usati per il collegamento al paziente e ad altre apparecchiature prima dell'uso.

Dutch ^(nl)

RT125	BEADEMINGSCIRCUIT VOOR ZUIGELINGEN (>4 L/MIN) ENKEL VERWARMD
RT126	BEADEMINGSCIRCUIT VOOR ZUIGELINGEN (0,3 TOT 4 L/MIN) ENKEL VERWARMD
RT130	BEADEMINGSCIRCUIT VOOR ZUIGELINGEN (0,3 TOT 4 L/MIN) ENKEL VERWARMD
RT131	BEADEMINGSCIRCUIT VOOR ZUIGELINGEN (>4 L/MIN) ENKEL VERWARMD
RT225	BEADEMINGSCIRCUIT VOOR ZUIGELINGEN (>4 L/MIN) ENKEL VERWARMD MET MR290 ZELFVULLENDE KAMER
RT226	BEADEMINGSCIRCUIT VOOR ZUIGELINGEN (0,3 TOT 4 L/MIN) ENKEL VERWARMD MET MR290 ZELFVULLENDE KAMER

Voor de toediening van beademingsgassen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RT131, RT125, RT225:	Compatibel met Fisher & Paykel Healthcare MR810- en MR850-bevochtigers. Dräger Babylog: Geschikt voor flows <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Alleen compatibel met MR850-bevochtiger. 810

Raadpleeg de gebruikersinstructies bij de bevochtiger.

INTERFACE-AANSLUITINGEN	ISO 5356-1 conische connectoren
SAMENDRUKBAAR VOLUME	830 mL
OVEREENSTEMMING BIJ 60 cmH₂O	
Zonder accessoires	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Met accessoires	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O
	(inclusief 0,02 mL/cmH ₂ O meetonzekerheid)

FLOWWEERSTAND BIJ 2,5 L/min	
Zonder accessoires	
Inademingsslang:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Uitademingsslang:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Met accessoires	
Uitademingsslang:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
	(inclusief 0,03 cmH ₂ O meetonzekerheid)

MAXIMALE BEDRIJFSDRUK	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de kamer
RT225, RT226:	8 kPa
LENGTE BEADEMINGSSLANG	
Inademingsslang:	1,6 m
Uitademingsslang:	1,6 m
MINIMALE BINNENDIAMETER SLANG	10,2 mm
GASLEKKAGE BIJ 60 cmH₂O	<30 mL/min
TEUGVOLUME	<185 mL

ALGEMENE PRESTATIES BIJ EEN OMGEVINGSTEMPERATUUR VAN 20 °C TOT EN MET 26 °C		
	INVASIEVE MODUS	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Bevochtigings-output	>33 mg/L	>33 mg/L
Flowsnelheid	4 - 15 L/min	0,8 - 6 L/min

TYPISCHE PRESTATIES BIJ EEN OMGEVINGSTEMPERATUUR VAN 23 °C		
	INVASIEVE MODUS RT126, RT130, RT226	
Bevochtigings-output	>33 mg/L	
Flowsnelheid	0,3 - 6 L/min	

BETEKENIS VAN SYMBOLEN

	Onjuist waterniveau, vervang kamer	Rx only	Alleen op voorschrift
	Juiste waterniveau in de kamer	CE 0123	CE-Markering 93/42/EEG
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing		Fabricagedatum
	Type BF toegepast onderdeel		Fabrikant
	Niet vervaardigd met ftalaten		Uiterste gebruiksdatum
	Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex		7 dagen maximaal gebruik
	Voor eenmalig gebruik		Limieten opslag- en vervoers-temperatuur

	Artikelnummer		Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Unie
	Referentienummer		Waarschuwing/ Raadpleeg de gebruiks-aanwijzing

WAARSCHUWINGEN, AANDACHTSPUNTEN EN OPMERKINGEN

WAARSCHUWINGEN

- Dit product mag NIET worden hergebruikt. Hergebruik kan resulteren in overdracht van besmettelijke stoffen, onderbreking van de behandeling, ernstig letsel of overlijden.
- Het gebruik van (combinaties van) beademingscircuits, -kamers of -accessoires die niet zijn goedgekeurd door Fisher & Paykel Healthcare kan leiden tot slechte bevochtigingsprestaties van het systeem, een onjuiste werking van het beademingstoestel of letsel van de patiënt/gebruiker.
- Patiënten moeten te allen tijde op geschikte wijze worden bewaakt (bijv. zuurstofsaturatie). Het niet monitoren van de patiënt (bijv. als er sprake is van een onderbreking in de gasflow) kan resulteren in ernstig letsel of overlijden.
- Raak de verwarmingsplaat of kamerbodem NIET aan. Oppervlakken kunnen warmer worden dan 85 °C. Het niet naleven hiervan kan brandwonden veroorzaken.

Als de volgende waarschuwingen worden genegeerd, kan de werking van het apparaat worden aangetast of kan de veiligheid in gevaar komen (met mogelijk ernstig letsel tot gevolg):

- Als u een bevochtiger naast een patiënt bevestigt, dient de bevochtiger altijd lager dan de patiënt te worden geplaatst.
- NIET gebruiken na de maximale gebruiksduur van 7 dagen.
- Bedenk het circuit NIET met materialen zoals dekens, handdoeken of beddengoed.
- De slang NIET uitrekken of erin knijpen.
- Week, was of steriliseer dit product NIET. Vermijd contact met chemische stoffen, schoonmaakmiddelen en handontsmettingsmiddelen.
- Gebruik de kamer NIET als het waterniveau boven het aangegeven maximale waterniveau stijgt.
- Gebruik de kamer NIET als de afichtingen bij ontvangst niet intact zijn of als de kamer op de grond is gevallen.
- Gebruik de kamer NIET onder een hoek van meer dan 10°.
- Prik de waterbron NIET aan voordat de blauwe kapjes zijn verwijderd. Als de primaire vliet niet werkt, kan er water in het circuit spatten als de kamer met een hogere snelheid dan 80 L/min wordt gebruikt.
- Inspecteer de beademingsset visueel vóór gebruik op schade (bijvoorbeeld een platte slang of een gescheurde connector) en vervang deze bij beschadiging.
- De waterbron moet ten minste 50 cm hoger dan de kamer worden geplaatst.
- Gebruik beademingscircuits met verwarmingsdraad NIET wanneer er geen gasflow is. Zet de bevochtiger uit als de gasflow wordt onderbroken.
- Zorg dat de watertoevoer op de kamer is aangesloten en dat de kamer met water is gevuld.
- Vul de kamer NIET met water warmer dan 37 °C.
- Zorg ervoor dat het juiste alarm op het beademingstoestel of flowbron is ingesteld voordat de beademingsset op de patiënt wordt aangesloten.
- Voorkom langdurig contact van de verwarmde slangen met de huid van de patiënt.
- Voer een druk- en lekkagetest uit op het beademingssysteem en controleer op afsluitingen alvorens het aan te sluiten op een patiënt.
- Gebruik steriel water van USP-kwaliteit voor inademing of een vergelijkbaar product. GEEN andere stoffen aan het water toevoegen.
- Controleer regelmatig de opeenhoping van condens in het circuit en voer deze af.
- Controleer vóór gebruik of alle verbindingen goed vastzitten.
- Controleer of de verwarmingsdraad gelijkmatig door het circuit loopt en niet ergens is samengedrukt of geknikt.
- Verwarmde slangen mogen niet direct in contact met de huid van de patiënt komen. Bij flowsnel

Portuguese ^(pt)

- RT125 CIRCUITO DE VENTILADOR SIMPLES AQUECIDO PARA BEBÉS (>4 L/MIN)
- RT126 CIRCUITO DE VENTILADOR SIMPLES AQUECIDO PARA BEBÉS (0,3 A 4 L/MIN)
- RT130 CIRCUITO DE VENTILADOR SIMPLES AQUECIDO PARA BEBÉS (0,3 A 4 L/MIN)
- RT131 CIRCUITO DE VENTILADOR SIMPLES AQUECIDO PARA BEBÉS (>4 L/MIN)
- RT225 CIRCUITO DE VENTILADOR SIMPLES AQUECIDO PARA BEBÉS (>4 L/MIN) COM CÂMARA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA MR290
- RT226 CIRCUITO DE VENTILADOR SIMPLES AQUECIDO PARA BEBÉS (0,3 A 4 L/MIN) COM CÂMARA DE ALIMENTAÇÃO MR290

Para a administração de gases respiratórios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RT131, RT125, RT225:	Compatível com os humidificadores MR810 e MR850 da Fisher & Paykel Healthcare. Drager Babylog: Adequado para fluxos <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Compatível apenas com o humidificador MR850. NÃO utilize com o humidificador MR810.

Consulte as instruções de utilização do humidificador.

LIGAÇÕES DE INTERFACE	Conectores cónicos ISO 5356-1 830 mL
VOLUME COMPRESSÍVEL COMPLIANCE A 60 cmH₂O	
Sem acessórios	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Com acessórios	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O (incluindo incerteza de medição de 0,02 mL/cmH ₂ O)

RESISTÊNCIA AO FLUXO A 2,5 L/min	
Sem acessórios	
Ramo inspiratório:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Ramo expiratório:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Com acessórios	
Ramo expiratório:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O (incluindo incerteza de medição de 0,03 cmH ₂ O)

PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Consulte as instruções de utilização da câmara
RT225, RT226:	8 kPa

COMPRIMENTO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO	
Inspiratório:	1,6 m
Expiratório:	1,6 m
DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DO CIRCUITO	10,2 mm
FUGA DE GÁS A 60 cmH₂O	<30 mL/min
VOLUME CORRENTE	<185 mL

DESEMPENHO GERAL À TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20 °C E 26 °C		
	MODO INVASIVO	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Saída de humidificação	>33 mg/L	>33 mg/L
Taxa de fluxo	4 – 15 L/min	0,8 – 6 L/min

DESEMPENHO TÍPICO A TEMPERATURA AMBIENTE DE 23 °C	
	MODO INVASIVO RT126, RT130, RT226
	>33 mg/L
Taxa de fluxo	0,3 – 6 L/min

DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS

	Nível de água incorreto, substitua a câmara	Rx only	Sujeito a receita médica
	Nível de água correto na câmara	CE 0123	Marcacão CE 93/42/CEE
	Consultar as instruções de funcionamento		Data de fabrico
	Peça aplicada do Tipo BF		Fabricante
	Não é feito com ftalatos		Data de validade
	Não é feito com látex de borracha natural		Utilização por um período máximo de 7 dias
	Utilização única		Limites da temperatura de armazenamento e de transporte

Portuguese (Brazilian) ^(ptb)

- RT125 CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL (>4 L/MIN) COM RAMO INSPIRATÓRIO AQUECIDO
- RT126 CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL (DE 0,3 A 4 L/MIN) COM RAMO INSPIRATÓRIO AQUECIDO
- RT130 CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL (DE 0,3 A 4 L/MIN) COM RAMO INSPIRATÓRIO AQUECIDO
- RT131 CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL (>4 L/MIN) COM RAMO INSPIRATÓRIO AQUECIDO
- RT225 CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL (>4 L/MIN) COM RAMO INSPIRATÓRIO AQUECIDO COM CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO AUTOALIMENTÁVEL MR290
- RT226 CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL (DE 0,3 A 4 L/MIN) COM RAMO INSPIRATÓRIO AQUECIDO COM CÂMARA DE UMIDIFICAÇÃO AUTOALIMENTÁVEL MR290

Para o fornecimento de gases respiratórios.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RT131, RT125, RT225:	Compatível com os umidificadores MR810 e MR850 da Fisher & Paykel Healthcare. Drager Babylog: Adequado para fluxos <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Compatível apenas com umidificador MR850. NÃO use com o umidificador MR810.

Consulte as instruções de uso do umidificador.

CONEXÕES DO CIRCUITO	Conectores cónicos ISO 5356-1 830 mL
VOLUME COMPRESSÍVEL COMPLACÊNCIA A 60 cmH₂O	
Sem acessórios	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Com acessórios	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O (incluindo o valor de incerteza da medição de 0,02 mL/cmH ₂ O)

RESISTÊNCIA AO FLUXO A 2,5 L/min	
Sem acessórios	
Ramo inspiratório:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Ramo expiratório:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Com acessórios	
Ramo expiratório:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O (incluindo o valor de incerteza da medição de 0,03 cmH ₂ O)

PRESSÃO OPERACIONAL MÁXIMA	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Consulte as instruções de uso da câmara
RT225, RT226:	8 kPa

COMPRIMENTO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO	
Inspiratório:	1,6 m
Expiratório:	1,6 m
DIÂMETRO INTERNO MÍNIMO DO CIRCUITO	10,2 mm
VAZAMENTO DE GÁS A 60 cmH₂O	<30 mL/min
VOLUME CORRENTE	<185 mL

DESEMPENHO GERAL EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 20 °C E 26 °C		
	MODO INVASIVO	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Saída de umidificação	>33 mg/L	>33 mg/L
Taxa de fluxo	4 a 15 L/min	0,8 a 6 L/min

DESEMPENHO TÍPICO EM TEMPERATURA AMBIENTE A 23 °C	
	MODO INVASIVO RT126, RT130, RT226
	>33 mg/L
Taxa de fluxo	0,3 a 6 L/min

DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS

	Nível de água incorreto, substitua a câmara	Rx only	Somente com prescrição médica
	Nível de água correto na câmara	CE 0123	Marca CE 93/42/EEC
	Consulte as instruções de funcionamento		Data de fabricação
	Peça aplicada tipo BF		Fabricante
	Não fabricado com ftalatos		Data de validade
	Não fabricado com látex de borracha natural		Uso máximo por sete (7) dias
	Uso único		Limites de temperatura de transporte e armazenamento

	Número do lote		Representante autorizado da União Europeia
	Número de referência		Precauções/ consulte as instruções de utilização

ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES E NOTAS

ADVERTÊNCIAS

- NÃO reutilize este produto. A reutilização pode causar transmissão de substâncias infecciosas, interrupção de tratamento, lesão grave ou morte.
- A utilização de circuitos respiratórios, câmaras, acessórios ou combinações não aprovados pela Fisher & Paykel Healthcare poderá resultar em mau desempenho do sistema de umidificação, mau funcionamento do ventilador e danos ao paciente/usuário.
- O monitoramento adequado do paciente (por exemplo, saturação de oxigénio) deve ser feito em todos os momentos. A falha no monitoramento do paciente (por exemplo, em caso de interrupção do fluxo de gás) pode causar lesões graves ou morte.
- NÃO toque no prato de aquecimento ou na base da câmara. As superfícies podem exceder 85 °C. O não cumprimento dessa instrução pode resultar em queimadura na pele.

O não cumprimento dos seguintes avisos pode prejudicar o desempenho do dispositivo ou comprometer a segurança (podendo inclusive causar danos graves):

- Ao montar um umidificador próximo a um paciente, verifique se está sempre posicionado abaixo do paciente.
- NÃO use além do período máximo de utilização de sete (7) dias.
- NÃO cubra o circuito com materiais como cobertores, toalhas ou lençóis.
- NÃO estique ou comprima o circuito.
- NÃO molhe, lave ou esterilize este produto.
- Evite o contato com produtos químicos, produtos de limpeza ou desinfetantes para as mãos.
- NÃO use a câmara se o nível de água subir acima da linha de nível máximo de água.
- NÃO use a câmara se as vedações não estiverem intactas quando recebidas ou caso a câmara tenha sofrido queda.
- NÃO opere a câmara em um ângulo superior a 10°.
- NÃO perfure a fonte de água até que as tampas azuis tenham sido removidas. Se o flutuador primário falhar, poderá ocorrer respingo no circuito se a câmara estiver sendo operada com fluxo superior a 80 L/min.
- Inspeccione visualmente os sistemas respiratórios quanto a danos (por exemplo, um tubo amassado ou um conector trincado) antes do uso e substitua-os se estiverem danificados.
- A fonte de água deve estar localizada pelo menos 50 cm acima da câmara.
- NÃO use circuitos respiratórios aquecidos sem fluxo de gás. Se o fluxo de gás for interrompido, desligue o umidificador.
- Verifique se há um suprimento de água conectado à câmara e se a água está presente dentro da câmara.
- NÃO encha a câmara com água com temperatura superior a 37 °C.
- Certifique-se de que os alarmes adequados do ventilador ou da fonte de fluxo estejam definidos antes de conectar o sistema respiratório ao paciente.
- Evite o contato prolongado do circuito aquecido com a pele do paciente.
- Realize um teste de pressão e vazamento no sistema respiratório e verifique possíveis oclusões antes de conectar ao paciente.
- Use água estéril para inalação USP ou equivalente para umidificação. NÃO adicione outras substâncias à água.
- Monitore e drene regularmente o acúmulo de condensado no circuito.
- Antes de utilizar, verifique se todas as conexões estão firmes.
- Verifique se o fio aquecido está distribuído uniformemente ao longo do circuito e se não está enrolado ou dobrado.
- Evite o contato direto da pele do paciente com os circuitos aquecidos. Em taxas de fluxo abaixo de 0,8 L/min, a temperatura da superfície pode atingir 50 °C.

NOTAS

- Para uso sob a supervisão de profissional de saúde treinado.
- Descarte o produto de acordo com o protocolo hospitalar apropriado. O usuário pode ser exposto a fluidos do trato respiratório durante o descarte.
- A equipe responsável por materiais deve garantir a compatibilidade do umidificador e todas as peças e acessórios utilizados para conectar o paciente e outros equipamentos antes do uso.

Bulgarian ^(bg)

- RT125 ДИХАТЕЛЕН ШЛАНГ ЗА БЕБЕТА (>4 L/MIN) С ЕДИНИЧНО НАГРЯВАНЕ
- RT126 ДИХАТЕЛЕН ШЛАНГ ЗА БЕБЕТА (0,3 ДО 4 L/MIN) С ЕДИНИЧНО НАГРЯВАНЕ
- RT130 ДИХАТЕЛЕН ШЛАНГ ЗА БЕБЕТА (0,3 ДО 4 L/MIN) С ЕДИНИЧНО НАГРЯВАНЕ
- RT131 ДИХАТЕЛЕН ШЛАНГ ЗА БЕБЕТА (>4 L/MIN) С ЕДИНИЧНО НАГРЯВАНЕ
- RT225 ДИХАТЕЛЕН ШЛАНГ ЗА БЕБЕТА (>4 L/MIN) С ЕДИНИЧНО НАГРЯВАНЕ И КАМЕРА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ MR290
- RT226 ДИХАТЕЛЕН ШЛАНГ ЗА БЕБЕТА (0,3 ДО 4 L/MIN) С ЕДИНИЧНО НАГРЯВАНЕ И КАМЕРА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОДАВАНЕ MR290

За доставяне на газове за дишане.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

RT131, RT125, RT225:	Съвместим с овлажнителите MR810 и MR850 на Fisher & Paykel Healthcare. Drager Babylog: Подходящо за потоци <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Съвместим само с овлажнител MR850. НЕ използвайте с овлажнител MR810.

Направете справка с инструкциите за потребителя на овлажнителя.

ВРЪЗКИ С ИНТЕРФЕЙСА	Конични конектори ISO 5356-1 830 mL
СГЪСТИМ ОБЕМ КЪМПЛАЙЪНС ПРИ 60 cmH₂O	
Без принадлежности	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
С принадлежности	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O (включително 0,02 mL/cmH ₂ O несигурност на измерването)

СЪПРОТИВЛЕНИЕ КЪМ ПОТОКА ПРИ 2,5 L/min	
Без принадлежности	
Инспираторно рамо:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Експираторно рамо:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
С принадлежности	
Експираторно рамо:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O (включително 0,03 cmH ₂ O несигурност на измерването)

МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Вижте инструкциите за употреба на камерата
RT225, RT226:	8 kPa

ДЪЛЖИНА НА ДИХАТЕЛНАТА ТРЪБА	
Инспираторно:	1,6 m
Експираторно:	1,6 m
МИНИМАЛЕН ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР НА ТРЪБАТА	10,2 mm
УТЕЧКА НА ГАЗОВЕ ПРИ 60 cmH₂O	<30 mL/min
ДИХАТЕЛЕН ОБЕМ	<185 mL

ЦЯЛОСТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА ОТ 20 °C ДО 26 °C		
	ИНВАЗИВЕН РЕЖИМ	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Изходящо овлажняване	>33 mg/L	>33 mg/L
Скорост на потока	4 – 15 L/min	0,8 – 6 L/min

ОБИЧАЙНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ПРИ ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА 23 °C	
	ИНВАЗИВЕН РЕЖИМ RT126, RT130, RT226
	>33 mg/L
Изходящо овлажняване	>33 mg/L
Скорост на потока	0,3 – 6 L/min

ДЕФИНИЦИИ НА СИМВОЛИТЕ

	Неправилно ниво на водата, сменете камерата	Rx only	Само по предписание
	Правилно ниво на водата в камерата	CE 0123	CE маркировка 93/42/ЕИО
	Направете справка с инструкциите за работа		Дата на производство
	Приложена част тип BF		Производител
	Не съдържа фталати		Срок на годност
	Не съдържа латекс от естествен каучук		Максимална употреба 7 дни

	За еднократна употреба		Температурни ограничения за транспорт и съхранение
	Партиден номер		Упълномощен представител за Европейския съюз
	Референтен номер		Внимание/ Консултирайте се с инструкциите за употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ЗАБЕЛЕЖКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- НЕ употребявайте този продукт повторно. Повторната употреба може да доведе до предаване на инфекциозни субстанции, прекъсване на лечението, сериозно нараняване или смърт.
- Използването на дихателни шлангове, камери, принадлежности или комбинации, които не са одобрени от Fisher & Paykel Healthcare, може да доведе до лоша работа на системата за овлажняване, неизправност на респиратора и нараняване на пациента/потребителя.
- По всяко време трябва да бъде приложено подходящо наблюдение на пациентите (напр. сатурация на кислорода). Липсата на наблюдение на пациента (напр. в случай на прекъсване на газовия поток) може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- НЕ докосвайте нагревателната плоча или основата на камерата. Температурата на повърхностите може да надвишава 85 °C. Ако не спазвате това, може да се стигне до кожно изгаряне.
- Неспазването на което и да е от следните предупреждения може да повлияе работата на изделието или да компрометира безопасността (включително потенциално да причини сериозно нараняване):**
- Когато поставяте овлажнителя близо до пациента, се уверете, че овлажнителят винаги е позициониран по-ниско от пациента.
- НЕ използвайте след 7-дневния максимален период на употреба.
- НЕ покривайте кръга с материали, като одеяла, кърпи или чаршафи.
- НЕ разтягайте или изстисквайте тръбите.
- НЕ накусвайте, мийте или стерилизирайте този продукт. Избягвайте контакт с химикали, почистващи препарати или дезинфектанти за ръце.
- НЕ използвайте камерата, ако нивото на водата превиши линията за максимално ниво на водата.
- НЕ използвайте камерата, ако уплътненията не са цели при получаване или ако е била изпускана.
- НЕ работете с камерата при въгъл над 10°.
- НЕ повредете източника на вода, преди да бъдат премахнати всички сини капачки. Ако основният поплавък претърпи неизправност, може да настъпи пликсане в шланга, ако с камерата се работи при над 80 L/min.
- Преди употреба огледайте дихателните комплекти за повреда (напр. прегъната тръба, напукан конектор) и ако има такава, ги заменете.
- Източникът на вода трябва да се намира на поне 50 cm по-високо от камерата.
- НЕ използвайте дихателни шлангове с нагриваща жица без газов поток. Ако газовият поток прекъсне, изключете овлажнителя.
- Уверете се, че към камерата има свързан източник на вода и че в камерата има вода.
- НЕ пълнете камерата с вода с температура над 37 °C.
- Уверете се, че подходящите аларми за респиратора или източника на поток са зададени, преди да свържете комплекта шлангове към пациент.
- Избягвайте продължителен контакт на нагретите тръби с кожата на пациента.
- Направете тест за налягане и утечка на дихателната система и проверете за запушвания, преди да я свържете към пациент.
- Използвайте стерилна вода (USP) за инхалация или еквивалент за овлажняване. НЕ добавяйте други вещества към водата.
- Редовно наблюдавайте и източвайте натрупания в шланговете кондензат.
- Преди употреба проверете дали всички връзки са затегнати.
- Проверете дали нагриващата жица е равномерно разпределена по веригата и дали не е навита, или огъната.
- Нагретите тръби трябва да се пазят от пряк контакт с кожата на пациента. При дебит под 0,8 L/min температурата на повърхността може да достигне 50 °C.

ЗАБЕЛЕЖКИ

- За употреба под надзора на обучен медицински персонал.
- Изхвърлете продукта според съответния протокол на болницата. Потребителят може да бъде изложен на течности от дихателните пътища по време на изхвърляне.
- Отговорната организация носи отговорност за съвместимостта на овлажнителя, както и за свързаното на всички използвани части и принадлежности с пациента и с друго оборудване преди употребата.

RT125	VÄIKELAPSE ÜHEKORDSE SOOJENDUSEGA VENTILAATORIKONTUUR (>4 L/MIN)
RT126	VÄIKELAPSE ÜHEKORDSE SOOJENDUSEGA VENTILAATORIKONTUUR (0,3 KUNI 4 L/MIN)
RT130	VÄIKELAPSE ÜHEKORDSE SOOJENDUSEGA VENTILAATORIKONTUUR (0,3 KUNI 4 L/MIN)
RT131	VÄIKELAPSE ÜHEKORDSE SOOJENDUSEGA VENTILAATORIKONTUUR (>4 L/MIN)
RT225	VÄIKELAPSE ÜHEKORDSE SOOJENDUSEGA VENTILAATORIKONTUUR (>4 L/MIN) AUTOMAATTOITEKAMBRIGA MR290
RT226	VÄIKELAPSE ÜHEKORDSE SOOJENDUSEGA VENTILAATORIKONTUUR (0,3 KUNI 4 L/MIN) AUTOMAATTOITEKAMBRIGA MR290

Hingamisgaaside manustamiseks

RT131, RT125, RT225	Ühildub ettevõtte Fisher & Paykel Healthcare niisutitega MR810 ja MR850. Drager Babylog: sobib voolukiirusele <25 L/min.
RT130, RT126, RT226	Ühildub ainult niisutiga MR850. (810) ÄRGE kasutage koos niisutiga MR810.

Lugege niisuti kasutusjuhendit.	ISO 5356-1 koonilised liitmikud
LIIDESE ÜHENDUSED	
KOKKUSURUTAV MAHT	830 mL
ELASTNE DEFORMEERITAVUS 60 cmH₂O JUURES	
Tarvikuteta	1,4 ±0,09 mL/cmH ₂ O
Tarvikutega	1,4 ±0,07 mL/cmH ₂ O
	(sh 0,02 mL/cmH ₂ O mõõtemääramatus)

VOOLUTAKISTUS 2,5 L/min juures	
Tarvikuteta	
Sissehingamisharu	0,09 ±0,04 cmH ₂ O
Väljahingamisharu	0,04 ±0,04 cmH ₂ O
Tarvikutega	
Väljahingamisharu	0,04 ±0,04 cmH ₂ O
	(sh 0,03 cmH ₂ O mõõtemääramatus)

MAKSIMAALNE TÕÖRÕHK	
RT125, RT126, RT130, RT131	Lugege kambri kasutusjuhendit
RT225, RT226	8 kPa
HINGAMISVOOLIKU PIKKUS	
Inspiratoorne	1,6 m
Ekspiratoorne	1,6 m
VOOLIKU MINIMAALNE SISELÄBIMÕÖT	
GAASILEKE 60 cmH₂O JUURES	<30 mL/min
HINGAMISMAHT	<185 mL

ÜLDINE JÕUDLUS KESKKONNATEMPERATUURIL 20 °C KUNI 26 °C		
	INVASIIVNE REŽIIM	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Niisutusvõimsus	>33 mg/L	>33 mg/L
Voolukiirus	4–15 L/min	0,8–6 L/min

TAVALINE JÕUDLUS KESKKONNATEMPERATUURIL 23 °C		
	INVASIIVNE REŽIIM	
	RT126, RT130, RT226	
Niisutusvõimsus	>33 mg/L	
Voolukiirus	0,3–6 L/min	

SÜMBOLITE TÄHENDUSED

	Vale veetase, vahetage kambri välja	Rx only	Ainult retsepti alusel
	Õige veetase kambris	CE 0123	CE-märgis 93/42/EMÜ
	Lugege kasutusjuhendit		Tootmiskuupäev
	BF-tüüpi kontaktosa		Tootja
	Valmistamisel ei ole kasutatud ftlaate		Kõlblikkusaeg
	Valmistamisel ei ole kasutatud looduslikku kummilateksit		Maksimaalne kasutusaeg 7 päeva
	Ühekorrakasutus		Temperatuur-ripiirangud transportimisel ja hoiustamisel
	Partii number		Volitatud esindaja Euroopa Liidus

	Viitenumber		Ettevaatust! / Lugege kasutusjuhendit
--	-------------	--	---------------------------------------

HOIATUSED, ETTEVAATUSABINÕUD JA MÄRKUSED

HOIATUSED

- ÄRGE kasutage seda toodet korduvalt. Korduskasutus võib põhjustada nakkustekitajate ülekandumise, raviptseduauri katkemise, raskeid vigastusi või surma.
- Hingamiskontuuride, kambrite, tarvikute või nende kombinatsioonide, mida Fisher & Paykel Healthcare ei ole heaks kiitnud, kasutamine võib vähendada niisutussüsteemi jõudlust, põhjustada ventilaatori talitlushäire ja vigastada patsienti/kasutajat.
- Patsienti peab kogu aeg sobival viisil jälgima (nt hapnikuküllastuse suhtes). Patsiendi mittejälgimine (nt gaasivoolu katkemise korral) võib tekitada raskeid vigastusi või põhjustada surma.
- ÄRGE puudutage kütteplaati ega kambri alust. Pinnatemperatuur võib ületada 85 °C. Hoiatuse eiramine võib tekitada nahapõletusi.

Mis tahes järgnevate hoiatuste eiramine võib halvendada seadme toimivust või vähendada ohutust (sh tekitada raskeid vigastusi).

- Niisuti paigaldamisel patsiendi juurde veenduge, et niisuti paikneks alati patsiendist madalamal.
-  KASUTAGE maksimaalselt 7 päeva.
- ÄRGE katke kontuuri esemetega, nagu tekid, rätikud või voodipesu.
- ÄRGE venitage ega pigistage voolikuid.
- ÄRGE leotage, peske ega steriiliseerige seda toodet. Vältige kokkupuudet kemikaalide, puhastusvahendite või kätepuhastusvahenditega.
- ÄRGE kasutage kambrit, kui veetase tõuseb üle maksimaalse veetaseme joone.
- ÄRGE kasutage kambrit, kui tihendid ei ole kättesaamisel terved või kui seade on maha kukkunud.
- ÄRGE kasutage kambrit üle 10° nurga all.
- ÄRGE torgake veealikat läbi enne siniste korkide eemaldamist. Primaarse ujuki tõrke korral võib vedelik kontuuri pritsida, kui kambrit kasutatakse kiirusel üle 80 L/min.
- Enne kasutamist kontrollige hingamiskomplekte visuaalselt kahjustuste (nt muljutud vooliku või mõranenud liitmiku) suhtes ja kahjustuste korral vahetage välja.
- Veealikas peab paiknema vähemalt 50 cm kambrist kõrgemal.
- ÄRGE kasutage kütteaadiga hingamiskontuure ilma gaasivooluta. Gaasivoolu katkemisel lülitage niisuti välja.
- Veenduge, et kambriga oleks ühendatud veealikas ja et kambris oleks vett.
- ÄRGE täitke kambrit veega, mille temperatuur on üle 37 °C.
- Enne hingamiskomplekti patsiendiga ühendamist veenduge, et vajalikud ventilaatori või vooluliikla alarmid oleksid seadistatud.
- Vältige soojendatud voolikute pikaajalist kokkupuudet patsiendi nahaga.
- Enne patsiendiga ühendamist tehke hingamissüsteemi rõhu- ja lekkekatse ning kontrollige seda ummistuste suhtes.
- Kasutage niisutamiseks USP steriilset inhalatsioonivett või samavärsest. ÄRGE lisage vette muid aineid.
- Jälgige kontuuri regulaarselt kondensaadi kogunemise suhtes ja tühjendage vajaduse korral.
- Enne kasutamist veenduge, et kõik ühendused oleksid tihedad.
- Veenduge, et kütetraat oleks ühtlaselt üle kogu kontuuri jaotunud ega oleks puntras või keerdus.
- Vältida tuleb soojendatud voolikute otsest kokkupuudet patsiendi nahaga. Voolukiirusel alla 0,8 L/min võib pinnatemperatuur ulatuda 50 °C-ni.

MÄRKUSED

- Kasutamiseks väljaõppinud meditsiinitöötaja järelevalve all.
- Kõrvaldage toode haigla eeskirjade järgi. Kasutaja võib kõrvaldamise käigus puutuda kokku hingamisteedest pärinevate vedelikega.
- Vastutav organisatsioon vastutab selle eest, et enne kasutamist veendutaks niisuti ning kõikide osade ja tarvikute ühildumises, mida kasutatakse patsiendi ja teiste seadmete ühendamiseks.

RT125	VASTASYNTYNEEN VENTILAATTORILETKUSTO (>4 L/MIN), YKSITTÄINEN, LÄMMITETTY
RT126	VASTASYNTYNEEN VENTILAATTORILETKUSTO (0,3–4 L/MIN), YKSITTÄINEN, LÄMMITETTY
RT130	VASTASYNTYNEEN VENTILAATTORILETKUSTO (0,3–4 L/MIN), YKSITTÄINEN, LÄMMITETTY
RT131	VÄIKELAPSE ÜHEKORDSE VENTILAATTORILETKUSTO (>4 L/MIN), YKSITTÄINEN, LÄMMITETTY
RT225	VASTASYNTYNEEN VENTILAATTORILETKUSTO (>4 L/MIN), YKSITTÄINEN, LÄMMITETTY, SISÄLTÄÄ MR290-AUTOMAATTISÄILIÖN
RT226	VASTASYNTYNEEN VENTILAATTORILETKUSTO (0,3–4 L/MIN), YKSITTÄINEN, LÄMMITETTY, SISÄLTÄÄ MR290-AUTOMAATTISÄILIÖN

Hengityskaasujen antamiseen.

RT131, RT125, RT225:	Yhteensopiva Fisher & Paykel Healthcaren MR810- ja MR850-kostuttimien kanssa. Drager Babylog: soveltuu <25 L/min virtauksiin.
RT130, RT126, RT226:	Yhteensopiva vain MR850-kostuttimen kanssa. (810) EI SAA käyttää MR810-kostuttimen kanssa.

Katso lisätietoja kostuttimen käyttöohjeista.

LAITELITÄNNÄT	ISO 5356-1 -kartio liittimet
TILAVUUS KOKOON PURISTETTUNA	830 mL
KOMPLIANSSSI PAINEESSA 60 cmH₂O	
Ilman lisävarusteita	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Lisävarusteiden kanssa	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O
	(mittausepävarmuus 0,02 mL/cmH ₂ O mukaan laskettuna)

VIRTAUSVASTUS 2,5 L/min	
Ilman lisävarusteita	
Sisäänhengitysliitin:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Uloshengitysliitin:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Lisävarusteiden kanssa	
Uloshengitysliitin:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
	(mukaan lukien mittausepävarmuus 0,03 cmH ₂ O)

SUURIN KÄYTTÖPAINE	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Katso lisätietoja säiliön käyttöohjeesta
	8 kPa

RT225, RT226:	
HENGITYSLETKUN PITUUS	
Sisäänhengitys:	1,6 m
Uloshengitys:	1,6 m
LETKUN PIENIN SISÄHALKAISIIJA	10,2 mm
KAASUN VUOTO 60 cmH₂O:SSA	<30 mL/min
KERTAHENGITYSTILAVUUS	<185 mL

YLEINEN SUORITUSKYKY YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILASSA 20–26 °C		
	INVASIIVINEN TILA	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Kosteutusteho	>33 mg/L	>33 mg/L
Virtausnopeus	4–15 L/min	0,8–6 L/min

YLEINEN SUORITUSKYKY YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILASSA 23 °C		
	INVASIIVINEN TILA	
	RT126, RT130, RT226	
Kosteutusteho	>33 mg/L	
Virtausnopeus	0,3–6 L/min	

SYMBOLIEN SELITYKSET

	Väärä vesimäärä, vaihda säiliö	Rx only	Vain reseptillä myytävä
	Vesi oikealla tasolla säiliössä	CE 0123	CE-merkintä 93/42/ETY
	Katso käyttöohjeet		Valmistuspäivä
	Tyypin BF potilaaseen liitettävä osa		Valmistaja
	Valmistuksessa ei ole käytetty ftlaatteja		Viimeinen käyttöpäivämäärä
	Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonku-milateksia		Enimmäiskäyttöaika 7 päivää
	Kertakäyttöinen		Kuljetuksen ja säilytyksen lämpötilarajoitukset
	Eränumero		Valtuutettu edustaja Euroopan unionin alueella

	Tuotenumero		Huomio / Katso käyttöohjeet
--	-------------	--	-----------------------------

VAROITUKSET, HUOMIOT JA HUOMAUTUKSET

VAROITUKSET

- Tätä tuotetta EI SAA käyttää uudelleen. Uudelleenkäyttö voi johtaa tartuntavaarallisten aineiden välittymiseen, hoidon keskeytymiseen, vakavaan vahinkoon tai hengenvaaraan.
- Muiden kuin Fisher & Paykel Healthcaren hyväksymien hengityslstkustojen, säiliöiden, lisävarusteiden tai näiden yhdistelmien käyttö voi johtaa heikkoon kostutusjärjestelmän suorituskykyyn tai ventilaattorin toimintahäiriöön ja aiheuttaa haittaa potilaalle/käyttäjälle.
- Potilasta (esim. happisaturaatiota) on valvottava asianmukaisesti koko ajan. Jos potilasta ei valvota (esim. ilman virtauksen keskeytyessä), voi seurata vakavaa vahinkoa tai kuolema.
- Lämmitinlevyynt tai säiliön pohjaan EI SAA koskea. Pintojen lämpötila voi olla yli 85 °C. Koskemisen seurauksena saattaa olla palovamma.

Mikäli seuraavia varoituksia ei noudateta, laitteen toiminta tai turvallisuus voi vaarantua (mistä voi mahdollisesti aiheutua vakavaa haittaa):

- Kun kiinnität kostutinta potilaan viereen, varmista, että kostutin on aina alempana kuin potilas.
-  Tuotetta EI SAA käyttää 7 vuorokautta pidempään.
- Letkuja EI SAA peittää esimerkiksi peitoilla, pyyhkeillä tai liinavaatteilla.
- Letkuja EI SAA venyttää tai puristella.
- Tätä tuotetta EI SAA liottaa, pestä tai steriloida. Vältä kosketusta kemikaalien, puhdistusaineiden tai käsidesien kanssa.
- Säiliötä EI SAA käyttää, jos veden pinta nousee yli maksimirajan.
- Säiliötä EI SAA käyttää, jos tiivisteet eivät ole ehjät tai jos se on pudotettu.
- Säiliötä EI SAA käyttää yli 10 asteen kaltevuuskuulmassa.
- Vesipussia EI SAA puhkaista ennen kuin siniset suojukset on poistettu. Jos pääuimuri lakkaa toimimasta, hengityslstkuihin saattaa roiskua vettä, jos säiliön virtausnopeus on yli 80 L/min.
- Tarkista hengityslstkustot ennen käyttöä vaurioiden varalta (esim. liitistynyt johto tai haljennut liitin) ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.
- Vesilähteen täytyy olla ainakin 50 cm säiliötä korkeammalla.
- Lämmitettyjä hengitysletkuja EI SAA käyttää ilman kaasuvirtausta. Jos virtaus keskeytyy, sammuta kostutin.
- Varmista, että säiliöön on liitetty vesiastia ja että säiliössä on vettä.
- ÄLÄ täytä säiliötä vedellä, jonka lämpötila ylittää 37 °C.
- Varmista, että soveltuvat ventilaattorin tai virtauslähteen hälytykset on asetettu ennen hengityslstkuston yhdistämistä potilaaseen.
- Vältä pitkäaikaista lämmitettyjen letkujen kosketusta potilaan ihoon.
- Suorita hengitysjärjestelmän paine- ja vuototesti ja tarkista järjestelmä tukkeutumien varalta ennen potilaaseen liittämistä.
- Käytä kosteuttamiseen steriiliä vettä (USP tai vastaava). ÄLÄ lisää veteen muita aineita.
- Seuraa letkustoon kertyvää tiivistynyttä vettä ja tyhjennä se säännöllisesti.
- Tarkista kaikkien liitosten tiiviys ennen käyttöä.
- Tarkista, että lämmittimen johdin jakautuu tasaisesti letkussa eikä ole kasassa tai mutkalla.
- Lämmitetyt letkut eivät saa koskettaa potilaan ihoa suoraan. Kun virtausnopeus on alle 0,8 L/min, pintalämpötila voi olla 50 °C.

HUOMAUTUKSET

- Tarkoitettu käyttöön vain koulutetun lääketieteellisen henkilöstön valvonnassa.
- Hävitä tuote sairaalan asianmukaisten käytäntöjen mukaisesti. Käyttäjä voi altistaa hengitystienesteille hävittämisen aikana.
- Vastuorganisaatio on vastuussa siitä, että se varmistaa ennen käyttöä kostuttimen ja kaikkien potilaaseen yhdistettävien osien ja lisävarusteiden sekä muiden laitteistojen yhteensopivuuden.

RT125	SKLOP VENTILATORA ZA NOVOROĐENČAD (>4 L/MIN) S JEDNIM GRIJANJEM
RT126	SKLOP VENTILATORA ZA NOVOROĐENČAD (0,3 DO 4 L/MIN) S JEDNIM GRIJANJEM
RT130	SKLOP VENTILATORA ZA NOVOROĐENČAD (0,3 DO 4 L/MIN) S JEDNIM GRIJANJEM
RT131	SKLOP VENTILATORA ZA NOVOROĐENČAD (>4 L/MIN) S JEDNIM GRIJANJEM
RT225	SKLOP VENTILATORA ZA NOVOROĐENČAD (>4 L/MIN) S JEDNIM GRIJANJEM S KOMOROM ZA AUTOMATSKO NAPAJANJE MR290
RT226	SKLOP VENTILATORA ZA NOVOROĐENČAD (0,3 DO 4 L/MIN) S JEDNIM GRIJANJEM S KOMOROM ZA AUTOMATSKO NAPAJANJE MR290

Za isporuku respiratornih plinova.

RT131, RT125, RT225:	Kompatibilan s ovlaživačima MR810 i MR850 tvrtke Fisher & Paykel Healthcare. Dräger Babylog: prikladan za protoke brzine <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Kompatibilno samo s ovlaživačem MR850. (810) NE primjenjujte s ovlaživačem MR810.

Pogledajte upute za uporabu ovlaživača.

PRIKLJUČCI SUČELJA	ISO 5356-1 stožasti prikljucci
VOLUMEN KOJI SE MOŽE STLAČITI	830 mL
SUKLADNOST PRI 60 cmH₂O	
Bez pomoćnog pribora	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
S pomoćnim priborom	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O
	(uključujući mjernu nesigurnost od 0,02 mL/cmH ₂ O)

OTPOR NA PROTOK PRI 2,5 L/min	
Bez pomoćnog pribora	
Udisajna cijev:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Izdisajna cijev:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
S pomoćnim priborom	
Izdisajna cijev:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
	(uključujući mjernu nesigurnost od 0,03 cmH ₂ O)

MAKSIMALNI RADNI TLAK	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Proučite upute za uporabu komore
	8 kPa
DULJINA CIJEVI ZA DISANJE	
Udisajna:	1,6 m
Izdisajna:	1,6 m
MINIMALNI UNUTRAŠNJI PROMJER CIJEVI	10,2 mm
CURENJE PLINA PRI 60 cmH₂O	<30 mL/min
IZDISAJNI VOLUMEN	<185 mL

OPĆENITA RADNA SVOJSTVA PRI SOBNOJ TEMPERATURI OD 20 °C DO 26 °C		
	INVAZIVNI NAČIN	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Izlazna vlažnost	>33 mg/L	>33 mg/L
Brzina protoka	4 – 15 L/min	0,8 – 6 L/min

TIPIČNA RADNA SVOJSTVA PRI SOBNOJ TEMPERATURI OD 23 °C		
	INVAZIVNI NAČIN	
	RT126, RT130, RT226	
Izlazna vlažnost	>33 mg/L	
Brzina protoka	0,3 – 6 L/min	

DEFINICIJE SIMBOLA

	Neispravna razina vode, zamijenite komoru	Rx only	Samo uz liječnički recept
	Ispravna razina vode u komori	CE 0123	CE oznaka 93/42/EEZ
	Proučite upute za rad		Datum proizvodnje
	Primijenjeni dio tipa BF		Proizvođač
	Nije proizvedeno od ftalata		Datum „upotrijebiti do“
	Nije proizvedeno od prirodnog gumenog lateksa		Maksimalna uporaba od 7 dana
	Samo za jednokratnu uporabu		Ograničenja temperature za prijevoz i skladištenje

	Broj serije		Ovlašteni predstavnik u Europskoj un
--	-------------	--	--------------------------------------

Hungarian (hu)

RT125	CSECSEMŐ LÉLEGEZTETŐKÖR (>4 L/PERC) EGYSZERES FÜTÉSSEL
RT126	CSECSEMŐ LÉLEGEZTETŐKÖR (0,3~4 L/PERC) EGYSZERES FÜTÉSSEL
RT130	CSECSEMŐ LÉLEGEZTETŐKÖR (0,3~4 L/PERC) EGYSZERES FÜTÉSSEL
RT131	CSECSEMŐ LÉLEGEZTETŐKÖR (>4 L/PERC) EGYSZERES FÜTÉSSEL
RT225	CSECSEMŐ LÉLEGEZTETŐKÖR (>4 L/PERC) EGYSZERES FÜTÉSSEL ÉS MR290 AUTOMATA ADAGOLÓKAMRÁVAL
RT226	CSECSEMŐ LÉLEGEZTETŐKÖR (0,3~4 L/PERC) EGYSZERES FÜTÉSSEL ÉS MR290 AUTOMATA ADAGOLÓKAMRÁVAL

Légzési gázok bevitelére szolgál.

MŰSZAKI ADATOK

RT131, RT125, RT225:	A Fisher & Paykel Healthcare MR810-es és MR850-es párástító készülékekkel kompatibilis. Dräger Babylog: 25 L/perc alatti áramlás esetén használható
RT130, RT126, RT226:	Csak MR850-es párástító készülékkel kompatibilis. 810 NE használja MR810-es párástító készülékkel.

Lásd a párástító készülék felhasználói utasításait.

INTERFÉSZKAPCSOLATOK	ISO 5356-1 kúpos csatlakozók 830 mL
ÖSSZENYOMHATÓ TÉRFOGAT COMPLIANCE 60 H₂Ocm-en	
Tartozékok nélkül	1,4 ± 0,09 mL/H ₂ Ocm
Tartozékokkal	1,4 ± 0,07 mL/H ₂ Ocm (beleszámolva a 0,02 mL/H ₂ Ocm-es mérési pontatlanságot)

ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁS 2,5 L/perc értéknel	
Tartozékok nélkül	
Belégzési ág:	0,09 ± 0,04 H ₂ Ocm
Kilégzési ág:	0,04 ± 0,04 H ₂ Ocm
Tartozékokkal	
Kilégzési ág:	0,04 ± 0,04 H ₂ Ocm (beleszámolva a 0,03 H ₂ Ocm-es mérési pontatlanságot)

MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Lásd a tartály használati utasítását 8 kPa
RT225, RT226:	
LÉGZŐKÖR HOSSZA	
Belégzési:	1,6 m
Kilégzési:	1,6 m
TÖMLŐ MINIMÁLIS BELSŐ ÁTMÉRŐJE	10,2 mm
GÁZSZIVÁRGÁS 60 H₂Ocm ÉRTÉKNÉL	<30 mL/perc
LÉGZÉSI TÉRFOGAT	<185 mL

ÁLTALÁNOS TELJESÍTMÉNY 20 °C ÉS 26 °C KÖZÖTTI KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETEN		
	INVAZÍV ÜZEMMÓD	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Párásító kimenet	>33 mg/L	>33 mg/L
Áramlási sebesség	4-15 L/perc	0,8-6 L/perc

ÁTLAGOS TELJESÍTMÉNY 23 °C-OS KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETEN		
	INVAZÍV ÜZEMMÓD	
	RT126, RT130, RT226	
Párásító kimenet	>33 mg/L	
Áramlási sebesség	0,3-6 L/perc	

SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE			
	Nem megfelelő vízszint, cserélje ki a tartályt	Rx only	Kizárólag orvosi rendelvényre!
	Megfelelő vízszint a tartályban	CE 0123	CE-jelölés 93/42/EGK
	Nézzzen utána a használati utasításban		Gyártás időpontja
	BF típusú alkalmazott alkatrész		Gyártó
	Ftalátot nem tartalmaz		Lejáratí dátum
	Természetes gumilátexet nem tartalmaz		Legfeljebb 7 napig használható
	Egyszer használatos		Szállítási és tárolási hőmérsékletkorlátok

LOT	Tételszám	EC REP	Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban
REF	Hivatkozási szám		Figyelem/Olvassa el a használati utasítást

FIGYELMEZTETÉSEK, ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

FIGYELMEZTETÉSEK

- NE használja fel többször ezt a terméket. Az ismételt felhasználás fertőző kórokozók átviteléhez, a kezelés megszakításához, súlyos sérüléshez vagy a beteg halálához vezethet.
- A Fisher & Paykel Healthcare által jóvá nem hagyott légzőkörök, kamrák, tartozékok használata vagy ezek kombinációinak alkalmazása a párástító rendszer elégtelen működéséhez, a lélegeztető meghibásodásához, valamint a beteg/felhasználó sérüléséhez vezethet.
- Mindig gondoskodjon a beteg megfelelő monitorozásáról (pl. oxigénszaturációról). A beteg monitorozásának elmaradása (pl. a gázáram megszakadása esetén) súlyos sérüléssel vagy halállal is végződhet.
- NE érjen a fűtőlaphoz és a tartály aljához. A felületek hőmérséklete meghaladhatja a 85 °C-ot. A figyelmeztetés be nem tartása égési sérüléshez vezethet.

Bármelyik alábbi figyelmeztetés be nem tartása ronthatja a készülék teljesítményét és biztonságát (ideértve az esetleges súlyos sérülések bekövetkeztét):

- Amikor a párástító készüléket elhelyezi a beteg mellé, ügyeljen arra, hogy mindig a beteg helyzeténél alacsonyabb helyen legyen a készülék.
- NE használja a 7 napos maximális felhasználási időn túl.
- NE takarja le a légzőkört takaróval, törölközővel vagy ágyneművel.
- NE nyújtsa a csővezetékét, és ne préseljen ki belőle semmit, ha eltömődik.
- NE áztassa, ne mossa le és ne sterilizálja ezt a terméket. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen vegyszerekkel, tisztítószerekkel vagy kézfertőtlenítővel.
- NE használja a tartályt, ha a vízszint a maximális vízszintet jelölő vonal fölé emelkedik.
- NE használja a tartályt, ha átvételkor azt észleli, hogy a szigetelések nem sérülésmentesek, valamint ha leejtették.
- NE használja a tartályt 10°-nál nagyobb dőlésszögben.
- NE szűrja át a vízforrást, amíg a kék kupakokat el nem távolította. Amennyiben az elsődleges úszó meghibásodik, a légzőkörbe folyadék kerülhet, ha a tartályt 80 L/perc felett működtetik.
- Használat előtt szabad szemmel ellenőrizze, hogy van-e sérülés a légzőkészleten (pl. megtört csővezeték vagy megrepedt csatlakozók), és ha igen, akkor cserélje le.
- A vízforrás legalább 50 cm-rel a tartály szintje felett kell, hogy legyen.
- NE használjon fűtőszálás légzőkört gázáram nélkül. Ha a gázáram megszakad, kapcsolja ki a párástító készüléket.
- Győződjön meg arról, hogy a tartályhoz csatlakoztatva van-e a vízellátás, és van-e víz a tartályban.
- SOHA NE töltsön a tartályba 37 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet.
- Mielőtt a légzőkört a beteghez csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a lélegeztetőhöz vagy a légforráshoz kapcsolódó riasztások megfelelően vannak beállítva.
- Ügyeljen rá, hogy a fűtött csövek tartósan ne érjenek a beteg bőréhez.
- A beteghez történő csatlakoztatás előtt végezzen nyomás- és szivárgástesztet a légzőrendszeren, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e elzáródások.
- Az Egyesült Államok Gyógyszerkönyve (USP) szerinti vagy azzal egyenértékű steril vizet használjon a párástításhoz. NE adjon semmilyen egyéb anyagot a vízhez.
- Rendszeresen ellenőrizze és csapolja le a légzőkörben kicsapódott folyadékok.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szorosan illeszkedik.
- Ellenőrizze, hogy a fűtőszál egyenletesen oszlik el a légzőkörben és nincs összecsomózódva vagy megtörve.
- A fűtött csövek nem kerülhetnek közvetlen érintkezésbe a beteg bőrével. 0,8 L/perc alatti áramlási sebesség esetén a felszini hőmérséklet elérheti az 50 °C-ot.

MEGJEGYZÉSEK

- Képzett egészségügyi szakemberek felügyelete mellett használható.
- A kórházi szabályzatnak megfelelően ártalmatlanítsa a terméket. A felhasználó légúti folyadékokkal érintkezhet az ártalmatlanítás során.
- A felelős szervezet felelőssége, hogy használatba vétel előtt a betegre csatolandó párástító készülék, illetve minden alkatrész és tartozék és egyéb berendezés kompatibilis legyen.

 Indonesian (id)

RT125	SIRKUIT VENTILATOR BALITA (>4 L/MNT) BERPEMANAS TUNGGAL
RT126	SIRKUIT VENTILATOR BALITA (0,3 HINGGA 4 L/MNT) BERPEMANAS TUNGGAL
RT130	SIRKUIT VENTILATOR BALITA (0,3 HINGGA 4 L/MNT) BERPEMANAS TUNGGAL
RT131	SIRKUIT VENTILATOR BALITA (>4 L/MNT) BERPEMANAS TUNGGAL
RT225	SIRKUIT VENTILATOR BALITA (>4 L/MNT) BERPEMANAS TUNGGAL DENGAN WADAH AIR AUTOFEED MR290
RT226	SIRKUIT VENTILATOR BALITA (0,3 HINGGA 4 L/MNT) BERPEMANAS TUNGGAL DENGAN WADAH AIR AUTOFEED MR290

Untuk pengantaran gas pernapasan.

SPESIFIKASI TEKNIS

RT131, RT125, RT225:	Kompatibel dengan pelembap udara Fisher & Paykel Healthcare MR810 dan MR850. Dräger Babylog: Sesuai untuk aliran <25 L/mnt.
RT130, RT126, RT226:	Kompatibel dengan pelembab udara MR850 saja. 810 JANGAN digunakan dengan pelembap udara MR810.

Lihat petunjuk pengguna pelembap udara.

KONEKSI ANTARMUKA	Konektor Berbentuk Kerucut ISO 5356-1 830 mL
VOLUME YANG BISA DIKOMPRES KEPATUHAN @ 60 cmH₂O	
Tanpa Aksesori	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Dengan Aksesori	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O (termasuk ketidakpastian pengukuran 0,02 mL/cmH ₂ O)

RESISTENSI TERHADAP ALIRAN @ 2,5 L/mnt	
Tanpa Aksesori	
Selang inspirasi:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Selang ekspirasi:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Dengan Aksesori	
Selang ekspirasi:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O (termasuk ketidakpastian pengukuran 0,03 cmH ₂ O)

TEKANAN PENGOPERASIAN MAKSIMUM	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Lihat petunjuk penggunaan wadah air 8 kPa
RT225, RT226:	
PANJANG SELANG PERNAPASAN	
Inspirasi:	1,6 m
Ekspirasi:	1,6 m
DIAMETER INTERNAL SELANG MINIMUM	10,2 mm
KEBOCORAN GAS @ 60 cmH₂O	<30 mL/mnt
VOLUME TIDAL	<185 mL

KINERJA KESELURUHAN PADA SUHU RUANG 20 °C HINGGA 26 °C		
	MODE INVASIF	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Keluaran Humidifikasi	>33 mg/L	>33 mg/L
Laju Aliran	4 – 15 L/mnt	0,8 – 6 L/mnt

KINERJA UMUM PADA SUHU AMBIEN 23 °C		
	MODE INVASIF	
	RT126, RT130, RT226	
Keluaran Humidifikasi	>33 mg/L	
Laju Aliran	0,3 – 6 L/mnt	

DEFINISI SIMBOL

	Level air salah, ganti wadah air	Rx only	Hanya dengan resep dokter
	Level air yang benar dalam wadah air	CE 0123	Penanda CE 93/42/EEC
	Baca petunjuk pengoperasian		Tanggal produksi
	Komponen jenis BF yang diterapkan		Produsen
	Tidak dibuat dengan ftalat		Gunakan sebelum tanggal
	Tidak dibuat dengan lateks karet alami		Maksimum penggunaan 7 hari
	Sekali pakai		Batasan suhu pengangkutan dan penyimpanan
LOT	Nomor lot	EC REP	Perwakilan resmi Uni Eropa

REF	Nomor referensi		Perhatian/Baca petunjuk penggunaan
------------	-----------------	--	------------------------------------

PERINGATAN, PERHATIAN, DAN CATATAN

PERINGATAN

- JANGAN menggunakan ulang produk ini. Penggunaan ulang bisa menyebabkan penyebaran zat menular, gangguan pengobatan, bahaya serius, atau kematian.
- Penggunaan sirkuit pernapasan, wadah air, aksesorì, atau kombinasi yang tidak disetujui oleh Fisher & Paykel Healthcare bisa mengakibatkan buruknya kinerja sistem humidifikasi, kegagalan fungsi ventilator, dan membahayakan diri pasien/pengguna.
- Pasien harus selalu dipantau (misalnya terhadap saturasi oksigen) dengan benar. Kelalaian dalam memantau pasien (misalnya jika terjadi gangguan aliran gas) dapat mengakibatkan bahaya serius atau kematian.
- JANGAN menyentuh pelat pemanas atau alas wadah air. Suhu permukaan bisa melebihi 85 °C. Kelalaian dalam mematuhi petunjuk ini bisa menyebabkan luka bakar pada kulit.

Kelalaian dalam mematuhi setiap peringatan berikut ini bisa mengganggu kinerja perangkat atau membahayakan keselamatan (termasuk berpotensi menyebabkan cedera serius):

- Saat memasang pelembap udara di dekat pasien, pastikan bahwa pelembap udara selalu ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari pasien.
- JANGAN gunakan di atas batasan maksimum penggunaan 7 hari.
- JANGAN menutupi sirkuit dengan bahan seperti selimut, handuk, atau seprai.
- JANGAN meregangkan atau memerah selangnya.
- JANGAN merendam, mencuci, atau mensterilkan produk ini. Jangan sampai terkena bahan kimia, bahan pembersih, atau cairan pembersih tangan.
- JANGAN gunakan wadah airnya jika level air melebihi garis level air maksimum.
- JANGAN gunakan wadah airnya jika segel tidak utuh saat diterima, atau jika pernah terjatuh.
- JANGAN mengoperasikan wadah air pada sudut kemiringan lebih dari 10°.
- JANGAN menusuk sumber airnya sampai tutup birunya telah dilepas. Apabila pelampung primer tidak berfungsi, sirkuitnya bisa terkena cipratan bila wadah airnya dioperasikan lebih dari 80 L/mnt.
- Periksa kerusakan pada perangkat pernapasan (misalnya selang yang tertekan atau konektor yang retak) sebelum digunakan, dan ganti jika kerusakan ditemukan.
- Ketinggian sumber air harus setidaknya 50 cm lebih tinggi dari wadah air.
- JANGAN menggunakan sirkuit pernapasan dengan kawat berpemanas tanpa aliran gas. Jika aliran gas terganggu, matikan pelembap udara.
- Pastikan ada persediaan air yang terhubung ke wadah air dan wadahnya berisi air.
- JANGAN mengisi wadah airnya dengan air lebih dari 37 °C.
- Pastikan pengaturan ventilator atau alarm sumber aliran yang sesuai sebelum menghubungkan perangkat pernapasan ke pasien.
- Hindari kontak yang terlalu lama antara selang yang dipanaskan dan kulit pasien.
- Lakukan uji tekanan dan kebocoran pada sistem pernapasan dan periksa untuk mengetahui adanya sumbatan sebelum menghubungkannya ke pasien.
- Gunakan Air Steril USP Untuk Inhalasi atau yang setara untuk humidifikasi. JANGAN menambahkan zat lainnya ke dalam air.
- Pantau dan kurus penumpukan kondensat di dalam sirkuit secara berkala.
- Periksa apakah semua sambungannya sudah erat sebelum digunakan.
- Periksalah untuk mengetahui apakah kawat pemanasnya terdistribusi secara merata di sepanjang sirkuit dan tidak terurai atau tertekuk.
- Selang berpemanas harus dijauhkan dari kontak langsung dengan kulit pasien. Pada laju aliran di bawah 0,8 L/mnt, suhu permukaan bisa mencapai 50 °C.

CATATAN

- Untuk penggunaan di bawah pengawasan personel medis terlatih saja.
- Buang produk sesuai dengan protokol rumah sakit yang sesuai. Pengguna bisa terpapar pada cairan dari saluran pernapasan selama proses pembuangan.
- Organisasi penanggung jawab wajib bertanggung jawab terhadap kompatibilitas pelembap udara dan semua bagian serta aksesorì yang digunakan sebelum digunakan untuk menghubungkan pasien dan peralatan lain.

 Japanese (ja)

RT125	小児用 RT 回路 シングル熱線 (>4 L/MIN)
RT126	小児用 RT 回路 シングル熱線 (0.3～4 L/MIN)
RT130	小児用 RT 回路 シングル熱線 (0.3～4 L/MIN)
RT131	小児用 RT回路 シングル熱線 (>4 L/MIN)
RT225	小児用 RT 回路 シングル熱線 加湿チャンバー入 (>4 L/MIN)
RT226	小児用 RT 回路 シングル熱線 加湿チャンバー入 (0.3～4 L/MIN)

空気および酸素を含む混合ガスを供給することを目的とします。

技術仕様

RT131, RT125, RT225:	Fisher & Paykel Healthcare MR810 および MR850 加湿加湿器と互換性があります。Dräger Babylog: 25 L/min 未満の流量に適しています。
RT130, RT126, RT226:	MR850 加湿加湿器とのみ互換性があります。 810 MR810 加湿加湿器と併用しないでください。

加湿加湿器の取扱説明書を参照してください。

インターフェース接続	ISO 5356-1 円錐コネクター 830 mL
圧縮可能容量	
コンプライアンス @ 60 cmH₂O	
付属品なし	1.4 ± 0.09 mL/cmH ₂ O
付属品あり	1.4 ± 0.07 mL/cmH ₂ O (0.02 mL/cmH ₂ O を含む [計測の不確実性])

流量抵抗 @ 2.5 L/min	
付属品なし	
吸気側回路:	0.09 ± 0.04 cmH ₂ O
呼気側回路:	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O
付属品あり	
呼気側回路:	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O (0.03 cmH ₂ O を含む [計測の不確実性])

最大作動圧力	
RT125, RT126, RT130, RT131:	チャンバーの取扱説明書・添付文書を参照 8 kPa
RT225, RT226:	
呼吸チューブの長さ	
吸気:	1.6 m
呼気:	1.6 m
チューブの最小内径	10.2 mm
ガスリーク @ 60 cmH₂O	<30 mL/min
一回換気量	<185 mL

周囲温度 20 °C～26 °C での総合的な性能		
	侵襲モード	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
加湿出力	>33 mg/L	>33 mg/L
流量	4～15 L/min	0.8～6 L/min

周囲温度 23 °C での標準性能		
	侵襲モード	
	RT126, RT130, RT226	
加湿出力	>33 mg/L	
流量	0.3～6 L/min	

記号の定義			
	不適切水位 (加湿チャンバー 要交換)	Rx only	医師の処方によってのみ使用
	適切水位	CE 0123	CE マーク (93/42/EEC)
	マニュアル参照		製造年月日
	BF タイプ適合 部品		製造元
	フタル酸不使用		使用期限
	天然ゴム (ラテックス) 不使用		最長使用期間 7 日間
	単回使用		輸送および保管時の温度範囲
LOT	製造番号	EC REP	欧州代理人
REF	品番		注意事項/取扱説明書/添付文書を参照

警告事項、注意事項、および注記

警告

- 本品の再使用禁止. 再使用すると、感染性物質の伝播、治療の中断、重篤な危害または死亡に繋がる恐れがあります。
- Fisher & Paykel Healthcare が推奨していない呼吸回路、チャンバー、備品を組み合わせて使用すると、加湿加湿システムの性能低下、人工呼吸器の故障、患者/使用者の被害を引き起こす可能性があります。
- 常に適切な患者モニタリング (例、酸素飽和度) を行ってください。患者をモニタリングしない場合 (例、ガス・フローの中断)、重大な危害や死をまねくことがあります。
- 加湿加湿器のヒータープレート、および加湿チャンバーのベースプレートには触れないでください。表面温度が 85 °C を超えることがあり、使用法に従わないと火傷することがあります。

以下の警告に従わないと、装置の性能または安全性を損なうことがあります (深刻な害を与える可能性も含みます)：

- 患者の近くに加湿加湿器を取り付けるときは、加湿加湿器が患者よりも低く配置されていることを必ず確認してください。
- 最長使用期間の 7 日を超えて使用しないでください。
- 回路に毛布、タオルまたはベッドシートなどを覆いかぶせないでください。
- チューブを引っ張ったり、絞ったりしないでください。
- 本品を浸漬、洗浄、滅菌しないでください。化学物質、洗剤、手指用除菌剤と接触しないようにしてください。
- 水位が最高水位ラインを超えた場合は加湿チャンバーを使用しないでください。
- シールに破損がある場合、または落下した場合は加湿チャンバーを浸漬しないでください。
- 10 度以上の角度で加湿チャンバーを動作させないでください。
- 青色のキャップを取り外す前に滅菌蒸留水バッグに刺ししないでください。メインフロートが正常に動作しない状態で給水を開始、かつ流量が 80 L/min を超えると回路内に水が入り込むことがあります。
- 使用前に呼吸器セットの破損 (チューブのつぶれ、コネクターのひび割れなど) を、目視で点検してください。破損していた場合、交換してください。
- 滅菌蒸留水バッグが加湿チャンバーよりも 50 cm 以上高い位置にあることを確認してください。
- ガス・フローのない状態で熱線入り呼吸回路を使用しないでください。ガス・フローが中断された場合は、加湿加湿器の電源を切ってください。
- 加湿チャンバーが滅菌蒸留水バッグなどに接続され、かつ加湿チャンバー内に水が供給されていることを確認してください。
- 加湿チャンバーには、37 °C を超える水を入れないでください。
- 患者に呼吸器セットを接続する前に、人工呼吸器または流量源アラームが適切に設定されているか確認してください。
- 患者の皮膚と熱くなったチューブの長時間接触を避けてください。
- 呼吸システムの耐圧試験およびリーク試験を実施し、患者に接続する前に閉塞が無いかを確認してください。
- 加湿には、USP 滅菌蒸留水または同等品を使用してください。他の物質を水に加えないでください。
- 回路内の結露を、定期的に確認して排出してください。
- 使用前にすべての接続部分に漏れがないか点検してください。
- ヒーターワイヤが、回路にそって均等に分布されていて、束になっていたり振れていたりしていないことを確認してください。
- 熱くなったチューブは患者の皮膚に直接当てないでください。0.8 L/min 未満の流量では、表面温度が 50 °C になることがあります。

備考

- トレーニングを受けた医療従事者の監視下で、使用してください。
- 病院の規定に従って本品を適切に処分してください。廃棄中、ユーザーは呼吸器の分泌液に曝される可能性があります。
- 使用前には接続する加湿加湿器および付属品、共に患者に使用する他の機器との互換性について十分に確認をとってください。

Korean ^(ko)	
RT125	단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(>4 L/MIN)
RT126	단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(0.3 - 4 L/MIN)
RT130	단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(0.3 - 4 L/MIN)
RT131	단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(>4 L/MIN)
RT225	단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(>4 L/MIN)와 MR290 자동 충전식 물통
RT226	단일 가열식 유아용 환기 장치 회로(0.3 - 4 L/MIN)와 MR290 자동 충전식 물통

호흡 가스 전달용.

RT131, RT125, RT225:	Fisher & Paykel Healthcare MR810 및 MR850 가습기와 호환 가능 Drager Babylog: <25 L/min 유량에 적합함
RT130, RT126, RT226:	MR850 가습기와만 호환됩니다. (810)MR810 가습기에는 사용하지 마십시오.

가습기 사용자 지침을 참조하십시오.

인터페이스 연결	ISO 5356-1 원뿔형 커넥터
압축 가능 부피	830 mL
60 cmH₂O에서 컴플라이언스	
부속품 제외	1.4 ± 0.09 mL/cmH ₂ O
부속품 포함	1.4 ± 0.07 mL/cmH ₂ O (0.02 mL/cmH₂O 측정 불확도 포함)

2.5 L/min 유량에 대한 저항	
부속품 제외	
흡기 튜브:	0.09 ± 0.04 cmH ₂ O
호기 튜브:	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O
부속품 포함	
호기 튜브:	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O (0.03 cmH₂O 측정 불확도 포함)

최대 작동 압력	
RT125, RT126, RT130, RT131:	물통 사용 지침을 참조
RT225, RT226:	8 kPa
호흡 튜브 길이	
흡기:	1.6 m
호기:	1.6 m
최소 튜브 내경	10.2 mm
60 cmH₂O에서 가스 유출	<30 mL/min
환기량	<185 mL

주변 온도 20 °C - 26 °C에서 전체적 성능		
	침습 모드	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
가습 출력	>33 mg/L	>33 mg/L
유량	4 - 15 L/min	0.8 - 6 L/min

주변 온도 23 °C에서 일반적인 성능		
	침습 모드	
	RT126, RT130, RT226	
가습 출력	>33 mg/L	
유량	0.3 - 6 L/min	

기호 정의

	수위가 잘못됨, 물통을 교체할 것	Rx only	처방 전용
	물통 수위 적절	C€ 0123	CE 마킹 93/42/EEC
	사용 설명서를 참조할 것		제조일
	BF 유형 적용 부품		제조업체
	프탈레이트로 제조되지 않음		사용 기한
	천연 고무 라텍스로 제조되지 않음		최대 7일 사용
	일회용		운반 및 보관 온도 제한
	로트 번호		유럽연합 지정 대표자
	참조 번호		주의/사용 지침 참조

경고, 주의 및 참고

⚠ 경고

- 본 제품을 재사용하지 마십시오. 재사용으로 인해 감염 물질의 전염, 치료 방해, 심각한 상해를 유발하거나 사망에 이를 수 있습니다.
- Fisher & Paykel Healthcare의 승인을 받지 않은 호흡 회로, 물통, 부속품 또는 조합을 사용할 경우 가습 시스템 성능 저하, 환기 장치 오작동 및 환자/사용자 상해의 원인이 될 수 있습니다.
- 항상 환자를 적절히 모니터링해야 합니다(예: 산소 포화도). 환자를 모니터링하지 못할 경우(예: 가스 유량이 중단되는 경우) 환자가 심각한 피해를 입거나 사망할 수 있습니다.
- 열판 또는 물통 바닥을 만지지 마십시오. 표면 온도가 85 °C를 초과할 수 있습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 피부 화상을 초래할 수 있습니다.

아래의 모든 경고를 준수하지 않을 경우 본 장치의 성능을 저하시키거나 (심각한 상태 유발 가능성을 포함해) 안전성을 손상시킬 수 있습니다.

- 가습기를 환자 가까이 장착할 때 가습기가 항상 환자보다 낮은 위치에 놓이도록 하십시오.
-  최대 사용 기간인 7일을 초과하여 사용하지 마십시오.
- 담요, 타월 또는 침대보 등으로 회로를 덮지 마십시오.
- 튜브를 당기거나 짜내지 마십시오.
- 본 제품을 액체에 담그거나, 세척하거나, 멸균하지 마십시오. 화학 물질, 세척제 또는 손 세정제와 닿지 않게 하십시오.
- 수위가 최고 수위선보다 높아질 경우 물통을 사용하지 마십시오.
- 물통을 받았을 때 봉인이 손상된 경우나 물통을 떨어뜨린 경우에는 사용하지 마십시오.
- 물통을 10° 이상 기울여 작동하지 마십시오.
- 파란색 두껍게 제거하기 전까지는 물 공급원에 꽂지 마십시오. 1차 부구에 장애가 발생해 80 L/min을 초과하여 물통을 작동할 경우 회로 안으로 물방울이 튀는 현상이 발생할 수 있습니다.
- 사용 전에 호흡 세트에 손상이 있는지 육안으로 확인하고 (예: 눌려진 튜브 또는 갈라진 커넥터) 손상된 경우 교체합니다.
- 물 공급원은 물통보다 50 cm 이상 높은 위치에 있어야 합니다.
- 가스 유량이 없는 상태에서 열린 호흡 회로를 사용하지 마십시오. 가스 흐름이 중단되면 가습기의 전원을 끄십시오.
- 물통에 물 공급 장치가 연결되어 있고 물통 내에 물이 있는지 확인하십시오.
- 물통에 37 °C보다 높은 온도의 물을 채우지 마십시오.
- 호흡 세트를 환자에 연결하기 전에 적절한 인공호흡기 또는 유량 소스(flow source) 경보가 설정되었는지 확인합니다.
- 가열된 튜브가 환자 피부와 장기간 접촉하지 않도록 합니다.
- 환자에게 연결하기 전에 호흡 시스템에 대해 압력 및 누출 테스트를 수행하고 막힘 증상이 있는지 확인하십시오.
- 흡입용 USP 멸균수 또는 이에 상당하는 물을 가슴에 사용하십시오. 물에 다른 물질을 첨가하지 마십시오.
- 정기적으로 모니터링하여 회로에 축적된 응축액을 배출시킵니다.
- 사용하기 전에 모든 연결부가 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.
- 열선이 회로를 따라 고르게 배치되어 있고 묻쳐 있거나 구부러져 있지 않은지 확인합니다.
- 가열된 튜브를 환자의 피부에 직접 접촉하지 마십시오. 0.8 L/min 미만 유량에서 표면 온도는 50 °C까지 도달할 수 있습니다.

참고

- 숙련된 의료진의 감독 하에 사용하십시오.
- 적절한 병원 치료 계획서에 따라 제품을 폐기하십시오. 폐기하는 동안 사용자가 호흡관 체액에 노출될 수 있습니다.
- 책임 기관은 사용 전 환자 및 기타 장비에 연결하기 위해 사용되는 모든 부품 및 부속품과 가습기의 호환성을 확인할 책임이 있습니다.

Lithuanian ^(lt)

RT125	VAIKAMS SKIRTAS VENTILIACIJOS KONTŪRAS (>4 L/MIN), ŠILDOMAS IŠ VIENO ŠALTINIO
RT126	VAIKAMS SKIRTAS VENTILIACIJOS KONTŪRAS (NUO 0,3 IKI 4 L/MIN), ŠILDOMAS IŠ VIENO ŠALTINIO
RT130	VAIKAMS SKIRTAS VENTILIACIJOS KONTŪRAS (NUO 0,3 IKI 4 L/MIN), ŠILDOMAS IŠ VIENO ŠALTINIO
RT131	VAIKAMS SKIRTAS VENTILIACIJOS KONTŪRAS (>4 L/MIN), ŠILDOMAS IŠ VIENO ŠALTINIO
RT225	VAIKAMS SKIRTAS VENTILIACIJOS KONTŪRAS (>4 L/MIN), ŠILDOMAS IŠ VIENO ŠALTINIO, SU MR290 AUTOMATINIO TIEKIMO KAMERA
RT226	VAIKAMS SKIRTAS VENTILIACIJOS KONTŪRAS (NUO 0,3 IKI 4 L/MIN), ŠILDOMAS IŠ VIENO ŠALTINIO, SU MR290 AUTOMATINIO TIEKIMO KAMERA

Kvėpavimo dujoms tiekti.

RT131, RT125, RT225	Suderinama su „Fisher & Paykel Healthcare“ MR810 ir MR850 drėkintuvais. „Dräger Babylog“: tinka <25 L/min srautams.
RT130, RT126, RT226	Suderinamas tik su MR850 drėkintuvu. (810) NENAUDOKITE su MR810 drėkintuvu.

Skaitykite drėkintuvo naudojimo instrukciją.

SAŠAJOS JUNGTYS	ISO 5356-1 kūginės jungtys
SUSPAUDŽIAMASIS TŪRIS	830 mL
ATITIKTIS ESANT 60 cmH₂O	
Be priedų	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Su priedais	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O (įskaitant 0,02 mL/cmH₂O matavimo neapibrėžtį)

ATSPARUMAS SRAUTUI ESANT 2,5 L/min	
Be priedų	
Įkvėpimo dalis:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Iškvėpimo dalis:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Su priedais	
Iškvėpimo dalis:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O (įskaitant 0,03 cmH₂O matavimo neapibrėžtį)

DIDŽIAUSIAS DARBINIS SLĖGIS	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Skaitykite kameros naudojimo instrukciją
RT225, RT226:	8 kPa
KVĖPAVIMO VAMZDELIO ILGIS	
Įkvėpimo:	1,6 m
Iškvėpimo:	1,6 m
MINIMALUS VAMZDELIO VIDINIS SKERSMUO	10,2 mm
DUJŲ NUOTĖKIS ESANT 60 cmH₂O	<30 mL/min
ĮKVEPIAMO IR IŠKVEPIAMO ORO TŪRIS	<185 mL

BENDRAS NAŠUMAS 20–26 °C APLINKOS TEMPERATŪROJE		
	INVAZINIS REŽIMAS	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Drėkinimo išvestis	>33 mg/L	>33 mg/L
Srauto greitis	4-15 L/min	0,8-6 L/min

TIPINIS NAŠUMAS ESANT 23 °C APLINKOS TEMPERATŪRAI		
	INVAZINIS REŽIMAS	
	RT126, RT130, RT226	
Drėkinimo išvestis	>33 mg/L	
Srauto greitis	0,3-6 L/min	

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI

	Netinkamas vandens lygis, pakeiskite kamerą	Rx only	Tik pagal receptą
	Tinkamas vandens lygis rezervuare	C€ 0123	CE ženklas 93/42/EEB
	Žr. naudojimo instrukciją		Pagaminimo data
	Darbinė BF tipo dalis		Gamintojas
	Pagaminta nenaudojant ftalatų		Tinkamumo naudoti data
	Pagaminta nenaudojant natūralaus kaučiuko latekso		Maksimali naudojimo trukmė – 7 dienos

	Vienkartinis		Gabenimo ir laikymo temperatūros ribojimai
	Partijos numeris		Igaliotas atstovas Europos Sąjungoje
	Nuorodos numeris		Atsargiai arba žr. naudojimo instrukcijas

ISPĖJIMAI, ATSARGUMO PRIEMONĖS IR PASTABOS

⚠ ISPĖJIMAI

- Šio gaminio NENAUDOKITE pakartotinai. Pakartotinai naudojant kyla pavojus perduoti infekcinės medžiagos, nutraukti gydymą, sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį.
- Naudojant „Fisher & Paykel Healthcare“ nepatvirtintus kvėpavimo kontūrus, kameras, priedus ar derinius gali prastai veikti drėkinimo sistema, sugesti ventilatorius ir susižaloti pacientas arba naudotojas.
- Visada turi būti taikoma atitinkama paciento stebėjimo procedūra (pvz., prisotinimas deguonies). Nesaikant paciento stebėjimo procedūros (pvz., sutrikus dujų srautui) kyla pavojus sukelti sunkų sužalojimą ar net mirtį.
- NELIESKITE šildymo plokštės ar kameros pagrindo. Paviršių temperatūra gali būti aukštesnė nei 85 °C. Nesaikant šio reikalavimo kyla pavojus nudegti odą.

Nesilaikant šių išspėjimų gali pablogėti prietaiso eksploatacinės savybės ir gali kilti pavojus saugai (įskaitant galimą sunkų sužalojimą):

- Montuodami drėkintuvą greta paciento pasirūpinkite, kad drėkintuvas visada būtų pastatytas žemiau paciento.
-  NENAUDOKITE pasibaigus maksimaliai 7 dienų naudojimo trukmei.
- Kontūro NEUŽDENKITE tokiomis medžiagomis kaip antklodės, rankluosčiai ar patalynė.
- NEIŠTEMPKITE ar kitaip netinkamai netraukykite vamzdelių.
- NEMĖGINKITE šio gaminio mirkyti, plauti ir sterilizuoti. Venkite sąlyčio su chemikalais, valymo medžiagomis ar rankų dezinfekatoriais.
- Kameros NENAUDOKITE vandens lygiui pakilus virš maksimalios ribos.
- Kameros NENAUDOKITE, jei ją gavę pastebite pažeistas plombas arba jei ji buvo numesta.
- NENAUDOKITE kameros didesniu nei 10° kampu.
- NENAUDOKITE vandens šaltinio nenuėmę mėlynos spalvos dangtelį. Jei pirmine plūdė neveiks, o kamera eksploatuojama naudojant didesnį kaip 80 L/min srovę, į kontūrą gali patekti purlsu.
- Prieš pradėdami naudoti apžiūrėkite, ar nepažeisti kvėpavimo rinkiniai (pvz., ar nesuskaldytas vamzdelis, neįtrūkusi jungtis); jei pažeisti, pakeiskite.
- Vandens šaltinis turi būti bent 50 cm aukštesnis už kamerą.
- NENAUDOKITE šildomos vielos kvėpavimo kontūrų be dujų srauto. Jei dujų srautas sutrikdytas, drėkintuvą išjunkite.
- Įsitikinkite, kad prie kameros prijungtas vandens šaltinis, o vanduo patenka į kamerą.
- Į kamerą NEPILKITE vandens, jei jo temperatūra yra aukštesnė nei 37 °C.
- Prieš prijungdami kvėpavimo rinkinį prie paciento kūno pasirūpinkite, kad būtų nustatyti tinkami ventilatoriaus arba srauto šaltinio pavojaus signalai.
- Venkite ilgalaikio šildomų vamzdelių sąlyčio su paciento oda.
- Prieš prijungdami prie paciento kūno, kvėpavimo sistemoje atlikite slėgio ir nuotėkio bandymą, taip pat patikrinkite, ar sistema neužsikimšusi.
- Drėkinimui įkvėpdami naudokite sterilų arba lygiavertį USP standartus atitinkantį vandenį. Į vandenį NEPIPKITE kitų medžiagų.
- Nuolat stebėkite ir išleiskite kontūre susikaupusį kondensatą.
- Prieš pradėdami naudoti patikrinkite, ar visos jungtys tvirtai sujungtos.
- Patikrinkite, ar šildytuvo viela tolygiai paskirstyta palei kontūrą, ar ji nesuklostyta ir nesusipykusi.
- Sušildytus vamzdelius reikia saugoti nuo tiesioginio sąlyčio su paciento oda. Kai srauto greitis mažesnis nei 0,8 L/min., paviršiaus temperatūra gali siekti 50 °C.

PASTABOS

- Skirtas naudoti prižiūrint kvalifikuotiems medicinos darbuotojams.
- Gaminį išmeskite laikydamiesi ligoninės protokolo. Šalinant atliekas naudotoją gali paveikti kvėpavimo takų skysčiai.
- Už drėkintuvo, visų prie paciento kūno prijungiamų dalių ir priedų bei kitos įrangos suderinamumą prieš naudojant atsako atsakingoji organizacija.

Latvian ^(lv)

RT125	PEDIATRISKO PACIENTU VENTILATORA KONTŪRS (>4 L/MIN) AR VIENA VEIDA APSILDI
RT126	PEDIATRISKO PACIENTU VENTILATORA KONTŪRS (NO 0,3 LĪDZ 4 L/MIN) AR VIENA VEIDA APSILDI
RT130	PEDIATRISKO PACIENTU VENTILATORA KONTŪRS (NO 0,3 LĪDZ 4 L/MIN) AR VIENA VEIDA APSILDI
RT131	PEDIATRISKO PACIENTU VENTILATORA KONTŪRS (>4 L/MIN) AR VIENA VEIDA APSILDI
RT225	PEDIATRISKO PACIENTU VENTILATORA KONTŪRS (>4 L/MIN) AR VIENA VEIDA APSILDI UN MR290 AUTOMĀTISKĀS PADEVES KAMERU
RT226	PEDIATRISKO PACIENTU VENTILATORA KONTŪRS (NO 0,3 LĪDZ 4 L/MIN) AR VIENA VEIDA APSILDI UN MR290 AUTOMĀTISKĀS PADEVES KAMERU

Elpošanas gāzu pievadei.

RT131, RT125, RT225	Saderīgi ar Fisher & Paykel Healthcare MR810 un MR850 mitrinātāju. Drager pediatriško pacientu žurnāls: piemērots plūsmai <25 L/min.
RT130, RT126, RT226	Saderīgi tikai ar MR850 mitrinātāju. (810) NELIETOJIET ar MR810 mitrinātāju.

Skatiet mitrinātāja lietošanas instrukciju.

SASKARNES SAVIENOJUMI	Koniskie savienojumi ISO 5356-1
SASPIEŽAMAIS TILPUMS	830 mL
ATBILSTĪBA, JA IR 60 cmH₂O	
Bez piederumiem	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Ar piederumiem	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O (iekļaujot 0,02 mL/cmH₂O mērījumu nenoteiktību)

PLŪSMAS PRETESTĪBA, JA IR 2,5 L/min	
Bez piederumiem	
Ieelpas pievads:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Izelpas pievads:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Ar piederumiem	
Izelpas pievads:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O (iekļaujot 0,03 cmH₂O mērījumu nenoteiktību)

MAKSIMĀLAIS DARBA SPIEDIENS	
RT125, RT126, RT130, RT131:	skatiet kameras lietošanas instrukciju
RT225, RT226:	8 kPa
ELPOŠANAS CAURULES GARUMS	
Ieelpas:	1,6 m
Izelpas:	1,6 m
MINIMĀLAIS CAURULES IEKŠĒJAIS DIAMĒTRS	10,2 mm
GĀZES NOPLŪDE, JA IR 60 cmH₂O	<30 mL/min
ELPOŠANAS TILPUMS	<185 mL

VISPĀRĒJĀ VEIKTSPĒJA 20–26 °C APKĀRTĒJĀS VIDES TEMPERATŪRĀ		
	INVAZĪVAIS REŽĪMS	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Mitrināšanas izvade	>33 mg/L	>33 mg/L
Plūsmas ātrums	4-15 L/min	0,8-6 L/min

TIPISKĀ VEIKTSPĒJA 23 °C APKĀRTĒJĀS VIDES TEMPERATŪRĀ		
	INVAZĪVAIS REŽĪMS	
	RT126, RT130, RT226	
Mitrināšanas izvade	>33 mg/L	
Plūsmas ātrums	0,3-6 L/min	

SIMBOLU DEFINĪCIJAS

	Nepareizs ūdens līmenis, nomainiet kameru	Rx only	Tikai pret recepti
	Pareizs ūdens līmenis kamerā	C€ 0123	CE marķējums saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK
	Skatiet lietošanas instrukcijas		Izgatavošanas datums
	BF tipa lietojamā daļa		Ražotājs
	Izgatavošanā nav izmantoti ftalāti		Derīguma termiņš
	Izgatavošanā nav izmantots dabīgā kaučuka latekss		Lietošanai ne ilgāk kā 7 dienas

	Vienreizējai lietošanai		Transportēšanas un glabāšanas temperatūras ierobežojumi
	Partijas numurs		Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Savienībā
	Atsauces numurs		Uzmanību/ skatīt lietošanas instrukcijas

BRĪDINĀJUMI, PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN PIEZĪMES

⚠ BRĪDINĀJUMI

- NEDRĪKST lietot izstrādājumu atkārtoti. Atkārtota lietošana var izraisīt infekciju izplatīšanos, ārstēšanas pārtraukšanu, nopietnu kaitējumu vai nāvi.
- Elpošanas kontūru, kameru, piederumu vai to kombināciju lietošana, ko nav apstiprinājis uzņēmums Fisher & Paykel Healthcare, var izraisīt nepietiekamu mitrinātāja sistēmas darbību, ventilatora darbības traucējumus un kaitēt pacientam/lietotājam.
- Vienmēr jānodrošina pienācīga pacienta uzraudzība (piem., skābekļa piesātinājuma uzraudzība). Pacienta neuzraudzīšana (piem., pārtrauktas gāzes padeves gadijuma) var izraisīt nopietnu kaitējumu vai nāvi.

Russian (ru)	
RT125	НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР АППАРАТА ИВЛ (>4 Л/МИН) С ОДИНАРНЫМ ПОДОГРЕВОМ
RT126	НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР АППАРАТА ИВЛ (ОТ 0,3 ДО 4 Л/МИН) С ОДИНАРНЫМ ПОДОГРЕВОМ
RT130	НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР АППАРАТА ИВЛ (ОТ 0,3 ДО 4 Л/МИН) С ОДИНАРНЫМ ПОДОГРЕВОМ
RT131	НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР АППАРАТА ИВЛ (>4 Л/МИН) С ОДИНАРНЫМ ПОДОГРЕВОМ
RT225	НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР АППАРАТА ИВЛ (>4 Л/МИН) С ОДИНАРНЫМ ПОДОГРЕВОМ И САМОЗАПОЛНЯЮЩЕЙСЯ КАМЕРОЙ MR290
RT226	НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР АППАРАТА ИВЛ (ОТ 0,3 ДО 4 Л/МИН) С ОДИНОЧНЫМ ПОДОГРЕВОМ И САМОЗАПОЛНЯЮЩЕЙСЯ КАМЕРОЙ MR290

Для подачи дыхательных газов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RT131, RT125, RT225:	Совместим с увлажнителями Fisher & Paykel Healthcare MR810 и MR850. Drager Babylog: подходит для потоков <25 л/мин.
RT130, RT126, RT226:	Совместим только с увлажнителем MR850. (810) ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать с увлажнителем MR810.

См. инструкцию пользователя увлажнителя.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА	Конические коннекторы, соответствующие стандарту ISO 5356-1
СЖИМАЕМЫЙ ОБЪЕМ	830 мл
РАСТЯЖИМОСТЬ ПРИ 60 смH₂O	
Без принадлежности	1,4 ± 0,09 мл/смH ₂ O
С принадлежностями	1,4 ± 0,07 мл/смH ₂ O
	(включая погрешность измерения 0,02 мл/смH ₂ O)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКУ ПРИ 2,5 л/мин

Без принадлежности	
Шланг вдоха:	0,09 ± 0,04 смH ₂ O
Шланг выдоха:	0,04 ± 0,04 смH ₂ O
С принадлежностями	
Шланг выдоха:	0,04 ± 0,04 смH ₂ O
	(включая погрешность измерения 0,03 смH ₂ O)

МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	
RT125, RT126, RT130, RT131:	См. инструкцию пользователя камеры.
RT225, RT226:	8 кПа
ДЛИНА ДЫХАТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ	
На линии вдоха:	1,6 м
На линии выдоха:	1,6 м
МИНИМАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ТРУБКИ	10,2 мм
УТЕЧКА ГАЗА ПРИ 60 смH₂O	<30 мл/мин
ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	<185 мл

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 20 °C ДО 26 °C		
	ИНВАЗИВНЫЙ РЕЖИМ	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Увлажнение на выходе	>33 мг/л	>33 мг/л
Скорость потока	4–15 л/мин	0,8–6 л/мин

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 23 °C		
	ИНВАЗИВНЫЙ РЕЖИМ	
	RT126, RT130, RT226	
Увлажнение на выходе	>33 мг/л	
Скорость потока	0,3–6 л/мин	

ЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

	Неправильный уровень воды, замените камеру	Rx only	Только по назначению врача
	Правильный уровень воды в камере	CE 0123	Знак ЕС 93/42/ЕЕС
	Смотрите инструкцию по эксплуатации		Дата изготовления
	Рабочая часть типа BF		Изготовитель
	Изготовлено без использования фталатов		Срок годности
	Изготовлено без использования натурального каучукового латекса		Максимальное время использования — 7 дней

	Одноразового использования		Диапазон температур транспортировки и хранения
LOT	Номер партии	EC REP	Уполномоченный представитель в Евросоюзе
REF	Идентификационный номер		Предостережение / см. инструкцию пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование изделия. Повторное использование может стать причиной переноса инфекционных веществ, прерывания терапии, серьезного вреда здоровью или летального исхода.
- Использование дыхательных контуров, камер, принадлежностей или их сочетаний, не одобренных компанией Fisher & Paykel Healthcare, может привести к ухудшению рабочих характеристик системы увлажнения, отказу аппарата ИВЛ или причинению вреда пациенту/пользователю.
- Соответствующее наблюдение за пациентом (например, с оценкой уровня сатурации кислорода) должно осуществляться постоянно. Отсутствие наблюдения за пациентом (например, в случае прерывания подачи газа) может нанести серьезный вред или стать причиной смерти.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к нагревательной пластине или основанию камеры. Температура поверхностей может превышать 85 °C. Несоблюдение этого правила может привести к ожогам кожи.

Несоблюдение нижеприведенных предупреждений может стать причиной ухудшения характеристик устройства или поставить под угрозу безопасность (в частности, привести к нанесению серьезного вреда).

- Обязательно располагайте увлажнитель ниже пациента, если увлажнитель находится в непосредственной близости от него.
- (7)** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать после истечения максимального 7-дневного периода использования.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ накрывать контур какими-либо материалами, например одеялами, полотенцами или постельным бельем.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ растягивать или сминать трубки.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ замачивать изделие в воде, мыть или стерилизовать его. Избегайте контакта с химическими и очищающими веществами или антисептиками для рук.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать камеру, если уровень воды выше линии максимального уровня воды.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать камеру, если при получении герметичность упаковки была нарушена или камеру уронили.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать камеру под наклоном более 10°.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ прокалывать упаковку с водой до удаления синих колпачков. Если основной поплавок не срабатывает, то при работе камеры на скорости выше 80 л/мин вода может выплескиваться в контур.
- Перед использованием визуально проверьте комплекты дыхательных контуров на предмет повреждений (например, смятой трубки или треснувшего коннектора) и при необходимости замените их.
- Источник воды должен располагаться по меньшей мере на 50 см выше камеры.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дыхательные контуры с подогревом при отсутствии подачи газа. В случае прекращения подачи газа выключите увлажнитель.
- Убедитесь в том, что система подачи воды подключена к камере и что в камере имеется вода.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ наполнять камеру водой, температура которой выше 37 °C.
- Перед подключением дыхательного контура к пациенту убедитесь в правильной настройке сигналов тревоги аппарата ИВЛ или источника потока.
- Избегайте длительного контакта нагретых трубок с кожей пациента.

- Перед подключением аппарата к пациенту выполните испытание дыхательной системы под давлением и на утечку, а также убедитесь в отсутствии закупорок.
- Для увлажнения используйте стерильную воду для ингаляций, соответствующую требованиям Фармакопеи США, или ее эквивалент. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добавлять в воду другие вещества.
- Регулярно контролируйте и сливайте накопившийся в контуре конденсат.
- Перед использованием убедитесь в герметичности всех соединений.
- Убедитесь, что спираль нагревателя равномерно распределена по всей длине контура, не связана и не перекручена.
- Нагретые трубки не должны напрямую соприкасаться с кожей пациента. При скорости потока меньше 0,8 л/мин температура поверхности может достигать 50 °C.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для использования под наблюдением обученного медицинского персонала.
- Следуйте правилам лечебного учреждения для утилизации. При утилизации пользователь может подвергаться воздействию жидких выделений из дыхательных путей.
- Ответственность за проводимую перед использованием проверку совместимости увлажнителя и всех деталей и принадлежностей, применяемых для подключения к другому оборудованию и пациенту, несет ответственная организация.

Slovak (**sk**)

RT125	DÝCHACÍ OKRUH PRE DETSKÝCH PACIENTOV (>4 L/MIN) SO SAMOSTATNÝM OHRIEVANÍM
RT126	DÝCHACÍ OKRUH PRE DETSKÝCH PACIENTOV (0,3 AŽ 4 L/MIN) SO SAMOSTATNÝM OHRIEVANÍM
RT130	DÝCHACÍ OKRUH PRE DETSKÝCH PACIENTOV (0,3 AŽ 4 L/MIN) SO SAMOSTATNÝM OHRIEVANÍM
RT131	DÝCHACÍ OKRUH PRE DETSKÝCH PACIENTOV (>4 L/MIN) SO SAMOSTATNÝM OHRIEVANÍM
RT225	DÝCHACÍ OKRUH PRE DETSKÝCH PACIENTOV (>4 L/MIN) SO SAMOSTATNÝM OHRIEVANÍM S AUTOMATICKOU KOMOROU MR290
RT226	DÝCHACÍ OKRUH PRE DETSKÝCH PACIENTOV (0,3 AŽ 4 L/MIN) SO SAMOSTATNÝM OHRIEVANÍM S AUTOMATICKOU KOMOROU MR290

Na dodávanie dýchacích plynov.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

RT131, RT125, RT225:	Kompatibilné so zvlhčovačmi Fisher & Paykel Healthcare MR810 a MR850. Drager Babylog: Vhodný pre prietoky <25 L/min
RT130, RT126, RT226:	Kompatibilné výlučne so zvlhčovačom MR850. (810) NEPOUŽÍVAJTE so zvlhčovačom MR810.

Pozrite si pokyny pre používateľa zvlhčovača.

PRIPOJENIA ROZHRANIA	Kónické konektory podľa normy ISO 5356-1
STLAČITELNÝ OBJEM	830 mL
ÚDAJE O PREVÁDZKE PRI 60 cmH₂O	
Bez príslušenstva	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
S príslušenstvom	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O
	(vrátane odchýlky merania 0,02 mL/cmH ₂ O)

ODPOR PROTI PRIETOKU PRI 2,5 L/min	
Bez príslušenstva	
Nádychová vetva:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Výdychová vetva:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
S príslušenstvom	
Výdychová vetva:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
	(vrátane odchýlky merania 0,03 cmH ₂ O)

MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAK	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Pozrite si návod na použitie komory 8 kPa
DĹŽKA DÝCHACEJ TRUBICE	
Nádychová:	1,6 m
Výdychová:	1,6 m
MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PRIEMER TRUBICE	10,2 mm
MIERA NETESNOSTI PRI 60 cmH₂O	<30 mL/min
OBJEM VDYCHOVANÉHO VZDUCHU	<185 mL

CELKOVÝ VÝKON PRI TEPLOTE OKOLIA 20 °C AŽ 26 °C		
	INVAZÍVNY REŽIM	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Výkon zvlhčovania	>33 mg/L	>33 mg/L
Prietok	4 – 15 L/min	0,8 – 6 L/min

TYPICKÝ VÝKON PRI TEPLOTE OKOLIA 23 °C		
	INVAZÍVNY REŽIM	
	RT126, RT130, RT226	
Výkon zvlhčovania	>33 mg/L	
Prietok	0,3 – 6 L/min	

DEFINÍCIE SYMBOLOV

	Nesprávna hladina vody, vymeňte komoru	Rx only	Len na predpis
	Správna hladiny vody v komore	CE 0123	Označenie CE 93/42/EHS
	Prečítajte si návod na obsluhu		Dátum výroby
	Aplikovaná časť typu BF		Výrobca
	Neobsahuje fталáty		Dátum použiteľnosti
	Tento výrobok nie je vyrobený z prírodného latexu		Tento produkt je určený na maximálne 7-dňové použitie
	Na jedno použitie		Teplotné obmedzenie pri preprave a skladovaní

LOT	Číslo šarže	EC REP	Splnomocnený zástupca v Európskej únii
REF	Referenčné číslo		Upozornenie/ prečítajte si návod na použitie

VAROVANIA, UPOZORNENIA A POZNÁMKY

VAROVANIA

- Tento produkt NEPOUŽÍVAJTE OPAKOVANE. Opakované použitie môže viesť k prenosu infekčných látok, prerušeniu liečby, vážnemu poškodeniu zdravia či smrti.
- Používanie dýchacích okruhov, komôr, príslušenstva alebo kombinácií, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Fisher & Paykel Healthcare, môže mať za následok zlý výkon systému zvlhčovania, poruchu ventilátora a ujmu pre pacienta/používateľa.
- Vždy je nutné používať vhodné monitorovanie pacienta (napr. saturácia kyslíkom). Ak sa pacient nemonitoruje (napr. v prípade prerušenia toku plynu), môže to mať za následok závažnú ujmu alebo smrť.
- NEDOTÝKAJTE SA vyhrievacej platne ani základne komory. Teplota povrchov môže prekročiť 85 °C. V opačnom prípade hrozí riziko popálenia.
- Nedodržanie ľubovoľného z nasledujúcich varovaní môže nepriaznivo ovplyvniť výkon pomôcky alebo ohroziť bezpečnosť (vrátane potenciálne závažnej ujmy):**

- Pri umiestnení zvlhčovača vedľa pacienta zaistite, aby bol zvlhčovač vždy pod úrovňou pacienta.
- (7)** NEPOUŽÍVAJTE dlhšie než 7 dní.
- Okruh NEZAKRÝVAJTE materiálmi, ako sú prikrývky, uteráky alebo postelná bielizeň.
- Trubicu NENAPÍNAJTE ani NENATAHUJTE.
- Tento produkt NENAMÁČAJTE, NEUMÝVAJTE ani NESTERILIZUJTE. Zabráňte kontaktu s chemickými látkami, čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými prostriedkami na ruky.
- Komoru NEPOUŽÍVAJTE, ak hladina vody stúpne nad značku maximálnej hladiny.
- Komoru NEPOUŽÍVAJTE, ak tesnenia pri dodaní nie sú neporušené, alebo ak došlo k pádu komory.
- Komoru NEPREVÁDZKUJTE, ak je naklonená o viac ako 10°.
- NEPREPICHUJTE zdroj vody, kým sa neodstránia modré uzávery. Ak hlavný plavák zlyhá, môže dôjsť k vniknutiu vody do okruhu, ak sa komora prevádzkuje na viac ako 80 L/min.
- Pred použitím vizuálne skontrolujte, či dýchacie súpravy nie sú poškodené (napr. stlačená trubica alebo prasknutý konektor). Ak sú poškodené, vymeňte ich.
- Zdroj vody musí byť najmenej o 50 cm vyšší ako komora.
- Ak plyn neprúdi, NEPOUŽÍVAJTE vyhrievané dýchacie okruhy. Ak sa prietok plynu preruší, vypnite zvlhčovač.
- Zaistíte, aby bol ku komore pripojený prívod vody a aby bola v komore voda.
- NEPLŇTE komoru vodou s teplotou vyššou ako 37 °C.
- Pred pripojením dýchacieho okruhu k pacientovi zabezpečte príslušné nastavenie výstrah ventilátora a zdroja prietoku.
- Zabráňte dlhšiemu kontaktu vyhrievanej hadičky s pokožkou pacienta.
- Pred pripojením k pacientovi vykonajte skúšku tlaku a tesnosti dýchacieho systému a skontrolujte, či nedochádza k upchatiu.
- Použite sterilnú vodu na inhaláciu (USP) alebo ekvivalent na zvlhčovanie. Do vody NEPRIDÁVAJTE žiadne dodatočné látky.
- Pravidelne sledujte a vypúšťajte kondenzát z okruhu.
- Pred použitím skontrolujte, či sú všetky pripojenia tesné.
- Skontrolujte, či je vodič ohrievača rovnomerne rozložený po okruhu a či nie je viazaný alebo zauzlený.
- Zahrievané rúrky by sa mali uchovávať mimo priameho kontaktu s pokožkou pacienta. Pri prietokoch pod 0,8 L/min môže povrchová teplota dosiahnuť 50 °C.

POZNÁMKY

- Na použitie pod dohľadom vyškoleného zdravotníckeho personálu.
- Produkt zlikvidujte v súlade s príslušným nemocničným protokolom. Počas likvidácie môže byť používateľ vystavený kvapalinám z dýchacieho traktu.
- Príslušná organizácia zodpovedá za kompatibilitu zvlhčovača a všetkých častí, príslušenstva a ďalších zariadení, ktoré sa pred použitím použijú na pripojenie k pacientovi.

Slovenian (**sl**)

RT125	ENOJNI OGREVANI VENTILATORSKI DIHALNI SISTEMI (>4 L/MIN) ZA DOJENČKE
RT126	ENOJNI OGREVANI VENTILATORSKI DIHALNI SISTEM (OD 0,3 DO 4 L/MIN) ZA DOJENČKE
RT130	ENOJNI OGREVANI VENTILATORSKI DIHALNI SISTEM (OD 0,3 DO 4 L/MIN) ZA DOJENČKE
RT131	ENOJNI OGREVANI VENTILATORSKI DIHALNI SISTEM (>4 L/MIN) ZA DOJENČKE
RT225	ENOJNI OGREVANI VENTILATORSKI DIHALNI SISTEMI (>4 L/MIN) ZA DOJENČKE S SAMOPOLNILNO POSODICO MR290
RT226	ENOJNI OGREVANI VENTILATORSKI DIHALNI SISTEM (OD 0,3 DO 4 L/MIN) ZA DOJENČKE S SAMOPOLNILNO POSODICO MR290

Za dovajanje dihalnih plinov.

TEHNIČNI PODATKI

RT131, RT125, RT225:	Združljivo z vlažilniki Fisher & Paykel Healthcare MR810 in MR850. Drager Babylog: Primerno za pretoke <25 mL/min.
RT130, RT126, RT226:	Združljivo samo z vlažilnikom MR850. (810) NE uporabljajte z vlažilnikom MR810.

Glejte navodila za uporabo vlažilnika.

PRIKLUJČKI VMESNIKOV	Stožčasti priključki ISO 5356-1
STISLJIV VOLUMEN	830 mL
PODAJANOST PRI 60 cmH₂O	
Brez dodatkov	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Z dodatki	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O
	(vključno z merilno negotovostjo 0,02 mL/cmH ₂ O)

UPOR PRI PRETOKU 2,5 L/min

Brez dodatkov	
Inspiratorna veja:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Ekspiratorna veja:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Z dodatki	
Ekspiratorna veja:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
	(vključno z merilno negotovostjo 0,03 cmH ₂ O)

NAJVIŠJI DELOVNI TLAK	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Upoštevajte navodila za uporabo posodice. 8 kPa
RT225, RT226:	
DOLŽINA DIHALNE CEVI	
Inspiracijska:	1,6 m
Ekspiracijska:	1,6 m
NAJMANJŠI NOTRANJI PREMIER CEVI	10,2 mm
UHAJANJE PLINA PRI 60 cmH₂O	<30 mL/min
DIHALNA PROSTORNINA	<185 mL

SPLOŠNA UČINKOVITOST PRI TEMPERATURI OKOLJA 20 °C DO 26 °C		
	INVAZIVNI NAČIN	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Izhodna vlažnost	>33 mg/L	>33 mg/L
Hitrost pretoka	4–15 L/min	0,8–6 L/min

OBIČAJNA UČINKOVITOST PRI TEMPERATURI OKOLJA 23 °C		
	INVAZIVNI NAČIN	
	RT126, RT130, RT226	
Izhodna vlažnost	>33 mg/L	
Hitrost pretoka	0,3–6 L/min	

OPREDELITVE SIMBOLOV

	Nepravilen nivo vode, zamenjajte posodico	Rx only	Samo na recept
	Pravilen nivo vode v posodici	CE 0123	Oznaka CE v skladu z Direktivo Sveta 93/42/EGS
	Glejte navodila za uporabo		Datum proizvodnje
	Uporabljeni del vrste BF		Proizvajalec
	Ne vsebuje ftalátov		Rok uporabnosti
	Izdelek ne vsebuje naravnega lateksa		Uporabljati največ 7 dni
	Samo za enkratno uporabo		Temperturne omejitve za transport in shranjevanje
LOT	Številka serije	EC REP	Pooblaščen predstavnik v Evropski skupnosti

REF	Referenčna številka		Svarilo/Upoštevajte navodila za uporabo
------------	---------------------	--	---

OPOZORILA, SVARILA IN OPOMBE

RT125	KRUŽNI SISTEM ZA RESPIRATOR ZA ODOJČAD (>4 L/MIN) SA POJEDINAČNIM ZAGREVANJEM
RT126	KRUŽNI SISTEM ZA RESPIRATOR ZA ODOJČAD (OD 0,3 DO 4 L/MIN) SA POJEDINAČNIM ZAGREVANJEM
RT130	KRUŽNI SISTEM ZA RESPIRATOR ZA ODOJČAD (OD 0,3 DO 4 L/MIN) SA POJEDINAČNIM ZAGREVANJEM
RT131	KRUŽNI SISTEM ZA RESPIRATOR ZA ODOJČAD (>4 L/MIN) SA POJEDINAČNIM ZAGREVANJEM
RT225	KRUŽNI SISTEM ZA RESPIRATOR ZA ODOJČAD (>4 L/MIN) SA POJEDINAČNIM ZAGREVANJEM I KOMOROM SA AUTOMATSKIM PUNJENJEM MR290
RT226	KRUŽNI SISTEM ZA RESPIRATOR ZA ODOJČAD (OD 0,3 DO 4 L/MIN) SA POJEDINAČNIM ZAGREVANJEM I KOMOROM SA AUTOMATSKIM PUNJENJEM MR290

Za dopremanje gasova za udisanje.

RT131, RT125, RT225:	Kompatibilno sa ovlaživačima MR810 i MR850 kompanije Fisher & Paykel Healthcare. Dräger Babylog: Prikladno za protoke <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Kompatibilno samo sa ovlaživačem MR850. (810) NE koristiti sa ovlaživačem MR810.

Pogledati uputstvo za upotrebu ovlaživača.

PRIKLJUČCI INTERFEJSA

KOMPRESIBILNI VOLUMEN	
USKLADENOST NA 60 cmH₂O	
Bez pribora	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Sa priborom	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O
	(uključujući mernu nesigurnost od 0,02 mL/cmH ₂ O)

OTPOR PROTOKU NA 2,5 L/min	
Bez pribora	
Inspiratorno crevo:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Ekspiratorno crevo:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Sa priborom	
Ekspiratorno crevo:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
	(uključujući mernu nesigurnost od 0,03 cmH ₂ O)

MAKSIMALNI RADNI PRITISAK	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Pričitati uputstvo za upotrebu komore
RT225, RT226:	8 kPa
DUŽINA CREVA ZA DISANJE	
Inspiratorno:	1,6 m
Ekspiratorno:	1,6 m
NAJMANJI UNUTRAŠNJI PREČNIK CREVA	10,2 mm
CURENJE GASA NA 60 cmH₂O	<30 mL/min
IZDISAJNI VOLUMEN	<185 mL

SVEUKUPNE PERFORMANSE NA TEMPERATURI OKOLINE OD 20 °C DO 26 °C		
	INVAZIVNI REŽIM	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Izlazna vrednost vlaženja	>33 mg/L	>33 mg/L
Brzina protoka	4–15 L/min	0,8–6 L/min

TIPIČNE PERFORMANSE NA TEMPERATURI OKOLINE OD 23 °C		
	INVAZIVNI REŽIM	
	RT126, RT130, RT226	
Izlazna vrednost vlaženja	>33 mg/L	
Brzina protoka	0,3–6 L/min	

	Pogrešan nivo vode, zameniti komoru	Rx only	Samo na recept
	Ispravan nivo vode u komori	CE 0123	CE oznaka 93/42/EEC
	Pogledati uputstvo za upotrebu		Datum proizvodnje
	Aplikacioni deo tipa BF		Proizvođač
	Nije izrađeno od ftalata		Rok upotrebe
	Nije izrađeno od prirodnog gumenog lateksa		Maksimalna dužina upotrebe 7 dana

	Za jednokratnu upotrebu		Granične vrednosti temperature prilikom prevoza i skladištenja
LOT	Broj serije	EC REP	Ovlašćeni zastupnik za Evropsku uniju
REF	Referentni broj		Oprez / Pročitati uputstvo za upotrebu

UPOZORENJA, MERE OPREZA I NAPOMENE

UPOZORENJA

- NE koristiti ovaj proizvod više puta. Višekratna upotreba može dovesti do prenosa zaraznih supstanci, prekida terapije, ozbiljnih posledica ili smrti.
- Upotreba kružnih sistema za disanje, komora, pribora ili kombinacija sredstava koje nije odobrila kompanija Fisher & Paykel Healthcare može dovesti do slabljenja performansi sistema za vlaženje, kvara respiratora i neželjenih posledica po pacijenta/korisnika.
- Odgovarajući sistem za praćenje pacijenta (npr. za praćenje zasićenosti kiseonikom) mora da se koristi stalno. Ako se stanje pacijenta ne prati (npr. u slučaju prekida protoka gasa), može doći do ozbiljnih posledica ili smrti.
- NE dodirivati ploču grejača ili bazu komore. Temperatura površine može da pređe 85 °C. Ako se ne pridržavate ovog uputstva, možete opeći kožu.

Ako se ne pridržavate upozorenja u nastavku, možete narušiti performanse medicinskog sredstva ili ugroziti bezbednost (uključujući i to da može doći do potencijalno ozbiljnih posledica):

- Ovlaživač uvek mora biti namešten ispod nivoa pacijenta ako ga postavljate pored pacijenta.
- (7)** NE koristiti duže od maksimalne dužine upotrebe od 7 dana.
- NE prekrivati kružni sistem materijalima poput čebadi, peškira ili posteljine.
- NE rastezati i ne povlačiti crevo prstima.
- NE potapati, ne prati i ne sterilisati ovaj proizvod.
- Izbegavati kontakt sa hemikalijama, sredstvima za čišćenje ili sredstvima za dezinfekciju ruku.
- NE koristiti komoru ako je nivo vode iznad linije za maksimalni nivo vode.
- NE koristiti komoru ako je vakuumsko pakovanje oštećeno prilikom isporuke ili ako ste ispustili komoru.
- NE koristiti komoru pod uglom većim od 10°.
- NE bušiti kesu sa vodom dok ne skinete plave poklopce.
- Ako se primarno spremište sa plovkom pokvari, može doći do izbacivanja vode u kružni sistem u slučaju da je protok u komori veći od 80 L/min.
- Pre upotrebe proverite da li je komplet za disanje oštećen (npr. da li je crevo zgriječeno ili da li je priključak napukao) i zamenite ga ako je oštećen.
- Kesa sa vodom mora biti najmanje 50 cm iznad komore.
- NE koristiti kružni sistem za disanje sa grejnim žicama ako nema protoka gasa. Ako dođe do prekida protoka gasa, isključiti ovlaživač.
- Dovod vode mora biti povezan sa komorom i u komori mora biti vode.
- NE puniti komoru vodom čija je temperatura viša od 37 °C.
- Odgovarajući alarmi za respirator ili izvor protoka moraju se podesiti pre povezivanja kompleta za disanje sa pacijentom.
- Izbegavati produženi kontakt zagrejanih creva i kože pacijenta.
- Testirajte pritisak i curenje na sistemu za disanje i proverite da li je začepljen pre povezivanja sa pacijentom.
- Koristiti USP sterilnu vodu za inhalaciju ili ekvivalentnu vodu za ovlaživanje. NE dodavati druge supstance u vodu.
- Redovno pratiti i izvlačiti nagomilane ostatke kondenzacije iz kružnog sistema.
- Proveriti da li su svi priključci zategnuti pre upotrebe.
- Proveriti da li je žica grejača ravnomerno raspoređena duž kružnog sistema i da li je skupljena ili savijena.
- Zagrejana creva ne smeju da dolaze u direktan kontakt sa kožom pacijenta. Pri brzini protoka manjoj od 0,8 L/min, temperatura na površini može da dostigne 50 °C.

NAPOMENE

- Za upotrebu pod nadzorom obučenog medicinskog osoblja.
- Odožiti proizvod na otpad u skladu sa odgovarajućim bolničkim protokolom. Korisnik može da bude izložen tečnostima iz disajnog trakta prilikom odlaganja.
- Odgovorna organizacija snosi odgovornost za kompatibilnost ovlaživača i svih delova i pribora koji se povezuju sa pacijentom i drugom opremom pre upotrebe.

RT125	UPPVARMD ENKELSLANGSET FÖR VENTILATOR (>4 L/MIN) FÖR SPÅDBARN
RT126	UPPVARMD ENKELSLANGSET FÖR VENTILATOR (0,3–4 L/MIN) FÖR SPÅDBARN
RT130	UPPVARMD ENKELSLANGSET FÖR VENTILATOR (0,3–4 L/MIN) FÖR SPÅDBARN
RT131	UPPVARMD ENKELSLANGSET FÖR VENTILATOR (>4 L/MIN) FÖR SPÅDBARN
RT225	UPPVARMD ENKELSLANGSET FÖR VENTILATOR (>4 L/MIN) FÖR SPÅDBARN MED MR290-KAMMARE
RT226	UPPVARMD ENKELSLANGSET FÖR VENTILATOR (0,3–4 L/MIN) FÖR SPÅDBARN MED MR290-KAMMARE

För tillförsel av andningsgaser.

RT131, RT125, RT225:	Kompatibel med Fisher & Paykel Healthcare MR810- och MR850-befuktare. Dräger Babylog: lämplig för flöden <25 L/min.
RT130, RT126, RT226:	Endast kompatibel med MR850-befuktare. (810) Får INTE användas med MR810-befuktaren.

Se bruksanvisningen till befuktaren.

PATIENTANSLUTNINGAR	Koniska anslutningar enligt ISO 5356-1
KOMPRESSIBEL VOLYM	
Utan tillbehör	1,4 ± 0,09 mL/cmH ₂ O
Med tillbehör	1,4 ± 0,07 mL/cmH ₂ O
	(inklusive 0,02 mL/cmH ₂ O mätsäkerhet)

FLÖDESMOTSTÅND VID 2,5 L/min	
Utan tillbehör	
Inspiratorisk slang:	0,09 ± 0,04 cmH ₂ O
Expiratorisk slang:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
Med tillbehör	
Expiratorisk slang:	0,04 ± 0,04 cmH ₂ O
	(inklusive 0,03 cmH ₂ O mätsäkerhet)

MAXIMALT DRIFTRYCK	
RT125, RT126, RT130, RT131:	Se bruksanvisningen till kammaren
RT225, RT226:	8 kPa
ANDNINGSSLANGENS LÄNGD	
Inspiratorisk:	1,6 m
Expiratorisk:	1,6 m
MINSTA INRE SLANGDIAMETER	10,2 mm
GASLÄCKAGE VID 60 cmH₂O	<30 mL/min
TIDALVOLYM	<185 mL

TOTAL PRESTANDA VID 20 °C TILL 26 °C OMGIVNINGSTEMPERATUR		
	INVASIVT LÄGE	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
Befuktnings-prestanda	>33 mg/L	>33 mg/L
Flödes hastighet	4–15 L/min	0,8–6 L/min

TYPISK PRESTANDA VID 23 °C OMGIVNINGSTEMPERATUR		
	INVASIVT LÄGE	
	RT126, RT130, RT226	
Befuktnings-prestanda	>33 mg/L	
Flödes hastighet	0,3–6 L/min	

SYMBOLFÖRKLARINGAR

	Felaktigt vattennivå. Byt ut kammaren.	Rx only	Ordineras
	Rätt vattennivå i kammaren	CE 0123	CE-märkning 93/42/EEG
	Se driftsansvisningar		Tillverkningsdatum
	Patientansluten del av typ BF		Tillverkare
	Innehåller inte ftalater		Utgångsdatum
	Innehåller inte naturgummilatex		7 dagars maximal användning
	Engångsbruk		Temperaturgränser vid transport och förvaring
LOT	Partinummer	EC REP	Auktoriserad representant för Europeiska unionen
REF	Referensnummer		Var försiktig/Se bruksanvisningen

VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ANMÄRKNINGAR

VARNINGAR

- Produkten får INTE återanvändas. Återanvändning kan leda till överföring av smittosamma ämnen, avbrott i behandlingen, allvarlig skada eller dödsfall.
- Användning av slangset, kammare, tillbehör eller kombinationer som inte är godkända av Fisher & Paykel Healthcare kan leda till att befuktningssystemet fungerar dåligt, ventilatorfunksionsfel och skador på patient/användare.
- Patienten måste hela tiden övervakas på lämpligt sätt (bl.a. med avseende på syremättnad). Att inte övervaka patienten kan leda till allvarlig skada eller dödsfall (t.ex. i händelse av ett avbrott i syrgasflödet).
- Vidrör INTE värmeplattan eller kammarbasen. Ytor kan vara varmare än 85 °C. Brister att följa kan leda till brännskador på huden.

Brister att följa någon av följande varningar kan försämra enhetens prestanda eller äventyra säkerheten (och potentiellt orsaka allvarliga skador):

- När en befuktare monteras bredvid en patient ska befuktaren alltid vara positionerad lägre än patienten.
- (7)** Får INTE användas längre än 7 dagar.
- Täck INTE setet med material som filtar, handdukar eller sänglinne.
- Slangen får INTE sträckas eller mjölkas.
- Produkten får INTE blötläggas, tvättas eller steriliseras. Undvik kontakt med kemikalier, rengöringsmedel och handsprit.
- Använd INTE kammaren om vattennivån stiger över den maximala vattennivålinjen.
- Använd INTE kammaren om tätningarna inte är intakta vid leverans eller om den har tappats.
- Kammaren får INTE användas vid en större vinkel än 10°.
- Anslut INTE spiken till vattenkällan förrän de blå locken har tagits bort. Om den primära flottören inte fungerar kan det uppstå stänk i setet om kammaren används vid över 80 L/min.
- Kontrollera om slangsetet har skador (t.ex. en klämd slang eller sprucken anslutning) före användning och byt ut det vid eventuell skada.
- Vattenkällan måste placeras minst 50 cm högre än kammaren.
- Använd INTE uppvärmda slangset utan gasflöde. Stång av befuktaren om gasflödet avbryts.
- Se till att det finns en vattenförsörjning ansluten till kammaren och att det finns vatten i kammaren.
- Fyll INTE kammaren med vatten som är varmare än 37 °C.
- Se till att lämpliga larm för ventilator eller flödeskälla är inställda innan slangsetet ansluts till en patient.
- Undvik långvarig kontakt mellan varma slangar och patientens hud.
- Utför ett tryck- och läckagetest på andningssystemet och leta efter ocklusioner innan det ansluts till en patient.
- Använd sterilit vatten USP för inandning eller motsvarande för befuktnig. Tillsätt INTE andra substanser i vattnet.
- Övervaka och töm regelbundet kondensansamling i slangsetet.
- Kontrollera att alla anslutningar är täta före användning.
- Kontrollera att värmekabeln är jämnt fördelad längs slangsetet och inte hopbundat eller vikt.
- Uppvärmda slangar ska hållas borta från direkt kontakt med patientens hud. Vid flödes hastigheter under 0,8 L/min kan yttemperaturen uppgå till 50 °C.

ANMÄRKNINGAR

- Ska användas under uppsikt av utbildad hälso- och sjukvårdspersonal.
- Kassera produkten enligt sjukhusets rutiner. Användaren kan utsättas för vätskor från andningsvägen vid kassering.
- Vårdinrättningen ansvarar för att befuktaren och alla delar och tillbehör som används för att ansluta till patienten och till annan utrustning är kompatibla före användning.

RT125	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก (>4 ลิตร/นาที่) แบบให้ความร้อนเดียว
RT126	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก (0.3 ถึง 4 ลิตร/นาที่) แบบให้ความร้อนเดียว
RT130	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก (0.3 ถึง 4 ลิตร/นาที่) แบบให้ความร้อนเดียว
RT131	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก (>4 ลิตร/นาที่) แบบให้ความร้อนเดียว

RT225	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก (>4 ลิตร/นาที่) แบบให้ความร้อนเดียว พร้อมหม้อน้ำแบบป้อนน้ำอัตโนมัติ MR290
RT226	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารก (0.3 ถึง 4 ลิตร/นาที่) แบบให้ความร้อนเดียว พร้อมหม้อน้ำแบบป้อนน้ำอัตโนมัติ MR290

สำหรับการนำส่งก๊าซหายใจ

RT131, RT125, RT225:	สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องทำความชื้น Fisher & Paykel Healthcare รุ่น MR810 และ MR850 Dräger Babylog: เหมาะสำหรับการไหล <25 ลิตร/นาที่
RT130, RT126, RT226:	ใช้ได้กับเครื่องทำความชื้นรุ่น MR850 เท่านั้น (810) ห้ามใช้กับเครื่องทำความชื้นรุ่น MR810

โปรดดูคู่มือการใช้งานเครื่องทำความชื้น

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สัมผัสกับผู้ป่วย	ข้อต่อแบบกรวยมาตรฐาน ISO 5356-1
	830 มล.

ปริมาตรที่บีบอัดได้	
ความสามารถในการขยายตัวที่ 60 cmH₂O	
เมื่อไม่ใช้อุปกรณ์เสริม	1.4 ± 0.09 mL/cmH ₂ O
เมื่อใช้อุปกรณ์เสริม	1.4 ± 0.07 mL/cmH ₂ O
	(รวมถึงความไม่แน่นอนในการวัด 0.02 mL/cmH ₂ O)

ความต้านทานต่อการไหลที่ 2.5 ลิตร/นาที่	
เมื่อไม่ใช้อุปกรณ์เสริม	
สายหายใจเข้า:	0.09 ± 0.04 cmH ₂ O
สายหายใจออก:	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O
เมื่อใช้อุปกรณ์เสริม	
สายหายใจออก:	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O
	(รวมถึงความไม่แน่นอนในการวัด 0.03 cmH ₂ O)

แรงดันใช้งานสูงสุด	
RT125, RT126, RT130, RT131:	โปรดดูคำแนะนำในการใช้งานหม้อน้ำ
RT225, RT226:	8 กิโลปาสกาล

ความยาวท่อหายใจ	
ฝั่งหายใจเข้า:	1.6 เมตร
ฝั่งหายใจออก:	1.6 เมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในที่ข้อันต่ำสุด	10.2 มม.
การรั่วไหลของก๊าซที่ 60 cmH₂O	<30 มล./นาที่
ปริมาตรลมหายใจ	<185 มล.

ประสิทธิภาพโดยรวมที่อุณหภูมิแวดล้อม 20 °C ถึง 26 °C		
	โหมดใส่ท่อช่วยหายใจ	
	RT125, RT131, RT225	RT126, RT130, RT226
ความชื้นที่ผลิตได้	>33 มก./ลิตร	>33 มก./ลิตร
อัตราการไหล	4 – 15 ลิตร/นาที่	0.8 – 6 ลิตร/นาที่

ประสิทธิภาพโดยทั่วไปที่อุณหภูมิแวดล้อม 23°C		
	โหมดใส่ท่อช่วยหายใจ	
	RT126, RT130, RT226	
ความชื้นที่ผลิตได้	>33 มก./ลิตร	
อัตราการไหล	0.3 – 6 ลิตร/นาที่	

	ระดับน้ำไม่ถูกต้องเปลี่ยนหม้อน้ำ	Rx only	ใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้น
	ระดับน้ำในหม้อน้ำถูกต้อง	CE 0123	เครื่องหมาย CE 93/42/EEC
	ศึกษาคำแนะนำในการใช้งาน		วันที่ผลิต
	ชิ้นส่วนที่นำมาใช้เป็นชนิด BF		ผู้ผลิต
	ไม่ได้ผลิตจากทาเลท (phthalate)		วันหมดอายุ
	ไม่ได้ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติ		ใช้งานได้สูงสุด 7 วัน

	แบบใช้ครั้งเดียว		ข้อจำกัดด้านการขนส่งและอุณหภูมิการเก็บรักษา
LOT	หมายเลขชุดการผลิต	EC REP	ตัวแทนผู้มีอำนาจของสหภาพยุโรป
REF	หมายเลขอ้างอิง		ข้อควรระวัง/คุณสมบัติการวิธีใช้งาน

คำเตือน ข้อควรระวัง และหมายเหตุ

คำเตือน

- ห้ามนำผลิตภัณฑ์นี้กลับมาใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ซ้ำอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารติดเชื้อ การปนเปื้อนการรักษา การเกิดอันตรายร้ายแรง หรือการเสียชีวิต
- การใช้ชุดสายช่วยหายใจ หม้อน้ำ อุปกรณ์เสริม หรือการใช้หลายส่วนประกอบร่วมกันลักษณะที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก Fisher & Paykel Healthcare อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบทำความชื้นลดลง เครื่องช่วยหายใจทำงานผิดปกติ และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย/ผู้ใช้
- ต้องใช้ระบบการติดตามสัญญาณชีพที่เหมาะสม (เช่น ค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด) ตลอดเวลา การไม่ติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (เช่น ในกรณีที่การไหลของก๊าซหยุดชะงัก) อาจส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงหรือเสียชีวิต
- อย่าสัมผัสแผ่นทำความร้อนหรือฐานหม้อน้ำ พื้นผิวอาจร้อนกว่า 85 °C การไม่ปฏิบัติตามข้อก้าหนดอาจส่งผลให้ผิวหนังไหม้

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานหรือความปลอดภัยของอุปกรณ์ลดลง (รวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง):

- เมื่อติดตั้งเครื่องทำความชื้นในข้างตัวผู้ป่วย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำความชื้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าผู้ป่วยเสมอ
- (7)** ห้ามใช้งานติดต่อกันเกินระยะเวลาสูงสุด 7 วัน
- อย่าคลุมเครื่องช่วยหายใจด้วยวัสดุ เช่น ผ้าห่ม ผ้าขนหนู หรือผ้าปูที่นอน
- อย่ายึดหรือรัดท่อ
- อย่าแช่น้ำ ล้าง หรือฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์นี้
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมี สารทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีมือ
- ห้ามใช้งานหม้อน้ำหากระดับน้ำสูงขึ้นมาเหนือเส้นระดับน้ำสูงสุด
- อย่าใช้หม้อน้ำหากมีน้ำไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เมื่อได้รับหรือหากอุปกรณ์แตกพื้น
- ห้ามใช้งานหม้อน้ำที่วางบนพื้นซึ่งเอียงมากกว่า 10 องศา
- ห้ามเสียบอุปกรณ์ฝ้ายน้ำหนักจะเปิดฝ้าน้ำเงินออกก่อน หากลูกอลยหลุดทำงานผิดพลาด อาจมีน้ำกระเด็นเข้าไปในชุดสายช่วยหายใจเมื่อหม้อน้ำทำงานในอัตราที่สูงกว่า 80 ลิตร/นาที่
- ตรวจสอบความเสี่ยหายของชุดช่วยหายใจด้วยสายตา (เช่น พู่อกบู่บหรือข้อต่อมีรอยร้าว) ก่อนการใช้งาน และเปลี่ยนชิ้นส่วนหากพบความเสียหาย
- หลังจากใช้น้ำจะต้องอยู่สูงกว่าหม้อน้ำอย่างน้อย 50 ซม.
- ห้ามใช้ชุดสายช่วยหายใจแบบทำความร้อนด้วยขดลวดโดยไม่มีการไหลของก๊าซ หากการไหลของก๊าซติดขัด ให้ปิดเครื่องทำความชื้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ฝ้ายน้ำเชื่อมต่อกับหม้อน้ำและมีน้ำอยู่ภายในหม้อน้ำ
- ห้ามเติมน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37 °C ลงในหม้อน้ำ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการดึงค่าเครื่องช่วยหายใจหรือสัญญาณเตือนการไหลอย่างเหมาะสมก่อนที่จะเชื่อมต่อชุดสายช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ท่อชนิดให้ความร้อนสัมผัสกับผิวของของผู้ป่วยเป็นเวลานาน
- ทำการทดสอบแรงดันและการรั่วที่ระบบช่วยหายใจ และตรวจสอบว่ามีการอุดตันหรือไม่ก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับผู้ป่วย
- ใช้แผ่นปราศจากเชื้อมาตรฐาน USP สำหรับกรูหายใจหรือเทียบเท่าในการทำความชื้น อย่าเติมน้ำลงไปในน้ำ
- ตรวจสอบและระบายน้ำควบแน่นที่สะสมอยู่ในชุดสายช่วยหายใจเป็นประจำ
- ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดแน่นหนาดีแล้วก่อนการใช้งาน
- ตรวจสอบว่าขดลวดทำความร้อนกระจายไปตามวงจรรอย่างสม่ำเสมอและไม่มีความร้อนที่หักงอ
- ควรกั้นท่อชนิดให้ความร้อนให้พ้นจากการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนังของผู้ป่วย ที่อัตราการไหลต่ำกว่า 0.8 ลิตร/นาที่ อุณหภูมิที่พื้นผิวอาจสูงถึง 50 °C

หมายเหตุ

- สำหรับใช้ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม
- ทั้งผลิตภัณฑ์นี้ตามระเบียบการปฏิบัติที่เหมาะสมของโรงพยาบาล ผู้ใช้อาจสัมผัสกับของเหลวจากทางเดินหายใจในระหว่างกาติดตั้ง
- องค์การที่รับผิดชอบจะต้องรับผิดชอบต่อความเข้ากันได้ของเครื่องทำความชื้นกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่ใช้เชื่อมต่อเข้ากับผู้ป่วยและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนใช้งาน

Chinese (Simplified) ^(zh)

产品名称：一次性呼吸管路 - RT 系列婴儿管路

型号、规格：RT125、RT126、RT225、RT226

适用范围：用于与呼吸机、湿化器、雾化器配套使用。

RT125 婴儿用呼吸管路 (>4 L/MIN)，单管加热

RT126 婴儿用呼吸管路 (0.3 至 4 L/MIN)，单管加热

RT225 婴儿用呼吸管路 (>4 L/MIN)，单管加热，带 MR290 自动加水式湿化水罐

RT226 婴儿用呼吸管路 (0.3 至 4 L/MIN)，单管加热，带 MR290 自动加水式湿化水罐

用于提供呼吸气体。

技术规格

RT125、RT225：	与费雪派克医疗保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 的 MR810 和 MR850 呼吸湿化器兼容。Drager Babylog：适用于 <25 L/min 的流量。
RT126、RT226：	仅与 MR850 呼吸湿化器兼容。 (810) 请勿与 MR810 呼吸湿化器配合使用。

请参阅呼吸湿化器使用说明书。

接口连接	ISO 5356-1 圆锥接头
可变量	830 mL
60 cmH₂O 时的顺应性	
不带附件	1.4 ± 0.09 mL/cmH ₂ O
带附件	1.4 ± 0.07 mL/cmH ₂ O (含 0.02 mL/cmH ₂ O 的测量误差)

2.5 L/min 时的气流阻力

不带附件	
吸气管：	0.09 ± 0.04 cmH ₂ O
呼气管：	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O
带附件	
吸气管：	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O (含 0.03 cmH ₂ O 的测量误差)

最高工作压力

RT125、RT126：	请参阅水罐使用说明
RT225、RT226：	8 kPa

呼吸管路长度

吸气：	1.6 m
呼气：	1.6 m

管路最小内径	10.2 mm
60 cmH₂O 时的漏气量	<30 mL/min
潮气量	<185 mL

20 °C 至 26 °C 环境温度时的整体性能		
	有创模式	
	RT125、RT225	RT126、RT226
湿度输出	>33 mg/L	>33 mg/L
流量	4 – 15 L/min	0.8 – 6 L/min

23 °C 环境温度时的典型性能	
	有创模式 RT126、RT226
湿度输出	>33 mg/L
流量	0.3 – 6 L/min

EMC信息：呼吸管路-加热丝的 EMC 信息详见与其兼容的呼吸湿化器随机文件。
加热丝电源输入：22V~, 50/60HZ

符号定义

	水位不正确，请更换水罐	Rx only	处方产品
	水罐中的水位正确	CE 0123	CE 标志 93/42/EEC
	请参考操作说明		生产日期
	BF 型应用部件		生产商
	不含邻苯二甲酸盐		在此日期前使用
	不含天然乳胶		最多使用 7 天
	供一次性使用		运输和储存温度限制
LOT	批号	EC REP	欧盟授权代表
REF	参考编号		注意/参考使用说明

警告、注意和附注

⚠ 警告

- 请勿重复使用本产品。重复使用可能会造成传染性物质传播、干扰治疗、严重受伤或死亡。
- 使用未经费雪派克医疗保健公司 (Fisher & Paykel Healthcare) 核准的呼吸管路、水罐、附件或组合可能会导致湿化系统性能不佳、呼吸机工作异常或对患者/用户造成伤害。
- 必须始终对患者进行相应的监护（例如，血氧饱和度）。未能监护患者（例如，发生气流中断时）可能会导致严重伤害或死亡。
- 请勿触摸加热板或水罐底座。这些部位的表面温度可超过 85 °C。不遵守此操作可能导致皮肤灼伤。

不遵守以下警告可能影响设备性能或安全性（包括可能造成严重伤害）：

- 在患者旁安置呼吸湿化器时，确保呼吸湿化器始终低于患者水平。
- 使用时间不要超过 7 天的最长使用期限。
- 请勿把毯子、毛巾或床单一类的东西覆盖于呼吸管路上。
- 请勿拉扯或挤压管路。
- 请勿浸泡、冲洗或消毒本产品。避免接触化学品、清洁剂或洗手液。
- 如果水位超过最高水位线，请勿使用水罐。
- 如果收到水罐时密封包装不完整，或者水罐曾经摔过，请勿使用。
- 请勿在水罐倾斜超过 10° 时工作。
- 在拔掉蓝色盖子前，请勿将水罐插针与水源连接。如果主浮子失灵，且水罐在超过 80 L/min 流量的条件下工作，水就有可能溅入管路。
- 使用呼吸装置前，目视检查有无损坏（例如，呼吸管路被压扁或接头开裂），如果损坏则应更换。
- 水源必须至少高于水罐 50 cm。
- 请勿在没有气流的情况下使用加热导丝呼吸管路。如果气流中断，请关闭呼吸湿化器。
- 确保水罐连接到水源，且水罐中有水。
- 请勿往水罐内加超过 37 °C 的水。
- 为患者连接呼吸装置前，确保设置适当的呼吸机或气源报警。
- 避免加热管路长时间与患者皮肤接触。
- 在将呼吸系统连接至患者前，请先进行压力和漏气测试并检查有无堵塞。
- 请使用符合美国药典规定的呼吸用或类似标准的无菌水进行湿化。请勿向水中添加其他物质。
- 定期监测并排空管路中积存的冷凝水。
- 使用前检查以确保所有连接均牢固。
- 检查加热导丝是否平整均匀地沿着呼吸管路分布，且不会呈束状聚拢或打结缠绕。
- 避免加热管与患者皮肤直接接触。当流速低于 0.8 L/min 时，表面温度可达到 50 °C。

附注

- 仅供在经过培训的医务人员的监督下使用。
- 根据相应医院规程对本产品进行终末处理。在进行终末处理过程中，用户可能会接触到呼吸道液体。
- 负责机构有责任在使用前确认用于连接到患者及其他设备所有零部件及配件与呼吸湿化器的兼容性。

存储及运输条件：请查看产品标签的环境温度条件
包装：非无菌清洁包装
医疗器械注册证编号/产品技术要求：国械注进20152663810
有效期：本产品有效期5年。请查看产品标签的有效日期。
生产日期：参阅产品标签
注册人/生产企业名称：费雪派克医疗保健有限公司
注册人住所/生产企业地址/生产地址：15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand
联系方式：+64 9 574 0100

Chinese (Traditional) ^(zh)

RT125 新生兒呼吸器管路（>4 L/MIN）單端加熱型

RT126 新生兒呼吸器管路（0.3 至 4 L/MIN）單端加熱型

RT130 新生兒呼吸器管路（0.3 至 4 L/MIN）單端加熱型

RT131 新生兒呼吸器管路（>4 L/MIN）單端加熱型
RT225 新生兒呼吸器管路（>4 L/MIN）單端加熱型，附 MR290 自動進水加濕水罐

RT226 新生兒呼吸器管路（0.3 至 4 L/MIN）單端加熱型，附 MR290 自動進水加濕水罐

用於輸送呼吸氣體。

技術規格

RT131、RT125、RT225：	相容於 Fisher & Paykel Healthcare MR810 及 MR850 潮濕加熱器。Drager Babylog：適合 <25 L/min 的流量。
RT130、RT126、RT226：	僅與 MR850 潮濕加熱器相容。 (810) 「請勿」與 MR810 潮濕加熱器一起使用。

請參閱潮濕加熱器的使用說明。

介面連接	ISO 5356-1 圓錐形接頭
可壓縮容量	830 mL
60 cmH₂O 時的順應性	
不含配件	1.4 ± 0.09 mL/cmH ₂ O
含配件	1.4 ± 0.07 mL/cmH ₂ O (測量誤差為 0.02 mL/cmH ₂ O)

2.5 L/min 時的氣流阻力

不含配件	
吸氣端管路：	0.09 ± 0.04 cmH ₂ O
吐氣端管路：	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O
含配件	
吐氣端管路：	0.04 ± 0.04 cmH ₂ O (測量誤差為 0.03 cmH ₂ O)

最大操作壓力

RT125、RT126、RT130、RT131：	請參閱加濕水罐使用說明
RT225、RT226：	8 kPa

呼吸管路長度

吸氣管：	1.6 m
呼氣管：	1.6 m

最小管路內徑	10.2 mm
60 cmH₂O 時的漏氣量	<30 mL/min
潮氣容積	<185 mL

在 20 °C 至 26 °C 環境溫度下的總體效能		
	侵入式模式	
	RT125、RT131、RT225	RT126、RT130、RT226
加濕輸出	>33 mg/L	>33 mg/L
流速	4 – 15 L/min	0.8 – 6 L/min

在 23 °C 環境溫度下的一般效能	
	侵入式模式 RT126、RT130、RT226
加濕輸出	>33 mg/L
流速	0.3 – 6 L/min

標示定義

	水位不正確，更換加濕水罐	Rx only	處方產品
	加濕水罐的水位正確	CE 0123	CE 標誌 93/42/EEC
	查閱操作說明		製造日期
	屬於 BF 類別的零件		製造商
	非苯二甲酸酯類製品		有效日期
	非天然乳膠製品		最長使用 7 天
	單次使用		運輸及儲存溫度限制
LOT	批號	EC REP	歐盟授權代表
REF	參考號碼		注意／查閱使用說明

警告、注意事項及備註

⚠ 警告

- 「請勿」重複使用本產品。重複使用可能導致感染物質的傳播、治療中斷、嚴重傷害或死亡。
- 若使用未經 Fisher & Paykel Healthcare 認證的呼吸管路、加濕水罐、配件或組合，可能會使加濕系統效能不佳、呼吸器故障，並對患者／使用者造成傷害。
- 必須隨時適當地監控患者（例如血氧飽和度）。未妥善監控患者（例如在氣流中斷的情況下）可能導致嚴重傷害或死亡。
- 「請勿」觸摸加熱底盤或加濕水罐底座。表面可能超過 85 °C，未遵守此規定可能導致皮膚灼傷。

未遵守下列警告可能將損害裝置效能或危及安全（包括造成嚴重的潛在危害）：

- 當在靠近患者位置安裝潮濕加熱器時，請務必確保潮濕加熱器高度低於患者。
- 最長使用期限「不得」超過 7 天。
- 「請勿」將毯子、毛巾或床單等材料覆蓋在管路上。
- 「請勿」拉伸或擠壓管路。
- 「請勿」浸泡、清洗或消毒本產品。避免與化學品、清潔劑或乾式洗手液接觸。
- 如果水位高過最高水位，切勿使用此加濕水罐。
- 若在收到加濕水罐時密封不完整或加濕水罐曾經摔落，切勿使用。
- 使用加濕水罐時，「請勿」讓加濕水罐傾斜角度超過 10°。
- 「請勿」在取下藍色蓋子前刺穿水袋。如果加濕水罐正在超過 80 L/min 流量下工作，若浮球失效，水就會滲入管路。
- 使用前，目視檢查呼吸管路組是否損壞（例如，管路遭壓扁或連接頭破裂），如有損壞，請更換。
- 水源必須至少比加濕水罐高 50 cm。
- 「請勿」在無氣體流動時使用具有加熱絲的呼吸管路。如果氣流中斷，請關閉潮濕加熱器。
- 請確認已將供水管線連接至加濕水罐，而且水罐中有水。
- 切勿在加濕水罐中裝入溫度高於 37 °C 的水。
- 將呼吸裝置連接到患者之前，請確保已設定適當的呼吸器或氣流源警報。
- 避免患者皮膚長時間接觸加熱管路。
- 在將呼吸系統連接至患者前，先進行呼吸系統的壓力及洩漏測試及檢查有無堵塞。
- 加濕系統需使用美國藥典 (USP) 認證的無菌或同等級的水供患者使用。「請勿」在水中添加其他物質。
- 定期監視和排除管路中累積的冷凝水。
- 使用前請先檢查所有連接都已接牢。
- 檢查加熱絲是否沿管路均勻分佈，而沒有聚成一束或扭結。
- 應避免加熱管路直接接觸患者皮膚。在流量低於 0.8 L/min 時，表面溫度可達 50 °C。

備註

- 僅可在訓練有素的醫務人員監督下使用。
- 請依據相關醫院規章處置產品。丟棄時，使用者可能會接觸到患者呼吸道液體。
- 權責機構對相容性負責，包含潮濕加熱器，以及在使用前連接患者和其他設備的所有零件和配件。