


Caractéristiques principales et avantages

Corps RollFit XT

S'adapte dynamiquement afin de réduire les fuites et la pression sur la voûte du nez

Technologie VentiCool™

Harnais perméable à l'air conçu pour permettre la dissipation de la chaleur et de l'humidité

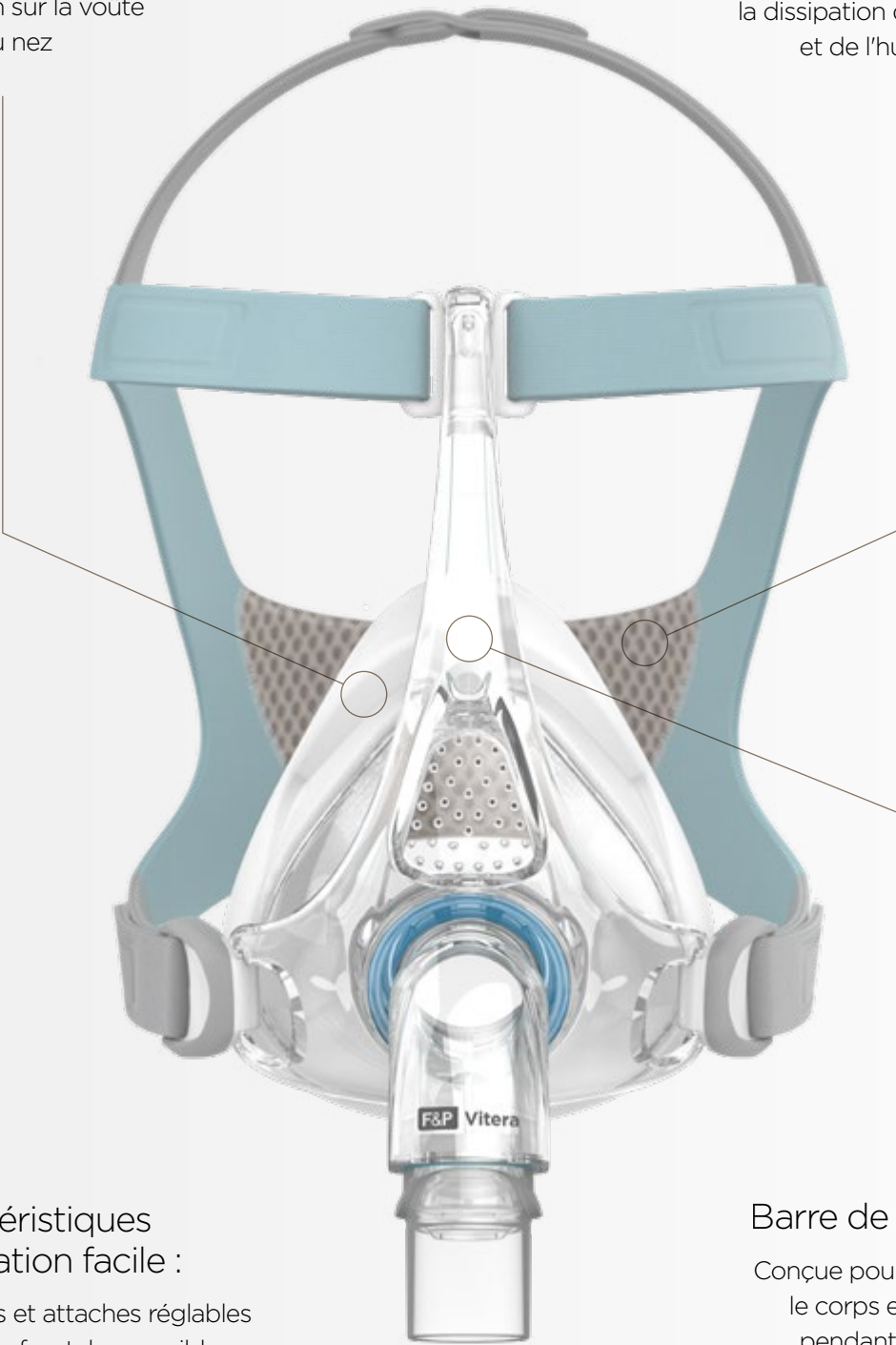

Caractéristiques d'utilisation facile :

- Harnais et attaches réglables
- Attache frontale amovible
- Indices de couleur VisiBlue™

Barre de stabilité

Conçue pour maintenir le corps en place pendant la nuit

Guide d'ajustement



Étape 1.

Tenez l'avant du masque d'une main et le harnais de l'autre. Vérifiez que l'une des attaches du harnais est décrochée du cadre.



Étape 2.

Placez le corps du masque sur votre visage et faites glisser le harnais sur votre tête.



Étape 3.

Raccrochez l'attache de harnais libre au cadre.



Étape 4.

Serrez doucement les sangles du harnais en commençant par celles du bas, puis ajustez légèrement les sangles frontales bleues.

Océanie, Canada, Europe occidentale, Moyen-Orient (modèle U)

CODE	DESCRIPTION
VITISU	Masque facial Vitera – Petit
VITIMU	Masque facial Vitera – Moyen
VITILU	Masque facial Vitera – Grand
VITISSU	Masque Vitera - Petit/petit (deux corps)*
VITIMMU	Masque Vitera - Moyen/moyen (deux corps)*
VITILLU	Masque Vitera - Grand/grand (deux corps)*
VITIMLU	Masque Vitera - Moyen/grand (deux corps)*

Pièces de rechange

CODE	DESCRIPTION
400VIT131	Masque facial sans harnais Vitera – Petit*
400VIT132	Masque facial sans harnais Vitera – Moyen*
400VIT133	Masque facial sans harnais Vitera – Grand*
400VIT111	Corps Vitera – Petit
400VIT112	Corps Vitera – Moyen
400VIT113	Corps Vitera – Grand

*Disponible uniquement dans certains pays

CODE	DESCRIPTION
400VIT121	Harnais Vitera - Petit
400VIT122	Harnais Vitera – Moyen/grand
400FPH241	Rotule F&P
400VIT151	Attache frontale et attaches Vitera
400VIT171	Coude pivotant Vitera

1. 39 participants sur 41 ont jugé le masque aussi stable que leur masque habituel, sinon plus. Étude de validation interne menée sur 41 participants aux États-Unis en 2017.
2. 37 participants sur 41 ont estimé que le masque était assez stable pour qu'ils puissent dormir dans la position de leur choix tout au long de la nuit. Étude de validation interne menée sur 41 participants aux États-Unis en 2017.
3. 38 participants sur 41 ont jugé le masque aussi confortable sur leur visage que leur masque habituel, sinon plus. Étude de validation interne menée sur 41 participants aux États-Unis en 2017.
4. Guilleminault, C., et Bassiri, A. Caractéristiques cliniques et évaluation du syndrome d'apnée/hypopnée obstructive du sommeil et syndrome de résistance des voies respiratoires supérieures. Dans : Kryger, M.H., Roth, T., et Dement, W.C. (Eds). Principes et pratique de la médecine du sommeil. Elsevier Sanders, Philadelphia, PA, 2015; 1043-1052.
5. Étude interne du test de perméabilité à l'air du tissu du modèle F&P Vitera avec la technologie VentiCool par rapport aux matériaux des harnais F&P Simplus™ et F&P FlexiFit™.

Vitera, RollFit, VentiCool, Simplus, FlexiFit et VisiBlue sont des marques de commerce de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Pour des renseignements sur les brevets, consultez la page www.fphcare.com/ip

Rendez-vous sur le site www.fphcare.com pour en savoir plus

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

F&P Vitera

Masque facial

Le confort repensé.

NOUVEAU



www.fphcare.com

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Le confort repensé.


Le confort est unique. Le confort est une affaire personnelle. Le confort est la clé d'un traitement par PPC réussi. C'est pourquoi nous pensons que le confort doit être évalué sur toute une nuit de sommeil, et non seulement à la première consultation.

Grâce aux technologies travaillant ensemble pour offrir stabilité, adaptabilité et perméabilité à l'air tout au long de la nuit, F&P Vitera est un masque qui redéfinit le confort.



Liberté de mouvement avec RollFit XT.

- S'adapte dynamiquement aux mouvements des patients de façon à maintenir le corps en place pendant la nuit
- Le corps en silicone souple roule d'avant en arrière afin de réduire la pression sur le nez
- Conçu pour s'adapter à une grande variété de formes de visage et de nez
- Forme de corps conçue pour réduire au minimum les fuites dans les yeux

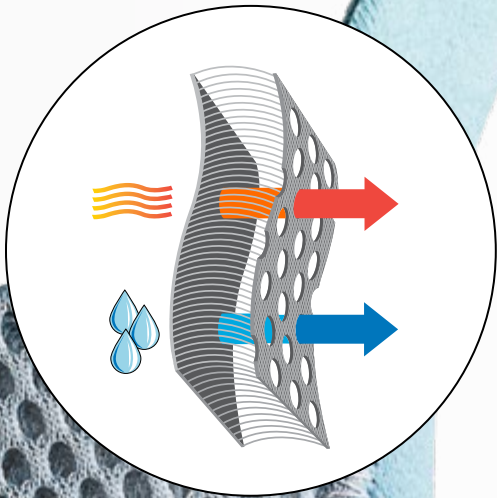


Fraîcheur et confort assurés avec VentiCool.

La transpiration pendant le sommeil est un symptôme bien connu des patients souffrant d'AOS.⁴



Le harnais Vitera est doté d'un tissu exclusif perméable à l'air laissant échapper plus d'air et d'humidité que le matériau utilisé dans notre gamme principale de masques faciaux.*

La technologie VentiCool aide à assurer aux patients fraîcheur et confort pendant leur sommeil.

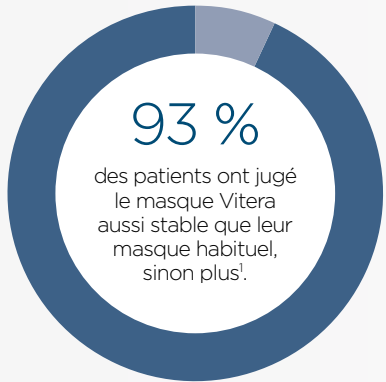

Stable et sécuritaire grâce à la stabilité dynamique.

La barre de stabilité et le corps RollFit™ XT garantissent une stabilité dynamique pour un maintien confortable et solide pendant la nuit.

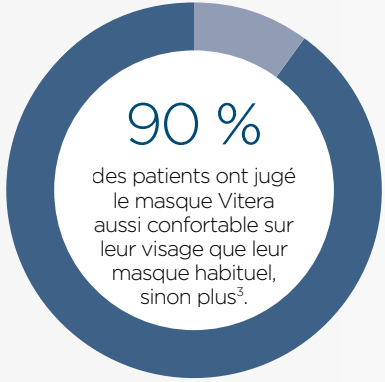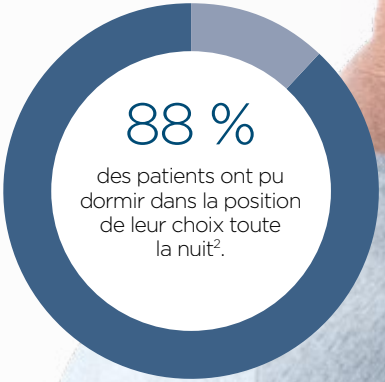

* Des tests internes montrent que, comparativement au harnais utilisé dans notre gamme de masques faciaux, le harnais pourvu de la technologie VentiCool offre une circulation de l'air 21 fois supérieure et une évacuation de l'humidité accrue de 32 %.⁵