


**F&P** Brevida™



# MÁSCARA CON ALMOHADILLAS NASALES

**Diseño de confianza.  
Construcción cómoda.**

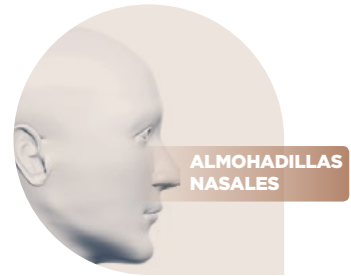

Ganarse la confianza del paciente es fundamental para lograr una terapia CPAP exitosa. Para lograr la confianza del paciente, tenemos que diseñar una máscara que se adapte a la cara y sea cómoda de llevar.



# F&P Brevida™ Características clave y ventajas

## Arnés ajustable

Arnés ajustable diseñado para permanecer en su sitio mientras el paciente duerme.

## Sello AirPillow™

La innovadora tecnología AirPillow™ se infla para proporcionar un sellado cómodo y efectivo.



## VisiBlue™

Las marcas azules incorporadas en los componentes clave de la máscara ayudan a los pacientes con el uso diario.

## Difusor lavable

El difusor, que reduce el ruido y la corriente de aire, es ahora lavable y más duradero.



# El innovador sello F&P Brevida™ AirPillow™

## Dos tamaños de sello

Extra pequeño-pequeño y mediano-grande.

## Sello suave y súper delgado


Región del sello fabricada con silicona suave ultra delgada (0,25 mm) para proporcionar un sellado cómodo.

## Almohadillas versátiles

Geometría versátil de la almohadilla que se adapta a una amplia gama de tamaños de fosas nasales.

## Soportes laterales estabilizadores

Soportes laterales diseñados para reducir la probabilidad de desprendimiento del sello durante la noche.

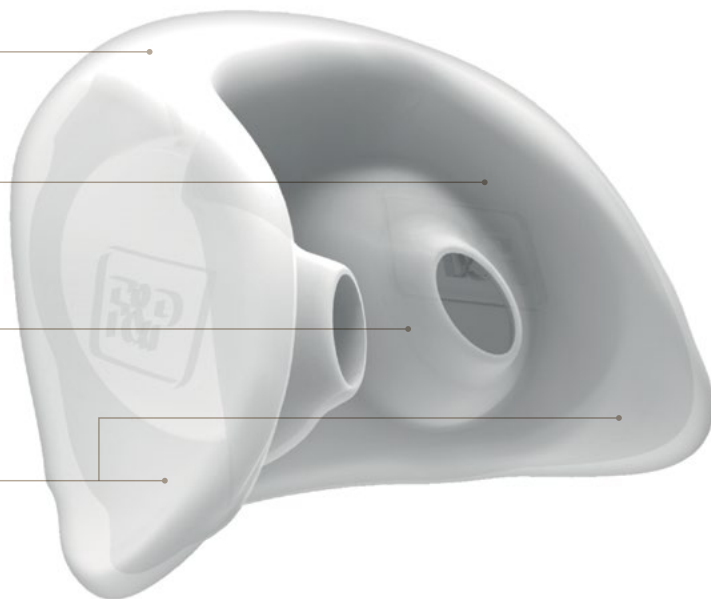


## Sello cómodo y suave

El sello AirPillow™ se infla para formar una almohadilla cómoda de aire y sellos dentro y alrededor de la nariz.


### Sello de almohadilla nasal F&P AirPillow™

Sellos dentro y  
alrededor de la nariz

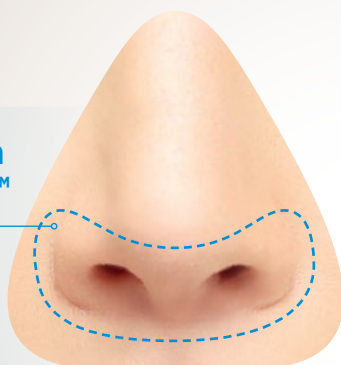

### Sellos de almohadilla nasal tradicionales

Sellos directos en las  
fosas nasales

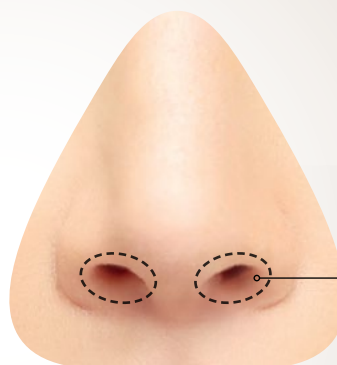

# Cómo colocar el F&P Brevida™



01

**Paso 1.**  
**Sostenga el sello de silicona lejos de la nariz** y use los dedos para extender suavemente los soportes laterales del sello de silicona. Posteriormente, pase las dos aberturas por las fosas nasales.



02

**Paso 2.**  
**Sostenga el marco de la máscara con una mano** y pase el arnés por encima de la cabeza con la otra mano, colocando las tiras encima de las orejas siguiendo la imagen anterior.



03

**Paso 3.**  
**Apriete y afloje cuidadosamente las tiras del arnés** en los laterales del arnés hasta que consiga un sello cómodo.

## CÓDIGOS PARA REALIZAR PEDIDOS EN NORTEAMÉRICA Y ASIA-PACÍFICO

<b>MASCARILLAS</b>		400BRE114	Sello Brevida mediano-grande (50 uds.)
BREISA	Brevida extra pequeño-pequeño (un sello XS-S)	400BRE120	Arnés Brevida
BREIMA	Brevida mediano-grande (un sello M-L)	400BRE151	Pasadores de arnés Brevida (10 uds.)
BREISMA	Brevida XS-S y M-L (dos sellos)	400BRE161	Difusor Brevida (10 uds.)
		400BRE171	Codo Brevida
<b>PIEZAS DE REPUESTO</b>		400FPH241	Pieza giratoria 2 de F&P
400BRE111	Sello Brevida extra pequeño-pequeño	400BRE131	Máscara Brevida sin arnés, XS-S
400BRE112	Sello Brevida mediano-grande	400BRE132	Máscara Brevida sin arnés, M-L
400BRE113	Sello Brevida extra pequeño-pequeño (50 uds.)		

## CÓDIGOS PARA REALIZAR PEDIDOS EN EUROPA / ÁFRICA / SUDAMÉRICA

<b>MASCARILLAS</b>		400BRE114	Sello Brevida mediano-grande (50 uds.)
BREISU	Brevida extra pequeño-pequeño (un sello XS-S)	400BRE120	Arnés Brevida
BREIMU	Brevida mediano-grande (un sello M-L)	400BRE151	Pasadores de arnés Brevida (10 uds.)
BREISMU	Brevida XS-S y M-L (dos sellos)	400BRE161	Difusor Brevida (10 uds.)
		400BRE171	Codo Brevida
<b>PIEZAS DE REPUESTO</b>		400FPH241	Pieza giratoria 2 de F&P
400BRE111	Sello Brevida extra pequeño-pequeño		
400BRE112	Sello Brevida mediano-grande		
400BRE113	Sello Brevida extra pequeño-pequeño (50 uds.)		