

Présentation du F&P Airvo™, 2 qui fournit une assistance respiratoire et une humidification des voies respiratoires.

L'Airvo 2 est une solution intégrée pour l'administration du traitement à haut débit Optiflow. La technologie d'humidification de pointe de Fisher & Paykel Healthcare permet à l'Airvo 2 de fournir, de manière confortable, des débits élevés d'air humidifié (avec oxygénothérapie, selon les besoins) aux patients respirant spontanément, via les interfaces Optiflow exclusives.

Température et débit réglables

- Trois réglages de température, dont 37 °C (pression et température du corps avec saturation en vapeur d'eau pour un patient normothermique), c.-à-d. humidité optimale
- Le générateur de débit intégré délivre une large plage de débits de 10 à 60 L/min pour les patients adultes et de 2 à 25 L/min pour les enfants
- Ne nécessite pas d'alimentation murale en air

Interface nasale Optiflow+

- Technologie Evagua[™] F&P qui réduit la formation de condensation mobile
- · Canules douces et souples
- · Les canules s'adaptent aux narines du patient

Apport d'oxygène (le cas échéant)


- · L'oxygène peut être ajouté à partir d'une alimentation murale ou d'une bouteille
- L'analyseur d'oxygène par ultrasons intégré ne nécessite ni étalonnage, ni maintenance, ni remplacement



Des animations affichées à l'écran sont utiles pour faciliter l'installation et la résolution de problèmes

Circuit respiratoire chauffant F&P AirSpiral™

• Ne nécessite ni sonde de température séparée, ni adaptateur de fil chauffant

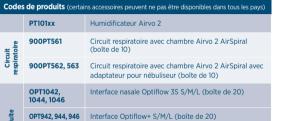

Interface de trachéotomie Optiflow+ (boîte de 20)

Inte	OPT971	Pièce de protection anti-expectorations de rechange (boîte de 20)
	ОРТ980	Interface d'adaptateur de masque Optiflow+ (boîte de 20)
Interface Junior	OPT 316, 318	Optiflow Junior L/XL (boîte de 20)
	OJR416, 418	Interface nasale Optiflow Junior 2 L/XL (boîte de 20)
	OJR520	Interface nasale Optiflow Junior 2+ XXL (boîte de 10)
	900PT421	Potence mobile

Plateau de montage sur potence 900PT426 Panier en plastique 900PT427 Porte-bouteille d'oxygène 900PT411 Kit de montage d'onduleur



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fphcare.com/airvo

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua et Optiflow sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd Classe du dispositif médical : Classe IIa Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

OPT970

900PT405

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical Taltention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être enu responsable si cela venait à se produire.