

Somministrazione della terapia ad alto flusso F&P Optiflow™



F&P Airvo™ 2, un prezioso strumento di supporto respiratorio e idratazione delle vie aeree.

Airvo 2 è una soluzione integrata per la somministrazione della terapia ad alto flusso Optiflow. L'avanzata tecnologia di umidificazione di Fisher & Paykel Healthcare consente ad Airvo 2 di erogare in modo confortevole alti flussi di aria umidificata (con l'aggiunta di ulteriore ossigeno, se necessario) a pazienti che respirano spontaneamente, attraverso le esclusive interfacce della serie Optiflow.

Impostazioni di temperatura e flusso regolabili

- Tre impostazioni della temperatura, tra cui 37 °C (temperatura corporea e pressione saturata per pazienti normotermici), ovvero umidità ottimale
- Erogazione di un ampio intervallo di flussi (10-60 L/min per i pazienti adulti e 2-25 L/min per quelli pediatrici) grazie al generatore di flusso integrato
- Non servono erogatori d'aria a parete

Interfaccia nasale Optiflow+

- La tecnologia F&P Evaqua™ riduce la formazione di condensa nel circuito
- Cannule morbide e flessibili
- Cannule sagomate per aderire al naso del paziente

Ossigeno supplementare (se necessario)

- È possibile aggiungere ossigeno usando un erogatore a parete o una bombola
- L'analizzatore di ossigeno a ultrasuoni integrato non richiede calibrazione, assistenza o sostituzione



Semplicità di installazione, impiego e pulizia

- Impostazione e risoluzione dei problemi facilitate da utili animazioni su schermo


Circuito respiratorio riscaldato F&P AirSpiral™

- Non sono necessari sonde della temperatura o cavi per riscaldamento circuiti separati

Un sistema integrato per l'erogazione della terapia ad alto flusso Optiflow

- Airvo 2 offre versatilità, mobilità e comodità grazie alla sua ampia gamma di accessori

Codici prodotto (alcuni accessori possono non essere disponibili in tutti i Paesi)		
Circuito respiratorio	PT101xx	Umidificatore Airvo 2
	900PT561	Kit circuito e camera di umidificazione AirSpiral per Airvo 2 (pacco da 10)
	900PT562, 563	Kit circuito e camera di umidificazione AirSpiral per Airvo 2 con adattatore per nebulizzatore (pacco da 10)
Interfacce adulti	OPT1042, 1044, 1046	Interfacce nasali Optiflow 3S S/M/L (pacco da 20)
	OPT942, 944, 946	Interfacce Optiflow+ S/M/L (pacco da 20)
	OPT970	Interfaccia per tracheostomia Optiflow+ (pacco da 20)
	OPT971	Ricambi per deflettore espettorato (pacco da 20)
	OPT980	Interfaccia adattatore maschera Optiflow+ (pacco da 20)
Interfacce pediatriche	OPT 316, 318	Optiflow Junior L/XL (pacco da 20)
	OJR416, 418	Interfacce nasali Optiflow Junior 2 L/XL (pacco da 20)
	OJR520	Interfaccia nasale Optiflow Junior 2+ XXL (pacco da 10)
Hardware	900PT421	Supporto ad asta mobile
	900PT405	Vassoio di appoggio su asta
	900PT426	Cestello in plastica
	900PT427	Sostegno bombola dell'ossigeno
	900PT411	Kit di montaggio UPS

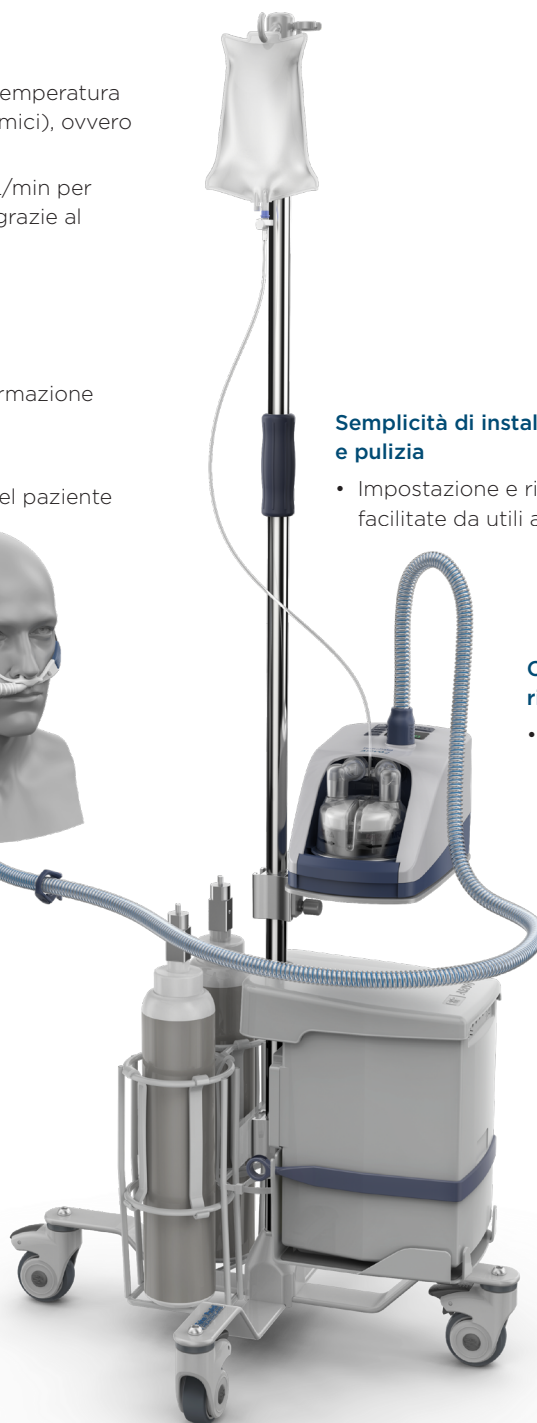

Scopri di più su www.fphcare.com/airvo

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua e Optiflow sono marchi di fabbrica di Fisher & Paykel Healthcare Limited.

185048296-IT REV D © 2022 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel
HEALTHCARE