


F&P **AIRVO 2**

Umidificatore **AIRVO™ 2** con generatore di flusso integrato

AIRVO 2 genera alti flussi di gas respiratori riscaldati e umidificati, erogati al paziente tramite vari tipi di interfacce nasali, per tracheostomia e maschera.

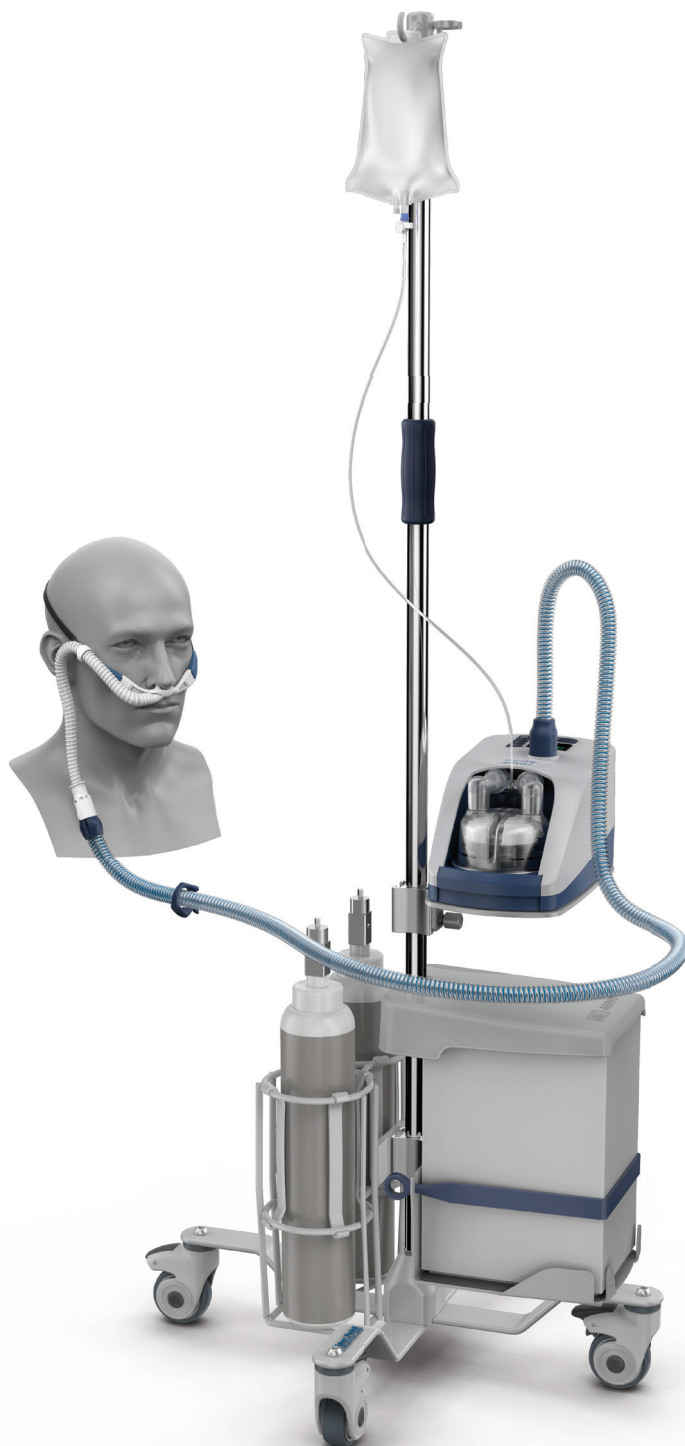

AIRVO 2 | CARATTERISTICHE

Grazie al suo generatore di flusso integrato e all'innovativo sistema di erogazione di ossigeno, AIRVO 2 fornisce un'efficace soluzione versatile per l'erogazione dell'ossigenoterapia.

Prestazioni elevate

- Studiate per superare lo standard ISO per l'umidificazione respiratoria
- Fino a 60 L/min di ossigeno supplementare


Versatile

- Diverse interfacce paziente Optiflow™ per vie respiratorie superiori e bypassate
- Ampio intervallo di flusso: 2-60 L/min

Impostazione e utilizzo

- Menu display grafico per le impostazioni
- Miscelazione di O₂ integrata
- Sensore O₂ incorporato
- Nessuna necessità di sonde né di fonti esterne di aria

ACCESSORI

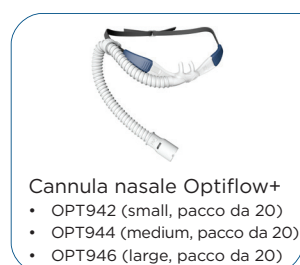


Cannula nasale Optiflow+

- OPT942 (small, pacco da 20)
- OPT944 (medium, pacco da 20)
- OPT946 (large, pacco da 20)



Cannula nasale Optiflow Junior

- OPT316/OJR416 (lattante)
- OPT318/OJR418 (pediatrica)

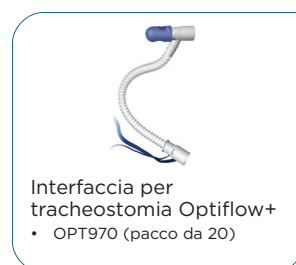

Interfaccia per tracheostomia Optiflow+

- OPT970 (pacco da 20)



Adattatore di interfaccia per mascherina Optiflow+

- OPT980 (pacco da 20)



Kit circuito e camera

- 900PT561 (pacco da 10)



Kit di disinfezione

- 900PT600



Stick in spugna per pulizia

- 900PT602 (pacco da 20)



Filtro di disinfezione

- 900PT601 (pacco da 2)



Filtro aria

- 900PT913 (pacco da 2)



Kit per ingresso ossigeno

- 900PT422



Piano di appoggio su asta

- 900PT405



Asta su ruote

- 900PT421



Kit di montaggio gruppo di continuità

- 900PT411



Porta bombola di ossigeno

- 900PT427

UMIDIFICATORE AIRVO 2 CON GENERATORE DI FLUSSO INTEGRATO

Destinazione d'uso	L'umidificatore AIRVO 2 è terapeutico per quei pazienti che respirano spontaneamente e desiderano trarre beneficio inalando gas respiratori riscaldati e umidificati ad alto flusso. Sono compresi anche i pazienti che hanno subito un bypass delle alte vie respiratorie. Il flusso può essere compreso tra 2 e 60 L/min in base all'interfaccia paziente. AIRVO 2 è destinato a pazienti che si trovano in ospedale e in strutture per lungodegenze.
Produzione di umidità	Conforme alla norma ISO 8185:2007.
Impostazioni del flusso	Da 10 a 60 L/min (con incrementi di 5 L/min) (impostazione predefinita) Da 2 a 25 L/min (con incrementi di 1 L/min) (modalità pediatrica)
Interfacce paziente	Cannule nasali F&P Optiflow+ Interfacce per tracheostomia F&P Optiflow+ Maschere con connessione standard da 22 mm
Modelli	PT101AZ / PT101EE / PT101EW / PT101UK / PT101US / PT101AN / PT101JP / PT101KR
Dimensioni	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6" x 6,7" x 6,9")
Peso	2,2 kg (4,8 lb) - solo unità 3,4 kg (7,5 lb) - imballato, con sacca e accessori compresi
Parametri elettrici	50-60 Hz 100-115 V ~ 2,2 A (max 2,4 A) 220-240 V ~ 1,8 A (max 2,0 A)

Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili nel proprio paese. Contattare il rappresentante locale della Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, AIRVO e Optiflow sono marchi di Fisher & Paykel Healthcare.