

Somministrazione della terapia ad alto flusso F&P Optiflow™ +
nei pazienti con tracheostomia



F&P Airvo™ 2, un prezioso strumento di supporto respiratorio e idratazione delle vie respiratorie.

Airvo 2 è una soluzione integrata per la somministrazione della terapia ad alto flusso Optiflow ai pazienti con tracheostomia. L'avanzata tecnologia di umidificazione di Fisher & Paykel Healthcare consente ad Airvo 2 di erogare in modo confortevole alti flussi di aria umidificata (con ossigeno supplementare, se necessario) a pazienti che respirano spontaneamente, attraverso l'esclusiva interfaccia per tracheostomia Optiflow+.

Interfaccia per tracheostomia Optiflow+

- La tecnologia F&P Evaqua™ riduce la formazione di condensa nel circuito in prossimità del paziente
- Possibilità di utilizzo di interfacce a collegamento diretto e con collare per tracheostomia

Ossigeno supplementare (se necessario)

- FiO₂ dal 21% al 100%
- L'analizzatore di ossigeno a ultrasuoni integrato non richiede calibrazione, assistenza o sostituzione

Semplicità di installazione, impiego e pulizia

- Utili animazioni su schermo aiutano nell'impostazione e nella risoluzione dei problemi

Impostazioni del flusso regolabili

- Il generatore di flusso integrato è in grado di somministrare un ampio range di flussi (10-60 L/min)
- Non necessita di compressori o erogatori d'aria a parete

Circuito respiratorio riscaldato F&P AirSpiral™

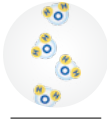
- Non sono necessari sonde, cavi o adattatori esterni

Vapore acqueo e altre particelle

L'umidificatore F&P Airvo 2 è progettato per generare vapore acqueo (molecole).

I nebulizzatori e altri sistemi per l'erogazione di aerosol sono progettati per generare particelle d'acqua liquide. A differenza delle particelle d'acqua liquide, il vapore acqueo non può fungere da vettore per il trasporto di patogeni.

Dimensioni delle particelle e dei patogeni

Patogeni			
Vapore acqueo	Virus	Batteri	Particelle d'acqua nebulizzate
			
<0,001 micron	0,02 - 0,3 micron	0,3 - 10 micron	1 - 10 micron

Codici prodotto (*alcuni accessori possono non essere disponibili in tutti i Paesi)

PT101xx	Umificatore Airvo 2
900PT561	Kit circuito e camera di umidificazione AirSpiral per Airvo 2 (pacco da 10)
*900PT562, 563	Kit circuito e camera di umidificazione AirSpiral per Airvo 2 con adattatore per nebulizzatore (pacco da 10)
OPT970	Interfaccia per tracheostomia Optiflow+ (pacco da 20)
OPT971	Ricambi per deflettore per espettorato (pacco da 20)
OPT980	Interfaccia adattatore maschera Optiflow+ (pacco da 20)

Per maggiori informazioni visitare il sito www.fphcare.com/airvo

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua e Optiflow sono marchi di fabbrica di Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia per tracheostomia Optiflow+, avvertenze e precauzioni comprese, leggere le istruzioni per l'uso.

613968 REV B © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel
HEALTHCARE