

Aplicação da Terapia de Alto Fluxo F&P Optiflow™+com Traqueostomia



Apresentando o F&P Airvo™ 2 para fornecimento de suporte respiratório e hidratação das vias aéreas.

O Airvo 2 é uma solução integrada para o fornecimento da terapia de alto fluxo com traqueostomia Optiflow. A tecnologia líder em umidificação da Fisher & Paykel Healthcare permite que o Airvo 2 forneça, de forma confortável, altos fluxos de ar umidificado (com oxigênio suplementar, se necessário) para pacientes sob respiração espontânea, por meio da interface para traqueostomia Optiflow+.

Interface para traqueostomia Optiflow+

- Tecnologia F&P Evaqua™, que reduz a formação de condensação móvel próximo ao paciente
- Opções para conexão direta e outras interfaces para traqueostomia

Oxigênio suplementar (conforme necessário)

- FiO₂ 21% a 100%
- O analisador de oxigênio ultrassônico integrado não requer calibração, nem manutenção, nem substituição

Projetado para simplicidade na montagem, na utilização e na limpeza

- Animações úteis na tela auxiliam na configuração e na solução de problemas

Configurações de fluxo ajustáveis

- O gerador de fluxo integrado oferece uma ampla gama de fluxos (10 a 60 L/min)
- Não é necessário compressor nem fonte de ar comprimido externo.

Circuito respiratório aquecido F&P AirSpiral™

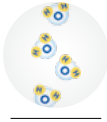
- Sem necessidade de sensores, cabos ou adaptadores externos

Vapor de água e outras partículas

O umidificador F&P Airvo 2 foi criado para gerar vapor de água (moléculas).

Nebulizadores e outros sistemas de fornecimento de aerossol foram criados para gerar partículas líquidas de água. Ao contrário das partículas líquidas de água, o vapor de água não pode agir como vetor para transporte de patógenos.

Tamanhos de partículas e de patógenos

Patógenos			
Vapor de água	Virus	Bactérias	Partículas de água nebulizadas
			
< 0,001 micrômetro	0,02 - 0,3 micrômetro	0,3 - 10 micrômetros	1 - 10 micrômetros

Códigos dos produtos

(* alguns acessórios podem não estar disponíveis em todos os países)

PT101xx	O umidificador Airvo 2
900PT561	Kit de circuito e câmara Airvo 2 AirSpiral (embalagem com 10 unidades)
*900PT562, 563	Kit de circuito e câmara Airvo 2 AirSpiral com adaptador para nebulizador (embalagem com 10 unidades)
OPT970	Interface para Traqueostomia Optiflow+ (embalagem com 20 unidades)
OPT971	Protetor de secreção sobressalente (embalagem com 20)
OPT980	Interface para adaptador para Máscara Optiflow+ (embalagem com 20 unidades)

Saiba mais em www.fphcare.com/airvo

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua, e Optiflow são marcas registradas da Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Para obter mais informações sobre a interface para traqueostomia Optiflow+, inclusive advertências e precauções, leia as instruções de uso.

613974 REV B © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel
HEALTHCARE