

患者レポート - 2016/12/16 - 2017/01/14

患者情報

名前:	サンプル 患者	電話番号:	0123456789
患者ID:	1234	電子メール:	example@example.com
生年月日	1960/01/01	性別:	その他

医師:	サンプル 医師	電話番号:	012345678
-----	---------	-------	-----------

平均AHI:	平均使用時間 (hr:min):	使用状況*:	* 直近の 30 日間
5.8	5:37	87 %	2016/12/16以降で4時間以上使用した日の割合

装置情報

2017/01/14時点の設定

装置モデル:	SleepStyle Auto	加湿レベル:	5.0
シリアル番号:	11111111111	呼気リリーフ:	2
治療モード:	Auto	SensAwake:	On
最低圧設定:	6.0 cmH ₂ O	SensAwake圧:	6.0 cmH ₂ O
最高圧設定:	13.0 cmH ₂ O		



使用状況

	30日間の進行状況 2016/12/16 - 2017/01/14	設定日から 2016/07/19 - 2017/01/14
合計日数:		
装置を使用した日数:	27 (90 %)	168 (93 %)
4時間以上使用した日数:	26 (87 %)	160 (89 %)
使用しなかった日数:	3 (10 %)	12 (7 %)
平均使用時間(治療日数):	6:15	6:58
平均使用時間(全日数):	5:37	6:30
合計稼働時間:	169:00	1188:12

治療データ**

AHI:	5.8	無呼吸時間:	13 秒	その他のイベント:	0.5
圧力:	7 cmH ₂ O	90パーセントail 圧力:	10 cmH ₂ O	最高設定圧 (%時間):	4 %
システムリーク:	42 l/min	90パーセントail システムリーク	62 l/min	過剰リーク (%時間):	13 %
SensAwake検出回数:	17	SensAwakeオン(%時間):	100 %		

使用環境

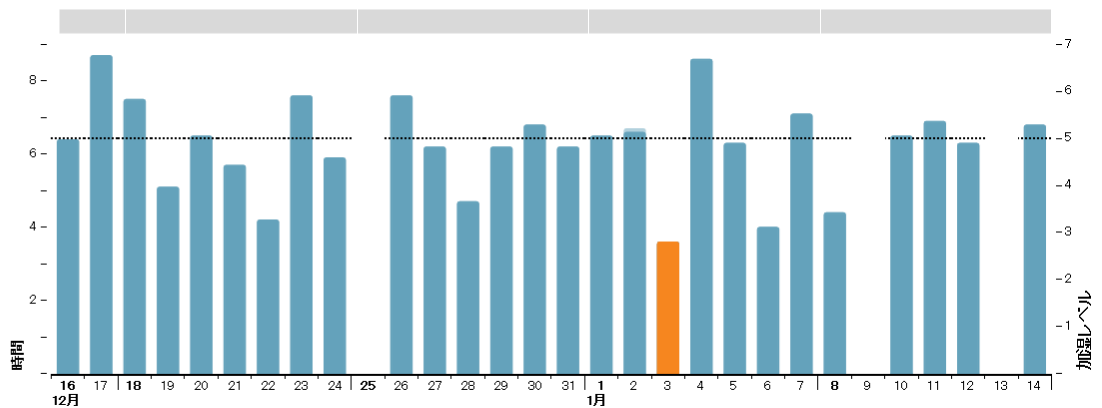
周囲温度:	24 ° C
-------	--------

使用状況

時間

平均: 5:37
使用率(日数): 90 %

■ 合計稼働時間
■ 合計使用時間
■ 使用時間<4時間
..... 加湿レベル



患者レポート - 2016/12/16 - 2017/01/14

患者情報

名前:	忍耐強い 例	電話番号:	0123456789
患者ID:	1234	電子メール:	example@example.com
生年月日	1960/01/01	性別:	その他

AHI

イベント数/時間

AHI: 5.8

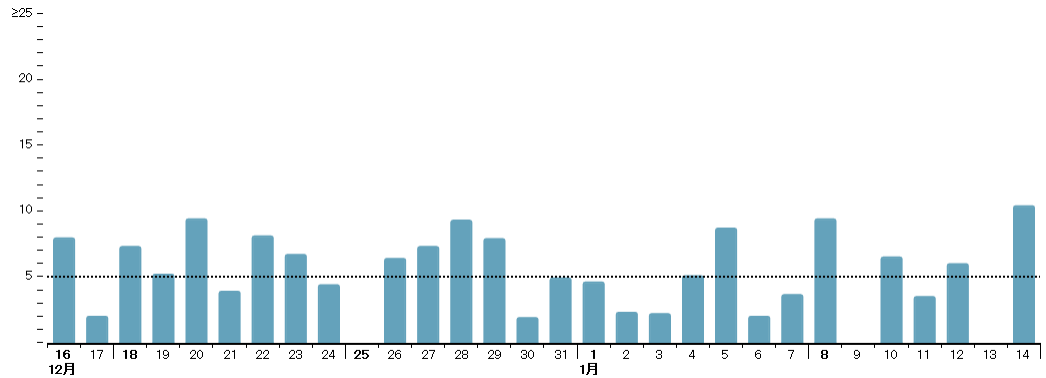
その他のイベント指数: 0.5

OAI: 1.1

HI: 4.2

■ 合計AHI

..... AHI = 5



圧力

cmH₂O

平均: 7.0

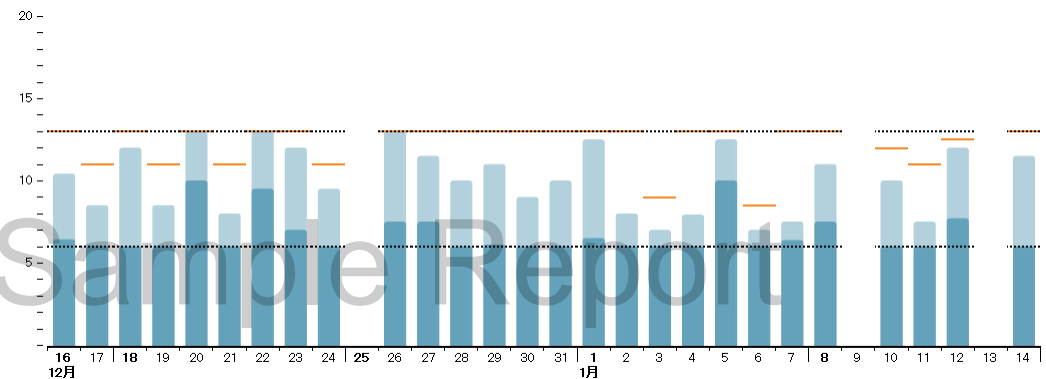
90パーセンタイル値: 10.0

■ 平均

■ 90パーセンタイル値

— 最高到達圧

..... 最低/最高



システムリーク

l/min

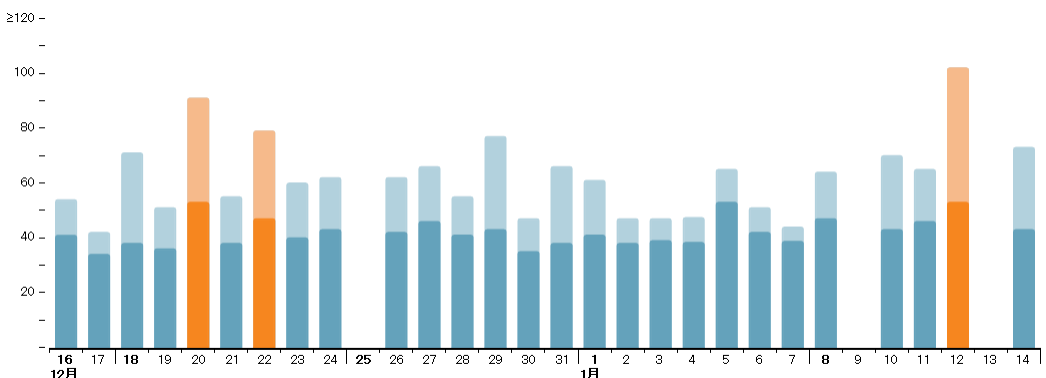
平均: 42

90パーセンタイル値: 62

■ 平均

■ 90パーセンタイル値

■ 高リーク



使用状況

時間

平均: 5.37

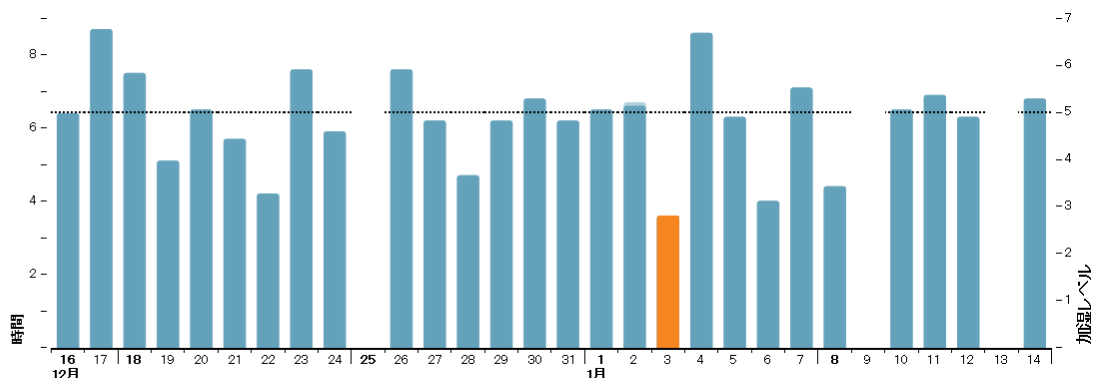
使用率(日数): 90 %

■ 合計稼働時間

■ 合計使用時間

■ 使用時間<4時間

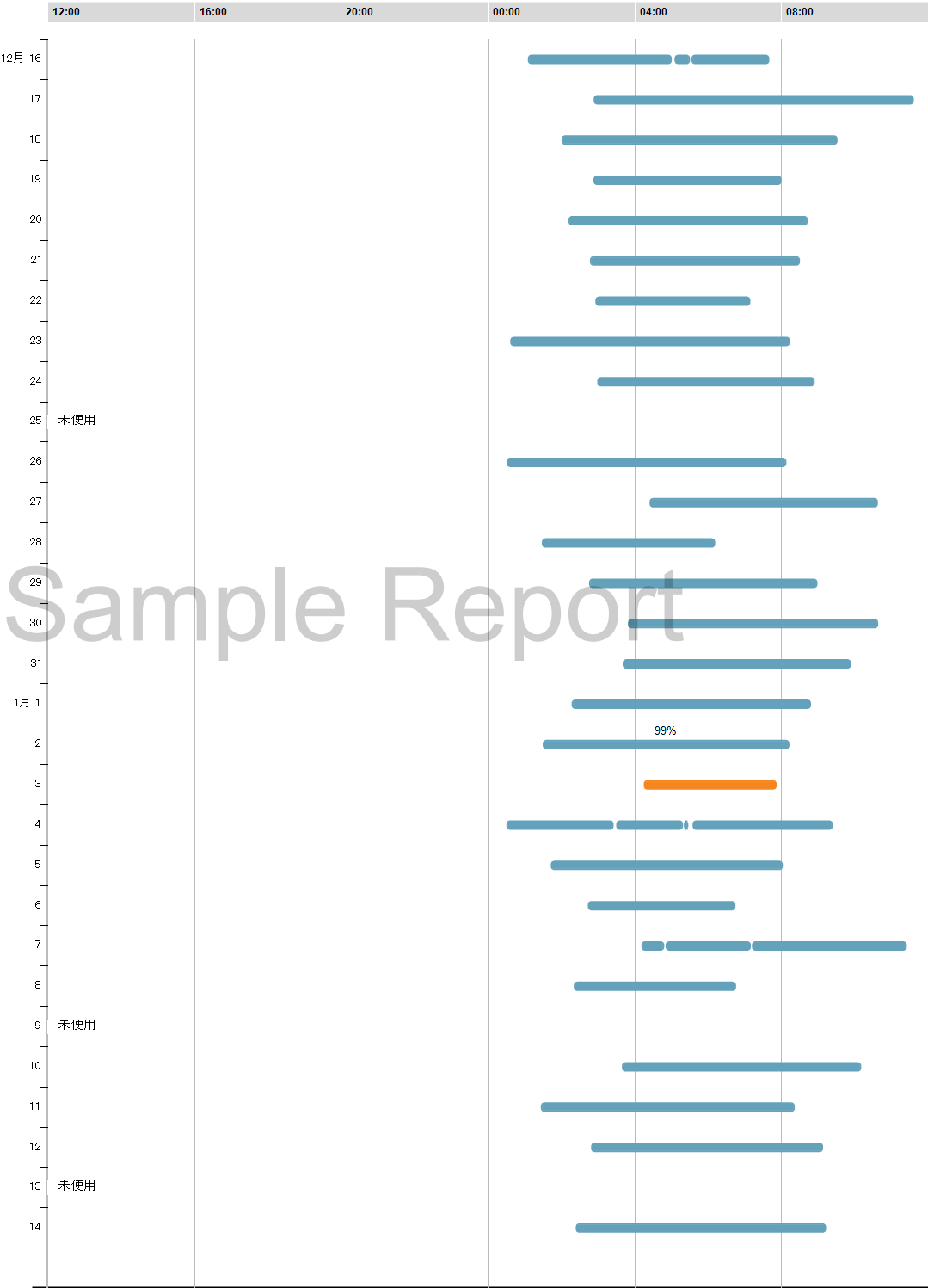
..... 加湿レベル



コンプライアンス概要	名前:	忍耐強い 例	電話番号:	0123456789
	患者ID:	1234	電子メール:	example@example.com
	生年月日	1960/01/01	性別:	その他

処方履歴

PMin: 6.0 PMax: 13.0
H: 5.0 SA: 6.0 ER: 2.0



患者レポート - 2016/12/16 - 2017/01/14

2017/01/08

日曜日 02:20 - 06:44

名前: 忍耐強い 例

患者ID: 1234

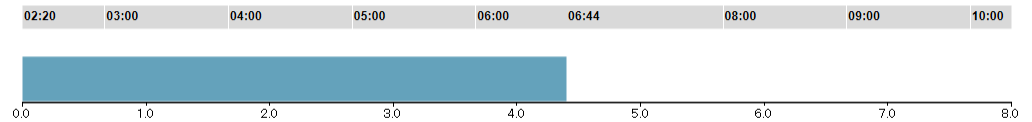
生年月日 1960/01/01

電話番号: 0123456789

電子メール: example@example.com

性別: その他

稼働時間

合計稼働時間: 4.24
使用率: 100 %

イベント

AHI: 9.4

閉塞性無呼吸: 11

OAI: 2.5

低呼吸: 28

HI: 6.4

その他のイベント: 2

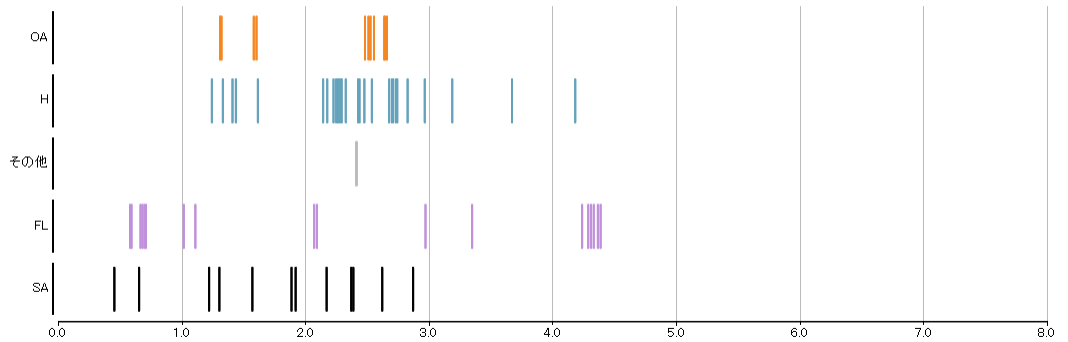
その他のイベント指数: 0.5

フローリミテーション: 18

FL/時間: 4.1

SensAwake: 12

SensAwake/時間: 3.0



圧力

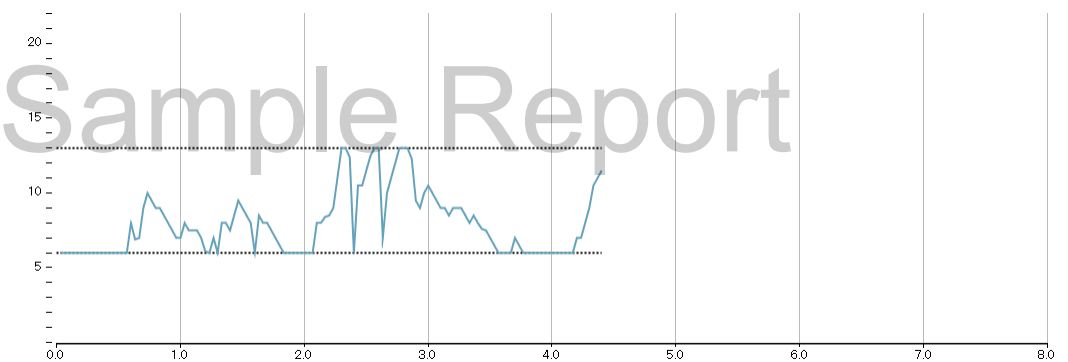
cmH₂O

中央値

90パーセンタイル値

ランプ作動時間

最低/最高

7.5
11.0

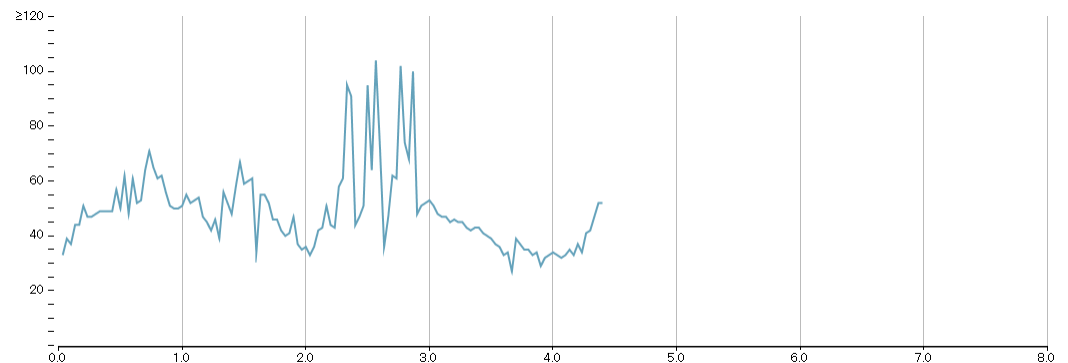
システムリーク

l/min

中央値

90パーセンタイル値

過剰リーク(%時間): 17 %

47
64圧力毎の時間と
イベント回数

圧 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分)	0	0	94	30	44	40	16	14	10	16	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	1	0	2	1	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	3	2	5	2	6	3	7	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	1	7	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0

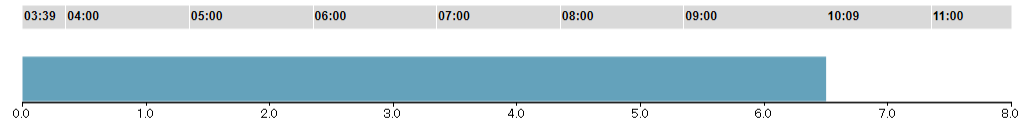
患者レポート - 2016/12/16 - 2017/01/14

2017/01/10

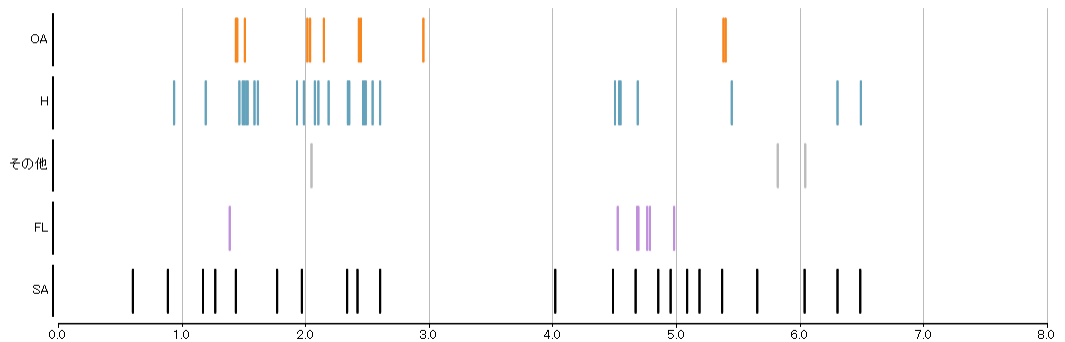
火曜日 03:39 - 10:09

名前: 忍耐強い 例
患者ID: 1234
生年月日: 1960/01/01電話番号: 0123456789
電子メール: example@example.com
性別: その他

稼働時間

合計稼働時間: 6:30
使用率: 100 %

イベント

AHI: 6.5
閉塞性無呼吸: 11
OAI: 1.7
低呼吸: 28
HI: 4.3
その他のイベント: 3
その他のイベント指数: 0.5
フローリミテーション: 7
FL/時間: 1.1
SensAwake: 22
SensAwake/時間: 3.4

圧力

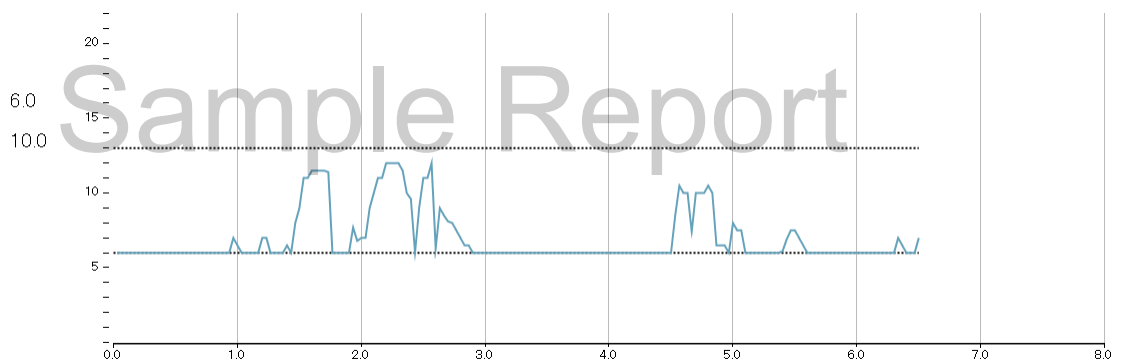
cmH₂O

中央値

90パーセンタイル値

ランプ作動時間

最低/最高



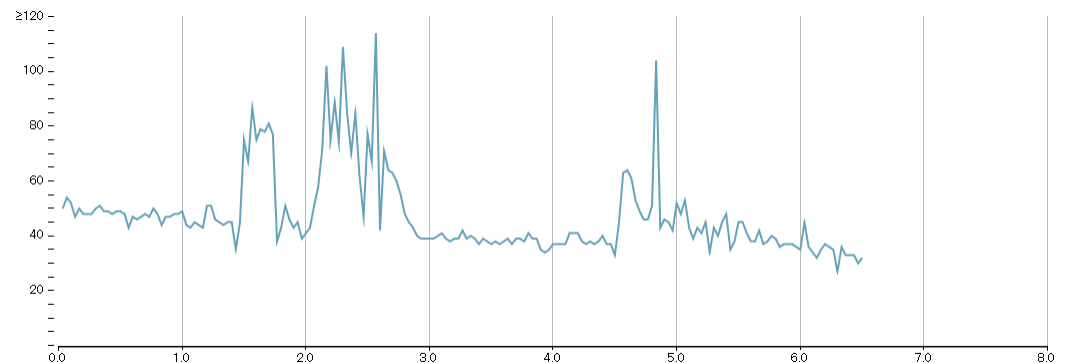
システムリーク

l/min

中央値

90パーセンタイル値

過剰リーク(%時間): 14 %



圧力毎の時間とイベント回数

圧 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分)	0	0	260	42	20	12	18	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	4	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	5	3	4	4	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	1	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

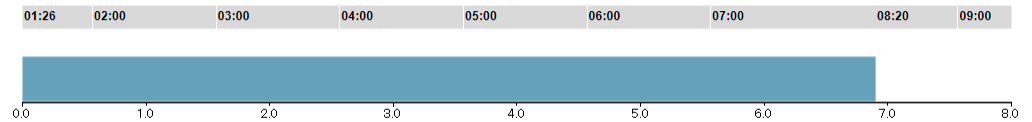
患者レポート - 2016/12/16 - 2017/01/14

2017/01/11

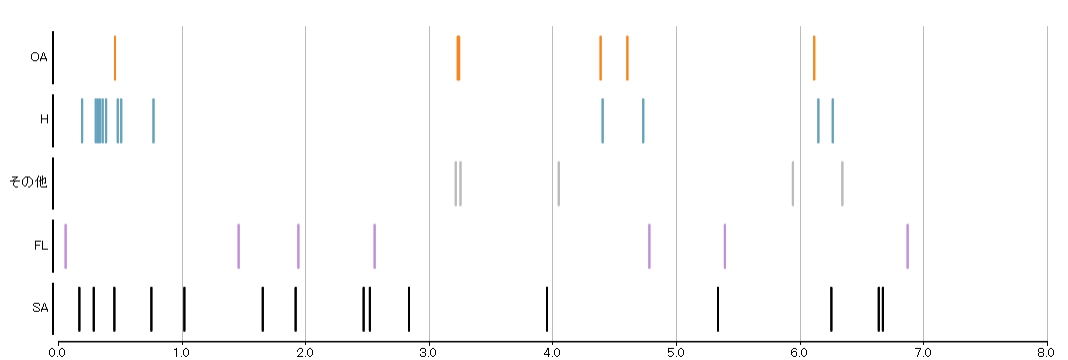
水曜日 01:26 - 08:20

名前: 忍耐強い 例
患者ID: 1234
生年月日: 1960/01/01電話番号: 0123456789
電子メール: example@example.com
性別: その他

稼働時間

合計稼働時間: 6.54
使用率: 100 %

イベント

AHI: 3.5
閉塞性無呼吸: 6
OAI: 0.9
低呼吸: 13
HI: 1.9
その他のイベント: 5
その他のイベント指数: 0.7
フローリミテーション: 7
FL/時間: 1.0
SensAwake: 15
SensAwake/時間: 2.2

圧力

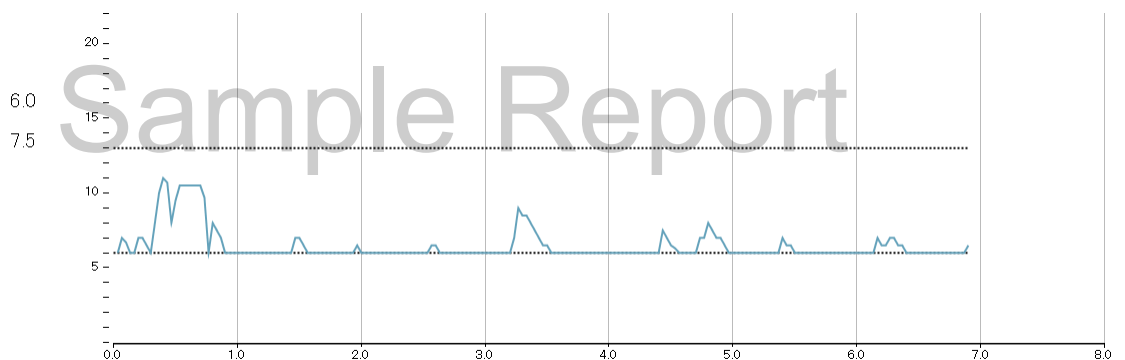
cmH₂O

中央値

90パーセンタイル値

ランプ作動時間

最低/最高



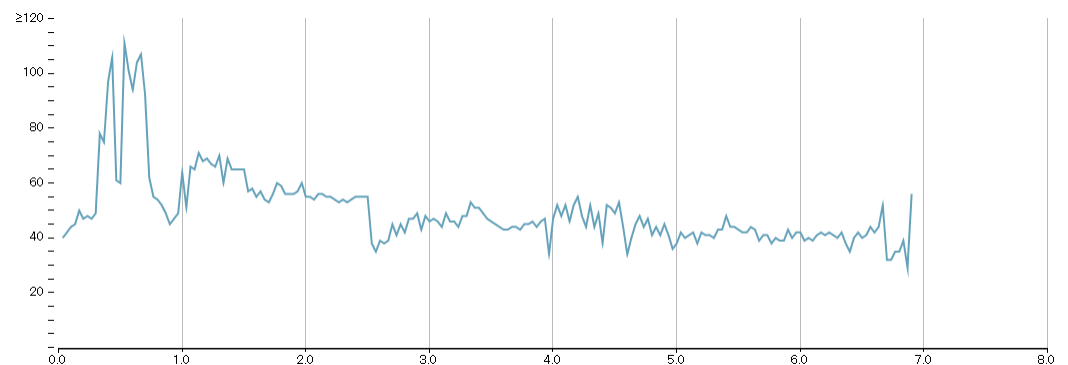
システムリーク

l/min

中央値

90パーセンタイル値

過剰リーク(%時間): 13 %

圧力毎の時間と
イベント回数

圧 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分)	0	0	300	68	18	6	6	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	4	4	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

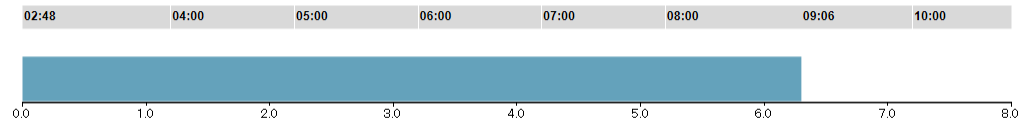
患者レポート - 2016/12/16 - 2017/01/14

2017/01/12

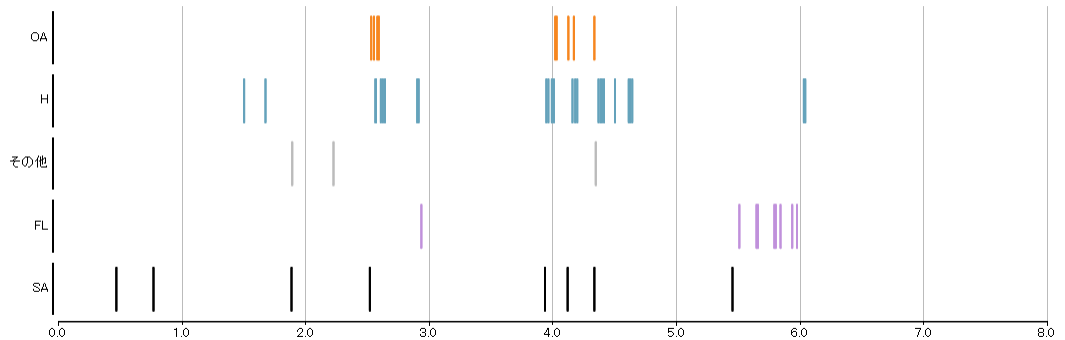
木曜日 02:48 - 09:06

名前: 忍耐強い 例
患者ID: 1234
生年月日: 1960/01/01電話番号: 0123456789
電子メール: example@example.com
性別: その他

稼働時間

合計稼働時間: 6:18
使用率: 100 %

イベント

AHI: 6.0
閉塞性無呼吸: 9
OAI: 1.4
低呼吸: 26
HI: 4.1
その他のイベント: 3
その他のイベント指数: 0.5
フローリミテーション: 9
FL/時間: 1.4
SensAwake: 8
SensAwake/時間: 1.3

圧力

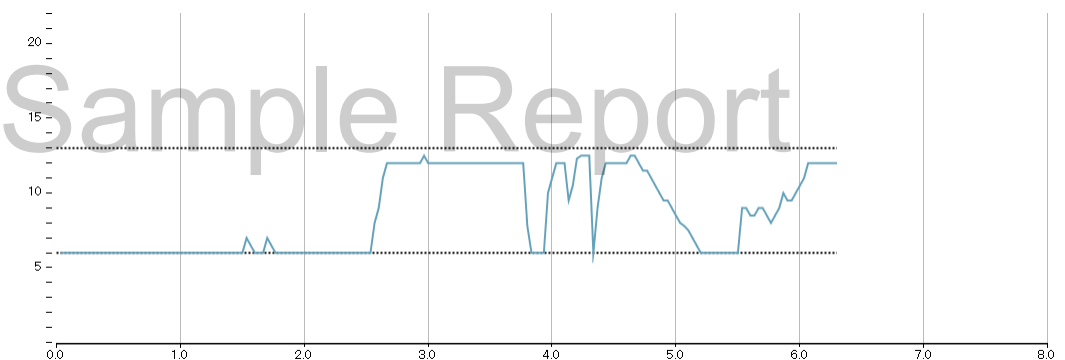
cmH₂O

中央値

90パーセンタイル値

ランプ作動時間

最低/最高

7.8
12.0

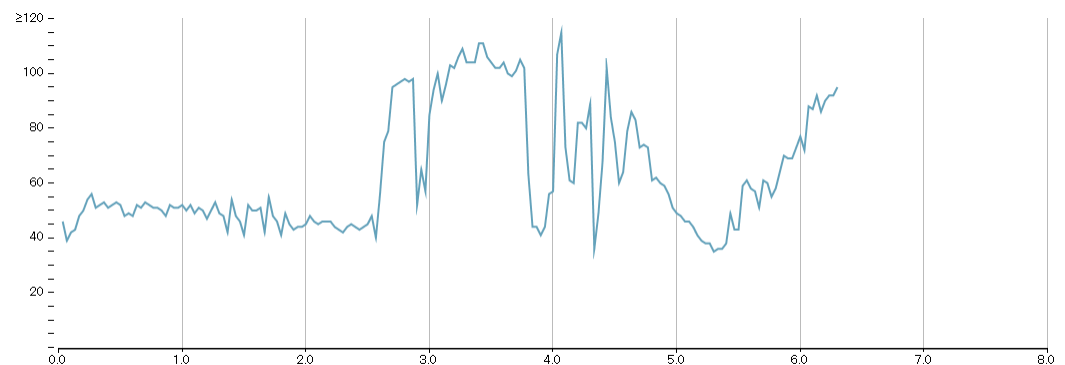
システムリーク

l/min

中央値

90パーセンタイル値

過剰リーク(%時間):

53
102
38 %圧力毎の時間と
イベント回数

圧 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分)	0	0	174	12	12	26	18	16	108	12	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	1	0	1	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	2	1	1	2	8	9	3	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

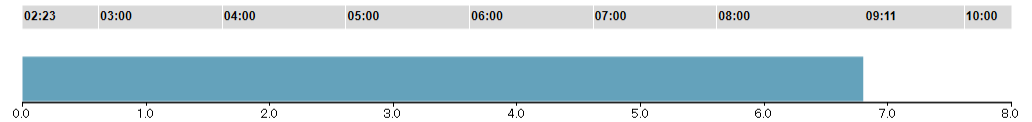
患者レポート - 2016/12/16 - 2017/01/14

2017/01/14

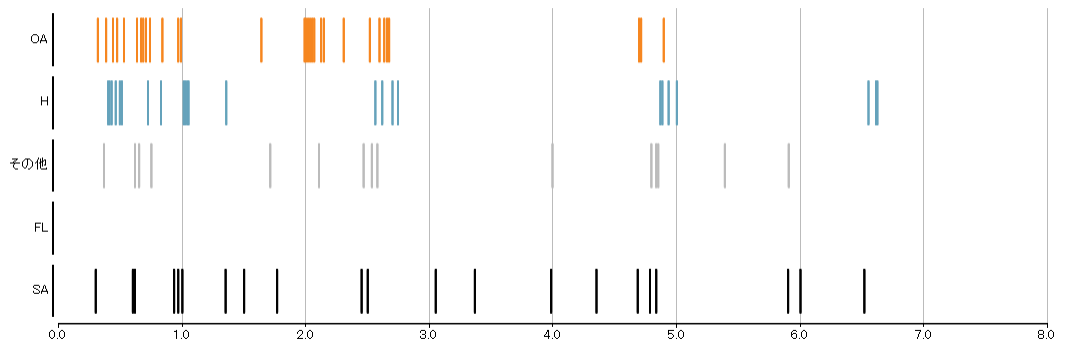
土曜日 02:23 - 09:11

名前: 忍耐強い 例
患者ID: 1234
生年月日: 1960/01/01電話番号: 0123456789
電子メール: example@example.com
性別: その他

稼働時間

合計稼働時間: 6.48
使用率: 100 %

イベント

AHI: 10.4
閉塞性無呼吸: 31
OAI: 4.6
低呼吸: 24
HI: 3.6
その他のイベント: 15
その他のイベント指数: 2.2
フローリミテーション: 0
FL/時間: 0.0
SensAwake: 21
SensAwake/時間: 3.1

圧力

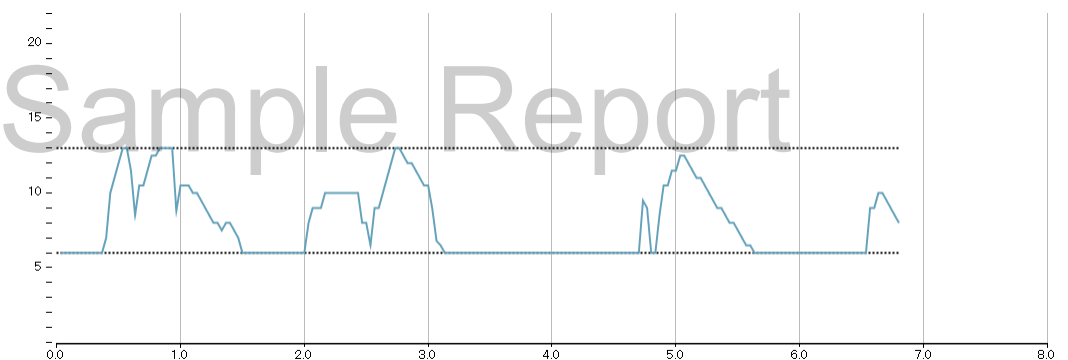
cmH₂O

中央値

90パーセンタイル値

ランプ作動時間

最低/最高

6.0
11.5

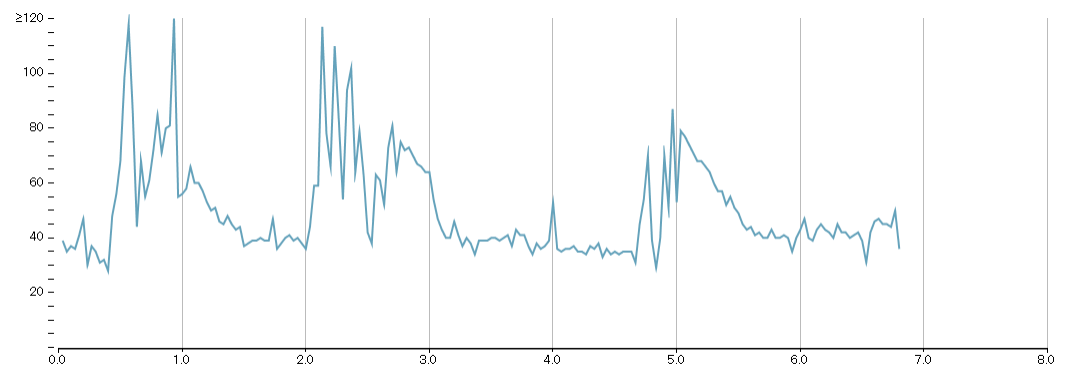
システムリーク

l/min

中央値

90パーセンタイル値

過剰リーク(%時間):

43
73
23 %圧力毎の時間と
イベント回数

圧 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分)	0	0	210	16	26	38	40	30	22	26	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	4	2	2	5	3	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	0	1	2	6	7	3	5	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	4	1	1	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27 日間 分析

名前: 忍耐強い 例 電話番号: 0123456789
患者ID: 1234 電子メール: example@example.com
生年月日: 1960/01/01 性別: その他

日付	治療モード	圧 (cmH ₂ O)	加湿レベル	ランブ回数	実行時間 (hr:min)	移動時間 (hr:min)	AHI	その他の イベント 指数	SensAwake 検出回数	SensAwake圧 (cmH ₂ O)	呼吸リリーフ	90パーセンタイル 値圧力 (cmH ₂ O)	最高到達圧 (cmH ₂ O)	90パーセンタ イルシステム リーク (l/min)
2016/12/16	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:24	6:24	8.0	0.2	22	6.0	2	10.5	13.0	54
2016/12/17	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	8:42	8:42	2.0	0.3	22	6.0	2	8.5	11.0	42
2016/12/18	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	7:30	7:30	7.3	0.4	25	6.0	2	12.0	13.0	71
2016/12/19	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	5:06	5:06	5.2	0.0	16	6.0	2	8.5	11.0	51
2016/12/20	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:30	6:30	9.4	0.6	14	6.0	2	13.0	13.0	91
2016/12/21	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	5:42	5:42	3.9	0.2	18	6.0	2	8.0	11.0	55
2016/12/22	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	4:12	4:12	8.1	1.2	12	6.0	2	13.0	13.0	79
2016/12/23	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	7:36	7:36	6.7	0.3	18	6.0	2	12.0	13.0	60
2016/12/24	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	5:54	5:54	4.4	0.3	14	6.0	2	9.5	11.0	62
2016/12/26	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	7:36	7:36	6.4	0.1	21	6.0	2	13.0	13.0	62
2016/12/27	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:12	6:12	7.3	0.0	16	6.0	2	11.5	13.0	66
2016/12/28	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	4:42	4:42	9.3	0.4	17	6.0	2	10.0	13.0	55
2016/12/29	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:12	6:12	7.9	0.6	28	6.0	2	11.0	13.0	77
2016/12/30	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:48	6:48	1.9	0.1	12	6.0	2	9.0	13.0	47
2016/12/31	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:12	6:12	4.9	0.5	14	6.0	2	10.0	13.0	66
2017/01/01	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:30	6:30	4.6	0.6	15	6.0	2	12.5	13.0	61
2017/01/02	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:42	6:36	2.3	0.2	15	6.0	2	8.0	13.0	47
2017/01/03	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	3:36	3:36	2.2	0.0	10	6.0	2	7.0	9.0	47
2017/01/04	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	8:36	8:36	5.1	0.6	18	6.0	2	8.0	13.0	47
2017/01/05	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:18	6:18	8.7	0.3	16	6.0	2	12.5	13.0	65
2017/01/06	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	4:00	4:00	2.0	0.5	10	6.0	2	7.0	8.5	51
2017/01/07	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	7:06	7:06	3.6	0.8	17	6.0	2	7.5	13.0	44
2017/01/08	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	4:24	4:24	9.4	0.5	13	6.0	2	11.0	13.0	64
2017/01/10	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:30	6:30	6.5	0.5	22	6.0	2	10.0	12.0	70
2017/01/11	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:54	6:54	3.5	0.7	15	6.0	2	7.5	11.0	65
2017/01/12	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:18	6:18	6.0	0.5	8	6.0	2	12.0	12.5	102
2017/01/14	Auto	最低 6.0 最高 13.0	5.0	0	6:48	6:48	10.4	2.2	21	6.0	2	11.5	13.0	73

注：このレポートに示されている治療データは人為的に生成されたものであり、代表的なもの

ではない場合や、実際の治療データを省略できる場合があります。