


Fornecendo alto fluxo nasal com Optiflow™ em casa e no tratamento de longo prazo

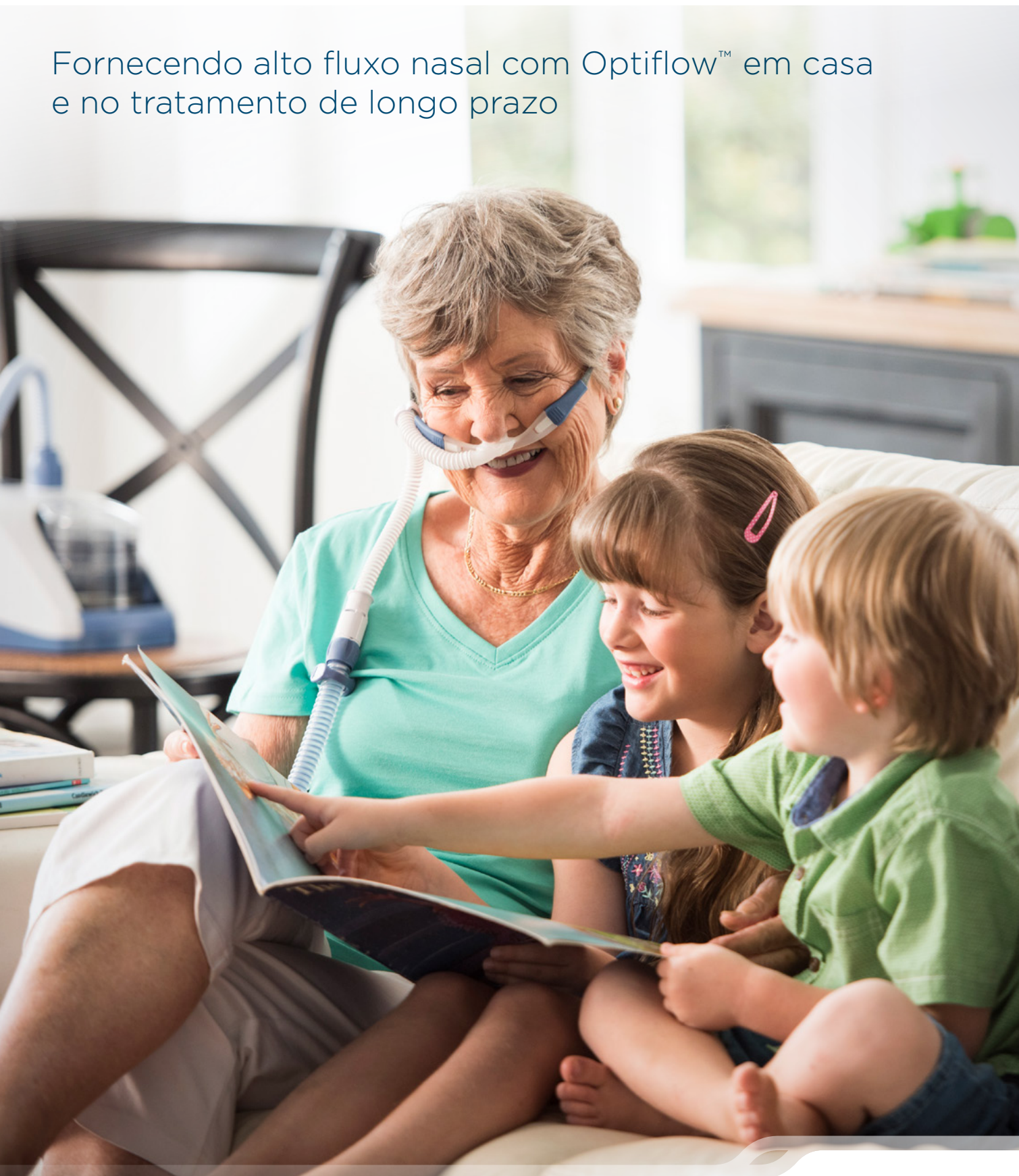

# Apresentando o myAIRVO™ 2 da F&P, que fornece suporte respiratório e hidratação das vias aéreas, com foco no conforto e na facilidade de uso.

O myAIRVO 2 da F&P foi desenvolvido especificamente para ser uma solução integrada no fornecimento do alto fluxo nasal com Optiflow™. A tecnologia de umidificação de ponta da Fisher & Paykel Healthcare permite que o AIRVO 2 ofereça, de forma confortável, altos fluxos de misturas de ar/oxigênio para pacientes com respiração espontânea, por meio da interface nasal exclusiva do Optiflow.

## Optiflow™+ Interface Nasal

- “Prongs” flexíveis e macios
- Orifícios mais largos reduzindo o jateamento de gás
- Os “prongs” acompanham o contorno do nariz do paciente



## Configurações ajustáveis de fluxo e temperatura

- As três configurações de temperatura (37, 34, 31 °C) auxiliam a obter conforto e conformidade
- Um gerador de fluxo integrado fornece uma ampla faixa de fluxo (2 - 60 L/min) para pacientes adultos e pediátricos - não é necessário o uso de concentrador de oxigênio



## Circuito respiratório aquecido AirSpiral™

- Fios aquecidos duplos em espiral e sensor de temperatura integrado exclusivo
- Sondas de temperatura ou adaptadores para fios aquecidos separados não são necessários

## Oxigênio suplementar (conforme necessário)

- O oxigênio pode ser adicionado a partir de um concentrador ou cilindro
- O analisador de oxigênio ultrassônico integrado não exige calibração, manutenção ou troca

Código do produto	
PT100xx	Umificador myAIRVO 2
OPT942E	Optiflow+ interface pequena (pacote com 1 unidade)
OPT944E	Optiflow+ interface média (pacote com 1 unidade)
OPT946E	Optiflow+ interface grande (pacote com 1 unidade)
OPT970E	Optiflow + Interface para traqueostomia (pacote com 1 unidade)
OPT980E	Optiflow + adaptador para máscara (pacote com 1 unidade)
900PT560E	Circuito respiratório aquecido AirSpiral (pacote com 1 unidade)
900PT560	Circuito respiratório aquecido AirSpiral (pacote com 10 unidades)
900PT290E	Câmara MR290 (pacote com 1 unidade)
HC360	Câmara de água reutilizável
900PT400	Suporte compacto
900PT401	Bolsa de água (pacote com 2 unidades)

Saiba mais em [www.fphcare.com/myairvo](http://www.fphcare.com/myairvo)

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE