

myAirvo | Optiflow+ Duet Asymmetric befeuchtete High-Flow-Therapie

Visuelle Anleitung zur Anpassung

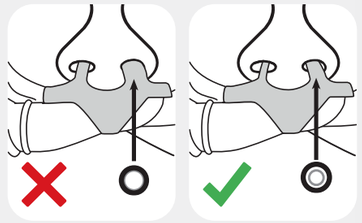


1

Die passende Größe auswählen. Die Prongs dürfen die Nasenlöcher nicht vollständig verschließen. Um beide Prongs muss ein deutlicher Freiraum zu sehen sein.

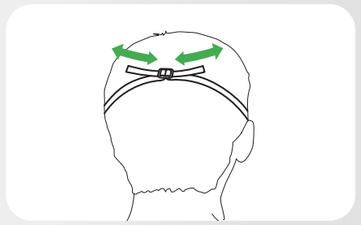


2

Das Kopfband über den Kopf ziehen. Das Kopfband an den Kopfumfang anpassen. Nicht zu fest anziehen.

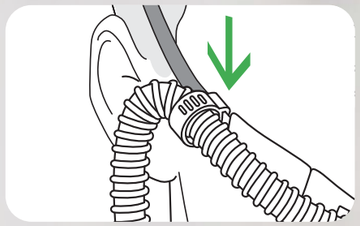


3A

Um zu verhindern, dass die Kanüle aus den Nasenlöchern herausgezogen wird, sicherstellen, dass der Kopfbandclip befestigt ist.

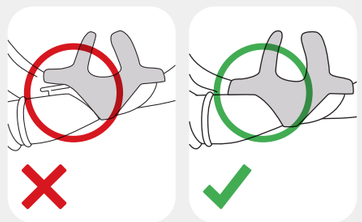

3B

Wenn der Kopfbandclip nicht verwendet wird, kann sich die Kanüle lösen.

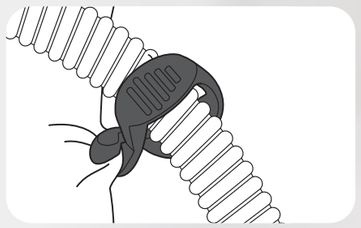

4

Um zu verhindern, dass die Kanüle vom Gesicht heruntergezogen wird, den Schlauchclip an der Kleidung oder der Bettwäsche befestigen.



F&P, myAirvo, Optiflow, Duet und Asymmetric sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited.
SUI-636224 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited

fphcare.com

Fisher & Paykel HEALTHCARE