

Traitement par haut débit nasal humidifié Optiflow+ Duet Asymmetric

Guide de mise en place en images

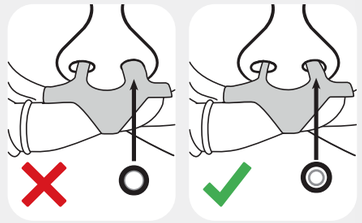


1

Sélectionner la taille appropriée. Les canules ne doivent pas créer d'étanchéité avec les narines. Un espace dégagé doit être visible autour de chaque canule.

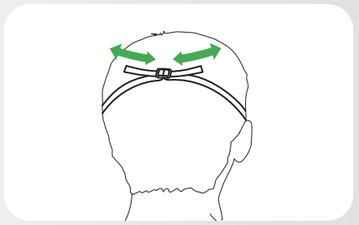


2

Placer la sangle de tête autour du sommet de la tête. Ajuster correctement la sangle de tête. Éviter de trop serrer.

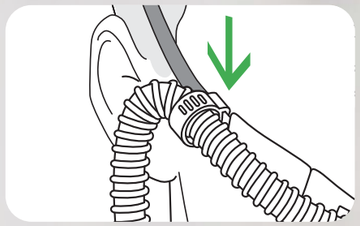


3A

S'assurer que le clip de la sangle de tête est attaché afin d'empêcher les canules de sortir des narines.

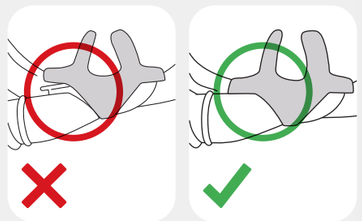


3B

L'interface peut se détacher si le clip de la sangle de tête n'est pas utilisé.

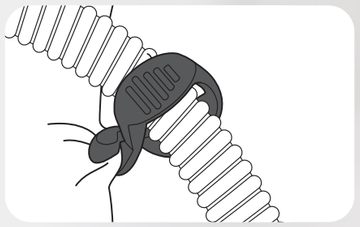

4

Fixer le clip du tuyau à un vêtement ou au drap de lit pour éviter que l'interface ne tombe du visage.

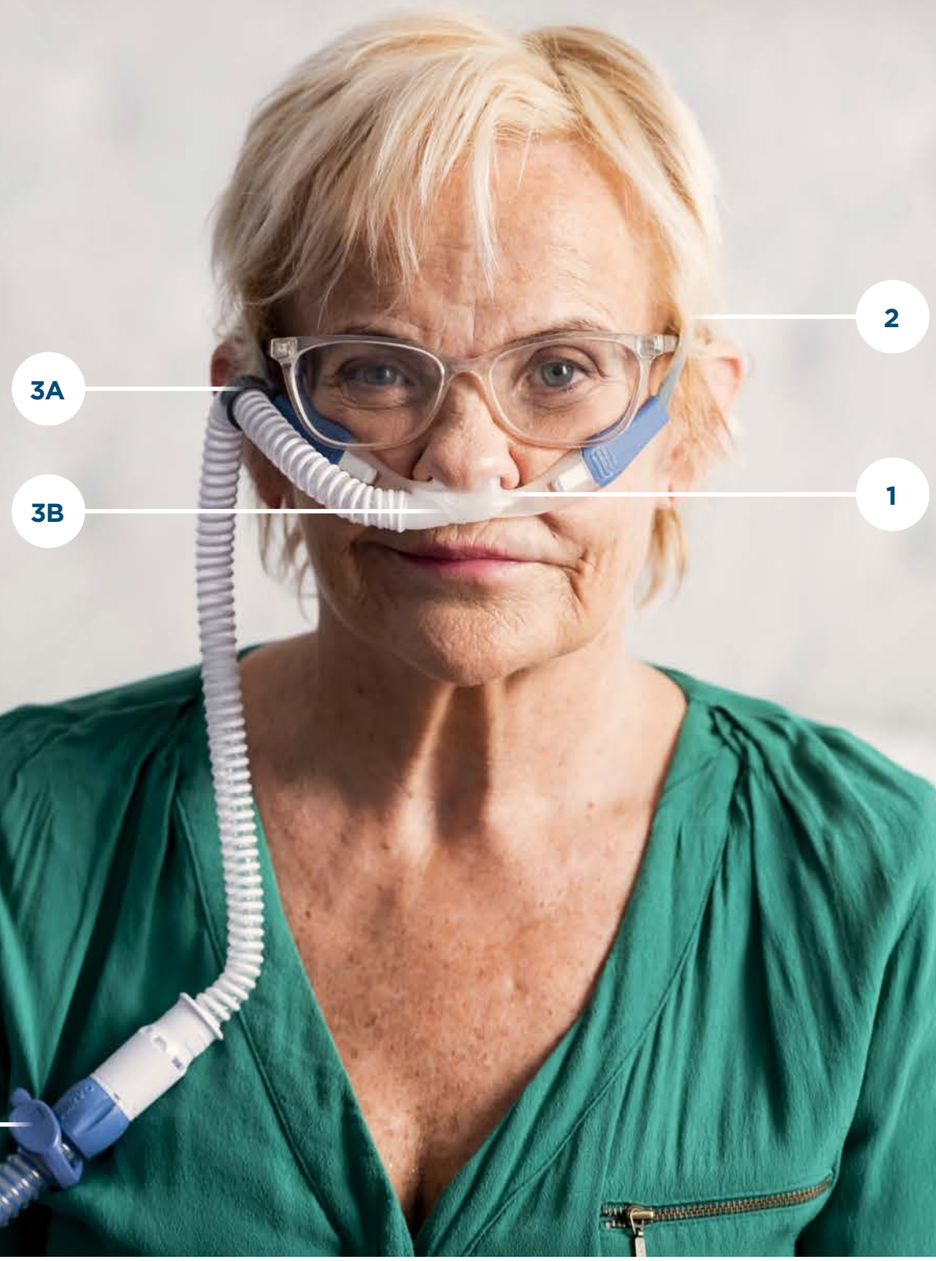

F&P, myAirvo, Optiflow, Duet et Asymmetric sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.
SUI-636225 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited

fphcare.com