

Humidificador com gerador de fluxo integrado **myAIRVO™ 2**

O myAIRVO 2 gera fluxos elevados de misturas de ar/oxigénio aquecidas e humidificadas que são fornecidas ao doente através de uma variedade de interfaces nasais, de traqueostomia e máscara.



myAIRVO 2 | CARACTERÍSTICAS

Graças ao seu gerador de fluxo integrado e sistema de administração de oxigénio inovador, o myAIRVO 2 consiste numa solução eficaz e versátil para a administração dos benefícios da humidificação a doentes no domicílio e em instituições de cuidados continuados.

Alto desempenho

- Concebido para exceder a norma ISO em termos de humidificação respiratória
- Funcionamento silencioso de dia e noite
- Até 15 L/min de oxigénio suplementar





Versátil

- Variedade de interfaces do doente Optiflow™ para vias aéreas superiores e traqueostomizadas
- Intervalo de fluxo alargado: 2-60 L/min

Instalação e utilização

- Menu com exibição gráfica para definições
- Mistura de O₂ integrada a partir de concentrador ou garrafa
- Sensor de O₂ incorporado
- Sem necessidade de sondas ou fornecimento de ar externo

ACESSÓRIOS

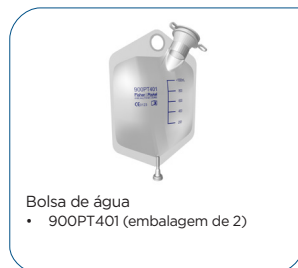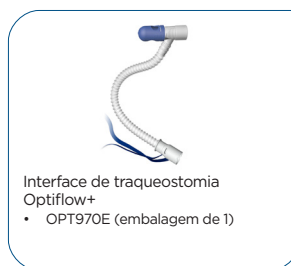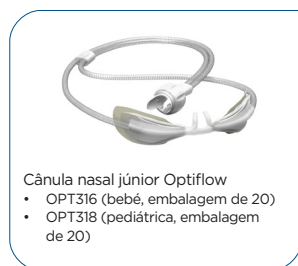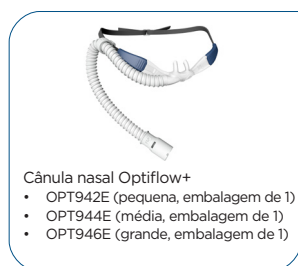

HUMIDIFICADOR COM GERADOR DE FLUXO INTEGRADO myAIRVO 2

Utilização prevista	O humidificador myAIRVO 2 destina-se ao tratamento de doentes capazes de respirar espontaneamente que beneficiem da administração de gases respiratórios aquecidos e humidificados de alto fluxo. Esta indicação inclui doentes que tenham sido traqueostomizados. O fluxo pode variar entre 2-60 L/min, dependendo da interface do doente. O myAIRVO 2 destina-se a ser utilizado no domicílio e em instituições de cuidados continuados.
Saída de humidade	Em conformidade com a norma ISO 8185:2007
Definições de fluxo	10 a 60 L/min (em incrementos de 5 L/min) (predefinição) 2 a 25 L/min (em incrementos de 1 L/min) (modo Júnior)
Interfaces do doente	Cânulas nasais F&P Optiflow+ Interfaces de traqueostomia F&P Optiflow+ Máscaras com conector cónico médico padrão de 22 mm
Modelos	PT100AZ / PT100EE / PT100EW / PT100UK / PT100US / PT100AN / PT100JP / PT100KR
Dimensões	295 mm x 170 mm x 175 mm (11,6" x 6,7" x 6,9")
Peso	2,2 kg (4,8 lb) - apenas o equipamento 3,4 kg (7,5 lb) - embalado numa bolsa incl. acessórios
Classificações elétricas	50-60 Hz 100-115 V - 2,2 A (2,4 A máx) 220-240 V - 1,8 A (2,0 A máx)

Alguns produtos podem não se encontrar disponíveis no seu país. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da Fisher & Paykel Healthcare.

F&P, myAIRVO e Optiflow são marcas comerciais da Fisher & Paykel Healthcare

www.fphcare.com