

Mejoramos el cuidado de pacientes
de traqueostomía



Los pacientes de traqueostomía y sus cuidadores ya no tendrán que conformarse con un proceso de humidificación más ruidoso y menos efectivo suministrado por compresores y nebulizadores de agua fría.



Interfaz de traqueostomía Optiflow™+

- Tecnología Evaqua™, que reduce la formación de condensación móvil en la interfaz del paciente
- Opciones para interfaces de conexión directa o específicos para traqueostomía

Oxígeno suplementario (cuando sea necesario)


- FiO₂ de 21 % a 100 %
- El analizador de oxígeno ultrasónico integrado no necesita calibración, mantenimiento ni sustitución

Parámetros ajustables de flujo

- El generador de flujo integrado proporciona una amplia gama de flujos (10-60 L/min) de forma silenciosa. No requiere compresores ni suministro de aire externo

Diseñado para un ajuste, uso y limpieza sencillos

- Las animaciones de la pantalla facilitan la configuración y la solución de problemas

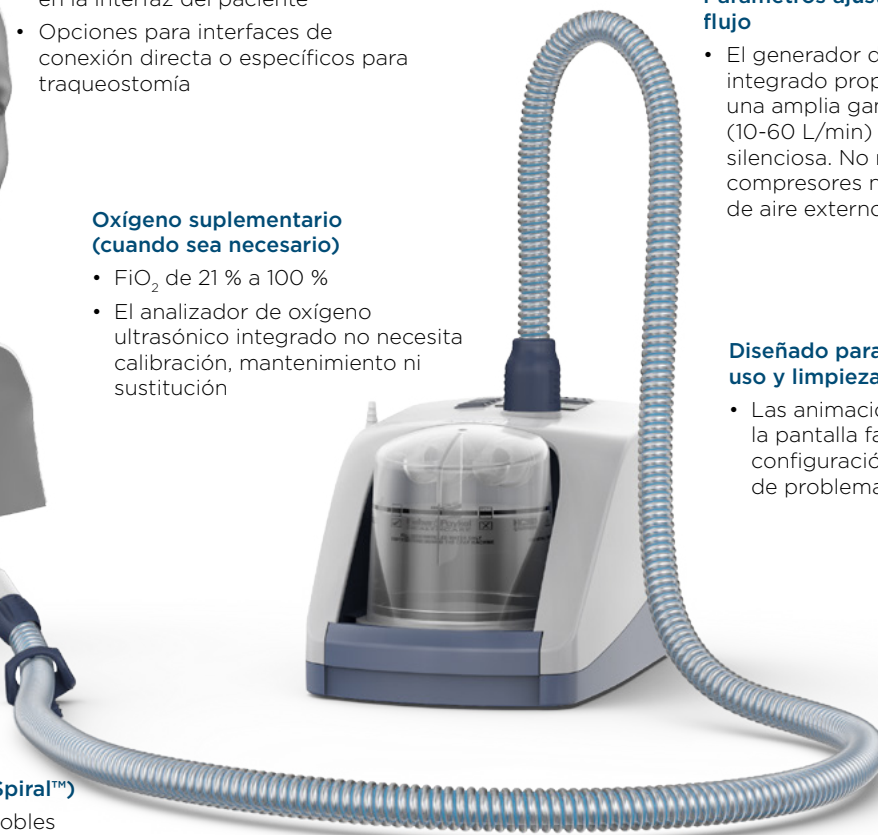

Tubo respiratorio calentado (AirSpiral™)

- Cables calefactores de espiral dobles y exclusivo sensor de temperatura integrado


Sensor de temperatura integrado

- No requiere sondas externas, cables ni adaptadores

Vapor de agua frente a gotas de agua

El humidificador myAIRVO™ 2 de F&P está diseñado para generar vapor de agua (moléculas)

- Los nebulizadores y otros sistemas de administración de aerosol están diseñados para generar gotas de agua. A diferencia del vapor de agua, las gotas tienen un tamaño suficiente para transportar patógenos.¹

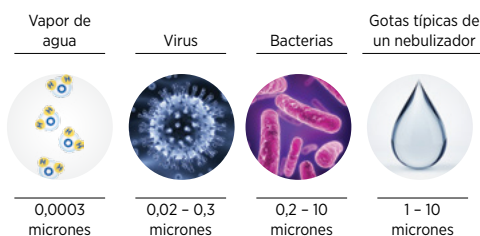

1. Takigawa K, Fujita J, Negayama k, Yamagishi Y, Yamaji Y, Ouchi K. Nosocomial Outbreak of Pseudomonas cepacia Respiratory Infection in Immunocompromised Patients Associated with Contaminated Nebulizer Devices. Jpn J Infect Dis. 1993; 67(11):1115-1125.

Códigos de producto	
PT100xx	Humidificador myAIRVO 2
900PT560	Tubo respiratorio calentado AirSpiral™ (paquete de 10)
900PT560E	Tubo respiratorio calentado AirSpiral™ (paquete de 1)
OPT970	Interfaz de traqueostomía Optiflow™+ (paquete de 20)
OPT970E	Interfaz de traqueostomía Optiflow™+ (paquete de 1)
OPT971	Protector contra esputos de repuesto (paquete de 20)
OPT980	Adaptador de interfaz de la máscara (paquete de 20)
OPT980E	Adaptador de interfaz de la máscara (paquete de 1)

Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Para obtener más información, visite www.fphcare.com/myairvo