Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd
Classe du dispositif médical : Classe IIa
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.
A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenu responsable si cela venait à se produire.

Consulter les instructions d'utilisation complètes du F&P myAirvo 3.

F&P et myAirvo sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.
REF 629086 REV B 2026-03 © 2026 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel HEALTHCARE

plier ici

F&P myAirvo 3

Guide de démarrage rapide

À utiliser avec une chambre réutilisable




www.fphcare.com


Fisher & Paykel HEALTHCARE

F&P myAirvo 3


Installation

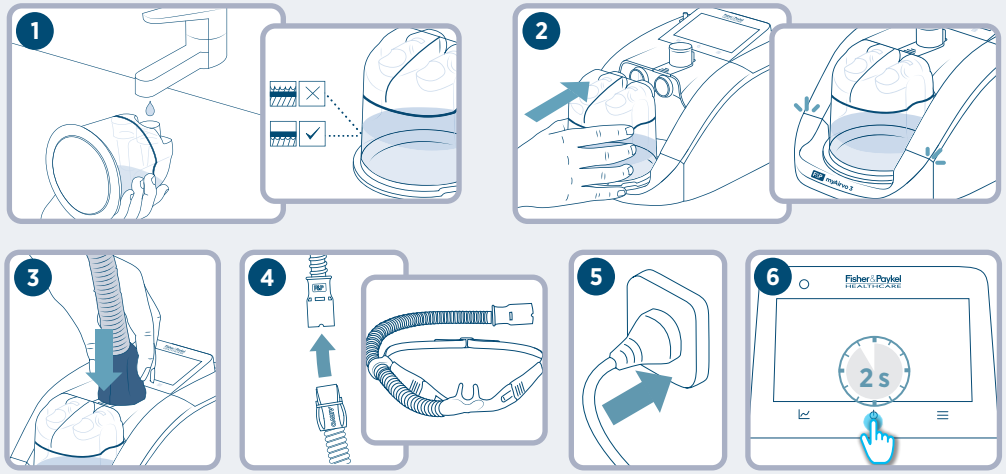


Démarrage du traitement

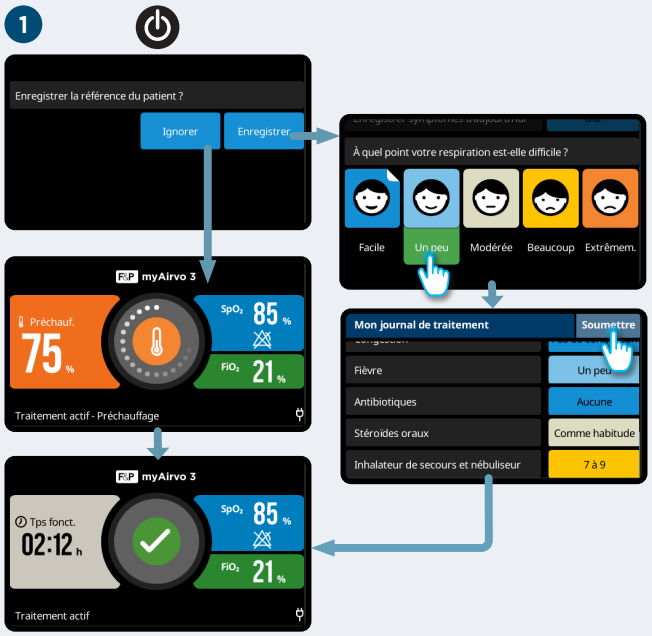

2 Interface nasale

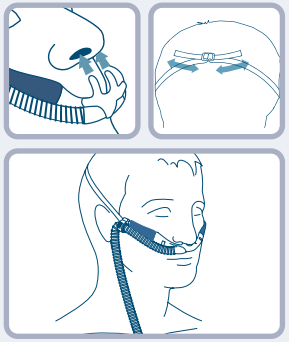

Interface de trachéotomie

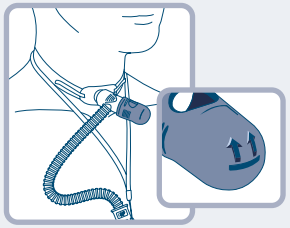


Consulter les instructions d'utilisation complètes du F&P myAirvo 3.


plier ici

Optionnel :

Utilisation d'un oxymètre de pouls

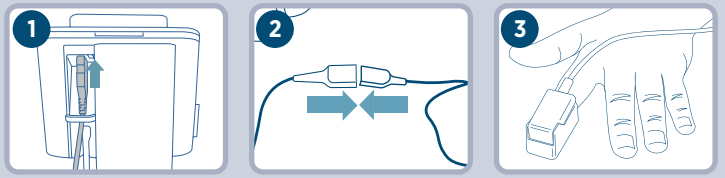


Apport d'oxygène

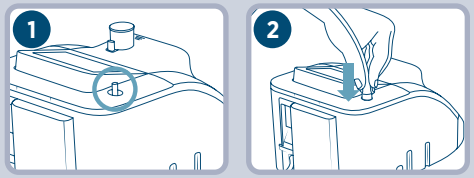


Terminer le traitement



Nettoyage quotidien

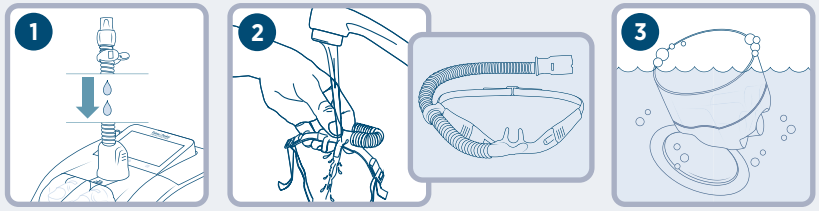

Nettoyage hebdomadaire

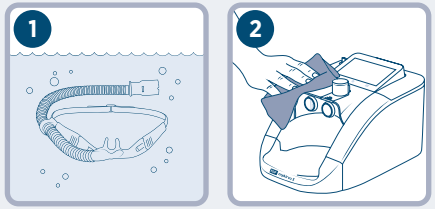

Fisher & Paykel HEALTHCARE