



Auswählen.
Größe.
Unter-
stützen.

OSA Masken-App

F&P myMask

F&P myMask erleichtert es Ihnen, die passende F&P Maske für Ihre Patienten zu finden. Die aktualisierte App bietet nun über die bereits vorhandenen Informationen und die Hilfe hinaus Funktionen zur Auswahl und Größenbestimmung der Maske sowie Kontaktkarten.

Jetzt können Sie einfach die Funktionen zur Maskenauswahl, Größenbestimmung und Unterstützung nutzen, um Ihren Patienten persönlich zu helfen. Diese proaktiven Tools können die Patienten mit nützlichen Infos unterstützen sowie die Maskenkonformität fördern.

Die Tools zur Auswahl und Größenbestimmung sind Dienste, die nur mit einer Einladung genutzt werden können. Bei Fragen zur Registrierung oder für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare.

Auswählen

So viele Masken zur Auswahl – wie soll man sich da entscheiden?


Die Patienten beantworten nur ein paar einfache Fragen. Die myMask App schlägt dann Masken basierend auf den Erkenntnissen zum Lebensstil der Patienten, zu ihren Bedürfnissen und Schlafgewohnheiten vor.



Größe

Stellt die Größenbestimmung eine Herausforderung für Sie oder Ihr Team dar?


Scannen Sie das Gesicht Ihrer Patienten in Echtzeit. Mit F&P myMask kann die benötigte Größe von PAP-Masken* von Fisher & Paykel Healthcare persönlich über das Smartphone genau bestimmt werden. Sie können unbesorgt sein, da Sie wissen, dass nur Maskentyp und -größe der Patienten geteilt werden.[†]

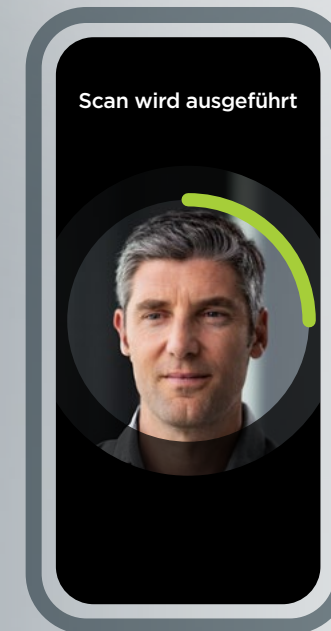


Unterstützen

Sind Rückrufaktionen ein kostspieliges, wiederkehrendes Problem für Ihr Unternehmen?

Mit Schritt-für-Schritt-Onboarding-Videos ermöglicht myMask Ihren Patienten einen erfolgreichen Umgang mit ihrer Maske. Den Patienten wird gezeigt, wie sie ihre Maske effektiv aufsetzen, feinabstimmen und reinigen können. Die Patienten können außerdem den bequemen Support bei der Fehlersuche nutzen.

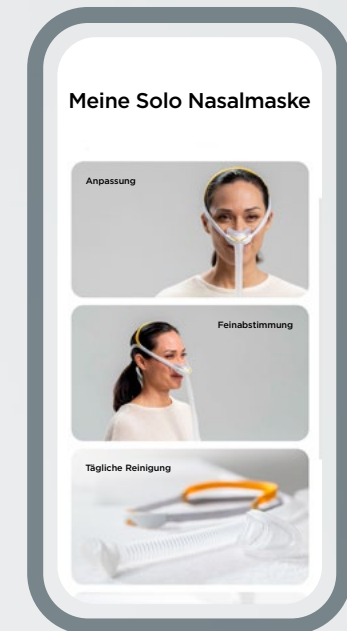

Zusätzliche Größenanalysen immer zur Hand.

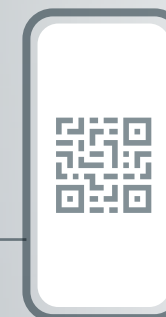

Teilen Sie den eindeutigen QR-Code mit einem Patienten, um Maske, Maskengröße und Ihre Kontaktkarte an ihn zu übertragen.




Der Patient scannt den QR-Code und erhält Unterstützung zur Maske sowie Zugang zu Ihrer Kontaktkarte.

Einführung zu F&P Services

Über dieses benutzerfreundliche Webportal können Sie auf Ihre Tools zur Auswahl und Größenbestimmung zugreifen.



Ihre persönliche Kontaktkarte
Aktualisieren Sie Ihre persönlichen Kontaktdaten und teilen Sie sie mit Ihren Patienten.

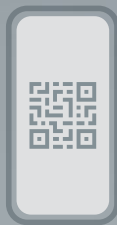

Patientenverwaltung
Laden Sie Patienten ein, damit sie ihre Maske im Klinikermodus auswählen und die Maskengröße bestimmen können. Teilen Sie dann Informationen und Support zur Maske, um Ihre Patienten zu unterstützen.

Um sich für diese Dienste zu registrieren, wenden Sie sich an Ihre Vertretung von Fisher & Paykel Healthcare.



Einladung durch Kliniker zum Herunterladen der F&P myMask App



Maske auswählen



Größenempfehlung



Teilen der App/Kontakte

* Die Genauigkeit der Größenbestimmung mit der F&P myMask App wurde im Jahr 2023 an 73 Teilnehmenden getestet. Verglichen mit der Verwendung von Messschiebern, wurde der F&P myMask App eine durchschnittliche Genauigkeit von über 91 % (Konfidenzintervall 90–95 %) bei drei verschiedenen Messarten bescheinigt: Messung der Gesichtslänge, der Nasenlänge und der Nasenbreite. † Wir nehmen den Schutz von Daten und Privatsphäre der Patienten ernst und respektieren ihre Anonymität. Patienten brauchen kein Konto einzurichten, um die Funktionen der myMask App nutzen zu können. Auch auf Funktionen zur Auswahl der Maske und zur Bestimmung der Maskengröße oder auf Hilfe und Support haben sie ohne ein Konto Zugriff. Es werden weder Bilder von Patienten während des Vorgangs zur Auswahl und Größenbestimmung in der myMask App übermittelt, noch Bilder oder Videos nach der Verarbeitung auf dem Gerät gespeichert. Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, sind wir international nach ISO 27001 zertifiziert und in Neuseeland nach ISO 13485. Eine vollständige Beschreibung der Einrichtung des Produkts, Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Warnhinweise entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanleitung zu diesem Produkt. Das Gerät gemäß den Anweisungen verwenden. Stets die Gebrauchsanleitung, z. B. die Gebrauchsanweisungen, befolgen. F&P, myMask, F&P Solo und Solo sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited. 634370 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited 