

F&P Nova Nasal

Máscara nasal

SwingFit™.

Performance defined.



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

Descubra la definición del rendimiento

Sabemos que para lograr un sueño profundo, el rendimiento de la máscara es crucial. Esa es la razón por la que los mejores ingenieros del sector han examinado el diseño de la máscara desde todos los ángulos para crear una máscara en la que usted y sus pacientes puedan confiar. El resultado es la máscara F&P Nova™ Nasal, la definición de rendimiento.

1
Fácil ajuste

Rendimiento
en el que puede
confiar

98 %

de los usuarios del ensayo
confiaron en que
F&P Nova Nasal
funciona¹

2
Sellado estable

3
Sueño profundo

Combinación de tecnologías innovadoras

Gracias a sus muchas características que funcionan en sinergia con el arnés SwingFit, F&P Nova Nasal proporciona un rendimiento global. Descubra una máscara fácil de ajustar y que proporciona un sellado estable, con un campo de visión despejado y un nivel mínimo de ruido y corrientes de aire.

1
Arnés SwingFit

Basta con anclar la almohadilla sobre la nariz y girar el arnés por la cabeza para fijarlo con un solo clic.

Enganche del tubo
Colocación opcional
del tubo sobre la cabeza.

Campo de visión
despejado
Brazos laterales
estructurados para
mayor libertad visual.

2
Almohadilla
RollFit™
con enganches
giratorios

Se adapta al movimiento
para un sellado estable.

AirEdge
El borde de tejido
suave ayuda a evitar
marcas en la cara.

3
Difusor

Minimiza el ruido
y las corrientes
de aire.

Escanee para
obtener más
información.



Códigos de producto

Código	Descripción
NVN1SU	Máscara Nova Nasal - Pequeña
NVN1MU	Máscara Nova Nasal - Mediana
NVN1LU	Máscara Nova Nasal - Grande
NVN1SSU	Máscara Nova Nasal doble almohadilla - Pequeña/pequeña
NVN1MMU	Máscara Nova Nasal doble almohadilla - Mediana/mediana
NVN1LLU	Máscara Nova Nasal doble almohadilla - Grande/grande
NVN1SMLU	Máscara Nova Nasal. Set de adaptación - Pequeño, mediano, grande

Repuestos

Código	Descripción
400NVN111	Nova Nasal. Almohadilla de repuesto - Pequeña
400NVN112	Nova Nasal. Almohadilla de repuesto - Mediana
400NVN113	Nova Nasal. Almohadilla de repuesto - Grande
400NVN121	Nova Nasal. Arnés - Pequeño*
400NVN122	Nova Nasal. Arnés - Mediano-Grande*
400NVN123	Nova Nasal. Panel posterior - Pequeño**
400NVN124	Nova Nasal. Panel posterior - Mediano-Grande**
400NVN141	Nova Nasal. Marco compacto, recambio
400NVN151	Nova Nasal. Difusor, recambio
400NVN161	Nova Nasal. Enganche para tubo, recambio
400NVN162	Nova Nasal. Protector del arnés, recambio



Enganche del tubo

Protector del arnés

Panel posterior

Arnés

Difusor


Almohadilla

Marco compacto
(marco + tubo + pieza giratoria)



App F&P myMask™

Enseña a los pacientes a usar la máscara mediante los vídeos de colocación paso a paso, ajuste preciso y limpieza. Descargue la app F&P myMask. Escanee el código QR o descárguela directamente.

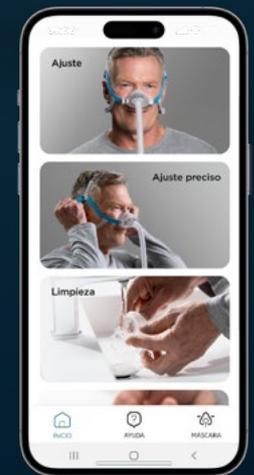

* El arnés incluye el panel posterior. El panel posterior también se puede adquirir por separado.

** Las descripciones del tamaño del arnés y del panel posterior cambiarán en próximas versiones. La talla «pequeña» pasará a llamarse «estándar» y la talla «mediana-grande» pasará a llamarse «grande». Sin embargo, las dimensiones seguirán siendo las mismas.

Lea siempre la etiqueta y siga las instrucciones de uso. Solo con receta médica. Este producto podría no ser adecuado para usted. Su profesional sanitario le dirá si este producto es adecuado para usted o su afección. Si los síntomas persisten, consulte con su profesional sanitario.

1. 42 de 43 usuarios estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente afirmación: «Confío en que la máscara Nova Nasal de F&P funcione». Ensayo interno de validación realizado por Fisher & Paykel Healthcare con 43 participantes en EE. UU. en 2023.

F&P F&P Nova, Nova, SwingFit, RollFit y myMask son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited. App Store es una marca de servicios de Apple Inc. registrada en EE. UU. y en otros países y regiones. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
634484 REV A © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited