

**REF** OJR416HM

**REF** OJR418HM

Interface nasale pour un usage à domicile



Fabricant : Fisher & Paykel Healthcare Ltd  
Classe du dispositif médical : Classe IIa  
Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH  
Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les étiquettes de ce dispositif médical.  
A l'attention et pour utilisation des professionnels uniquement. Il est strictement interdit de diffuser ces outils promotionnels auprès du public et Fisher & Paykel Healthcare ne pourra être tenue responsable si cela venait à se produire.


## F&P Optiflow™ Junior 2 Home (usage à domicile) a été conçue pour permettre un traitement par haut débit nasal à domicile.

F&P Optiflow Junior 2 est une interface nasale spécifiquement conçue pour l'anatomie délicate et les exigences de débit des patients pédiatriques sous traitement par haut débit nasal.

Il s'agit de la nouvelle génération de soins, permettant à vos jeunes patients de bénéficier d'un support respiratoire. Comme pour notre Optiflow Junior initial, l'Optiflow Junior 2 dispose de canules souples et de forme anatomique, minimise la condensation et les plicatures grâce au FlexiTube, et permet également un retrait facile et un entretien faciles grâce au Wigglepads™ 2.

Elle utilise la technologie Waveflex™ pour permettre un mouvement naturel du visage lorsque les joues du patient sont comprimées. Cela améliore la stabilité des canules dans les narines.

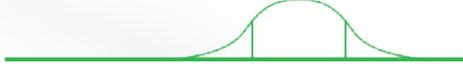

PRODUIT	OJR416HM 	OJR418HM 																				
Taille de l'interface nasale	L	XL																				
Guide de poids	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids (kg)*</th> <th>3</th> <th>3,5</th> <th>18</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Âge correspondant**</td> <td>37,5 AG</td> <td>40 AG</td> <td>4,9 ans</td> <td>5,6 ans</td> </tr> </tbody> </table>	Poids (kg)*	3	3,5	18	20	Âge correspondant**	37,5 AG	40 AG	4,9 ans	5,6 ans	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poids (kg)*</th> <th>5</th> <th>7</th> <th>25</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Âge correspondant**</td> <td>47,5 AG</td> <td>4,7 mo</td> <td>7,6 ans</td> <td>12 ans</td> </tr> </tbody> </table>	Poids (kg)*	5	7	25	30	Âge correspondant**	47,5 AG	4,7 mo	7,6 ans	12 ans
Poids (kg)*	3	3,5	18	20																		
Âge correspondant**	37,5 AG	40 AG	4,9 ans	5,6 ans																		
Poids (kg)*	5	7	25	30																		
Âge correspondant**	47,5 AG	4,7 mo	7,6 ans	12 ans																		
Débit de myAIRVO 2 (L/min)	2 - 20	2 - 25																				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS																						
Quantité	Boîte de 5																					
Utilisation	Usage à patient unique ; 7 jours maximum																					
Matériaux non présents	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, de PVC ou de phtalates (DEHP, DBP, BBP)																					
CODES DU PRODUIT																						
F&P Wigglepad 2	WJR112 ; 2/pack (20 dans chaque pack)																					
Circuits compatibles	900PT560 ; 900PT560E ; MYAIRVOKIT1																					
Humidificateur compatible	myAIRVO 2 (en mode Junior) PT100xx																					

AG = Âge gestationnel en semaines; mo = mois; an = ans

\*Poids basé sur les études de validation du produit F&P. \*\*L'âge est lié au poids sur la base d'une association des courbes de croissance de Fenton, de l'OMS et du CDC.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.fphcare.com/myairvo](http://www.fphcare.com/myairvo)

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE