

REF OJR416HM

REF OJR418HM

Home Nasal-Interface



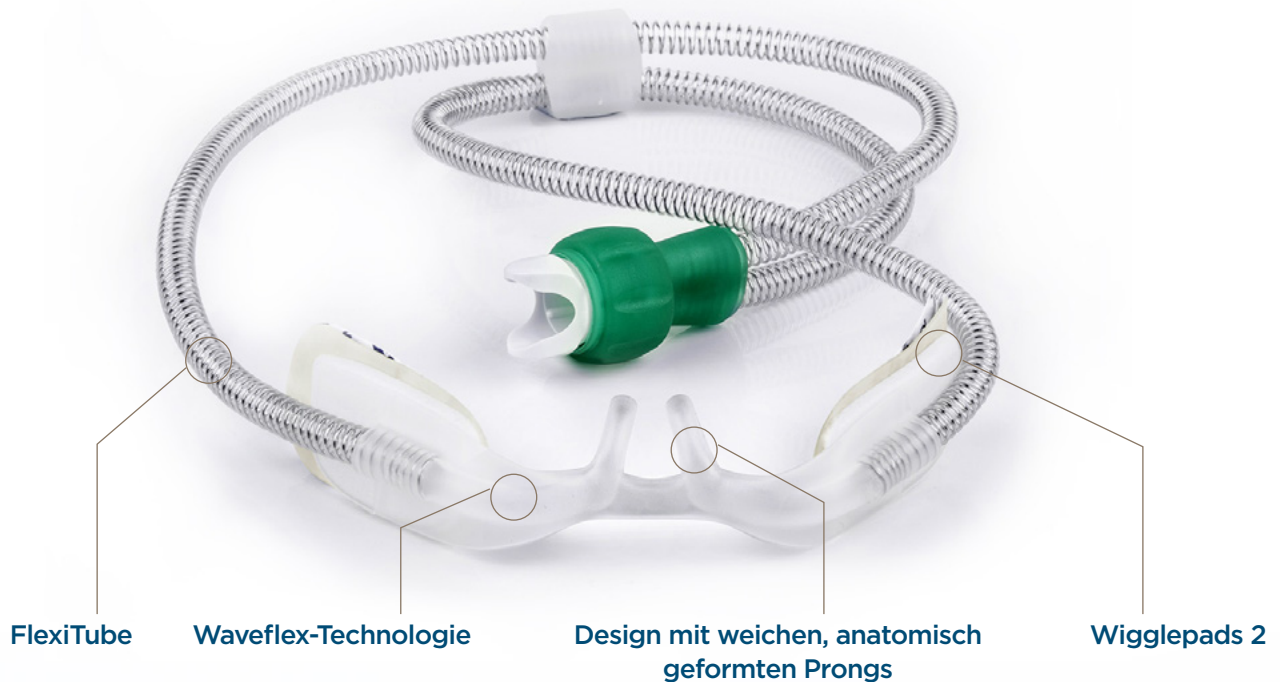
F&P Optiflow™ Junior 2 Home wurde entwickelt, um zu Hause eine nasale High-Flow-Therapie zu ermöglichen.




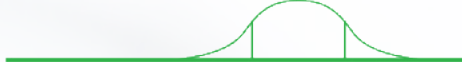
F&P Optiflow Junior 2 ist eine nasale Schnittstelle, die speziell für die Anatomie und die Flowanforderungen von Säuglingen und Kindern bei der nasalen High-Flow-Therapie entwickelt wurde.

Dies ist die nächste Generation von Produkten für die Versorgung Ihrer kleinen Patienten mit Atmungsunterstützung.

Wie unser ursprüngliches Optiflow Junior bietet auch Optiflow Junior 2 ein Design mit weichen, anatomisch geformten Prongs, das mithilfe des FlexiTube Kondensat sowie Knicke minimiert und dank Wigglepads™2 eine einfache Entfernung und Pflege ermöglicht.

Sie basiert auf der Waveflex™-Technologie und ermöglicht eine natürliche Gesichtsbewegung, wenn die Wangen des Patienten zusammengedrückt werden. Dies verbessert die Prongstabilität in den Nasenlöchern.



PRODUKT	OJR416HM 	OJR418HM 																				
Größe der Nasenkanüle	L	XL																				
Gewichtstabelle	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gewicht (kg)*</th> <th>3</th> <th>3,5</th> <th>18</th> <th>20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entsprechendes Alter**</td> <td>37,5 GestW</td> <td>40 GestW</td> <td>4,9 Jr</td> <td>5,6 Jr</td> </tr> </tbody> </table>	Gewicht (kg)*	3	3,5	18	20	Entsprechendes Alter**	37,5 GestW	40 GestW	4,9 Jr	5,6 Jr	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gewicht (kg)*</th> <th>5</th> <th>7</th> <th>25</th> <th>30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entsprechendes Alter**</td> <td>47,5 GestW</td> <td>4,7 Mo</td> <td>7,6 Jr</td> <td>12 Jr</td> </tr> </tbody> </table>	Gewicht (kg)*	5	7	25	30	Entsprechendes Alter**	47,5 GestW	4,7 Mo	7,6 Jr	12 Jr
Gewicht (kg)*	3	3,5	18	20																		
Entsprechendes Alter**	37,5 GestW	40 GestW	4,9 Jr	5,6 Jr																		
Gewicht (kg)*	5	7	25	30																		
Entsprechendes Alter**	47,5 GestW	4,7 Mo	7,6 Jr	12 Jr																		
myAIRVO 2 Flowrate (L/min)	2 - 20	2 - 25																				
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN																						
Menge	Packung mit 5 Stück																					
Nutzung	Verwendung bei einem einzelnen Patienten, maximal 7 Tage																					
Nicht enthaltene Materialien	Nicht hergestellt mit Naturkautschuklatex, PVC oder Phthalaten (DEHP, DBP, BBP)																					
PRODUKTCODES																						
F&P Wigglepad 2	WJR112; 2/Pack (20 in jedem Pack)																					
Kompatible Schlauchsysteme	900PT560; 900PT560E; MYAIRVOKIT1																					
Kompatible Atemgasbefeuchter	myAIRVO 2 (in Junior-Modus) PT100xx																					

GestW = Gestationswoche; Mo = Monate; Jr = Jahre

*Die Gewichtsdaten basieren auf F&P-Studien zur Produktvalidierung. **Die Altersdaten entsprechen den Gewichtsdaten basierend auf einer Kombination der Wachstumstabellen von Fenton, der Weltgesundheitsorganisation und des Center for Disease Control.

Erfahren Sie mehr auf
www.fphcare.com/myairvo

Fisher & Paykel
 HEALTHCARE