

Bereitstellung der F&P Optiflow™ + Tracheostomie  
High-Flow-Therapie



# Die Einführung von F&P Airvo™ 2, zur Unterstützung der Atmung und Befeuchtung der Atemwege.

Der Airvo 2 ist eine integrierte Lösung für die Optiflow-Tracheostomie-High-Flow-Therapie. Die führende Atemgasbefeuchtungstechnologie von Fisher & Paykel Healthcare ermöglicht es dem Airvo 2, spontan atmenden Patienten über das einzigartige Optiflow+ Tracheostomie-Interface komfortabel hohe Ströme befeuchteter Luft (bei Bedarf mit zusätzlichem Sauerstoff) zuzuführen.

## Optiflow+ Tracheostomie-Interface

- F&P Evaqua™-Technologie, die die Bildung von mobilem Kondensat in Patientennähe reduziert
- Optionen für Direktanschluss- und Tracheostomamasken

## Zusätzliche Sauerstoffzufuhr (bei Bedarf)

- FiO<sub>2</sub> 21 % bis 100 %
- Integrierter Ultraschall-Sauerstoffanalysator benötigt weder Kalibrierung oder Wartung, noch muss er ausgetauscht werden



## Entwickelt für eine einfache Einrichtung, Anwendung und Reinigung

- Hilfreiche Animationen auf dem Bildschirm helfen bei der Einrichtung und Fehlersuche

## Einstellbare Flow-Einstellungen

- Integrierter Flowgenerator liefert einen großen Flow-Bereich (10-60 L/min)
- Kein Kompressor oder zentrale Gasversorgung erforderlich

## F&P AirSpiral™ Beheizter Beatmungsschlauch

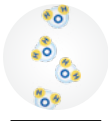
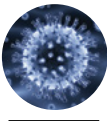


- Keine externen Sonden, Kabel oder Adapter erforderlich

## Wasserdampf und andere Partikel

Der Atemgasbefeuchter F&P Airvo 2 ist für die Erzeugung von Wasserdampf (Molekülen) ausgelegt.

Vernebler und andere Aerosolabgabesysteme sind für die Erzeugung von flüssigen Wasserpartikeln ausgelegt. Im Gegensatz zu flüssigen Wasserpartikeln ist Wasserdampf nicht in der Lage, als Träger für den Transport von Krankheitserregern zu fungieren.

## Größen von Partikeln und Krankheitserregern

Wasserdampf	Krankheitserreger		Vernebelte Wasserpartikel
			
< 0,001 Mikrometer	0,02-0,3 Mikrometer	0,3-10 Mikrometer	1-10 Mikrometer

## Produkt-Codes (\*Einige Zubehörteile sind ggf. nicht in allen Ländern erhältlich)

<b>PT101xx</b>	Airvo 2 Atemgasbefeuchter
<b>900PT561</b>	AirSpiral-Schlauch und Kammer-Kit für Airvo 2 (10er-Packung)
<b>*900PT562, 563</b>	AirSpiral Schlauch- und Kammer-Kit für Airvo 2 mit Vernebler-Adapter (10er-Packung)
<b>OPT970</b>	Optiflow+ Tracheostomie-Interface (20er-Packung)
<b>OPT971</b>	Sputumschutz-Ersatzteil (20er-Packung)
<b>OPT980</b>	Optiflow+ Maskenadapter-Schnittstelle (20er-Packung)

Erfahren Sie mehr unter [www.fphcare.com/airvo](http://www.fphcare.com/airvo)

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua und Optiflow sind Marken von Fisher & Paykel Healthcare Limited.

Weitere Informationen zu Optiflow+ Tracheostomie-Interface einschließlich Warn- und Vorsichtshinweisen, entnehmen Sie bitte den Gebrauchsanweisungen.

613963 REV B © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited

**Fisher & Paykel**  
HEALTHCARE