

Administración de la terapia de alto flujo de traqueostomía
F&P Optiflow™+



Presentamos el F&P Airvo™ 2, que proporciona asistencia respiratoria e hidratación de las vías respiratorias.

El Airvo 2 es una solución integrada para administrar la terapia de alto flujo de traqueostomía Optiflow. La tecnología de humidificación líder de Fisher & Paykel Healthcare permite al Airvo 2 suministrar con comodidad un alto flujo de aire humidificado (con oxígeno suplementario si es necesario) a pacientes con respiración espontánea mediante la exclusiva interfaz de traqueostomía Optiflow+.

Interfaz de traqueostomía Optiflow+

- Tecnología F&P Evaqua™, que reduce la formación de condensación móvil cerca del paciente
- Opciones para interfaces de conexión directa o específicas para traqueostomía

Oxígeno suplementario (cuando sea necesario)

- FiO₂ del 21 % al 100 %
- El analizador de oxígeno ultrasónico integrado no necesita calibración, mantenimiento ni sustitución



Diseñado para un ajuste, uso y limpieza sencillos

- Las animaciones de la pantalla facilitan la configuración y la solución de problemas

Configuraciones de flujo ajustables

- El generador de flujo integrado administra un amplio intervalo de flujo (10-60 L/min)
- No requiere suministro de aire de pared o compresor

Tubo respiratorio calentado F&P AirSpiral™

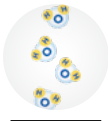
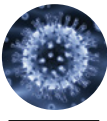


- No se necesitan sondas, cables o adaptadores externos

Vapor de agua y otras partículas

El humidificador F&P Airvo 2 está diseñado para generar vapor de agua (moléculas).

Los nebulizadores y otros sistemas de administración en aerosol están diseñados para generar partículas líquidas de agua. A diferencia de las partículas líquidas de agua, el vapor de agua no puede actuar como vector para el transporte de patógenos.

Tamaños de las partículas y los patógenos

Patógenos			
Vapor de agua	Virus	Bacterias	Partícula de agua nebulizada
			
< 0,001 micrómetros	0,02 - 0,3 micrómetros	0,3 - 10 micrómetros	1 - 10 micrómetros

Códigos de producto (*es posible que algunos accesorios no estén disponibles en todos los países)

PT101xx	Humidificador Airvo 2
900PT561	Kit de tubo y cámara AirSpiral Airvo 2 (paquete de 10)
*900PT562, 563	Kit de tubo y cámara AirSpiral Airvo 2 con adaptador de nebulizador (paquete de 10)
OPT970	Interfaz de traqueostomía Optiflow+ (paquete de 20)
OPT971	Protector de secreciones de repuesto (paquete de 20)
OPT980	Interfaz de adaptador de máscara Optiflow+ (paquete de 20)

Más información en www.fphcare.com/airvo

F&P, AirSpiral, Airvo, Evaqua y Optiflow son marcas comerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Para más información sobre la interfaz de traqueostomía Optiflow+, incluyendo advertencias y precauciones, lea las instrucciones para el usuario.

613964 REV B © 2021 Fisher & Paykel Healthcare Limited

Fisher & Paykel
HEALTHCARE