

Estable. Simple. Suave.
Sin sacrificar el diseño.



Optiflow en movimiento

Tanto si su paciente es ambulatorio como si necesita cambios de posición frecuentes, el Optiflow 3S está diseñado para moverse con él.



Posibilidad de cambiar de lado

Al mover a un paciente de la cama a la silla o cambiarlo de posición para evitar la formación de escaras, el cambio de lado le da la libertad de colocar el circuito y el paciente cuando sea necesario, sin enredos.

Gracias a una exclusiva combinación de opciones de conectores, el Optiflow 3S le ofrece la flexibilidad para preparar y mover a su paciente de forma segura y eficaz.



Conector universal F&P

Compatible con diversos circuitos de F&P Healthcare, para proporcionar Respiratory Care Continuum™.



Hebillas de acción rápida

Facilitan la retirada rápida y el proceso de ajuste cuando se utiliza la opción para ajustar la cánula alrededor de la cabeza.



Correa desmontable para la cabeza

Puede colocar la correa sobre la coronilla del paciente para proporcionar mayor estabilidad y cambiar de posición cuando sea necesario.

Características



Enganche del tubo en un click

Soporta el peso del circuito y mantiene las cánulas nasales en su posición, lo que reduce el desplazamiento de la interfaz.

Permite una colocación perfecta del tubo en uno de los lados del rostro del paciente.



Conector universal F&P

Facilita el Respiratory Care Continuum gracias a la compatibilidad con diversos circuitos F&P.

Codificado con colores para permitir la identificación rápida del tamaño y facilitar el proceso de ajuste.



Hebillas de acción rápida

Facilitan el proceso de ajuste. Retirada rápida de la interfaz.



Tiras de enganche marca VELCRO®

Mantenga las correas fuera del rostro.



Correa desmontable para la cabeza

El tejido suave y transpirable elimina la humedad de la cabeza.

Sin enredos, directamente del envase, pero desmontable para mayor estabilidad.


Correa para la cabeza diseñada para proporcionar estabilidad y flexibilidad.



Tubo transpirable Evaqua™

Alcanzar la humedad ideal siempre conlleva cierto grado de condensación. Si esto no se controla, puede ocasionar la obstrucción del circuito y hacer que el paciente inhale la condensación.

Evaqua es un material transpirable y duradero que controla eficazmente la condensación y permite su difusión hacia fuera a través de la membrana del tubo, prolongando así el tiempo hasta la obstrucción.

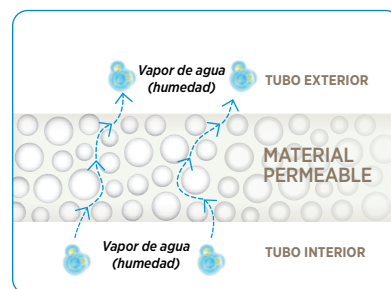

Posibilidad de cambiar de lado

Facilita el cambio de posición del paciente.

Permite retirar el tubo de debajo del rostro en los pacientes colocados de costado o boca abajo.

Esta función ofrece a los médicos una mayor flexibilidad en la instalación, ya que permite administrar el tratamiento desde cualquiera de los lados del paciente.



Almohadilla para el surco nasolabial

Reduce la presión sobre la nariz y el labio superior (surco nasolabial), mientras que la tubuladora estructurada evita que las cánulas nasales se colapsen.



Envase reciclable

Envase con interfaz de PET en su totalidad, que puede reciclarse sin necesidad de quitar la etiqueta.

F&P Optiflow 3S

Estable. Simple. Suave.
Sin sacrificar el diseño.

A lo largo de todo el proceso de desarrollo de nuestra interfaz nasal más reciente, nuestros usuarios nos indicaron qué era lo más importante para ellos:
la **estabilidad**, la **simplicidad** y la **suavidad**.

Nuestros ingenieros se centraron en diseñar una interfaz que no sacrificara ninguna de estas necesidades.

¿El resultado? El Optiflow 3S, cuyo nombre adopta la filosofía de diseño sin concesiones de nuestros ingenieros.



57%
Más estable*

Estable

El ajuste seguro garantiza la administración uniforme del tratamiento.

La gama Optiflow 3S:

- ofrece un 57 % más de estabilidad* y, como resultado, **menos desplazamientos de la interfaz**
- proporciona mayor estabilidad: **reduce la necesidad de apretar en exceso** y disminuye la presión sobre el rostro
- permite al paciente **comer, beber, y comunicarse** sin interrumpir el tratamiento, mejorando así el cumplimiento.



Flexibili-
dad
en la
instalación

Simple

Un diseño centrado en el usuario, que permite un ajuste eficiente a la vez que se adapta a las necesidades del paciente.

La gama Optiflow 3S:

- proporciona **flexibilidad** en la instalación, con diversas opciones de ajuste y un conector del tubo que puede cambiarse de lado
- simplifica el **proceso de ajuste** mediante características de diseño intuitivas
- es compatible con muchos de los dispositivos y circuitos de F&P, **lo que agiliza el itinerario asistencial del paciente**.



Menos
presión
sobre el
rostro

Suave

Diseñado pensando en los delicados tejidos que rodean la nariz y el labio superior, logrando una comodidad del paciente sin concesiones.

La gama Optiflow 3S:

- tiene un diseño estable que **reduce la presión** sobre el rostro y la cabeza
- tiene un área de superficie mayor, que proporciona una mejor distribución de la presión
- tiene una **almohadilla para el surco nasolabial** que proporciona una superficie de contacto suave para la nariz y el labio superior, sin colapsar las cánulas nasales
- usa materiales **suaves en el marco y la correa para la cabeza** en contacto con la piel del paciente.

* En comparación con otra cánula F&P en una prueba interna de Fisher and Paykel Healthcare.

Disponible en tres tamaños



OPT1042 (pequeño)



OPT1044 (mediano)



OPT1046 (grande)

Especificaciones del producto

Cantidad en la caja	20
Uso	Uso para un único paciente; máximo 14 días
Materiales no presentes	Fabricado sin látex de caucho natural ni ftalatos (DEHP, DBP, BBP)
Dispositivos compatibles	AIRVO 2 (PT101xx) MR850 F&P 950*
Circuitos compatibles	AirSpiral™ (900PT56x) Kit serie RT con tubo inspiratorio calentado y cámara (p. ej., RT332) Kit de circuito calentado para adulto F&P 950* (p. ej., 950A40)
Modo de fabricación	Producto no estéril, no invasivo, fabricado en un entorno de trabajo controlado
Eliminación	Deseche el producto según el protocolo del hospital. El envase y la etiqueta pueden desecharse juntos (ambos están hechos de PET reciclable).
País de origen	Nueva Zelanda
Organismo notificado	Servicio de producto TÜV SÜD GmbH CE0123



Use este código QR para visitar el sitio web de F&P Optiflow 3S, desde donde puede descargar nuestra guía de ajuste, ver nuestro vídeo de ajuste o enviar una consulta sobre el producto.

www.fphcare.com/optiflow3S

617265 REV B © 2020 Fisher & Paykel Healthcare Limited ^{es}

* Es posible que el F&P 950 system no esté disponible en todos los países. El F&P 950 system no está aprobado actualmente para su venta en EE. UU.

Es posible que este producto no esté disponible en todos los países. Póngase en contacto con su representante local de Fisher & Paykel Healthcare. Para más información sobre Optiflow 3S, incluyendo advertencias y precauciones, lea las instrucciones de uso.