

F&P Brevida™

MÁSCARA NASAL DIRETA



**Projetada para Promover
Confiança. Construída
para Oferecer Conforto.**

NOVA

Ganhar a confiança do paciente é fundamental para o sucesso da terapia com CPAP, e a confiança do paciente começa com uma máscara que se ajusta perfeitamente e é confortável.





Brevida™

Principais características e benefícios

Touca de Fixação Ajustável

Touca de fixação ajustável projetada para se manter estável durante o sono.

Vedação AirPillow™

O inovador AirPillow™ se infla para proporcionar uma vedação suave e eficaz.



VisiBlue™

Destaques azuis incorporados aos principais componentes da máscara auxiliam os pacientes no uso diário da máscara.

Difusor Lavável

O difusor, que reduz o ruído e a corrente de ar, é lavável e durável.



A inovadora Vedação AirPillow™ da F&P Brevida™

Dois tamanhos de vedação

Extra pequena-pequena e média-grande

Vedação extra fina e suave


Área de vedação fabricada em silicone extra-fino (0,25 mm) para proporcionar uma vedação suave.

Prongs versáteis

Prong com formato versátil para se ajustar à vários tamanhos de narina.

Suportes laterais estabilizadores

Suportes laterais projetados para reduzir a probabilidade de deslocamento da vedação durante o sono.

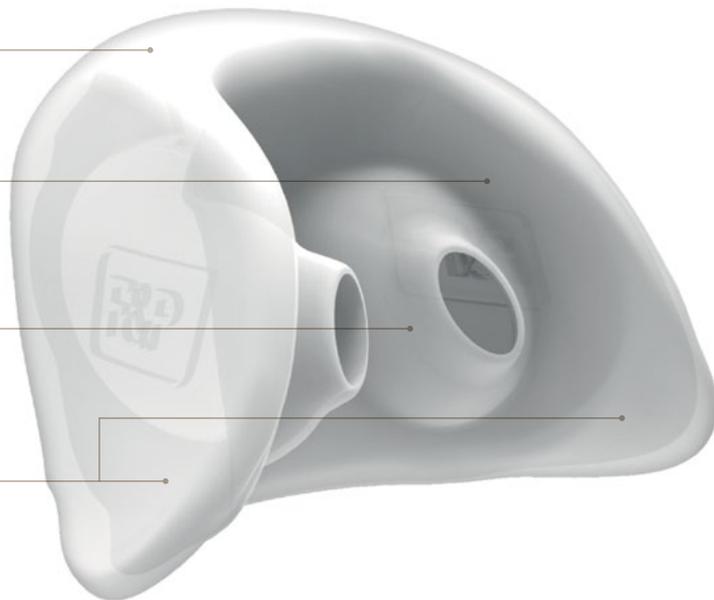


Uma vedação suave e delicada

A vedação AirPillow™ se infla para formar uma suave 'almofada' de ar e vedar o nariz interna e externamente.


Vedação Nasal Direta F&P AirPillow™

Veda o nariz interna e externamente

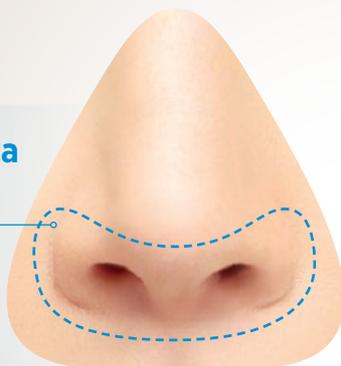

Vedação Nasal Direta Tradicional

Veda diretamente as narinas

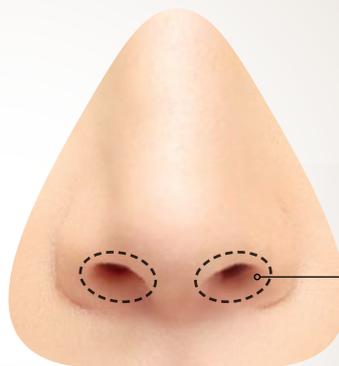

Como Adaptar Sua F&P Brevida™



01

Etapa 1.
Segure a vedação de silicone afastada do nariz e utilize os dedos para abrir cuidadosamente as bordas laterais da vedação de silicone e depois posicione as duas aberturas dentro das narinas.



02

Etapa 2.
Segure a estrutura da máscara com uma das mãos e puxe a touca de fixação sobre a sua cabeça com a outra mão, posicionando as tiras acima das orelhas, de acordo com as imagens.



03

Etapa 3.
Aperte ou solte suavemente as tiras das laterais da touca de fixação até obter uma vedação confortável.

CÓDIGOS PARA PEDIDOS NA AMÉRICA DO NORTE / ÁSIA-PACÍFICO

MÁSCARAS		400BRE114	Vedação Brevida Média-Grande (pacote com 50 unidades)
BREISA	Brevida extra pequena-pequena (uma vedação extra pequena-pequena)	400BRE120	Touca de Fixação Brevida
BREIMA	Brevida média-grande (uma vedação média-grande)	400BRE151	Presilhas da Touca de Fixação Brevida (pacote com 10 unidades)
BREISMA	Brevida extra pequena-pequena e média-grande (duas vedações)	400BRE161	Difusor Brevida (pacote com 10 unidades)
		400BRE171	Cotovelo Brevida
PEÇAS DE REPOSIÇÃO		400FPH241	Engate giratório F&P 2
400BRE111	Vedação Brevida extra pequena-pequena	400BRE131	Máscara Brevida sem touca de fixação extra pequena-pequena
400BRE112	Vedação Brevida média-grande	400BRE132	Máscara Brevida sem touca de fixação média-grande
400BRE113	Vedação Brevida extra pequena-pequena (pacote com 50 unidades)		

CÓDIGOS PARA PEDIDOS NA EUROPA / ÁFRICA / AMÉRICA DO SUL

MÁSCARAS		400BRE114	Vedação Brevida média-grande (pacote com 50 unidades)
BREISU	Brevida extra pequena-pequena (uma vedação extra pequena-pequena)	400BRE120	Touca de Fixação Brevida
BREIMU	Brevida média-grande (uma vedação média-grande)	400BRE151	Presilhas da Touca de Fixação Brevida (pacote com 10 unidades)
BREISMU	Brevida extra pequena-pequena e média-grande (duas vedações)	400BRE161	Difusor Brevida (pacote com 10 unidades)
		400BRE171	Cotovelo Brevida
PEÇAS DE REPOSIÇÃO		400FPH241	Engate giratório F&P 2
400BRE111	Vedação Brevida extra pequena-pequena		
400BRE112	Vedação Brevida média-grande		
400BRE113	Vedação Brevida extra pequena-pequena (pacote com 50 unidades)		